

ruscello®

ルシェロ総合カタログ

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental




P4コンセプトに基づいて「処方」する歯ブラシ

◆ 口腔内の状態に合わせて処方する歯ブラシ

ルシェロ

ruscello®

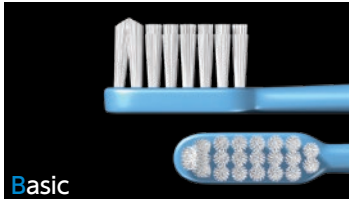

Basic

B-10M/S

う蝕を予防したい方
健康な歯肉～歯肉炎の方



Perio

P-10M

歯周病を予防したい方
健康な歯肉～軽度歯周炎の方
メインテナンス期の方



Perio

P-10S

歯肉が腫れて痛みや出血のある方
中等度～重度歯周炎の方

ピセラ

picella!™



Basic

B-20M/S

う蝕を予防したい方
混合歯列期の方
健康な歯肉～歯肉炎の方
(10代・女性におすすめ)



Perio

P-20M

歯周病を予防したい方
健康な歯肉～軽度歯周炎の方
メインテナンス期の方
(女性におすすめ)



Perio

P-20S

歯肉が腫れて痛みや出血のある方
中等度～重度歯周炎の方
(女性におすすめ)

オペレーション

OPERation



OPERation

OP-10

外科処置後の方
重度歯周炎の方

ホワイト

White



White

W-10

ルシェロ歯みがきペースト ホワイトシリーズをご使用の方
ステインが気になる方
タバコのヤニが沈着している方
白さを持続したい方
(ホワイトニング後・プロフェッショナルケア後)

インプラント

IMPLANT



Implant

I-20

インプラント周囲粘膜炎を予防したい方
インプラント周囲炎の進行を抑制したい方

◆ 患者さんの背景に合わせて処方する歯ブラシ

グラッポ

Grappo

テクニック

性格

モチベーション

生活環境



Basic

B-30

う蝕を予防したい方
健康な歯肉～歯肉炎の方



Perio

P-30

歯周病を予防したい方
メインテナンス期の方

P4コンセプトとは



P4 concept

「P4コンセプト」のロゴマーク

「P4コンセプト」とは、予防 (Prevention) の見地から、専門家 (Professional) である歯科医師・歯科衛生士が、ひとりひとりの患者さん (Patient) の口腔内の状態に合わせて、適切なセルフケア製品を処方 (Prescription) するというジーシーが提唱するコンセプトです。

※P4とは、それぞれのキーワード4つの頭文字 (P) を意味します。

ルシェロ シリーズの 特長

ブラシ

各タイプのブラシ形状

ベーシック Basic	後列の毛より高い先端集中毛 段差植毛 ラウンド毛
ペリオ Perio	後列の毛と高さと同じ先端集中毛 ハイブリッド段差植毛 テーパー毛 ラウンド毛
オペレーション Operation	ドーム型カット
インプラント Implant	先端集中毛 テーパー毛 ラウンド毛 凹型断面イメージ
ホワイト White	後列の毛より高い先端集中毛 すべての毛がひし形毛

ヘッド

各シリーズの大きさと植毛

毛束を直線に配置
毛束をランダムに密に配置
ほぼ原寸大

10 シリーズ	20 シリーズ	30 シリーズ
B-10 P-10 OP-10 W-10	B-20 P-20 I-20	B-30 P-30

ネック

カーブネックにより、最後臼歯遠心までヘッドが容易に届きます。


臼歯部の磨きやすさ

歯列に沿った自然な角度でブラシが歯面にフィットします。

※線画：一般的なストレートハンドル

アングルドオフセット

ハンドル部にネックとは逆の角度を付けることで角度が相殺（オフセット）され、「毛先の高さ」と「ハンドルを持つ指の高さ」が同じになります。そのため前歯部はストレートハンドルと同じような感覚で磨くことができます。

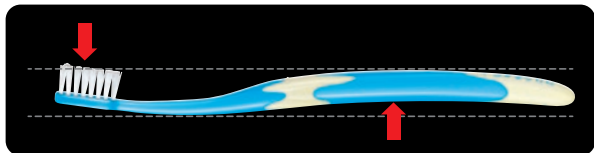


前歯部の磨きやすさ

※線画：一般的なストレートハンドル

ラバーグリップ

持ちやすく、滑りにくい、機能的なソフトラバーを採用しています。

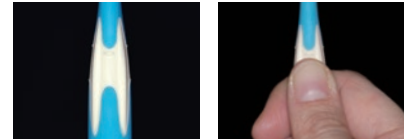


ラバーの突起部分に指をあてることで、グリップの位置やブラシの向きを確認できます。



グリップエンドのラバーにより、手の中でハンドルが安定します。

ハンドル

パームグリップもベングリップも持ちやすい独自のルシェロフォルム。ハンドルの反りにより、軽く握るだけでも高いフィット感が得られます。

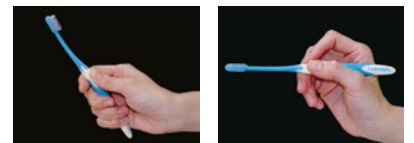

10 シリーズ	20 シリーズ	30 シリーズ
標準タイプ (全長：181mm)	小さめタイプ (全長：168mm)	太めタイプ (全長：190mm)



ruscello
ホームページ
詳しくはコチラから

歯ブラシ

ベーシック

B-10M/S

ruscello

磨き残しの多い『最後臼歯遠心』や『歯間部』が効率よく磨ける歯ブラシ

● う蝕を予防したい方、健康な歯肉～歯肉炎の方



ハンドルの
タイプ

10
シリーズ
標準タイプ
(全長: 181mm)

- ブルー
- グリーン
- イエロー
- ピンク
- ブラック





最後臼歯遠心面まで毛先が届きます。



先端集中毛を活用することで磨きにくい叢生部のプラークも除去できます。

先端部の毛に角度を付けて植毛することでワンタフト形状を再現した「先端集中毛」を採用。

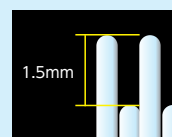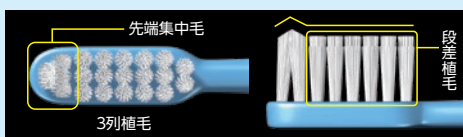

長短いずれもラウンド毛の段差植毛

B-20M/S ピセラ

picella!

お口の小さな女性や10代の方のための持ちやすく、磨きやすいコンパクト形状の歯ブラシ

● う蝕を予防したい方、混合歯列期の方、健康な歯肉～歯肉炎の方



ハンドルの
タイプ

20
シリーズ
小さめタイプ
(全長: 168mm)

- ブルー
- グリーン
- オレンジ
- ピンク
- ネイビー



萌出途中の最後臼歯遠心面にも先端集中毛がしっかり届きます。




先端集中毛は叢生部位にも当てやすく、しっかり磨けます。



4列植毛により、咬合面と舌側面にブラシが同時に当たり、安定して磨けます。

歯冠長の短い臼歯部の歯面にもブラシが安定して当たるように植毛を4列に設計。咬合面と頬または舌側面をかぶせるように磨くことも可能。

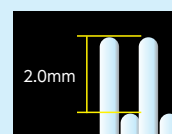

長短いずれもラウンド毛の段差植毛

B-30 グラッポ

Grappo

短時間に・効率よく・おおまかに歯面全体のプラークを落とす、患者さんの背景をサポートする歯ブラシ

● う蝕を予防したい方、健康な歯肉～歯肉炎の方



ハンドルの
タイプ

30
シリーズ
太めタイプ
(全長: 190mm)

- クリアレッド
- クリアパープル
- クリアグリーン
- クリアイエロー
- クリアブルー



(40代男性) 不定期に来院。歯ブラシはB-10Mを処方したが、全体的にプラークが付着し、PCRは常に70%前後である。





B-30を処方。



咬合面から舌側にブラシを傾ける程度の指導はしたが、基本的には患者さん自身に自由に磨いてもらった。幅広ヘッドなので接触面積も広く、ある程度全体的に磨けるようになった。

上下の歯を同時に磨けるようにヘッドの幅を広く設計。

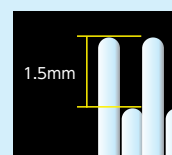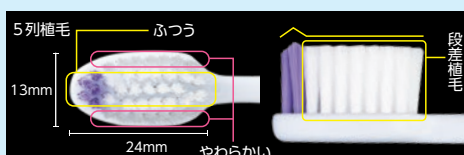

長短いずれもラウンド毛の段差植毛

ロハロ

ピセラ

グラフィック

歯ブラシ

ペリオ

P-10M/S

rusce//o

細かい部分へ毛先が届く、歯周病対策に適した歯ブラシ

- M 歯周病を予防したい方、健康な歯肉～軽度歯周炎の方、メンテナンス期の方
- S 歯肉が腫れて痛みや出血がある方、中等度～重度歯周炎の方

ハンドルの
タイプ

10
シリーズ

標準タイプ
(全長: 181mm)

- ブルー
- グリーン
- イエロー
- ピンク
- ホワイト





中等度歯周炎でブラッシング時に痛みと出血がある。



P-10Sを処方。歯肉の炎症がひどく出血や痛みが強い時でもやさしく磨けます。

先端部の毛に角度を付けて植毛することでワンタフト形状を再現した「先端集中毛」を採用。

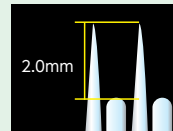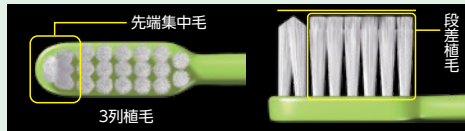

テーパー毛とラウンド毛のハイブリッド段差植毛

P-20M/S ピセラ

picella!

歯周病を予防する、大人の女性のためのコンパクト歯ブラシ

- M 歯周病を予防したい方、健康な歯肉～軽度歯周炎の方、メンテナンス期の方
- S 歯肉が腫れて痛みや出血がある方、中等度～重度歯周炎の方

ハンドルの
タイプ

20
シリーズ

小さめタイプ
(全長: 168mm)

- ピンク
- パープル
- グリーン
- イエロー
- ブルー



軽度歯周炎。染め出しをすると歯頸部に磨き残しが多い。




P-20Mを処方。



テーパー毛が歯頸部、ラウンド毛が歯面のプラークをしっかりと除去します。

毛丈が短いコンパクトヘッドでもテーパー毛が歯間や歯周ポケットに届きやすいように、毛の段差を2.5mmと大きく設計。

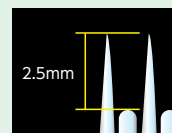

テーパー毛とラウンド毛のハイブリッド段差植毛

P-30 グラッポ

Grappo

短時間に・効率よく・おおまかに歯面全体のプラークを落とす、患者さんの背景をサポートする歯ブラシ

- 歯周病を予防したい方、メンテナンス期の方

ハンドルの
タイプ

30
シリーズ

太めタイプ
(全長: 190mm)

- ピンク
- レッド
- ブルー
- イエロー
- ネイビーブルー



(60代男性) 中等度～重度歯周炎。歯肉は線維性で厚みがあり、歯頸部に磨き残しが多く、ブラッシングは熱心だが、上手く狙って磨けない。





P-30を処方。



幅広ヘッドなので、咬合面と舌側面をかかせて磨くことで安定して磨けるようになった。歯肉辺縁までフィットし大半のプラークを落とせるようになった。

上下の歯を同時に磨けるようにヘッドの幅を広く設計。

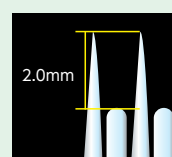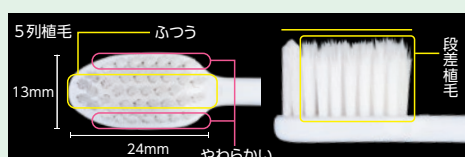

テーパー毛とラウンド毛のハイブリッド段差植毛

OP-10

歯肉への刺激を抑える超極細毛の歯ブラシ

- 外科処置後の方、重度歯周炎の方



ハンドルの
タイプ

10
シリーズ

標準タイプ
(全長: 181mm)

○ ホワイト



フラップオペ1週間後、歯肉の状態を確認しOP-10を処方。洗口剤を含ませ、そっと当てるようにブラッシングすることで痛みなく磨けます。



ドーム型にカットされた毛先で、痛みの強い箇所を傷つけません。

ホワイト

W-10

ステイン除去性に優れた美白のための歯ブラシ

- ルシェロ歯みがきペースト ホワイトシリーズをご使用の方、ステインが気になる方、タバコのヤニが沈着している方、白さを持続したい方

white
rusce//o



ハンドルの
タイプ


10
シリーズ

標準タイプ
(全長: 181mm)

- パールゴールド
- パールホワイト



*写真は製品の効果を保証するものではありません。

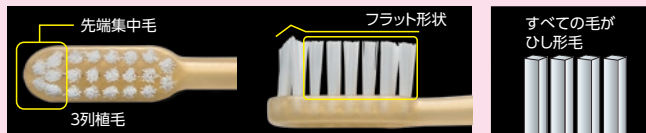

すべての毛が
ひし形毛

軽い力で
歯間へ入る
(100g以下)

ひし形毛の毛先とエッジ部が、歯面・歯間に付着したステインを効率的に除去します。

インプラント

I-20 インプラント

インプラント特有の構造にも対応したインプラントのメンテナンス専用歯ブラシ

- インプラント周囲粘膜炎予防に、インプラント周囲炎の進行抑制に

IMPLANT



ハンドルの
タイプ

20
シリーズ

小さめタイプ
(全長: 168mm)


- ブルー
- レッド



ハイブリット極細テーパー毛がインプラント周囲溝までしっかり届き、プラークが除去できます。



天然歯とインプラントが混在している場合に、インプラント部位だけでなく天然歯も磨くことができます。

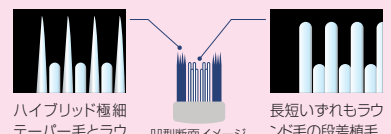

歯みがきペースト

ルシェロ歯みがきペースト B(ベーシック)

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ> 【販売名】ルシェロ歯みがきペーストB(ベーシック)M
ルシェロ歯みがきペーストB(ベーシック)L

う蝕・歯周病の日常ケアに

- フッ化ナトリウム (900ppmF)
う蝕の発生と進行予防
- グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防

成分●【有効成分】フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸ジカルcium
【湿潤剤】D-ソルビトール、濃グリセリン【溶剤】精製水【研磨剤】二酸化ケイ素【甘味料】キシリトール【粘度調整剤】無水ケイ酸【pH調整剤】クエン酸ナトリウム【粘結剤】カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム【発泡剤】ラウリル硫酸ナトリウム【着色剤】酸化チタン【防腐剤】パラベン【香料】ミント、レモン
※パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。
製造販売元 株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙1382



ルシェロ パースト

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ> 【販売名】ロスベック® 歯みがきペーストL

う蝕・歯周病予防に

- フッ化ナトリウム (900ppmF)
う蝕の発生と進行予防
- グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防
- 塩酸クロルヘキシジン
歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防

成分●【有効成分】フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸ジカルcium、塩酸クロルヘキシジン【研磨剤】無水ケイ酸【湿潤剤】濃グリセリン、プロピレングリコール【発泡剤】ラウリル硫酸ナトリウム【乳化剤】ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油【粘度調整剤】カルボキシメチルセルロースナトリウム【防腐剤】パラベン【甘味料】キシリトール、サッカリンナトリウム【着香料】香料(ラ・フランス)【溶剤】精製水
※パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。
製造販売元 日本コルマ株式会社 大阪市中央区伏見町4丁目4番1号



ルシェロ歯みがきペースト P(ペリオ)

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ> 【販売名】ルシェロ歯みがきペーストP(ペリオ)M
ルシェロ歯みがきペーストP(ペリオ)L

歯周病に特化

- P(ペリオ)は3つの有効成分をプラス
- フッ化ナトリウム (900ppmF)
う蝕の発生と進行予防
 - グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防
 - 酢酸トコフェロール (VE)
歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防
 - インプロピルメチルフェノール (IPMP)
歯肉炎予防、口臭予防
 - 塩化セチルピリジニウム (CPC)
歯肉炎予防、口臭予防

成分●【有効成分】グリチルリチン酸ジカルcium、酢酸トコフェロール、インプロピルメチルフェノール (IPMP)、塩化セチルピリジニウム (CPC)、フッ化ナトリウム【湿潤剤】D-ソルビトール、濃グリセリン【溶剤】精製水【研磨剤】二酸化ケイ素【甘味料】キシリトール【粘度調整剤】無水ケイ酸【pH調整剤】クエン酸ナトリウム【粘結剤】カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム【発泡剤】ラウリル硫酸ナトリウム【着色剤】酸化チタン【防腐剤】パラベン【香料】ミント、レモン
※パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。
製造販売元 株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙1382



ルシェロ パースト マスデントF

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ>

歯周病予防の自然派歯磨剤

※合成甘味料、発泡剤、防腐剤は使用しておりません。

- フッ化ナトリウム (900ppmF)
う蝕の発生と進行予防
- グリチルリチン酸ニカルcium
歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防
- マスティックエッセンシャルオイル
口中の浄化(清浄剤)

成分●【清掃剤】無水ケイ酸、軽質無水ケイ酸【湿潤剤】濃グリセリン、ソルビトール【溶剤】エタノール【粘度調整剤】ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム【着香料】香料【着色剤】酸化チタン【薬用成分】フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸ニカルcium【pH調整剤】クエン酸ナトリウム【清浄剤】マスティックエッセンシャルオイル

製造販売元 ゼリア新薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町10-11



ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ> 【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP

ホワイトニング前後の+αケアに

- 弱アルカリ性
ステインを分解して浮かせる
- Lime 粒子* (清掃剤)
ステインをやさしく落とす
- ポリエチレングリコール (PEG) 400
タバコのヤニを溶解除去
- モノフルオロリン酸ナトリウム (1450ppmF)
う蝕の発生と進行予防
- 乳酸アルミニウム
知覚過敏症状予防

成分●【清掃剤】炭酸カルシウム(Lime粒子)【溶剤】精製水【湿潤剤】濃グリセリン【薬用成分】ポリエチレングリコール400、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素1450ppm)【甘味料】キシリトール【pH調整剤】水酸化ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム【粘度調整剤】カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース【香味剤】香料(グリーンシトラスタイプ)【保存剤】安息香酸ナトリウム【増粘剤】無水ケイ酸
※6歳未満の子供の手の届かない所に保管し、使用させない。
製造販売元 日本セトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



ステイン:着色汚れ 歯科医院用

ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ> 【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

日々のステインケアに

- 弱アルカリ性
ステインを分解して浮かせる
- Lime 粒子* (清掃剤)
ステインをやさしく落とす
- ポリエチレングリコール (PEG) 400
タバコのヤニを溶解除去
- モノフルオロリン酸ナトリウム (950ppmF)
う蝕の発生と進行予防

成分●【清掃剤】炭酸カルシウム(Lime粒子)【溶剤】精製水【湿潤剤】濃グリセリン【薬用成分】ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素950ppm)【甘味料】キシリトール【粘度調整剤】カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース【香味剤】香料(ビュアミントタイプ)【pH調整剤】リン酸水素二ナトリウム、水酸化ナトリウム【増粘剤】無水ケイ酸【保存剤】パラベン
※パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。
製造販売元 日本セトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



ステイン:着色汚れ 歯科医院用

補助用具

ルシェロフロス



ミントワックス アンワックス



ミントワックス (医院用)200m アンワックス (医院用)200m

ルシェロフロッサー



M(ふつ) ホワイト S(ほそめ) イエロー

ルシェロ歯間ブラシ



4S 5S 6S 通過径:φ0.6mm~φ0.7mm~φ0.8mm~

ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ 4個1パック

ルシェロペリオブラシ



NO.1T 細め 毛束 NO.2T 太め 毛束

ルシェロ ペリオブラシ (ハンドル付)

ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ 4個1パック

ルシェロポイントケアジェル

【医薬部外品】 <薬用ハミガキ> 【販売名】ジーシー薬用ポイントケアジェル

- フッ化ナトリウム (950ppmF)
う蝕の発生と進行予防
- 塩化セチルピリジニウム (CPC)
歯肉炎予防、口臭防止
- β-グリチルリチン酸
歯周炎予防
- 乳酸アルミニウム
知覚過敏症状予防
- ポリリン酸ナトリウム
歯石の沈着を防ぐ、タバコのヤニ除去

成分●【溶剤】精製水、エタノール【湿潤剤】濃グリセリン、プロピレングリコール【薬用成分】フッ化ナトリウム、β-グリチルリチン酸【pH調整剤】クエン酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、クエン酸【粘結剤】キサンタンガム、カラギーナン【可溶剤】ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油【香味剤】香料(クラーリセージタイプ)【清涼剤】8-メントール【防腐剤】パラベン【着色剤】黄色4号、青色1号

※パラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。 製造販売元 日本セトック株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

■ 処方の目安表

症状	目的	Basic [ベーシック]		Basic picella! [ベーシック・ピセラ]		Perio [ペリオ]		Perio picella! [ペリオ・ピセラ]		OPERATION [オペレーション]	IMPLANT [インプラント]	Grappo [グラッポ]	
		B-10M	B-10S	B-20M	B-20S	P-10M	P-10S	P-20M	P-20S	OP-10	I-20	B-30	P-30
健康な歯肉	う蝕予防	◎	◎	◎	◎	○		○				◎	
	歯周病予防	○	○	○	○	◎		◎				○	○
歯肉炎	進行抑制・改善		○		○	◎		◎	○	△*1	○	○	○
辺縁性歯周炎	軽度					◎	○	◎	◎	△*1	◎		◎
	中等度						◎		◎	◎	◎		◎
	重度						◎		◎	◎	○		
歯肉退縮	進行抑制・歯根面外傷予防					○	◎	○	◎		◎		○
外科処置後	患部周辺の清掃									◎			
歯周病治療後のメンテナンス	歯周病予防					◎		◎			○		○
	根面う蝕予防					◎		◎					○
永久歯萌出途中	—			○	◎								
	歯肉炎				◎								
インプラントのメンテナンス	周囲粘膜炎予防										◎		
	周囲炎進行抑制										◎		

※1 急性症状の場合に適用可

■ 製品仕様

歯ブラシ	包装	希望患者価格(税込)	毛の硬さ	カラー
B-10	1歯:20本(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	¥1,950 ¥390	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ブルー、●グリーン、●イエロー、●ピンク、●ブラック
B-20 ピセラ	1歯:20本(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	¥1,700 ¥340	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ブルー、●グリーン、●オレンジ、●ピンク、●ネイビー
B-30 グラッポ	1歯:20本(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	¥1,950 ¥390	やわらかめ	●クリアレッド、●クリアパープル、●クリアグリーン、●クリアイエロー、●クリアブルー
P-10	1歯:20本(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	¥1,950 ¥390	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ブルー、●グリーン、●イエロー、●ピンク、○ホワイト
P-20 ピセラ	1歯:20本(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	¥1,700 ¥340	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ピンク、●パープル、●グリーン、●イエロー、●ブルー
P-30 グラッポ	1歯:20本(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	¥1,950 ¥390	やわらかめ	●ピンク、●レッド、●ブルー、●イエロー、●ネイビーブルー
OP-10	5本セット 1本	¥390	やわらかめ	○ホワイト
I-20インプラント	1歯:20本(各色4本) 5本セット(ブルー3本/レッド2本) 1本	¥1,950 ¥390	やわらかめ	●ブルー、●レッド
W-10	1歯:6本(各色3本) 1本	¥450	やわらかめ	●パールゴールド、○パールホワイト
歯みがきペースト&歯間ジェル	包装	内容量	希望患者価格(税込)	フレーバー
歯みがきペーストB(ベーシック)	1歯:各フレーバー6本 1本	90g	¥3,180 ¥530	ミント、マイルドミント(レモンフレーバー)
歯みがきペーストP(ペリオ)	1歯:各フレーバー6本 1本	70g	¥3,300 ¥550	ミント、マイルドミント(レモンフレーバー)
歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア	1歯:1本	100g	¥2,200	グリーンシトラス
歯みがきペースト ホワイト	1歯:1本	100g	¥1,980	ピュアミント
ペースト マスデントF	1歯:1本	60g	¥1,900	—
ペースト(ラ・フランス&ハーブ)	1歯:10本 1本	65g	¥600	ラ・フランス&ハーブ
ポイントケアジェル	1歯:1本	30g	¥730	ハーブミント
補助用具	包装	希望患者価格(税込)	種類	
歯間ブラシ(ハンドル付)	5/パック1歯 1/パック	¥580	4S(●レッド)、SSS(●ピンク)、SS(○ホワイト)、S(●イエロー)、M(●ブルー)、L(●グリーン)、LL(●グレー)	
歯間ブラシ 替ブラシ 4個1パック	5/パック1歯 1/パック	¥310		
歯間ブラシ 替ブラシ(医院用)	40個1歯	—		
ペリオブラシ(ハンドル付)	5/パック1歯 1/パック	¥710		
ペリオブラシ 替ブラシ 4個1パック	5/パック1歯 1/パック	¥910	No.1T(細め)、No.2T(太め)	
ペリオブラシ 替ブラシ(医院用)	10個1歯	—		
院内指導用ハンドル(オートクレープ可)	1本	—		
フロス	30mアソートセット1歯: アンワックス2個、ミントワックス4色各1個 30m1歯:6個 30m1歯 (医院用)200m1歯:1個	¥2,100 ¥2,100 ¥350	ミントワックス ※ケース色:4色(●ピンク、●グリーン、●イエロー、●パープル) アンワックス ※ケース色:1色(○ホワイト) ケース2色:ミントワックス(●ピンク)、アンワックス(○ホワイト)	
フロッサー	6セット1歯 1セット	¥3,180 ¥530	M ホワイト(ふつう)、S イエロー(ほそめ) ※ハンドル色:●ピンク、●グリーン	
フロッサー フロスヘッド	12セット1歯 30個1歯	— ¥530	M ホワイト(ふつう)、S イエロー(ほそめ)	
歯ブラシキャップ(B-10、W-10共用)	20個1歯(各色4個) 1個	— ¥70	●ブルー、●グリーン、●イエロー、●ピンク、●ブラック	
歯ブラシキャップ(B-10、P-10、OP-10、W-10共用)	20個1歯(各色4個) 1個	— ¥70	●ブルー、●グリーン、●イエロー、●ピンク、●ブラック	

※掲載情報は2024年4月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー 公式アプリ

