

■ 製品一覧

処方の目安表		Basic (ベーシック)		Basic picello! (ベーシック・ピセラ)		Perio (ペリオ)		Perio picello! (ペリオ・ピセラ)		OPERATION (オペレーション)	IMPLANT (インプラント)	Grappo (グラッポ)	
症状	目的	B-10M	B-10S	B-20M	B-20S	P-10M	P-10S	P-20M	P-20S	OP-10	I-20	B-30	P-30
健康な歯肉	カリエス予防	○	○	○	○	○		○				○	
	歯周病予防	○	○	○	○	○		○				○	○
歯肉炎	進行抑制・改善		○		○	○		○	○	△※1	○	○	○
辺縁性 歯周炎	軽度					○		○	○	△※1	○		○
	中等度						○	○	○	○	○		○
	重度						○	○	○	○	○		○
歯肉退縮	進行抑制・歯根面外傷予防					○	○	○	○		○		○
外科処置後	患部周辺の清掃									○			
	歯周病治療後の メインテナンス					○		○			○		○
永久歯萌出 途中	カリエス予防			○	○								
	歯肉炎 進行抑制・改善				○								
インプラントの メインテナンス	周囲粘膜炎予防										○		
	周囲炎進行抑制										○		

※1 急性症状の場合に適応可

■ 価格一覧

歯ブラシ	包装	毛の硬さ	カラー
B-10	20本1函(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ブルー、●グリーン、●イエロー、●ピンク、●ブラック
B-20 ピセラ	20本1函(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ブルー、●グリーン、●オレンジ、●ピンク、●ネイビー
B-30 グラッポ	20本1函(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	— (やわらかめ)	●クリアレッド、●クリアパープル、●クリアブルー、 ●クリアグリーン、●クリアイエロー
P-10	20本1函(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ブルー、●グリーン、●イエロー、●ピンク、○ホワイト
P-20 ピセラ	20本1函(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	M(ふつう)、S(やわらかめ)	●ピンク、●ブルー、●グリーン、●イエロー、●パープル
P-30 グラッポ	20本1函(各色4本) 5本セット(各色1本) 1本	— (やわらかめ)	●ネイビーブルー、●ブルー、●レッド、●ピンク、●イエロー
OP-10	5本セット(1色5本) 1本	— (やわらかめ)	○ホワイト
I-20 インプラント	20本1函(2色各10本) 5本セット(ブルー3本/レッド2本) 1本	— (やわらかめ)	●ブルー、●レッド
W-10	6本1函(2色各3本) 1本	— (やわらかめ)	●パールゴールド、○パールホワイト
歯みがき&ペースト	包装	フレーバー	
歯みがきペーストB(ベーシック)	90g6本1函 90g1本	ミント、マイルドミント(レモンフレーバー)	
歯みがきペーストP(ペリオ)	70g6本1函 70g1本	ミント、マイルドミント(レモンフレーバー)	
歯みがきペースト ホワイト	100g1本	ピュアミント	
歯みがきペースト マスデントF	60g1本	—	
歯みがきペースト (ラ・フランス&ハーブ)	65g10本1函 65g1本	ラ・フランス&ハーブ	
ポイントケアジェル	30g1本	ハーブミント	
補助用具	包装	種類	
歯間ブラシ(ハンドル付)	5/パック1函 1/パック	4S(レッド)、SSS(ピンク)、SS(ホワイト)、S(イエロー)、M(ブルー)、 L(グリーン)、LL(グレー)	
歯間ブラシ 替ブラシ(4個入)	5/パック1函 1/パック		
歯間ブラシ 替ブラシ(医院用)40個入	40個1函 1/パック		
ペリオブラシ(ハンドル付)	5/パック1函 1/パック		
ペリオブラシ 替ブラシ(4個入)	5/パック1函 1/パック	No.1T(細め)、No.2T(太め)	
ペリオブラシ 替ブラシ(医院用)10個入 院内指導用ハンドル(オートクレープ可)	10個1函 1本	—	
フロス	アソートセット(30m6個1函) アンワックス:2個 ミントワックス:4色各1個 30m6個1函 30m1個	ミントワックス ※ケース色:4色(ピンク、グリーン、イエロー、パープル) アンワックス ※ケース色:1色(ホワイト)	
フロッサー	200m1個(医院用) 6セット1函 1セット	ケース2色:ミントワックス(ピンク)、アンワックス(ホワイト) Mホワイト(フロスの太さ:ふつう)、Sイエロー(フロスの太さ:ほそめ) ※ハンドル色:2色(ピンク、グリーン)	
フロッサー フロスヘッド	12セット1函 30個1函	Mホワイト(フロスの太さ:ふつう)、Sイエロー(フロスの太さ:ほそめ)	
歯ブラシキャップ(B-10専用)	20個1函 1個	ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、ブラック	
歯ブラシキャップ(B-10、P-10、OP-10専用)	20個1函 1個	ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、ブラック	

※掲載情報は2023年7月現在のものです。
 ※希望医院価格には消費税は含まれておりません。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー
 東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
 営業所
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneも Androidも

 どちらもコチラのQRでOK!
 推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



PA103E2307

ruscello®
 ルシェロ総合カタログ



●ルシェロシリーズの詳しい情報はこちら
<http://www.gcdental.co.jp/ruscello/>



P4コンセプトに基づいて「処方」する歯ブラシ

ruscello®

◆ 口腔内の状態に合わせて処方する歯ブラシ

ルシェロ
ruscello®



Basic B-10M/S
カリエスの予防に
健康な歯肉～歯肉炎の方



Perio P-10M
歯周病の予防に
健康な歯肉～軽度歯周炎の方/
歯周病治療後のメインテナンスに



Perio P-10S
歯肉の痛みが強い方
中等度～重度歯周炎/
歯肉退縮の方

ピセラ
picella™



Basic B-20M/S
カリエス予防に
永久歯萌出途中/
健康な歯肉～歯肉炎の方
(10代・女性用)



Perio P-20M
歯周病の予防に
健康な歯肉～軽度歯周炎の方/
歯周病治療後のメインテナンスに
(女性用)



Perio P-20S
歯肉の痛みが強い方
中等度～重度歯周炎/
歯肉退縮の方
(女性用)

オペレーション
OPeration



OPeration OP-10
外科処置後/
重度歯周炎の方

ホワイト
White



White W-10
ルシェロ歯みがきペースト ホワイトをご使用の方
ステインが気になる方
タバコの「やに」が沈着している方
白さを持続したい方
(ホワイトニング後・プロフェッショナルケア後)

インプラント
IMPLANT



IMPLANT I-20
インプラント周囲粘膜炎予防に
インプラント周囲炎の進行抑制に

◆ 患者さんの背景に合わせて処方する歯ブラシ

グラッポ
Grappo



Basic B-30
カリエスの予防に
健康な歯肉～歯肉炎の方



Perio P-30
歯周病の予防・対策に
歯周病治療後のメインテナンスに

P4コンセプトとは


P4 concept
「P4コンセプト」のロゴマーク

「P4コンセプト」とは、予防 (Prevention) の見地から、専門家 (Professional) である歯科医師・歯科衛生士が、ひとりひとりの患者さん (Patient) の口腔内の状態に合わせて、適切なセルフケア製品を処方 (Prescription) するというシーシーが提唱するコンセプトです。
※P4とは、それぞれのキーワード4つの頭文字 (P) を意味します。




ヘッド

ヘッドの大きさと植毛部の比較 (原寸大)

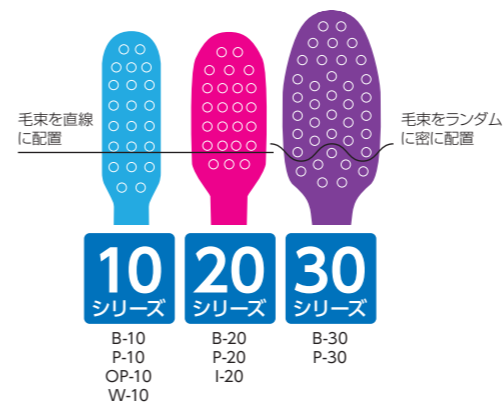

ネック

ゆるやかなカーブを描くネック部は、アングルドオフセット形状になっており、臼歯部だけでなく前歯部も効率のよいブラッシングが行えます。また、約80mmのロングネックにより最後臼歯遠心面までヘッドが容易に届きます。

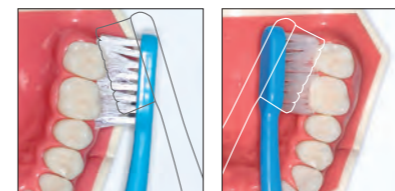


歯列に沿った自然な角度でブラシが歯面にフィットし、最後臼歯遠心面にも届きます。ストレートネックの場合、ブラシのカカトが浮いてしまいます (線画)。




アングルドオフセット

ネックに角度 (アングル) を付けることで臼歯部への届きやすさを高めています。一方、ハンドル部にネックとは逆角度を付け、角度を相殺 (オフセット) することで「毛先の高さ」と「ハンドルを持つ指の高さ」が同じになり、ストレートハンドルと同じような前歯部の磨きやすさも得られます。

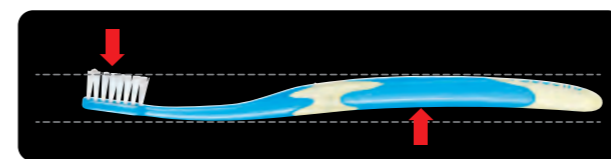


ブラシ

ブラシ形状の比較

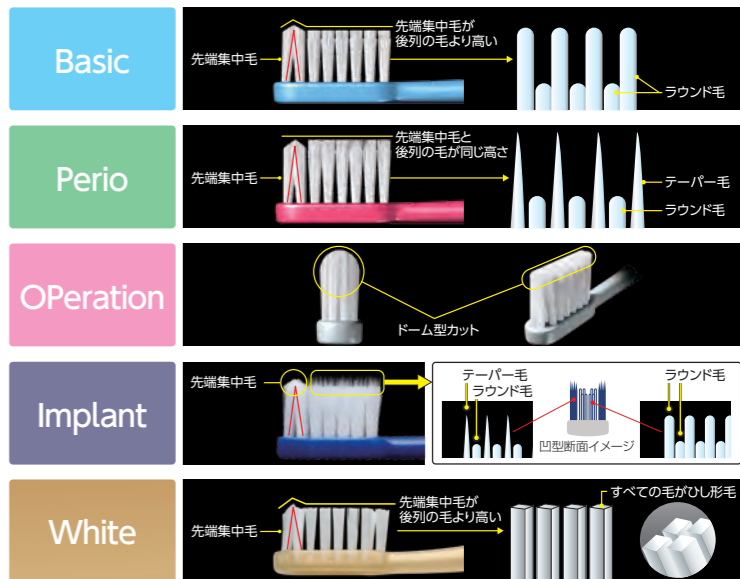

ラバークリップ

持ちやすく、滑りにくい、機能的なソフトラバーを採用しています。

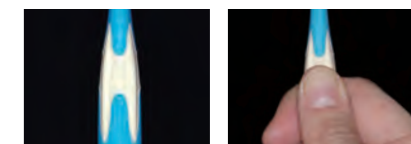

縦長の4本のラバー形状が指を安定させます。突起部分に指をあてることでクリップの位置やブラシの向きを確認できます。




クリップエンドのラバーにより、手のなかでハンドルが安定します。

ハンドル

パームグリップ、ベングリップでの持ちやすさを追求した独自のルシェロフォルム。ハンドルの反りにより軽く握るだけでも高いフィット感が得られます。



ハンドルのタイプ

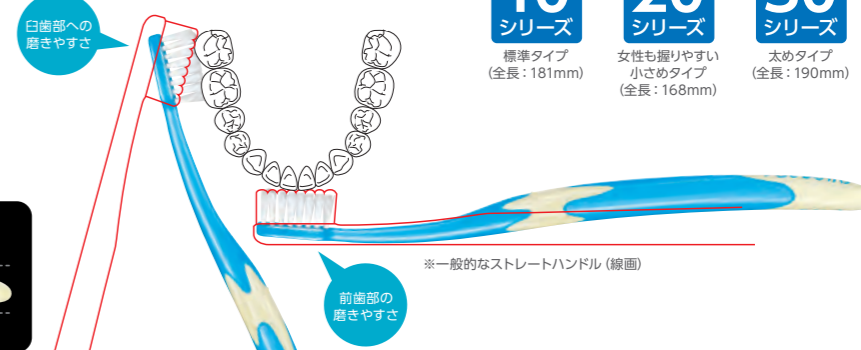

B-10M/S

特に磨き残しやすい『最後臼歯遠心』や『歯間部』が効率的に磨けます。

- カリエス予防に、健康な歯肉～歯肉炎の方



男女兼用

ハンドルのタイプ

10 シリーズ
標準タイプ (全長: 181mm)

- ブルー
- グリーン
- イエロー
- ピンク
- ブラック




磨き残しやすい最後臼歯遠心面まで毛先が届きます。



先端集中毛を生かして磨きにくい叢生部もブラークが除去できます。

先端部の毛に角度を付けて植毛することでワンタフト形状を再現した「先端集中毛」を採用

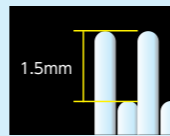

長短いずれもラウンドの段差植毛

B-20M/S ピセラ

お口の小さな女性や10代の方のための持ちやすく、磨きやすいコンパクト形状の歯ブラシです。

- カリエス予防に、永久歯萌出途中 / 健康な歯肉～歯肉炎の方



10代の方、女性の方

ハンドルのタイプ

20 シリーズ
女性も握りやすい小サイズタイプ (全長: 168mm)

- ブルー
- グリーン
- オレンジ
- ピンク
- ネイビー



萌出途中の最後臼歯遠心面にも先端集中毛がしっかり届きます。




先端集中毛により叢生部位にも当てやすく、しっかり磨けます。



4列植毛により、咬合面と舌側面に同時にブラシが当たり、安定して磨けます。

萌出途中の歯冠長の短い臼歯部を磨く際に、ブラシが歯面に安定して当たるように設計。咬合面と頬または舌側面をかぶせるように磨くことも可能。

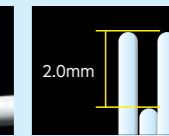

長短いずれもラウンドの段差植毛

P-10M/S

『歯間部』や『歯周ポケット』へ毛先が届き歯周病対策に適しています。

- M 歯周病予防に、健康な歯肉～軽度歯周炎の方 / 歯周治療後のメンテナンスに
- S 歯肉の痛みが強い方、中等度～重度歯周炎 / 歯肉退縮の方



男女兼用

ハンドルのタイプ

10 シリーズ
標準タイプ (全長: 181mm)

- ブルー
- グリーン
- イエロー
- ピンク
- ホワイト




中等度歯周炎でブラッシング時に痛みと出血がある。



P-10Sを処方。歯肉の炎症がひどく出血や痛みが強い時でもやさしく磨けます。

先端部の毛に角度を付けて植毛することでワンタフト形状を再現した「先端集中毛」を採用

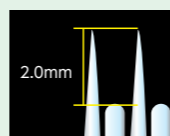

テーバー毛とラウンド毛のハイブリッド段差植毛

P-20M/S ピセラ

歯周病を予防する、大人の女性のためのコンパクト歯ブラシです。

- M 歯周病の予防に、健康な歯肉～軽度歯周炎の方 / 歯周治療後のメンテナンスに
- S 歯肉の痛みが強い方、中等度～重度歯周炎 / 歯肉退縮の方



女性の方

ハンドルのタイプ

20 シリーズ
女性も握りやすい小サイズタイプ (全長: 168mm)

- ピンク
- ブルー
- グリーン
- イエロー
- パープル





軽度歯周炎。染め出しをすると歯頸部に磨き残が多い。



P-20Mを処方。テーバー毛が歯頸部に、ラウンド毛が歯面のブラークをしっかりと除去します。



毛丈が短いコンパクトヘッドでも毛の段差が2.5mmと大きいため、テーバー毛が歯間やポケット内に入りやすいように設計。

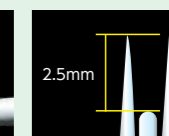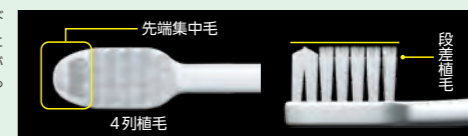

テーバー毛とラウンド毛のハイブリッド段差植毛

OP-10

歯肉への刺激を抑える超極細毛の歯ブラシです。

- 外科処置後 / 重度歯周炎の方



男女兼用


ハンドルのタイプ

10 シリーズ
標準タイプ (全長: 181mm)

- ホワイト



フラップオペ1週間後、歯肉の状態を確認しOP-10を処方。洗口剤を含ませ、そっと当てるようにブラッシングすることにより痛みなく磨けます。

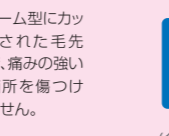

ドーム型にカットされた毛先で、痛みの強い歯肉を傷けません。

W-10


ステイン除去性に優れた美白のための歯ブラシです。

- ルシェロ歯みがきペースト ホワイトをご使用の方
- スティン・「やに」が気になる方/白さを持続したい方



※写真は製品の効果を保証するものではありません。

- パールホワイト
- パールゴールド

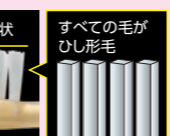

軽い力で歯間へ入る(100g以下) ひし形毛の毛先とエッジ部が歯面・歯間に付着したステインを効率的に除去します。

I-20 インプラント

インプラント特有の構造にも対応したインプラントのメンテナンス専用の歯ブラシです。

- インプラント周囲粘膜炎予防に、インプラント周囲炎の進行抑制に



男女兼用

ハンドルのタイプ

20 シリーズ
女性も握りやすい小サイズタイプ (全長: 168mm)

- ブルー
- レッド



ハイブリッド極細テーバー毛により、インプラント周囲溝までブラシが入りこみブラーク除去ができます。






天然歯とインプラントが混在している場合でも、インプラント部位だけでなく天然歯も磨くことができます。



天然歯とインプラントが混在している場合でも、インプラント部位だけでなく天然歯も磨くことができます。

先端部の毛に角度を付けて植毛することでワンタフト形状を再現した「先端集中毛」を採用

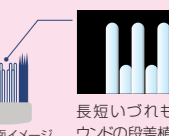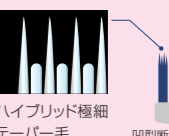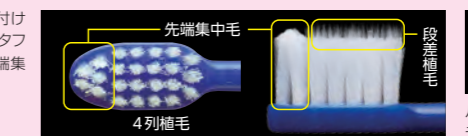

ハイブリッド極細テーバー毛

長短いづれもラウンドの段差植毛

B-30 グラッポ

正しいブラッシングが習慣化されない・上手に磨けない等、患者さんの背景をサポートする歯ブラシです。短時間に・効率よく・おおまかに歯面全体のプラークを落とします。


- カリエス予防に、健康な歯肉～歯肉炎の方



(40代男性)不定期に来院。歯ブラシはB-10Mを処方したが、全体的にプラークが付着し、PCRは常に70%前後である。少しでもPCRを下げたい。

B-30を処方。

咬合面から舌側にブラシを傾ける程度の指導はしたが、基本的には患者さん自身に自由に磨いてもらった。幅広ヘッドなので接触面積も広く、ある程度全体的に磨けるようになった。

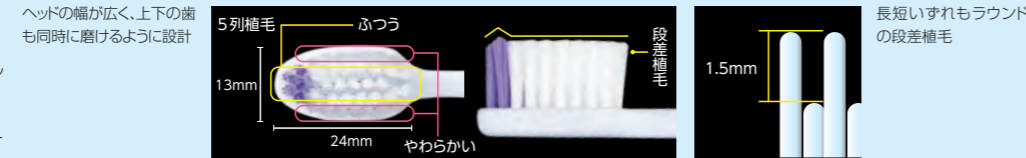

- クリアレッド
- クリアパープル
- クリアブルー
- クリアグリーン
- クリアイエロー

男女兼用

ハンドルのタイプ

30 シリーズ

太めタイプ (全長: 190mm)

P-30 グラッポ

正しいブラッシングが習慣化されない・上手にできない等、患者さんの背景をサポートする歯ブラシです。短時間に・効率よく・おおまかに歯面全体のプラークを落とします。


- 歯周病の予防・対策に、歯周病治療後のメンテナンスに



(60代男性)中等度～重度歯周炎。歯肉は線維性で厚みがあり、歯頸部に磨き残しが多く、ブラッシングは熱心だが、上手く狙って磨けない。

P-30を処方。

幅広ヘッドなので、咬合面と舌側面を被せて磨くことで、安定して磨けるようになった。歯肉辺縁までフィットし大半のプラークを落とせるようになった。

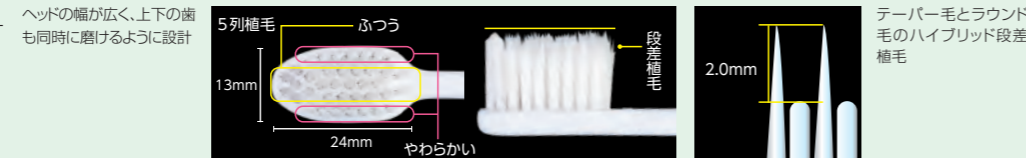

- ネイビーブルー
- ブルー
- レッド
- ピンク
- イエロー

男女兼用

ハンドルのタイプ

30 シリーズ

太めタイプ (全長: 190mm)

Grappo

ルシェロ 歯みがきペースト B(ベーシック)

医薬部外品 <薬用ハミガキ>

むし歯・歯周病の日常ケアに

フッ化ナトリウム (900ppm)
むし歯の発生及び進行の予防

グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎の予防、口臭の予防



成分●フッ化ナトリウム、*グリチルリチン酸ジカルcium、ソルビトール、精製水、濃グリセリン、含水ケイ酸、キシリトール、無水ケイ酸、クエン酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、酸化チタン、パラベン、香料

*は有効成分、無表示はその他の成分です。

製造販売元 株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙1382

ルシェロ 歯みがきペースト P(ペリオ)

医薬部外品 <薬用ハミガキ>

歯周病により特化

フッ化ナトリウム (900ppm)
むし歯の発生及び進行の予防

グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎の予防、口臭の予防



P(ペリオ)は3つの有効成分をプラス

酢酸トコフェロール (VE)
歯肉炎・歯周炎の予防、口臭予防

イソプロピルメチルフェノール (IPMP)
歯肉炎の予防、口臭予防

塩化セチルピリジニウム (CPC)
歯肉炎の予防、口臭予防

成分●グリチルリチン酸ジカルcium、*酢酸トコフェロール、*イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、*塩化セチルピリジニウム (CPC)、*フッ化ナトリウム、ソルビトール、精製水、濃グリセリン、含水ケイ酸、キシリトール、無水ケイ酸、クエン酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、酸化チタン、パラベン、香料

*は有効成分、無表示はその他の成分です。

製造販売元 株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙1382

ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト

医薬部外品 <薬用ハミガキ>

弱アルカリ性で汚れを落としやすくし、歯にやさしい Lime 粒子で汚れを落とす

弱アルカリ性
汚れを落としやすくする

Lime 粒子 (清掃剤)
汚れを落とす

ポリエチレングリコール (PEG) 400
タバコの「やに」除去

モノフルオロリン酸ナトリウム (950ppm)
むし歯の発生及び進行の予防



成分●[清掃剤]炭酸カルシウム (Lime 粒子)、[溶剤]精製水、[保湿剤]濃グリセリン、[薬用成分]ポリエチレングリコール (PEG) 400、モノフルオロリン酸ナトリウム (フッ素)、[甘味剤]キシリトール、[粘度調整剤]カルボキシメチルセルロースナトリウム、[香味剤]香料 (ピュアミントタイプ)、[pH調整剤]リン酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、[粘結剤]ヒドロキシエチルセルロース、[増粘剤]無水ケイ酸、[保存剤]パラベン

製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都千代田区九段南2丁目3番26号

ルシェロ パースト マスデント®F

医薬部外品 <薬用ハミガキ>

歯周病予防の自然派歯磨剤

※合成甘味料、発泡剤、防腐剤は使用しておりません。

フッ化ナトリウム (900ppm)
むし歯の発生及び進行の予防

グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎の予防、口臭の予防

マスティックエッセンシャルオイル
口中の浄化 (清浄剤)



成分●[清掃剤]無水ケイ酸、軽質無水ケイ酸、[保湿剤]濃グリセリン、ソルビトール、[溶剤]エタノール、[粘度調整剤]ヒドロキシエチルセルロース、キサントガム、[着香剤]香料、[着色剤]酸化チタン、[薬用成分]フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸ジカルcium、[pH調整剤]クエン酸ナトリウム、[清浄剤]マスティックエッセンシャルオイル

製造販売元 ゼリア新薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小町町10-11

ルシェロ 歯間ブラシ



種類
適口径 φ0.6mm~φ0.7mm~φ0.8mm~
φ1.2mm~φ1.5mm~φ2.0mm~φ2.4mm~

※写真はSSS

ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

※写真はSSS
ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (4個入)

ルシェロ ペリオブラシ



ルシェロ ペリオブラシ NO.1T
毛束 細め

ルシェロ ペリオブラシ NO.2T
毛束 太め

※写真はNO.1T

ルシェロ ペリオブラシ (ハンドル付)

※写真はNO.1T
ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ (4個入)

ルシェロ 院内指導用
ハンドル

ルシェロ ポイントケアジェル

医薬部外品 <薬用ハミガキ>

歯間ブラシ + 薬用ジェルの新習慣

フッ化ナトリウム (950ppm)
むし歯の発生及び進行の予防

塩化セチルピリジニウム (CPC)
歯肉炎の予防、口臭の防止

β-グリチルリチン酸
歯周炎の予防

乳酸アルミニウム
知覚過敏症状の防止

ポリリン酸ナトリウム
歯石の沈着を防ぐ、タバコのやに除去



成分●[溶剤]精製水、エタノール [保湿剤]濃グリセリン、プロピレングリコール [薬用成分]乳酸アルミニウム、ポリリン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム (フッ素)、塩化セチルピリジニウム、β-グリチルリチン酸 [pH調整剤]クエン酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、クエン酸 [粘結剤]キサントガム、カラギーナン [可溶剤]ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 [香味剤]香料 (クリアーセージタイプ) [清涼剤]β-メントール [防腐剤]パラベン [着色剤]黄色4号、青色1号

製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都千代田区九段南2丁目3番26号

ルシェロ フロス (ミントワックス) (アンワックス)



ミントワックス (30m)

アンワックス (30m)

ミントワックス (医院用) 200m

アンワックス (医院用) 200m

ルシェロ フロッサー



S (ほそめ) イエロー

M (ふつう) ホワイト

ルシェロ パースト

医薬部外品 <薬用ハミガキ>

ラ・フランス&ハーブの香り むし歯・歯周病予防に

フッ化ナトリウム (900ppm)
むし歯の発生及び進行の予防

グリチルリチン酸ジカルcium
歯肉炎・歯周炎の予防、口臭の予防

塩酸クロルヘキシジン
歯肉炎・歯周炎の予防、口臭の予防



成分●[研磨剤]無水ケイ酸 [保湿剤]濃グリセリン、プロピレングリコール [発泡剤]ラウリル硫酸ナトリウム [乳化剤]ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 [粘度調整剤]カルボキシメチルセルロースナトリウム [防腐剤]パラベン [甘味剤]キシリトール、サッカリンナトリウム [着香剤]香料 (ラ・フランス) [溶剤]精製水

製造販売元 日本コルマー株式会社 大阪市中央区伏見町4丁目4番1号