


GC BASE STONE

TYPE 4 DENTAL STONE FOR BASING ARCHES AND ANTOGONIST MODELS
KLASSE 4 GIPS FÜR SOCKELARTBEITEN UND GEGENBISSMODELLE
PLATRE A SOCLE DE TYPE 4 POUR SOCLES ET MODELES ANTAGONISTES
GESSO PER USO DENTALE DI TIPO 4 PER BASI E ANTAGONISTI
ESCA YOLA DENTAL TIPO 4 PARA MODELOS ANTAGONISTAS Y SOPORES DE ARCO
TYPE 4 DENTAAL GIPS VOOR SOKKELS EN ANTOGONIST MODELLEN
KLASS 4 GIPSFÖR GIPSSOCKLAR OCH ANTAGONISTMODELLER
TYPE 4 GIPSTIL GIPSSOKLER OG ANTAGONISTMODELLER
TYYPPI 4 HAMMASKIPSISOKKELEIHIN JA VASTAPURENTAMALLEIKSI



POWDER 12 kg (26.4lbs.)

GC

GC EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN, 13
LEUVEN, BELGIUM

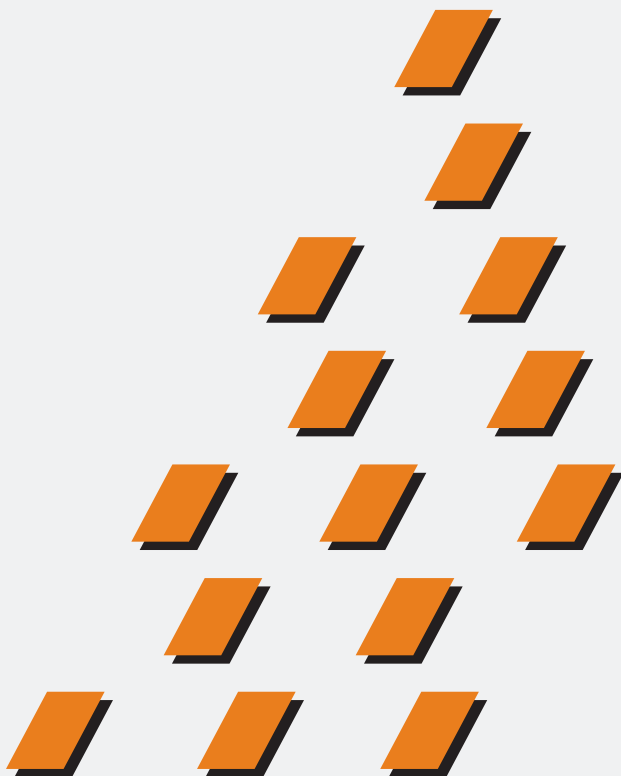


**Instructions / Gebrauchsanleitung / Mode d'Emploi / Istruzione per l'Uso
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones de uso / Bruksanvisning
Brugsanvisning / Käyttöohjeet**

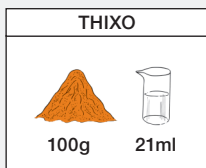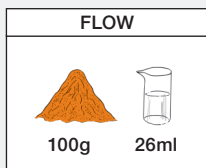


Powder / Liquid Ratio
Verhältnis Pulver/Flüssigkeit
Rapport Poudre/Liquide
Rapporto Polvere/Liquido
Poeder / Vloeistof verhouding
Ratio Polvo / Líquido
V / P tal
Pulver / Væske
Jauhe / Nestesuhde



Mixing Time
Mischzeit
Temps de mélange
Tempo di Miscelazione
Mengtijd
Tiempo de mezcla
Blandningstid
Blandetid
Sekoitus aika

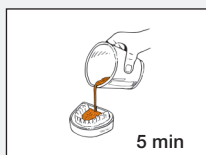

Pour the cast using vibration
Abdruck auf dem Rüttler ausgießen
Couler l'empreinte sous vibrations
Versare il modello con vibrazione
Uitgieten met behulp van een triltafel
Verter la escayola usando un vibrador
Vibreras under islagning
Brug vibrator ved udstøbning
Valaminen vibraattoria käyttämällä

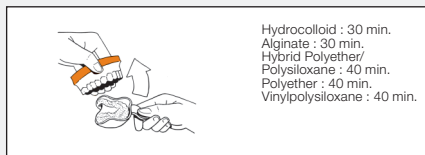

Removal Time
Entnahmezeit
Délai pour
Tempo di Rimozione
Verwijdertijd
Tiempo de vaciado
Avlägsnads efter
Tiden, hvorefter modellen kan fjernes
Jäljennöksen poisto aika

GB Notes

1. Store in a cool dry place in a tightly sealed container. Gypsum products deteriorate when exposed to the atmosphere, particularly at high humidity.
2. Use distilled water for optimal physical properties.
3. Do not inhale dust.
4. In case of contact with eyes, immediately flush with water.
5. When cutting and trimming, wear eye protection.

D Anmerkungen

1. Fest verschlossen in trockener und kühler Umgebung lagern. Gipsprodukte werden unbrauchbar, wenn man sie der Luft aussetzt, besonders bei hoher Feuchtigkeit.
2. Für optimale physikalische Werter bitte dest. Wasser benutzen.
3. Staub nicht einatmen.
4. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen.
5. Beim Bearbeiten Augenschutz tragen.

FR Notes

1. Stocker dans un endroit frais et sec dans un conteneur parfaitement fermé. Les produits à base de plâtre se détériorent lorsqu'ils sont en contact avec l'atmosphère, et particulièrement l'humidité.
2. Utilisez de l'eau distillée pour des propriétés physiques optimales
3. Ne pas respirer la poussière.
4. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau courante.
5. Lors du sciage et du fraisage, protéger les yeux.

IT Note

1. Conservare in luogo fresco e asciutto, in un contenitore a tenuta. I prodotti in gesso si deteriorano quando vengono esposti all'atmosfera e in particolare ad elevate umidità.
2. Per ottimizzare le proprietà fisiche usare acqua distillata
3. Non inalare la polvere.
4. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua.
5. Durante le fasi di taglio e finitura indossare una protezione per gli occhi.

NL Opmerkingen

1. Bewaar op een koele en droge plek in een goed afsluitbare container. De kwaliteit van gips vermindert indien het bloot staat aan lucht, vooral bij een hoge vochtigheid.
2. Gebruik gedestilleerd water voor het verkrijgen van de meest optimale fysische eigenschappen.
3. Inhaleer het stof niet.
4. In geval van contact met de ogen spoel onmiddellijk de ogen uit met water.
5. Draag tijdens het trimmen en frezen oogbescherming.

ES Avisos

1. Almacenar en lugar seco y en un contenedor cerrado. Las escayolas se deterioran al estar expuestas a la atmósfera, especialmente con elevada humedad.
2. Usar agua destilada para optimizar las propiedades físicas.
3. No inhalar el polvo.
4. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua en abundancia.
5. Al recortar usar gafas protectoras.

SW Notera

1. Förvaras torrt och och svalt i väl försluten förpackning. Gips förstörs när det utsätts för syre, speciellt hög luftfuktighet.
2. Använd destillerat vatten för att säkerställa optimala fysikaliska egenskaper.
3. Undvik inandning av gipsdamm.
4. Vid ögonkontakt, skölj ögonen omedelbart rikligt med vatten.
5. I samband med slipning och trimning, använd skyddsglasögon.

DK Bemærk

1. Opbevares på et tørt sted i en forsejlet boks. Gipsens indhold kan fordampe, når den udsættes for atmosfærisk luft, specielt ved høj luftfugtighed.
2. Anvend destilleret vand for at få optimale fysiske egenskaber.
3. Inhaler ikke støvet fra gipsen.
4. I tilfælde af materialet kommer i kontakt med øjnene, så skylles umiddelbart med vand.
5. Når der saves og trimmes, så anbefales det at bruge beskyttelsesbriller.

FIN Huomautuksia


1. Säilytä viileässä kuivassa paikassa hyvin suojatussa astiassa. Kipsituotteet huonontuvat jos ne altistuvat ilmalle, erityisesti jos on korkea kosteusprosentti.
2. Käyttämällä tislattua vettä varmistat parhaat fysikaaliset ominaisuudet.
3. Älä hengitä kipsipölyä.
4. Jos kipsiä joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä.
5. Hioessa ja trimmatessa suojaa silmät.

GC BASE STONE

ISO 6873 :1998 ; Physical Data

Test method: 50% humidity, 23°C (73.4°F) and distilled water

	FLOW	THIXO
Setting time Aushärtezeit Temps de Prise Tempo di Indurimento Uithardingstijd Tiempo de fraguado Stelningstid Afbindingstid Kovettumisaika	9 min.	7.5 min.
Setting Expansion (2 hours) Abbindeexpansion (2 Stunden) Taux d'Expansion (2 heures) Espansione da Indurimento (2 Ora) Uithardingsexpansie (na 2 uren) Expansión de fraguado (2 horas) Stelningsexpansion (2 tim) Afbindingseksansion (2 timer) Kovettumislajeneminen (2 tuntia)	0,08%	0,08%
Compressive Strength (1 hour) Druckfestigkeit (1 Stunde) Résistance à la Compression (1 h) Resistenza a Compressione (1 Ora) Druksterkte (na 1 uur) Resistencia a la compresión (1 hora) Tryckhållfasthet (1 tim) Trykstyrke (1 time) Puristuslujuus (1 tunti)	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

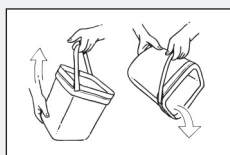

Indications: - Basing dentate arches - Opposing models - Study models
Indikationen: - Gipssockel - Antagonistenmodelle - Situationsmodelle
Indications: - Socle pour maître modèle - Modèles antagonistes - Modèles d'étude
Indicazioni: - Basi per modelli - Modelli antagonisti - Modelli studio
Indicaties - sokkelgips - antagonistemodel - studiemodel
Indicaciones: - Bases de modelos - Antagonistas - Modelos de estudio
Käyttöalueet: - Sokkelit - Vastapurentamallit - Opetusmallit
Indications - gipssocklar - antagonistmodeller - studiemodeller
Indications: - gipssockler - antagonistmodeller - studiemodeller

MANUFACTURED BY :

GC EUROPE N.V.

B-3001 Leuven

DISTRIBUTED BY :

GC EUROPE N.V.

B-3001 Leuven

GC AMERICA INC.

Alsip, IL 60803 USA

GC ASIA DENTAL PTE LTD.

Singapore 508724

T0400



PP

MADE IN E.U.