



Fig. 1

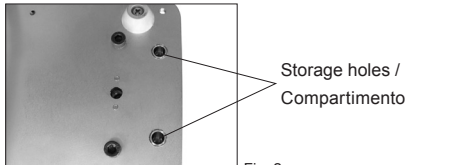


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

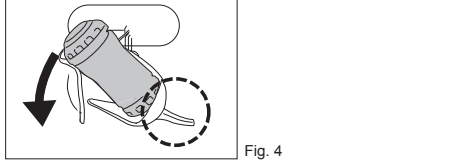


Fig. 5

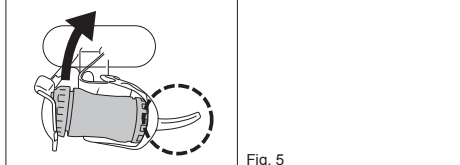


Fig. 6

CAPSULE MIXER CM-II

DENTAL CAPSULE MIXER

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
Mixing of glass ionomer cements and other predestined cements in capsules

IDENTIFICATION OF PARTS
1. Safety cover 6. Timer selection button
2. Capsule holder 7. Time display
3. Power switch 8. Start button
4. Mode button 9. Adapter
5. Mode indicator 10. Power cord

SETUP
1. Remove the two black transportation screws from the bottom of the device (Fig. 1). Keep the device as horizontal as possible when unscrewing. Loosen both screws evenly.
2. Store the screws in the storage holes (Fig. 2). The screws will be necessary again if the device has to be transported in the future.
3. Firmly connect the power cord to the device and subsequently to the main power socket (100-240V AC) (Fig. 3).

SAFETY INSTRUCTIONS

- The unit should only be used by a qualified dental professional according to the instructions.
- The unit should not be exposed to direct sunlight, dust, a wet environment or placed near a heater.
- Keep out of the reach of infants or children.
- Prior to use, make sure the unit is properly connected to the appropriate power source.
- The unit should be checked on a regular basis.
- Do not handle the unit with wet hands.
- Details of the unit on a flat and stable place.
- In case of breakdown, disconnect the unit and appropriately label the unit with details of possible fault. The repair of the unit may only be carried out by a qualified person.

DIRECTIONS FOR USE

Make sure the safety cover is tightly closed. If the cover is open, OF is shown on the time display.
1. Turn on the power switch. The mode indicator and time display will light up.
2. Set the mixing time according to the manufacturer's instructions of the encapsulated product. Two preferred time settings can be selected as mode 1 or 2. Both modes are preset at the factory at 10 seconds. To change the time setting, follow the below steps.
a) Press either "+" or "-" once to activate (display starts flashing).
b) Then press "+" or "-" button to increase or decrease the mixing time by 1 sec.
c) Press the mode button 1 or 2 by pressing the mode button.
d) Press the mode button to set/save the selected mixing time (display stops flashing).
3. Open the cover. Hold the capsule with the nozzle facing upward, install it firm in the swing arm of the capsule holder and press down until it fits in the fixed arm as shown in figure 4.
4. Close the cover and press the start button. Once the mixer starts, the time display starts counting down.
Note:
For safety reasons, the mixer will not start if the cover is open.
Once the selected mixing time has finished, the cover can be opened. Remove the mixed capsule from the capsule holder. Make sure the capsule nozzle is facing upward when removing from the holder (Fig. 5).
Note:

- Do not attempt to start mixing without a capsule being installed in the device. This may cause breakage of the device. Breakage caused by improper use is not covered by the warranty.
- In case of emergency, the mixing process can be stopped by opening the safety cover.
- If a capsule leaks and material comes into contact with the device, wipe off immediately.

MAINTENANCE AND CARE

Prior to device away from direct sunlight, strong heat sources and dusty areas. Put to routine cleaning and maintenance of the unit, disconnect the power cord from the main socket. The device can be cleaned with a soft cloth soaked in warm water or mild detergent. Avoid using volatile solvents.

TROUBLESHOOTING

If any difficulty with the device is experienced, please check below for possible causes of the problem and suggested corrective actions before seeking further advice or repair from an authorized GC Dealer or Service center.

Problem	Check	Corrective action
The power switch is on but time display or mode indicator is off.	Is the power cord correctly connected to the main socket?	Correctly connect the power cord to the main socket.
The device does not start mixing even though the start button is pressed.	Is the adapter correctly connected to the device?	Correctly connect the adapter to the device.
The device moves during mixing.	Is the device closed?	Close the cover tightly.
	Is the device placed on a flat surface?	Place the device on a flat surface or use a rubber mat under the device.

WARRANTY / REPAIR
Guarantee: 2 years from the date of purchase.
Your product is marked with the following symbol:  for an environmental responsible recycling / disposal of your product. Do not discard it with normal waste. The black line, under the crossed waste bin symbol, means that this product has been accepted for circulation after the 13.08.2005 (see 2002/96/EG and DIN EN 50419:2005). Please be aware that this product is submitted to the European Directive 2002/96/EG (WEEE) and the laws applicable in your country for the environmentally responsible recycling / disposal. Please ask your dealer or GC Europe when your product will have to be disposed off.

DISPOSAL
Dispose of the unit according to the local regulations.
Your product is marked with the following symbol:  for an environmental responsible recycling / disposal of your product. Do not discard it with normal waste. The black line, under the crossed waste bin symbol, means that this product has been accepted for circulation after the 13.08.2005 (see 2002/96/EG and DIN EN 50419:2005). Please be aware that this product is submitted to the European Directive 2002/96/EG (WEEE) and the laws applicable in your country for the environmentally responsible recycling / disposal. Please ask your dealer or GC Europe when your product will have to be disposed off.

PACKAGING
Adapter 1
Power cord (EU type, UK type) 2

Specifications	
Equipment class	Class I (For medical device) ☒ Class II Electrical appliance (For equipment class)
Protection from ingress of liquid	IPX0 (Ordinary equipment)
Observe instructions for use	
Power supply voltage	DC 24 V
Power input	50 VA
AC Adapter voltage	INPUT 100-240 V AC 50/60 Hz OUTPUT DC 24 V 1.5 A
Mixing speed	Approx. 4,000 rpm
Mixing time	Selectable from 1-30 seconds
Noise level	<70 dB(A)
Ambient temperature during use	10°C-40°C
Storage condition	Temperature -10°C-60°C Humidity 10%-85% Pressure 500-1060 hPa
Dimensions	(Device) W x L x H 190 mm x 180 mm x 150 mm (Adapter) W x L x H 60 mm x 120 mm x 40 mm
Weight 2.9 kg (including adapter)	
COMPLIANCE	CE EN60601-1 EN60601-1-2

The specifications of the unit may be subject to change without notice.

CAUTION
Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS, United Kingdom
Last revised 05/2023

CAPSULE MIXER CM-II

CAPSLUMISCHER

Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG
Mischen von Glasionomerzementen und anderen vordosierten Füllmaterialien in Kapseln

BESTANDTEILE
1. Schutzdeckel 6. Timer-Auswahltaaste
2. Kapselhälter 7. Zeitanzeige
3. Netzschalter 8. Startknopf
4. Modusauswahltaaste 9. Adapter
5. Modusanzeige 10. Netzkaabel

EINRICHTUNG
1. Die beiden Transportschrauben an der Unterseite des Geräts lösen (Abb. 1). Dabei das Gerät möglichst waagrecht halten. Die zwei Schrauben gleichmäßig lösen.
2. Schrauben in den dafür vorgesehenen Bohrungen lagern (Abb. 2). Diese werden benötigt, wenn das Gerät erneut transportiert werden muss.
3. Das Netzkaabel an das Gerät und dann an die Steckdose (100-240 V AC) anschließen (Abb. 3).

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Das Gerät darf nur von einem zahnärztlichen Fachpersonal bedient werden. Bei getragenen Schutzkleidung muss auf die Anzeige die Meldung OFF.
- Schalten Sie das Gerät durch den Netzschalter an. Anschliessend leuchten die Modus- und Zeitanzeigen auf.
- Behalten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Prüfen Sie die der Betriebsabnahme, ob das Gerät sachgemäß mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Das Gerät ist regelmäßig zu warten.
- Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen an.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Unterlage auf.
- Trennen Sie bei Störungen das Gerät vom Stromnetz und notieren Sie auf einem Hinweiszettel die mögliche Ursache. Die Reparaturarbeiten können möglicherweise nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Schutzdeckel fest verschlossen ist. Bei getragenen Schutzkleidung muss auf die Anzeige die Meldung OFF.

- Schalten Sie das Gerät durch den Netzschalter an. Anschliessend leuchten die Modus- und Zeitanzeigen auf.
- Beide Modi sind vorzugsweise Mischzeiten als Modus 1 oder 2 gespeichert werden. Beide Modi werden werktäglich auf 10 Sekunden eingestellt. Die Mischzeiteinstellung ist durch die Taste "+" oder "-" (die Anzeige blinkt). Drücken Sie dann die Taste "+" oder "-" um die Mischzeit jeweils um eine Sekunde zu erhöhen bzw. zu verkürzen. Dabei kann eine Mischzeit zwischen 1 und 30 Sekunden eingestellt werden.
- Drücken Sie zur Einstellung/Speicherung der Mischzeit die Modusauswahltaaste (die Anzeige blinkt nicht mehr).
- Öffnen Sie das Schutzdeckel. Setzen Sie die Kapsel mit der Spitze nach oben in den Schwengelarm des Kapselhalters ein und drücken Sie dabei nach unten, bis die Kapsel fest sitzt (siehe Abb. 4).
- Schließen Sie den Schutzdeckel und drücken Sie die Starttaete. Wenn der Mischvorgang in Gang gesetzt wird, beginnt die Anzeige, die Mischzeit rückwärts zu zählen.
- Beim Ablauf der eingestellten Mischzeit kann der Schutzdeckel geöffnet werden. Nehmen Sie die gemischte Kapsel aus dem Kapselhälter heraus. Achten Sie dabei darauf, dass die Spitze nach oben gerichtet ist (Abb. 5).
- Nach Ablauf der eingestellten Mischzeit kann der Schutzdeckel geöffnet werden. Nehmen Sie die gemischte Kapsel aus dem Kapselhälter heraus. Achten Sie dabei darauf, dass die Spitze nach oben gerichtet ist (Abb. 5).
- Arten Sie den Kapselfehlern nicht, wenn sich keine Kapsel im Gerät befindet. Das Gerät könnte dabei beschädigt werden. Durch unsachgemäßen Gebrauch verursachte Beschädigungen werden von der Garantie nicht gedeckt.
- Im Notfall kann der Mischvorgang durch Öffnen des Schutzdeckels angehalten werden.
- Wischen Sie Verschmutzungen am Gerät ab, die beim Austreten von Material aus einer ungedichteten Kapsel entstehen.

WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starke Hitzequellen und staubige Umgebungen. Trennen Sie vor der regelmäßigen Reinigung und Wartung des Gerätes das Netzkaabel von der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, in warmem Wasser oder sanftem Reinigungsmittel getränkten Tuch. Flüssliche Lösungsmittel sind dabei zu vermeiden.

FEHLERBEHEBUNG

Sollten beim Betrieb des Gerätes Fehler auftreten, suchen Sie in der angefügten Liste nach möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen, bevor Sie sich an einen GC-Fachhändler oder an ein Service-Center wenden.

Fehler	Überprüfen	Abhilfemaßnahme
Der Netzschalter ist an, die Zeit- und Modusanzeigen sind jedoch ausgeschaltet.	Ist das Netzkaabel richtig an die Steckdose angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkaabel sachgemäß an die Steckdose an.
Ist der Adapter mit dem Gerät richtig verbunden?	Ist der Adapter mit dem Gerät richtig verbunden?	Verbinden Sie den Adapter sachgemäß mit dem Gerät.
Der Mischvorgang wird trotz Betätigung der Starttaete nicht gestartet.	Ist der Schutzdeckel geschlossen?	Schließen Sie den Schutzdeckel.
Das Gerät bewegt sich beim Mischen.	Ist das Gerät auf einer ebenen Unterlage aufgestellt?	Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Unterlage auf, oder legen Sie eine Gummimatte unter das Gerät.

GARANTIE / REPARATUR
Garantie: 2 Jahre ab Kaufdatum.
Bei Störungen während der Garantiedauer wird das Gerät kostenlos repariert, solange es nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und unter Beachtung der Gebrauchsanweisungen verwendet wurde.

ENTSORGUNG
Das Gerät ist gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen. Ihr Produkt ist mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet:
 Entsorgung nach dem Ziel der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und der laws applicable in your country for the environmentally responsible recycling / disposal. Please ask your dealer or GC Europe when your product will have to be disposed off.

VERPACKUNG	
Kapselmischer	1
AC-Adapter	1
Netzkaabel (EU-Typ, UK-Typ)	2
SPEZIFIKATIONEN	
Gerätekategorie	Kategorie I (für medizinische Geräte) ☒ Kategorie II Elektrische (für Gerätekategorie)
Schutz gegen Eintritt von Flüssigkeit	IPX0 (handelsübliche Ausstattung)
Beobachten Sie die Gebrauchsanweisungen beachten	
Netzspannung	24 V DC
Stromverbrauch	50 VA
AC-Adapterspannung	INGANG 100-240 V AC 50/60 Hz AUSGANG DC 24 V 1.5 A
Mischgeschwindigkeit	Ca. 4000 U/min
Mischzeit	Mischzeitbereich: 1-30 Sekunden
Geräuschpegel	<70 dB(A)
Umgebungstemperatur beim Betrieb	Temperatur -10 °C - 60 °C Luftfeuchtigkeit 10 % - 85 % Druck 500 - 1060 hPa
Lagerung	(Gerät) B x L x H 190 mm x 180 mm x 150 mm (Adapter) B x L x H 60 mm x 120 mm x 40 mm (2.9 kg (einschließlich Adapter)
Abmessungen	
NORMEN	CE EN60601-1 EN60601-1-2

Die Gerätespezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ACHTUNG
Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldestelle für Ihr Land. Die Sie unter dem Link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en finden, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Letzte Aktualisierung:05/2023

CAPSULE MIXER CM-II

MAXEURE DE CAPSULES DENTAIRES

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le respect du mode d'emploi.

INDICATIONS
Malaixage de ciments verre ionomère et d'autres ciments prédosés en capsules.

IDENTIFICATION DES PIÉCES
1. Couverture de sécurité 6. Bouton de réglage de la minuterie
2. Support pour capsule 7. Ecran d'affichage de la minuterie
3. Interrupteur d'alimentation 8. Bouton de mise en marche
4. Bouton Mode 9. Adaptateur
5. Indicateur de mode 10. Cordon d'alimentation

CONFIGURATION
1. Retirez les deux vis de transport notes en dessous de l'unité (Ill. 1). Dans la mesure du possible, maintenez l'unité en position verticale au moment de dévisser. Dévissez les deux vis de façon uniforme.
2. Rangez les vis dans les trous de rangement (Ill. 2). Les vis vous seront de nouveau utiles pour le transport ultérieur de l'unité.
3. Branchez fermement le cordon d'alimentation à l'unité et, par la suite, à la prise d'alimentation principale (100-240 V c. a.) (Ill. 3).

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- L'unité ne dovrà être utilisée que par des professionnels dentaires qualifiés, selon les directives d'utilisation.
- L'unité ne doit pas être exposée à un ensoleillement direct, à la poussière, à un environnement humide ou à une source de chaleur.
- Gardez hors de la portée des enfants.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'unité soit branchée à une source d'alimentation appropriée.
- L'unité doit être vérifiée de façon régulière.
- Ne manipulez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Installez le maxeure sur une surface plane et stable.
- En cas de panne, débranchez l'unité. La réparation de l'unité ne peut être effectuée que par une personne qualifiée.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Assurez-vous que le couvercle de sécurité est bien fermé. Si le couvercle est ouvert, l'écran affichera la mention « OF ».

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation. L'indicateur de mode et l'écran d'affichage de la minuterie s'allumeront.
- Réglez le temps de malaxage en fonction des recommandations du fabricant des capsules. Vous pouvez sauvegarder deux durées différentes de malaxage en tant que modalité 1 ou 2. Les deux modalités sont pré-imposées en fabrique à 10 secondes. Pour modifier le réglage de temps, suivez les étapes ci-dessous.
a) Sélectionnez Mode 1 ou 2 en appuyant sur le bouton Mode.
b) Une fois activé, appuyez sur « + » ou « - » (l'affichage commence à clignoter).
c) Puis, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour augmenter ou réduire le temps de malaxage d'une seconde. Des temps de malaxage de 1 à 30 secondes peuvent être sélectionnés.
- Appuyez sur le bouton Mode pour sauvegarder le temps de malaxage sélectionné (l'affichage arrêtera de clignoter).
- Ouvrez le couvercle. Tenez la capsule la base vers le haut, installez-la sur le bras oscillant du support à capsule et enfoncez-la jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans le bras fixe, tel que démontré par l'illustration 4.
- Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton de mise en marche. Une fois que le maxeure démarre, le décompte du temps affiché commence.
Note:
Pour des raisons de sécurité, le maxeure ne démarra pas si le couvercle est ouvert.
- Une fois les temps de malaxage sélectionnés écoulés, le couvercle pourra être ouvert. Retirez la capsule mélangée du support de capsule. Au moment de retirer la capsule du support, assurez-vous que l'embout est orienté vers le haut. (Ill. 5).
- Ne démarrez pas le maxeure sans qu'une capsule soit installée dans l'appareil, cela pourrait entraîner des dégâts sur l'appareil. Ceux-ci causés par une utilisation abusive ne sont pas couverts par la garantie.
- En cas d'urgence, le processus de malaxage peut être interrompu en ouvrant le couvercle.
- Si une capsule coule et que le matériau entre en contact avec l'appareil, essuyez-le immédiatement.

ENTRETIEN
Tenez le dispositif à l'abri de l'ensoleillement direct, des sources de chaleur et des endroits poussiéreux. Avant d'entreprendre le nettoyage et l'entretien courant de l'unité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise principale. L'appareil pourra ensuite être lavé à l'aide d'un chiffon doux trempé dans l'eau chaude ou dans un détergent doux. Évitez l'utilisation de solvants volatils.

DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des difficultés avec l'appareil, veuillez vérifier le tableau ci-dessous pour déterminer les causes possibles de défaillance et les mesures correctives avant de vous adresser à un détaillant ou centre de service autorisé GC.

Problème	Vérification	Mesure corrective
L'interrupteur d'alimentation est en position alimentation, mais l'écran d'affichage ou l'indicateur de mode est éteint.	Le cordon d'alimentation est-il branché correctement à la prise principale?	Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise principale.
Le processus de malaxage ne démarre pas lorsque le bouton de mise en marche est enfoncé.	L'adaptateur est-il branché correctement à l'appareil?	Branchez correctement l'adaptateur à l'appareil.
L'appareil se déplace durant le processus de malaxage.	Le couvercle est-il fermé?	Fermez bien le couvercle.
	L'appareil est-il placé sur une surface plane?	Placez l'appareil sur une surface plane ou placez un tapis de caoutchouc sous l'appareil.

GARANTIE / RÉPARATION
Garantie: 2 ans à compter de la date d'achat.
En cas de défaillance au cours de cette période, les réparations seront effectuées gratuitement à condition que l'appareil conde soumis à des conditions normales d'utilisation, conformément aux directives fournies par le fabricant.

ÉLIMINATION
Disposez de l'unité en respectant la réglementation locale en vigueur. Votre produit est symbolisé par:
 Pour le respect de l'environnement et pour le recyclage de votre produit, ne pas le jeter dans une poubelle « normale ». La ligne noire sous le symbole signifie que le produit a été mis en circulation après le 13.08.2005 (voir 2002/96/EG et DIN EN 50419 : 2005). Assurez-vous que ce produit est soumis à la Directive Européenne 2002/96/EG (WEEE) et aux lois applicables dans votre pays en matière de respect de l'environnement et de recyclage. Contactez votre distributeur lorsque ce produit devra être éliminé.

CONDITIONNEMENT
Maxeure 1
Adaptateur c. a. 1
Cordon d'alimentation 2

SPECIFICATIONS

Classe d'équipement	Classe I ☒ Appareil électrique de Classe II (pour la classe équipement)
Protection contre l'infiltration de liquide	IPX0 (équipement ordinaire)
Respectez les directives d'utilisation	
Tension d'alimentation	24 V c. c.
Puissance nominale	50 VA
Voltage adaptateur c. a.	ENTRÉE 100-240 V c. a. 50/60 Hz SORTIE 24 V c. c. 1.5 A
Vitesse de malaxage	Environ 4 000 tr/min
Durée de malaxage	Sélectable de 1 à 30 secondes
Niveau de bruit	<70 dB(A)
Température ambiante durant l'utilisation	10 °C à 40 °C
Condition de stockage	Température : -10 °C à 60 °C Humidité : 10 % à 85 % Pression: 500 à 1060 hPa
Dimensions	(Unité) larg. x long. x haut. 190 mm x 180 mm x 150 mm (Adaptateur) larg. x long. x haut. 60 mm x 120 mm x 40 mm
Poids 2.9 kg (incluant l'adaptateur)	
COMPATIBILITÉ	CE EN60601-1 EN60601-1-2

Le caratteristiche de l'unité sont présentées sous réserve de modifications sans préavis.

ATTENTION

Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Déclaration d'effets indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de type résultant de l'utilisation de ce produit, quel que soit le pays, contactez la personne compétente de votre pays, en utilisant le lien suivant:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'à notre système de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour:05/2023

CAPSULE MIXER CM-II

MIXER PER CAPSULE DI PRODOTTI PER APPLICAZIONI ODONTOLATRICHE

Per utilizzo esclusivamente professionale.

INDICAZIONI D'USO
Miscelazione di cementi vetro-ionomerici e altri cementi pre-dosati in capsule

COMPONENTI
1. Coperchio di sicurezza 6. Pulsante per la selezione del timer
2. Couvercle de sécurité 7. Display del tempo
3. Interruttore 8. Pulsante Start
4. Pulsante di impostazione modalità 9. Adattatore
5. Indicatore di modalità 10. Cavo di alimentazione

INSTALLAZIONE
1. Dalla superficie inferiore della base del dispositivo togliere le due viti nere di trasporto (Fig. 1). Mentre si allentano le viti, tenere il dispositivo il più possibile in posizione orizzontale. Allentare entrambe le viti nella medesima misura.
2. Riporre le viti negli appositi fori (Fig. 2). Le viti saranno nuovamente necessarie nel caso in cui si intenda trasportare il dispositivo in futuro.
3. Inserire il cavo di alimentazione nel dispositivo e successivamente collegarlo alla presa di corrente principale (100-240V AC) (Fig. 3).

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Il dispositivo deve essere utilizzato solamente da professionisti qualificati del settore dentale, seguendo le apposite istruzioni.
- Il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare diretta, alla polvere, ad ambiente umido, né essere posizionato in un'installazione di fonti di riscaldamento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Prima dell'uso, accertarsi che il dispositivo sia adeguatamente collegato alla fonte di alimentazione corretta.
- Il dispositivo deve essere sottoposto a controlli regolari.
- Evitare di maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.
- Installare il mixer su una superficie piana e stabile.
- In caso di rottura, scollegare l'unità ed etichettarla adeguatamente indicando i dettagli del possibile guasto. Il dispositivo potrà essere riparato solamente da personale qualificato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Verificare che il coperchio di sicurezza sia ben chiuso. Se il coperchio è aperto, il display del tempo indicherà OFF.

- Accendere l'interruttore di alimentazione. L'indicatore di modalità e il display dell'ora si illumineranno.
- Impostare il tempo di miscelazione secondo le istruzioni del produttore del prodotto in capsula da miscelare. Si possono salvare due impostazioni del tempo come modalità 1 o 2. Entrambe le modalità sono pre-impostate in fabbrica a 10 secondi.
- Preferire il modo 1 o 2 premendo il pulsante per l'impostazione della modalità.
a) Selezionare la modalità "+" o "-" per attivare (il display inizia a lampeggiare).
b) Premere il pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire la durata della miscelazione di 1 secondo. Il tempo di miscelazione selezionato può variare da 1 a 30 secondi.
- Preferire il pulsante di impostazione della modalità per impostare o salvare il tempo di miscelazione selezionato (il display smette di lampeggiare).
- Aprire il coperchio. Tenere la capsula con l'angolo rivolto verso l'alto, quindi inserire la capsula nella apposita staffa girandola e premere verso il basso finché non si aggancia nella staffa fisso come indicato nella figura 4.
- Chiudere il coperchio e premere il pulsante start. Una volta che il mixer si avvia, il display dell'ora inizierà a mostrare il conto alla rovescia.
Nota:
Per motivi di sicurezza, se il coperchio è aperto il mixer non parte.
Una volta terminato il tempo di miscelazione selezionato, si potrà aprire il coperchio.
- Togliere la capsula miscelata dal porta-capsula. Prima di rimuovere la capsula dal porta-capsula, verificare che l'angolo sia rivolto verso l'alto (Fig. 5).
- Nota:
Non tentare di avviare la miscelazione se prima non si è inserita una capsula nel dispositivo. Una simile operazione potrebbe causare la rottura del dispositivo. La rottura causata da uso improprio non è coperta da garanzia.
- In caso di emergenza, il processo di miscelazione può essere interrotto aprendo il coperchio di sicurezza.
- Se una capsula cede e del materiale entra a contatto con il dispositivo, tale materiale deve essere rimosso immediatamente.

MANUTENZIONE E CURA

Tenere il dispositivo al riparo dalla luce solare diretta, da fonti di calore intense e dalla polvere. Prima di procedere con la pulizia e la manutenzione di routine dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il dispositivo può essere pulito con un panno morbido imbevuto di acqua calda o con un detergente diluito. Evitare di utilizzare solventi volatili.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con il dispositivo, prima di chiedere consigli o assistenza ad un rivenditore GC o ad un centro di assistenza convenzionato, consultare la tabella che segue nella quale vengono indicate le possibili cause dei problemi e le azioni correttive consigliate.

