

Út a sikerhez...

...hozzon létre esztétikus ortodonciai retenciót



1. Vágja méretre a szálát!



2. Tisztítsa meg a fogat!



3. Savazza le a bondozandó felületet 45-60 másodpercig!



4. Bandozza és fénykezelje!



5. Applikálja a folyékony kompozitot, de ne fénykezelje!



6. Helyezze el a szálát és fénykezelje foganként 5-10 másodpercig!



7. Fedje le a folyékony kompozittal!



8. Fénykezelje foganként 40 másodpercig és finirozza!

Kiszerezés

Kapcsolódó termékek



900841 GC everStickORTHO 2x12 cm utántöltő



GC G-aenial® Universal Flo



GC G-aenial® Bond

everStickORTHO	
Forma	E-üvegszálakból kialakított egyirányú köteg
Átmérő	~0.7-0.8 mm
Üvegszál mennyisége	Kötegenként ~1600 egyedi üvegszál

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com



z L LF HU 1805 10/14



... azonnali megoldás,
mely esztétikus retenciót biztosít

everStick®ORTHO
a GC-től

Üvegszálás megerősítés
esztétikus ortodonciai
retainerekhez





everStick®ORTHO

... azonnali megoldás,
mely esztétikus retenciót biztosít



A GC everStickORTHO az **aktív ortodonciai kezelés utáni esztétikus retenci**ó létrehozására javasolt. Egyesíti a bizonyított retenciós tulajdonságait a könnyű kezelhetőséggel és fogívhez való adaptálhatósággal, így biztosítja a **megbízható és tartós ortodonciai sínezést** páciense számára. Az everStick ORTHO mindemellett **maximális esztétikát** is biztosít, hiszen képes alkalmazkodni a fog színéhez, így biztosítva a láthatatlan ortodonciai megtámasztást.

Erős retenció



Kitűnő esztétikával

Miért az everStickORTHO az ideális retainer páciense számára?

Egyedi tulajdonságai, kiterjedt kutatási háttere és a hosszú klinikai tapasztalat együttesen teszik az everStickORTHO-t páratlan ortodonciai retainerré, mind megbízhatóságát, mind esztétikumát illetően.

Alkalmazkodik a fog színéhez

Fémmentes

Gyorsan applikálható

Könnyen adaptálható

Nincsen második kezelés

Megbízható kötés

Viselése kényelmes

Egyedülálló,
szabadalmaztatott IPN*
szerkezet...



... az üvegszálak és a kompozit anyagok közötti kiváló mikromechanikus kötésért.

* Interpenetrating Polymer Network (Polimer térháló)
Ez a technológia a polimer mátrix (PMMA és bis-GMA) azon képességén alapul, hogy részben beleoldódik a kötéshez használt rezinbe, így létrehozva egy erősebb helyreállítást.




Dr. Baraba, Horvátország

Hogyan érje el a megbízható retenciót az esztétikai előnyökkel együtt?



Kiindulási állapot

TIPP! A retainer palatális vagy bukkális felszínre való applikálásakor bizonyosodjon meg róla, hogy az üvegszálak nincsenek okklúzióban!

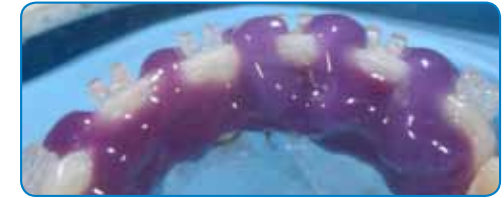

Savazás és bondozás

TIPP! A savazott területnek elengedőnek kell lennie a szál és az azt fedő kompozit számára.



G-ænial Universal Flo réteg felhelyezése

TIPP! Applikáljon egy vékony és egybefüggő réteget a folyékony kompozitból a fogra, beleértve az interproximális területeket is! Ne fénykezelje!



Az everStickORTHO felhelyezése

TIPP! A szálnak a lehető legközelebb kell lennie a szélekhöz, de figyelembe kell venni az okklúziót.



Befedés G-ænial Universal Flo-val

TIPP! A pozicionálás és az első fénykezelés után fedje be folyékony kompozittal és bizonyosodjon meg róla, hogy az üvegszálak teljesen fedve vannak!



Végző G-ænial Universal Flo réteg

TIPP! Ügyeljen arra, hogy a fogközi rések szabadon hagyásával megfelelő interproximális hozzáférést biztosítson a tisztítás érdekében.



Polírozás utáni eredmény

TIPP! Vigyázzon, hogy finírozás és polírozás közben ne vágja el az áttetsző üvegszálakat!



Ellenőrzés két hét múlva

Dr. Dahan, France