

Патот до успехот...

... креирање на естетска ортодонтска ретенција



1. Измерете и исечете ја лентата



2. И исчистете ги забите



3. Изјеткајте ја површината што ќе се бондира во времетраење од 45 до 60 секунди



4. Бондирајте и осветлете



5. Нанесете течен композит; не осветлувајте



6. Поставете ја лентата и осветлете го секој заб 5-10 секунди



7. Покријте со течен композит



8. Осветлете го секој заб 40 секунди и завршете

Пакувања



900841 GC everStickORTHO 2x12 cm
поединечно пакување

Поврзани производи



GC G-aenial® Universal Flo



GC G-aenial® Bond

everStickORTHO

Облик	Еднонасочен сноп од Е-стаклени влакна
Дијаметар	~0.7-0.8 mm
Број на влакна	~1600 поединечни стаклени влакна во сноп

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eoo.gceurope.com
http://www.eoo.gceurope.com

Овластен дистрибутер
за Македонија:
ДЕНТОМЕД-М
Ул. "Бојмија" бр. 2/2
Пошт. факс. 182
1000 Скопје
Тел./Факс: 02/24.62.739
Тел. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk



GC

z L LF MK 18 05 10/14

GC



... ИНСТАНТНО решение
кое овозможува естетска ретенција

everStick®ORTHO

од GC

Зајакнувања со
стаклени влакна за
естетски ортодонтски
ретејнери



everStick®ORTHO

... инстантно решение
кое овозможува естетска ретенција



GC everStickORTHO е индициран за **естетска ретенција после активниот ортодонтски третман**. Претставува комбинација на докажани ретенциски својства со лесно поставување и адаптација спрема лакот, гарантира **сигурно и долготрајно ортодонтско сплантирање** кај Вашиот пациент. Иато така, everStickORTHO обезбедува **максимална естетика** благодарение на неговата способност да се вклопи со бојата на забот, при што се добива невидлива ортодонтска поддршка.

Силна ретенција

Со ненадминлива
естетика



Dr Baraba, Хрватска

Зошто everStickORTHO е идеалниот ретејнер за Вашиот пациент?

Уникатните карактеристики на производот, опсежните податоци од истражувањата и долгото клиничко искуство покажаа дека everStickORTHO е неспоредлив ортодонтски ретејнер во однос на сигурност и естетика.

Се вклопува со бојата на забот

Без метал

Брза апликација


Лесен за адаптација

Не е потребна втора посета

Доверлива адхезија

Удобен за пациентот

Со уникатната патентирана
IPN* структура...

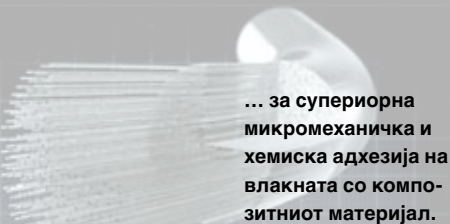

... за супериорна
микромеханичка и
хемиска адхезија на
влакната со композитниот материјал.

* Меѓупенетрирачка Полимерна Мрежна Структура
Оваа технологија е базирана на способноста на полимерниот матрикс (PMMA и bis-GMA) делумно да се раствори во смолата употребена за адхезија, постигнувајќи посилен крајна реставрација.




Како да се постигне комбинација на доверлива ретенција и естетски придобивки?



Почетен случај

СОВЕТ! При поставување на ретејнерот палатинално или букално, бидете сигурни дека влакната не се во оклузија.

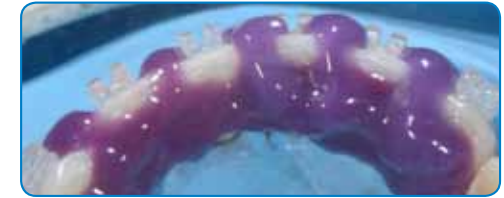

Јеткање и бондирање

СОВЕТ! Потребно е јетканата површина да биде доволно голема за целосно поставување на лентата по должина.



Нанесете слој од G-ænial Universal Flo

СОВЕТ! Нанесете тенок и континуиран слој од течниот композит, вклучувајќи ги интерпроксималните простори. Не осветлувајте!



Поставување на everStickORTHO

СОВЕТ! Лентата треба да биде поставена колку што е можно поблиску до инцизалните рабови, при тоа земајќи ја во предвид оклузијата.



Покријте со G-ænial Universal Flo

СОВЕТ! После нанесувањето и иницијалното осветлување, покријте со течен композит и осигурајте се дека стаклените влакна се тотално покриени со течниот композит.



Финален слој на G-ænial Universal Flo

СОВЕТ! Обезбедете добар интерпроксимален пристап за чистење, оставајќи ги интерденталните простори слободни.



Резултат после полирањето

СОВЕТ! Кога го финирате и полирате композитот, внимавајте да не го исечете транспарентниот сноп од стаклени влакна.



Контрола по две седмици

Dr Dahan, Франција