



# Δύναμη μέχρι τον πυρήνα

everX Flow™  
από την GC

Ενισχυμένη με μικρό ίνες  
ρευστή σύνθετη ρητίνη  
για αντικατάσταση οδοντίνης

**GC**



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



# everX Flow από την GC

## Δύναμη μέχρι τον πυρήνα


Ανακαλύψτε το **everX Flow**, μια ενισχυμένη με μικρό ίνες ρευστή σύνθετη ρητίνη που έχει σχεδιαστεί για την **αντικατάσταση της οδοντίνης και την ενίσχυση των αποκαταστάσεων**. Με βάση την ίδια αρχή που εφαρμόζεται στις σιδερένιες ράβδους οπλισμού στον κατασκευαστικό κλάδο, οι ίνες υάλου που περιέχει το everX Flow ενισχύουν τις αποκαταστάσεις και **αποτρέπουν την πρόκληση ρωγμών και καταγμάτων**.



Χάρη στην εύκολη εφαρμογή, τις δύο αποχρώσεις και την εξαιρετική αντοχή του, το everX Flow θα γίνει **το νέο αγαπημένο σας προϊόν για όλες τις αποκαταστάσεις που χρειάζονται δυνατό πυρήνα**, καθώς και για τις **προετοιμασίες ανασύστασης δοντιών**.

## Εξαιρετική αντοχή σε κατάγματα για ανθεκτικές αποκαταστάσεις μεγάλης έκτασης

Οι περισσότερες σύνθετες ρητίνες παρέχουν ιδανικά χαρακτηριστικά για την αντικατάσταση της αδαμαντίνης: υψηλή αντοχή στη φθορά και υψηλή αισθητική. Ωστόσο, δεν μπορούν να αναπαράγουν τις ιδιότητες της οδοντίνης από πλευράς αντοχής σε κατάγματα. Το everX Flow δίνει λύση σε αυτό το ζήτημα με την **εξαιρετική αντοχή του σε κατάγματα, που προσεγγίζει την αντοχή της οδοντίνης, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε μικρό ίνες** που συνδέονται μέσω ισχυρών δεσμών με τη μήτρα της ρητίνης. Έτσι, το υλικό κατορθώνει να **ενισχύει αποτελεσματικά τις μεγάλες οπίσθιες αποκαταστάσεις**, σε συνδυασμό με μια οποιαδήποτε σύνθετη ρητίνη ως στρώμα αδαμαντίνης.

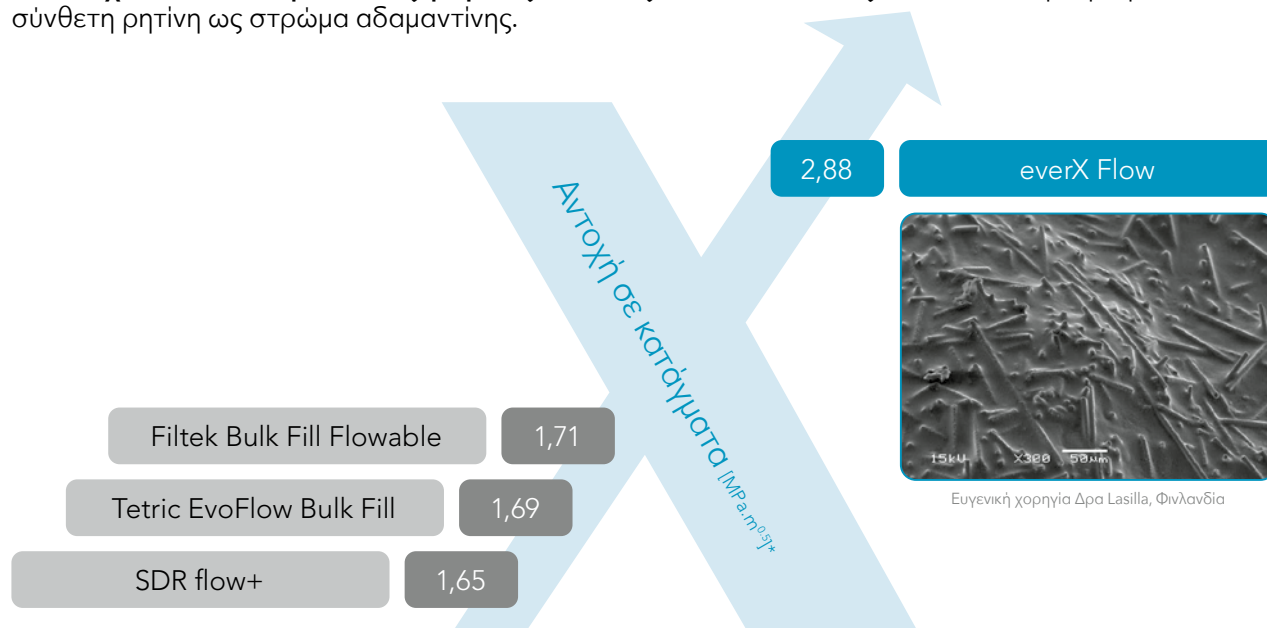


\* Πηγή: Το αρχείο περιέχει δεδομένα E&A της GCC. Πραγματοποιήθηκε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E399-90 (1997).

# Τέλεια θιξοτροπικότητα για εύκολη τοποθέτηση και εξαιρετική προσαρμογή



Courtesy of Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Χάρη στη βέλτιστη θιξοτροπικότητά του, το everX Flow προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε παρασκευασμένη κοιλότητα και συμβάλλει στην αποφυγή εμφάνισης πορότητας. Επίσης, χάρη στην ελεγχόμενη ροή του, μπορεί να τοποθετηθεί στους επάνω γομφίους χωρίς να ρέει.

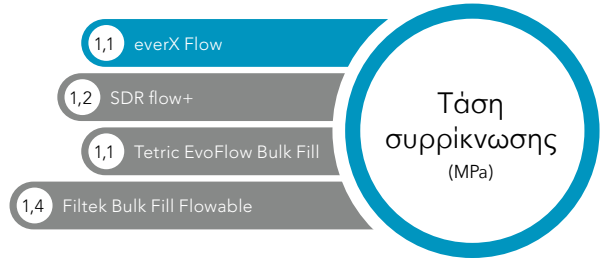

Πηγή: Το αρχείο περιέχει δεδομένα E&A της GCC.

## Δύο αποχρώσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας

Απόχρωση **μαζικής πλήρωσης**  
Βάθος πολυμερισμού 5.5 mm

Βέλτιστη επιλογή για μεγάλες οπίσθιες κοιλότητες

Απόχρωση **οδοντίνης**  
Βάθος πολυμερισμού 2.0 mm

Βέλτιστη επιλογή για αποτελέσματα υψηλότερης αισθητικής και για ανασύσταση κοιλοτήτων

Βέλτιστη επιλογή για την ενίσχυση μεγάλων κοιλοτήτων και για επιτυχημένα μακροχρόνια αισθητικά αποτελέσματα.



Παρασκευή κοιλότητας



Εφαρμογή everX Flow (απόχρωση οδοντίνης)



Τελικό στρώμα με Essentia (απόχρωση universal)



Τελική αποκατάσταση

Ευγενική παραχώρηση του Δρα Georg Benjamin, Γερμανία



Παρασκευή κοιλότητας



Εφαρμογή everX Flow (απόχρωση μαζικής πλήρωσης)



Τελικό στρώμα με G-aenial Universal Injectable (απόχρωση A3)



Τελική αποκατάσταση

Ευγενική παραχώρηση της Δρα Lucile Dahan, Γαλλία



# everX Flow από την GC

## Δύναμη μέχρι τον πυρήνα



Απόχρωση  
μαζικής  
πλήρωσης  
για βαθιές  
κοιλότητες

Απόχρωση  
οδοντίνης  
για αποτελέσματα  
υψηλής  
αισθητικής



Προετοιμασία της κοιλότητας



Εάν πρόκειται για κοιλότητα Ομάδας II, διαμορφώστε τα τοιχώματα που λείπουν με μία σύνθετη ρητίνη αδαμαντίνης.



Εφαρμόστε το Ever X Flow στην κοιλότητα



Τελικό αποτέλεσμα μετά την κάλυψη με συμβατική σύνθετη ρητίνη αδαμαντίνης

### everX Flow

012898 everX Flow, σύριγγα 2 ml (3,7 g), μαζική πλήρωση

012899 everX Flow, σύριγγα 2 ml (3,7 g), οδοντίνη

## Ανακαλύψτε επίσης



### G-Premio BOND

Συγκολλητικός παράγοντας για όλες τις τεχνικές αδροποίησης.



### G-aenial Universal Injectable

Ενέσιμο υλικό αποκατάστασης με υψηλή αντοχή



### Essentia Universal

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης σε μορφή πάστας

Τα everX Flow, Essentia, G-Premio BOND και G-aenial Universal Injectable αποτελούν εμπορικά σήματα της GC. Τα Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ και Tetric EvoFlow Bulk Fill δεν αποτελούν εμπορικά σήματα της GC.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://europe.gc.dental>