

EXACLEAR od GC

Čirý jako sklo



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51 g kartuše, 6x míchací koncovky II vel. L
900114	Míchací koncovky typ II L (60)

Vaši partneři ve složitých klinických situacích

Injekční techniky

Jednoduchá kontrola aplikace přes EXACLEAR



S kompozitem G-aenial Universal Injectable
Zatékavý kompozit s vysokou pevností v ohybu a dokonalými tixotropními vlastnostmi

Technika vrstvení

Jednoduché vytvrzení světlem v palatinální oblasti přes EXACLEAR



S kompozitem Essentia
Vysoce estetický kompozit se zjednodušeným systémem odstínů

Aplikace ortodontických retainerů

Účinná polymerizace bondu & skelných vláken přes EXACLEAR



S everStickORTHO
Výztuž ze skelných vláken pro estetické ortodontické retainery

Dočasná korunka a můstek

Dokonalá polymerizace C&B materiálů přes EXACLEAR



S STEMPSMART DC
Duálně tuhnoucí materiál pro dočasné korunky a můstky

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olšínách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

z OLF CZ 03.68.03/20

Čirý jako sklo



EXACLEAR od GC


Čirý vinyl polysiloxanový materiál

Váš partner pro
transparentní práci

EXACLEAR od GC

Transparentnost ve vaší práci

EXACLEAR je inovativní čirý silikonový materiál, který splňuje požadavky pro náročné estetické případy a usnadňuje cestu ke skvělým výsledkům. Díky jeho úplné průhlednosti je velmi efektivní ve složitých klinických situacích.

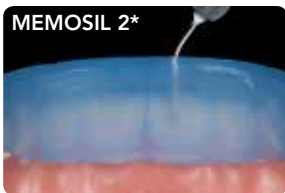

Vizuální kontrola vstříkávání kompozitního materiálu.
*Není obchodní známkou GC

Čirý jako křišťál

Vysoká průhlednost nabízí skvělou vizuální kontrolu a velmi efektivní polymerizaci přes silikonový klíč.

Tato vlastnost vede k vyšší míře konverze a zabraňuje vytvoření kyslíkové inhibiční vrstvy, což **ulehčuje finální leštění**.



Průhlednost EXACLEAR (zcela vpravo) v porovnání s konkurencí.

Optimální konzistence pro úspěšné zpracování

Zatékavost bez tlaku



Optimální konzistence pro **snadnou aplikaci do lžice**

Zatékavost pod tlakem



Tekutý během nanášení, což umožní **dokonalé přizpůsobení** preparovanému zubu a **přesnou reprodukci detailů**

Jednoduchý na předvrtání



Pevný a silný po ztuhnutí a jednoduché ořezávání a vyvrtání **vstříkovacích kanálků**

Nedeformuje se



Dostatečně flexibilní pro odstranění **bez rizika zlomení nebo deformace**

Protože čas je důležitý

Za pouhé **2 minuty** v ústní dutině je otisk tuhý a je možné ho vyjmout.

Při práci na modelu otisk ztuhne do **7 minut**.



2 min. intraorálně



7 min. extraorálně

Objevte injekční techniku

Zhotovení přímých fazet v ordinaci

EXACLEAR použitý společně se zatékavým kompozitem, jako např. G-aenial Universal Injectable, umožňuje stomatologům zhotovit také estetické náhrady jako přímé fazety, ovšem rychleji, cenově výhodněji a za použití **méně invazivních prostředků**.

Průhlednost materiálu EXACLEAR vám umožňuje zkontrolovat **každý drobný detail** a zabraňuje tvorbě inhibiční vrstvy, což usnadňuje finální leštění. **G-aenial Universal Injectable** je pro tuto techniku velmi vhodný díky svým tixotropním vlastnostem, pevnosti v ohybu a lesku.



1. Počáteční situace



2. Naplňte otiskovací lžici hmotou EXACLEAR a nasadte na wax-up na modelu



3. Po ztuhnutí oddělte čirý silikon od lžice



4. Do silikonového klíče vyvrtejte otvory pro zasunutí koncovky stříkačky kompozitu



5. Izolujte sousední zuby, naleptejte sklovinu a aplikujte bond



6. Nasadte silikonový klíč do úst a vstříknete přes otvor G-aenial Universal Injectable



7. Vytvrďte polymerační lampou přes silikonový klíč, ten pak sejměte



8. Odstraňte zbytky kompozitu sklapelem



9. Výsledek po několika leštěních

Ošetření běžně abradovaného chrupu přímou metodou s kompozity v ordinaci

Injekční technika je také vhodná pro ošetření abradovaného chrupu nebo pro obnovení komplexní morfologie zubů. Průsvitnost EXACLEARu umožňuje vidět a kontrolovat vstříkávání materiálu během ošetřování několika zubů najednou. Vysoká pevnost v ohybu a odolnost vůči otěru dělají z G-aenial Universal Injectable ideální materiál pro takové případy v postranním úseku chrupu.



1. Počáteční situace



2. Naplňte otiskovací lžici hmotou EXACLEAR a nasadte na wax-up na modelu



3. Stav po ošetření injekční technikou