



Lásson tisztán



GC EXACLEAR

Átlátszó vinil polisziloxán anyag

Az Ön társa
a transzparens
munkákhoz

GC

GC EXACLEAR

Átláthatóság a munkájában

Az EXACLEAR egy innovatív, átlátszó szilikon anyag, mely megfelel a magas esztétikát igénylő esetek állította követelményeknek, és megkönnyíti a nagyszerű végeredmény eléréséhez vezető utat. Tökéletes átlátszósága különösen hatékonyá teszi komplex klinikai eseteknél.




A kompozit injektálásának vizuális kontrollálása.
*Nem GC védjegy



Kristálytisztza látkép

A **magas átláthatóság** nagyfokú vizuális kontrollt biztosít és effektív fény polimerizációt a szilikon anyagban keresztül.

Ez magasabb konverziós rátát eredményez és megakadályozza az oxigén inhibíciós réteg kialakulását, ezáltal **megkönnyíti a végső polírozást** is.

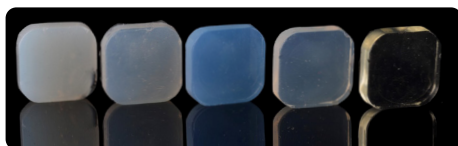

Az EXACLEAR transzparenciája (jobb szélen) versenytársakkal összehasonlítva.


Optimális konzisztencia a sikeres munkafolyamatért

Nyomás nélkül is folyik



Optimális konzisztenciája miatt **könnyű a kanálba adagolni**

Nyomás alatt folyik

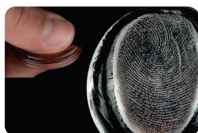

A preparációhoz történő **tökéletes adaptáció** és a **részletek precíz reprodukciója** érdekében folyékony

Könnyen fúrható



Rigid és erős miután megkötött ezért könnyű vágni és injektáláshoz lyukakat fúrni

Nem szakad be



Elég **flexibilis** így **törés és deformáció nélkül** eltávolítható

Mert az idő is számít

Csupán **2 perc** elteltével intraorálisan a lenyomat megköt, és eltávolítható.

Amikor modellen dolgozik, az anyag **7 perc** alatt polimerizálódik.



2 perc intraorálisan



7 perc extraorálisan

Fedezze fel az 'injection moulding' technikát

Direct héjak készítése a rendelői székben

Az EXACLEAR injektálható kompozittal, mint például a G-ænial Universal Injectable anyaggal együtt használva lehetőséget nyújt az orvosnak hogy az indirekt héjakéval megegyező esztétikájú restaurációt készítsen, de gyorsabban, kedvezőbb áron, és **kevésbé invazív preparációval**.


Az EXACLEAR átlátszósága lehetőséget nyújt **minden apró részlet** ellenőrzésére és megakadályozza az oxigén inhibíciós réteg kialakulását, ezáltal megkönnyítve a végső polírozást. **G-ænial Universal Injectable** kiválóan alkalmas ehhez a technikához tixotróp tulajdonsága, erőssége, és magas fénye miatt.




1. Kiindulási állapot



2. Az EXACLEAR anyaggal vegyen lenyomatot a modellen lévő wax-upról

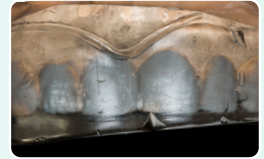


3. Kötés után, távolítsa el az átlátszó szilikon a lenyomatkanálból

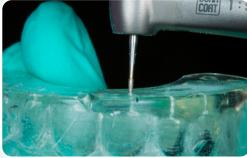

4. Fúrjon egy lyukat a szilikonba a kompozit adagolócsőr számára



5. Izolálja a szomszédos fogakat, savazza a zománcot, majd bondozza

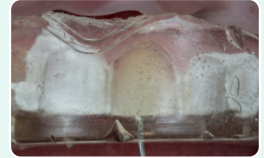

6. Helyezze a szilikon kulcsot a szájba és injektáljon bele G-ænial Universal Injectable anyagot a lyukon át



7. Fénnyel polimerizálja a szilikonkulcson keresztül, majd távolítsa el



8. Távolítsa el a felesleges kompozitot egy szike segítségével



9. A végeredmény, néhány lépésnyi polírozás után

Dr. A. Salehi jóvóltából, Franciaország

Általános kopás rendelői kezelése direkt kompozittal

Az 'injection moulding' technika ideális kopások kezelésére, illetve komplex morfológia helyreállítására is. Több fog egyidőben történő helyreállítása során az EXACLEAR átlátszósága lehetővé teszi, hogy lássa és ezáltal kontrollálja az injektálás folyamatát. A **G-ænial Universal Injectable** hajlítószilárdsága és kopásállósága ideális ilyen posterior esetek kezelésére.



1. Kiindulási állapot



2. Az EXACLEAR anyaggal vegyen lenyomatot a modellen lévő wax-upról



3. Kezelés utáni állapot 'injection moulding' technika alkalmazásával

Dr. A. Mak jóvóltából, Ausztrália

GC EXACLEAR

Lásson tisztán



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51g patron, 6x keverőcsőr II L méret
900114	60x keverőcsőr II L méret

Az Ön társa összetett klinikai eseteknél

'Injection moulding' technika

A befecskendezés könnyű ellenőrzése az EXACLEAR anyagon keresztül



G-aenial Universal Injectável anyaggal

Nagy erősségű injektálható kompozit tixotróp tulajdonsággal

Rétegező technika

A fénypolimerizáció egyszerű az EXACLEAR anyagon keresztül



Essentia anyaggal

Magas esztétikájú kompozit egyszerűsített színpalettával

Ortodonciai retainerek behelyezése

A bond és az üvegszálak könnyű fénypolimerizálása az EXACLEAR anyagon keresztül



everStickORTHO üvegszállal

Üvegszálás megerősítés esztétikus ortodoncia retainerekhez

Ideiglenes korona és híd munkák

Az anyag tökéletes fénypolimerizációja az EXACLEAR anyagon keresztül.



TEMPSMART DC anyaggal

Kettős kötészű kompozit ideiglenes korona és híd munkákhoz

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEE0 Hungary
Fazekas u. 29-31.
H-1027 Budapest
Tel. +36.1.224.0400
info.hungary@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

