

# Il modo più semplice per completare con successo i lavori protesici

Fit Checker Advanced e Fit Checker Advanced Blue di GC sono un modo semplice e preciso per il controllo della precisione in protesi mobile e fissa, sia tradizionale che metal free.

Fit Checker™ Advanced	Fit Checker™ Advanced Blue	Benefit
Silicone VPES	Silicone VPES	Materiale innovativo in silicone con proprietà intrinseche di umettabilità, fluidità e resistenza
Bianco	Blu	Due diversi colori per soddisfare tutti i requisiti clinici
Tempo di lavoro: 1 min. Tempo di indurimento: 1 min. in bocca	Tempo di lavoro: 1 min. Tempo di indurimento: 1 min. in bocca	Tempo di lavoro sufficiente e tempo di indurimento in bocca ridotto
Miscelazione manuale (tubetti) o automiscelazione (cartucce)	Cartucce per automiscelazione	Sono disponibili le cartucce per automiscelazione per una procedura semplice, pulita e veloce



GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, Confezione 1-1 (55 g + 50 g), bianco + ritardante (3g) + accessori
004904	Fit Checker Advanced, Cartucce (2 x 62 g), bianco + punte di miscelazione IIS (3) e IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, Cartucce (2 x 56 g), blu + punte di miscelazione IIS (3) e IISS (3)
800006	GC Cartridge Dispenser II
890130	GC Mixing Tips II, 60 punte di miscelazione SS (gialle)
800100	GC Mixing Tips II, 60 punte di miscelazione S (rosa)

# 'GC.'

GC ITALIA

www.gcitalia.it • info@gcitalia.it • Tel. 02 98 28 20 68  
Via Calabria, 1 - 20098 - San Giuliano Milanese (MI) • Tel. 02 98282068 - Fax 02 98282100

GC Italia 

# Fit Checker™ Advanced e Fit Checker™ Advanced Blu



Il modo più  
semplice  
per completare  
con successo i  
manufatti protesici

Controllo facile,  
semplice e preciso  
dell'adattamento dei lavori protesici

# 'GC.'

# Gli spessori sotto controllo

Il prodotto di riferimento per il controllo della precisione in protesi fissa e mobile, **adesso in versione migliorata a base di VPES**

- Migliorato controllo visivo degli spessori e dei punti di frizione
- Ancora più agevole fresare dove necessario con il materiale in situ senza che impasti la fresa o si sposti
- Rimozione ancora più facile e senza residui
- Maggiore resistenza allo strappo anche in spessori sottilissimi



## Fit Checker Advanced BIANCO In TUBI

La soluzione economica per i controlli degli spessori in protesi fissa e mobile. Sostituisce e migliora i precedenti Fit Checker I e II.



## NUOVO Fit Checker Advanced BIANCO In CARTUCCIA

Ideale per i lavori più estesi grazie alla comodità della miscelazione ed erogazione con il puntale.




## NUOVO Fit Checker Advanced BLU In CARTUCCIA

Finalmente un materiale ideale per i controlli del fit in tutta la protesi metal-free.

Attenzione: nelle versioni in cartuccia estrarre e scartare un minimo di prodotto iniziale prima di procedere alla prima applicazione





# Fit Checker™ Advanced BIANCO Protesi su metallo e protesi totali

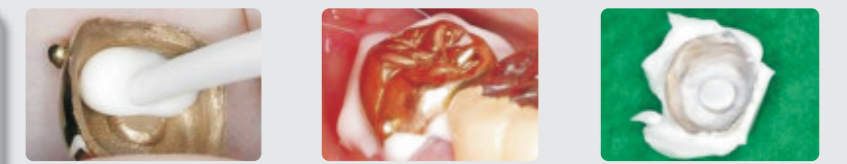

IN PROTESI FISSA: Applicazione e gestione del materiale estremamente semplice. Estrudere nell'elemento, posizionarlo e attendere l'indurimento. Polimerizza rapidamente in un minuto circa.



IN PROTESI MOBILE: individuazione immediata dei punti di pressione che possono essere poi fresati. Il materiale viene facilmente rimosso senza lasciare residui.

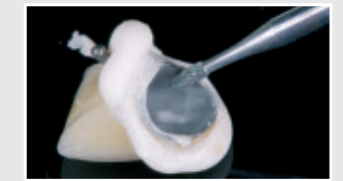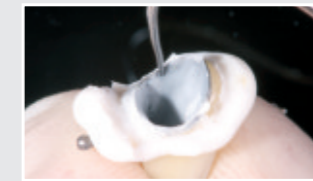
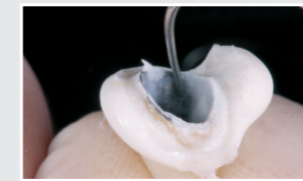
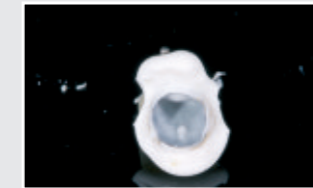


Dr.Simone Vaccari - Modena

# Fit Checker™ Advanced BLU Protesi metal free



Preciso rilevamento degli spessori e delle chiusure nel metal free. A spessori diversi corrisponde una netta distinzione cromatica.

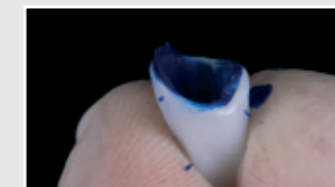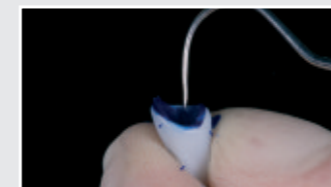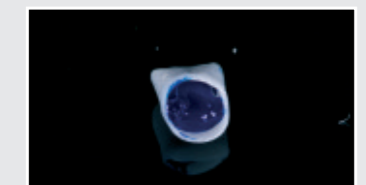

Dr.Simone Vaccari - Modena