



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

La famille
de **plâtres GC.**

Votre
esthétique
commence ici.

GC

Qualité supérieure, c'est ce qui qualifie et place la famille de plâtres GC parmi les plus populaires en Europe. Utilisés dans la réalisation de tous types de prothèses dentaires, les plâtres GC sont spécialement conçus pour produire des modèles et dies précis, satisfaisant pleinement aux exigences d'un laboratoire dentaire moderne.

Fidèle à l'approche systématique de GC "une famille de plâtre éprouvée pour toutes les exigences et applications" - nous proposons trois plâtres qui se combinent parfaitement pour créer les bases de votre esthétique :


GC Fujirock® EP **Classic**, le plâtre incontournable

GC Fujirock® EP **Premium**, un plâtre amélioré pour des performances techniques élevées

GC Base Stone, un plâtre exceptionnellement fluide pour les bases et parfaitement thixotrope pour les antagonistes, avec une expansion minimale

Chaque plâtre existe en plusieurs teintes et vous permet de choisir la combinaison de couleurs qui personnalisera le mieux vos travaux... et votre laboratoire.

La famille de plâtres GC... la **base** du succès.

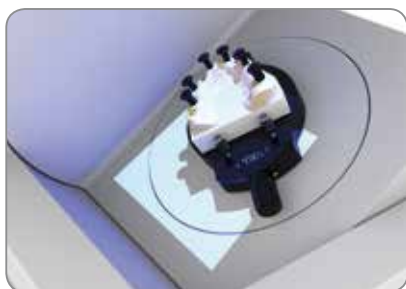



Trois plâtres, des poss

GC Fujirock® EP Classic

Son nom se suffit à lui-même : le "classic", l'un des plâtres de type 4 les plus populaires au monde. Il est idéal pour toutes sortes de travaux prothétiques, combinant précision élevée, dureté exceptionnelle et stabilité. Fujirock EP Classic est très fluide tout en restant thixotrope pour des propriétés de manipulation excellentes et une coulée facile sans bulles d'air.

Choisissez la couleur qui convient le mieux à votre travail :

- Golden Brown
- Topaz Beige



GC Base Stone

GC Base Stone est idéal pour les socles, antagonistes... S'utilise avec le Fujirock EP Classic ou Premium... leur combinaison optimale pour créer facilement e

Choisissez votre couleur complémentaire :

- Terracotta Red
- Royal Blue



possibilités illimitées



GC Fujirock® EP Premium

Fujirock EP Premium a été spécialement développé pour offrir des performances élevées et répondre aux technologies sensibles telles que les cas d'implants étendus et les indications tout céramique complexes. La composition améliorée de sa poudre et ses couleurs raffinées font de ce plâtre spécial le choix idéal pour un large éventail d'applications.

Choisissez la couleur qui s'adapte le mieux à vos travaux raffinés :

- Pastel Yellow
- Polar White
- Inca Brown
- Titanium Grey



...stes et modèles d'étude.
 ...a norme unique "GC quality" de ces plâtres rend
 ...t rapidement de superbes maître-modèles.



L'Art de présenter l'esthétique



Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP – Classic

- 890222 Golden Brown Pack de 5 Kg
- 890226 Golden Brown Pack de 12 Kg
- 890225 Topaz Beige Pack de 5 Kg



GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown / Topaz Beige	
Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	10-13 min.
Temps de retrait	30-40 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 53 Mpa

Fujirock® EP – Premium

- 890364 Pastel Yellow Pack de 4 Kg
- 890365 Pastel Yellow Pack de 11 Kg
- 890366 Polar White Pack de 4 Kg
- 890367 Inca Brown Pack de 4 Kg
- 890368 Titanium Grey Pack de 4 Kg



GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey	
Ratio P/L	20 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.
Temps de prise	9-12 min.
Temps de retrait	25-35 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.09 %
Résistance à la compression	≈ 60 Mpa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terracotta Red Pack de 12 Kg
- 890229 Royal Blue Pack de 12 Kg



Base Stone		
Terracotta Red / Royal Blue		
	Flow	Thixo
Ratio P/L	26 ml/100 g	21 ml/100 g
Mélange manuel	15 sec.	15 sec.
Mélange sous vide	45 sec.	45 sec.
Temps de prise	9 min.	7,5 min.
Temps de retrait	30-40 min.	30-40 min.
Expansion de prise (après 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Résistance à la compression	≈ 45 Mpa	≈ 50 Mpa

Tous les packs ont un couvercle en plastique facile à ouvrir et à fermer. Le scellement hermétique les protège de l'humidité.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Europe NV Benelux Sales Department

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
<http://switzerland.gceurope.com>

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
<http://france.gceurope.com>

