



Перфектно разтичане



G-CEM™ Veneer от GC

Високоестетичен
фотополимеризиращ,
композитен цимент
с лесно нанасяне

G-CEM Veneer от GC

Уникална манипулативност, превъзходна здравина.


Възхитете се от представянето му!

Превъзходно представяне

G-CEM Veneer е високо напълнен и **изключително устойчив на изтриване**. С G-Premio BOND и G-Multi PRIMER, се осигурява **голяма здравина на връзката за надеждни, естетични възстановявания**. Механичните му качества са подобни на пастовидните композити, но с лесна манипулация, идваща от ниския вискозитет.



Предоставено от Dr. J. Mattiussi, Италия

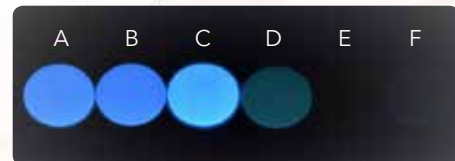

Флуоресценция на 0,5 mm диск. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibri; F: RelyX Unicem

Натурална естетика

G-CEM Veneer се адаптира към всички сложни естетични случаи, осигурявайки **естествен резултат**.

Флуоресценцията на G-CEM Veneer е адаптирана към естествения зъб. Той ще остане незабележим при всички светлини условия.

Четири цвята покриват всички случаи

Четири цвята с оптимизиран ефект на сливане са внимателно подбрани за перфектно интегриране на цвета при всички случаи, но ограничавайки броя на цветовете. С помощта на пробните пасти, може да се уверите, че избраният цвят ще Ви осигури желаната естетика.



A2



Translucent



Опаque



Bleach



A2

Стандартът при циментирането на повечето от протетичните Ви конструкции.



Translucent

Перфектен за много тънки възстановявания, запазвайки естествения цвят.



Опаque

При необходимост от маскиране на преоцветена подлежаща структура.



Bleach

За засилване на опакитета и яркостта, когато се изискват перлено бели зъби.

G-CEM Veneer	
G-CEM Veneer Starter Kit	
012383	2 x G-CEM Veneer Допълнително A2 & TR, 2 x Try-in Paste Допълнително A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x Игловидни накрайници
G-CEM Veneer Refill 1 ml (1.7 g) + 10 смесителни накрайници	
012389	G-CEM Veneer A2 EEP
012390	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
G-CEM Try-in paste 1.2 ml (1.5 g)	
012803	G-CEM Try-in Paste A2
012804	G-CEM Try-in Paste Translucent
012805	G-CEM Try-in Paste Opaque
012806	G-CEM Try-in Paste Bleach
Свързани продукти	
901503	GC удължени смесителни накрайници (30 броя)
009553	GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695	GC G-Premio BOND, Допълнително 5 ml EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER и G-Premio BOND са търговски наименования на GC. Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem и Variolink Esthetic DC не са търговски наименования на GC.



Свалете си **GC Luting Guide** за последователността при всяко циментиране.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



G-CEM Veneer от GC

Перфектно разтичане

Естетичен цимент с лесно нанасяне и големи механични качества.

G-CEM Veneer притежава всички съставки, за да осигури най-зашеметяващия краен резултат за уверена усмивка. Тайната е в неговата оптимално балансирана формула **Full-coverage Silane Coating (FSC) технология**. Тази съвременна обработка на пълнителя позволява постигането на равномерно преразпределение на голямо количество пълнители в матрикса. Резултатът: **уникална манипулируемост и отлични физични качества**.

Full-coverage Silane Coating (FSC)

G-CEM Veneer е създаден, използвайки **последната иновация при технологията на пълнителите (Full coverage Silane Coating, FSC)**.

Повърхността на пълнителите е почти напълно покрита с силанизиращ агент, предлагайки перфектна връзка между пълнителите и матрикса. Тази нова технология предлага разпределение на **по-голямо количество пълнител (ниво на напълненост 69% w/w)** по много ефикасен начин и осигурява **тиксотропна консистенция**.



Предимства на тиксотропията


Благодарение на новата FSC технология, G-CEM Veneer е **много тиксотропен**. Той остава на място, когато не го докосват и се разтича, ако му се приложи натиск. По този начин, цялата повърхност на възстановяването се покрива равномерно без шупли, запазвайки минимална дебелина на слоя. **Резултатът: перфектно пасване!**

Друго предимство на FSC технологията: **G-CEM Veneer не е леплив**. Ето защо, е лесно на го нанесете с изключителна прецизност и **с лекота да отстраните излишъците**. Оптимално балансираното му разтичане превръща този цимент в лесен за използване и ефикасен, в сравнение с много течливите или с предварително затоплените композити. Тази уникална консистенция прави G-CEM Veneer **идеалният партньор за всички Ваши естетични възстановявания**.

Конкурент



G-CEM Veneer

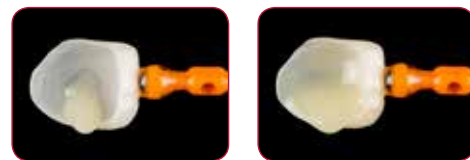

Улеснете трудните стъпки.

В комбинация с универсалния праймер G-Multi PRIMER, и универсалния бонд G-Premio BOND, G-CEM Veneer осигурява стабилна и надеждна адхезия към всички видове субстрати и препарации. **Циментирането става напълно стандартизирано.**

G-Premio BOND

G-Premio BOND е **изцяло универсален адхезив** с доказала се формула, която се **свързва към всички препарации** за здрава и надеждна адхезия. G-Premio BOND съдържа три функционални мономера за връзка към всички препарации, независимо дали е дентин, емайл, метал или композит.

G-Premio BOND може да се използва с **двата метода за ецване**, препоръчани при фини възстановявания като фасети: селективно ецване на емайла или тотално ецване.

След фотополимеризиране адхезивният слой е равномерен, позволяващ **перфектна адаптация** на възстановяването през цялото време.

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER е **универсален праймер**, използващ три различни химични агента за осигуряване на надеждна връзка при всички ситуации. Добавяйки силан към праймера, а не към адхезива, **се осигурява стабилна адхезия**.



СТЪПКИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

0. Преди



Четири естетични цвята

G-CEM Veneer е в четири естетични цвята. Те са внимателно подбрани, за да осигурят пълноценна естетика.

1. Проба на възстановяването



Предсказуем краен резултат

С помощта на пробните пасти лесно може да предвидите крайния резултат. Това помага при избора на правилен цвят и опакитет.

2. Ецване на препаратията



Изберете Вашия метод за ецване

Ецнете селективно емайлите граници или използвайте подход за тотално ецване при малки препарации, които обхващат основно емайла.

3. Нанесете G-Premio BOND



Свързване към всички субстрати

Доказалата се формула на G-Premio BOND осигурява свързване към всички субстрати. Той се полимеризира отделно и е толкова тънък, че не компрометира поставянето на фасетата.

4. Нанесете G-Multi PRIMER



Свързване към всички възстановявания

След правилната предварителна подготовка (ецване или пясъкоструене), G-Multi PRIMER осигурява стабилна адхезия към всички естетични възстановявания.

5. Циментиране



Прецизно нанасяне

Тиксотропията и дългото работно време позволяват прецизно адаптиране.

6. Отстраняване на излишъка



Лесно почистване

Краткото осветяване за 1-2 секунди преди отстраняване на излишъка е по избор. След окончателното полимеризиране, границите могат да бъдат лесно финирани и полирани до голям блясък, за да се намали задържането на плака.

7. Окончателно



Надежден край

Голямата стабилност на цвета и отличните механични качества осигуряват надежден и дълготраен краен резултат.

G-CEM Veneer

Отлична полимеризация

G-CEM Veneer може да бъде фотополимеризиран отлично през възстановяване с дебелина <2 mm и с достатъчна транспарентност. Показан е при **композитни и керамични фасети, инлеи и онлеи**.

Изключителна износоустойчивост



Гладката и блестяща повърхност се запазват във времето благодарение на изключителната износоустойчивост, **предотвратяваща образуването на процеп по границата и устойчивостта на преоцветяване**. FSC технологията и подобреният матрикс не позволяват загуба на частици и осигуряват хомогенно разпределение на пълнителя.

Малка дебелина на слоя

Ползите от здравината, съчетани с перфектното разтичане... Отлично пасване се получава **без необходимост от предварително затопляне!**

G-CEM Try-in Paste

Цветовете на пробните пасти G-CEM Try-in Paste **съответстват перфектно** на четирите цвята на G-CEM Veneer. Те са на водна основа за лесно отстраняване след ползване.

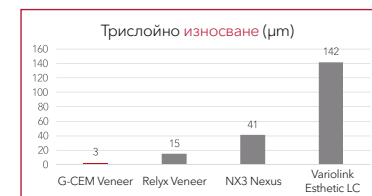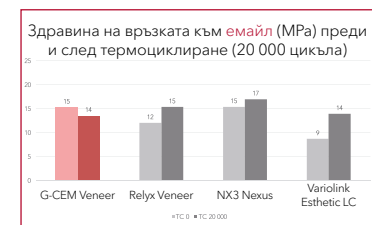

Източник: GC R&D, Япония. Налични данни.