



# Savršeno tečenje



## GC G-CEM™ Veneer

Svjetlosno polimerizujući  
kompozitni cement za visoku  
estetiku i lako nanošenje.

## GC G-CEM Veneer

Jedinstveno rukovanje, izvrsna čvrstoća.

Zadivite se rezultatima.



Ustupio dr. J. Mattiussi, Italija

### Izvrсни rezultati

G-CEM Veneer ima visok udio punila te je **izrazito otporan na trošenje**.

Uz G-Premio BOND i G-Multi PRIMER, osigurava **visoku čvrstoću spoja za postojeane, estetske restauracije**. Ima mehanička svojstva slična kompozitima u obliku paste, uz lako rukovanje uslijed niske viskoznosti.



Fluorescencija - 0,5 mm pločice. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibri; F: RelyX Unicem


### Prirodna estetika

G-CEM Veneer se prilagođava svim slučajevima zahtjevne estetike, pružajući **prirodan rezultat**.

**Fluorescencija** materijala G-CEM Veneer je prilagođena fluorescenciji prirodnih zuba te će izgledati neupadljivo u svim uslovima osvjetljenja.

### Četiri boje pokrivaju sve

**Četiri boje** s optimiranim efektom stapanja, pažljivo su izabrane za savršenu integraciju boje u svim slučajevima, uz ograničenje potrebnog broja boja. Pomoću Try-in paste, može se potvrditi da će izabrana boja dati željeni estetski rezultat.

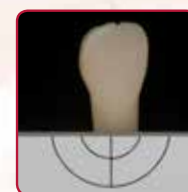

A2



Translucent  
(transluentna)



Opaque (opakna)



Bleach (za bijeljenje)



**A2**  
Standardna boja za cementiranje veće protetskih restauracija.



**Translucent (transluentna)**  
Savršena za vrlo tanke restauracije, za zadržavanje prirodne boje.



**Opaque (opakna)**  
Koristi se za prekrivanje diskolorisanih podloga, ako je potrebno.



**Bleach (za bijeljenje)**  
Koristi se za povećanje opaciteta i svjetline kada se traže biserno bijeli zubi.

G-CEM Veneer	
<b>G-CEM Veneer Starter Kit</b>	
012383	2x G-CEM Veneer (nadopuna) A2 & TR, 2x Try-in Paste (nadopuna) A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x nastavak igličasti
<b>G-CEM Veneer (nadopuna) 1 ml (1.7 g) + 10x nastavak za doziranje</b>	
012389	G-CEM Veneer A2 EEP
012390	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
<b>G-CEM Try-in paste 1.2 ml (1.5 g)</b>	
012803	G-CEM Try-in Paste A2
012804	G-CEM Try-in Paste Translucent
012805	G-CEM Try-in Paste Opaque
012806	G-CEM Try-in Paste Bleach
<b>Povezani proizvodi</b>	
901503	GC nastavak za doziranje igličasti, dugački x 30
009553	GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695	GC G-Premio BOND, (nadopuna) (5 ml) EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER i G-Premio BOND su zaštitni znaci tvrtke GC. Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem i Variolink Esthetic DC nisu zaštitni znaci tvrtke GC.



Preuzmite naš **GC Luting Guide** uputstva korak-po-korak za svaku mogućnost cementiranja.



**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Bosnia and Herzegovina  
Carice Milice 11  
BA - 78000 Banja Luka  
Tel. +387.51.470.736  
Fax. +387.51.470.736  
info.bosniaherzegovina@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com



# GC G-CEM Veneer

## Savršeno tečenje

Estetski cement za jednostavnu primjenu i s izvrsnim mehaničkim svojstvima.

**G-CEM Veneer** ima sastojke koji garantuju izvrstan krajnji rezultat za samouvjeren osmijeh. Tajna je u njegovoj optimalno usklađenoj formuli **FSC tehnologije** (Full-coverage Silane Coating / potpuno prekrivajući silanski sloj). Ova inovativna tehnika punila omogućuje postizanje većeg udjela punila pomoću homogene raspodjele punila u matrici. Rezultat su **jedinstvena svojstva rukovanja i izvrsna fizička svojstva**.

### Potpuno prekrivajući silanski sloj (FSC)

G-CEM Veneer je izrađen na temelju **najnovije inovacije u tehnologiji punila (FSC)**. Površina punila gotovo je potpuno prekrivena silanskim sredstvom za spajanje, što omogućuje savršenu vezu između punila i matrice. Ova nova tehnologija omogućuje disperziju **veće količine punila (udjel punila 69% w/w)** na vrlo efikasan način te dovodi do **tiksotropne konzistencije**.



### Prednosti tiksotropnosti


Zahvaljujući novoj FSC tehnologiji, G-CEM Veneer je **vrolo tiksotropan materijal**. Ako se ne dira, ostaje u mjestu, a postaje tečan kad je pod pritiskom. Na taj način je cjelokupna površina restauracije jednolično prekrivena bez praznina, dok se debljina sloja održava na minimalnoj. **Rezultat: savršeno prijanjanje!** Druga prednost FSC tehnologije: **G-CEM Veneer nije ljepljiv**. Stoga je jednostavan za vrlo precizno nanošenje i **lako odstranjivanje viška**. Optimalno usklađeno tečenje čini ovaj cement posebno lakim za korištenje, pristupačnim i efikasnim u poređenju sa konvencionalnim kompozitima s visokim tečenjem ili prethodno zagrijanih. Jedinstvena konzistencija čini G-CEM Veneer **idealnim partnerom za sve estetske restauracije**.



G-CEM Veneer



Konkurentski proizvod

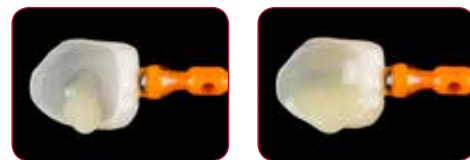

## Manje problema.

U kombinaciji s univerzalnim primerom G-Multi PRIMER i univerzalnim adhezivom G-Premio BOND, G-CEM Veneer garantuje stabilnu i postojanu adheziju za sve vrste podloga i preparacija. **Cementiranje postaje i u toj mjeri standardizovano.**

### G-Premio BOND

G-Premio BOND je **istinski univerzalni adheziv**, potvrđene formule, koji se **spaja za sve preparacije** za čvrstu i trajnu adheziju. G-Premio BOND sadrži tri funkcionalna monomera za spajanje za svaku preparaciju, bilo dentin, caklinu, metal ili kompozit.

G-Premio BOND može se koristiti u **oba načina jetkanja** te se preporučuje za tanke restauracije kao što su ljsuke: selektivno jetkanje cakline ili totalno jetkanje. Nakon svjetlosne polimerizacije sloj spoja je tanak i ravnomjeran, što omogućava **savršeno prilagođavanje** restauracije u bilo koje doba.

### G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER je **univerzalni primer** koji koristi tri različita hemijska sredstva za osiguranje trajne adhezije u svim situacijama. Dodatkom silana primeru, a ne adhezivu, **garantuje se stabilnost adhezije**.



### JEDNOSTAVNI KORACI ZA NANOŠENJE

#### 0. Prije



Četiri estetske boje

G-CEM Veneer dostupan je u četiri različite boje. Pažljivo su izabrane kako bi zadovoljile sve estetske potrebe.

#### 1. Proba restauracije



Predvidiv završni rezultat

Pomoću Try-in paste lako se može predvidjeti završni rezultat. Pomaže u izboru tačne boje i opaciteta.

#### 2. Jetkanje preparacije



Izbor načina jetkanja

Jetkati rubove cakline ili koristiti pristup totalnog jetkanja za minimalne preparacije lokalizovane uglavnom u caklini.

#### 3. Nanošenje G-Premio BOND



Spajanje sa svim podlogama

Dokazana formula adheziva G-Premio BOND osigurava spajanje sa svim podlogama. Zasebno se stvrdnjava i toliko je tanak da ne smeta nanošenju na restauraciju.

#### 4. Nanošenje G-Multi PRIMER



Spajanje sa svim restauracijama

Nakon tačne pripreme (jetkanje ili pjeskarenje), G-Multi PRIMER osigurava postojanu adheziju za sve estetske restaurativne materijale.

#### 5. Cementiranje



Precizno nanošenje

Tiksotropnost i dugo vrijeme rada omogućuju precizno nanošenje.

#### 6. Odstranjivanje viška



Lako čišćenje

Kratko stvrdnjavanje od 1-2 sekundi prije odstranjivanja je optimalno. Nakon završne svjetlosne polimerizacije, rubovi se lako mogu završno obraditi i polirati do visokog sjaja, kako bi se maksimalno smanjilo zadržavanje plaka.

#### 7. Završni rezultat



Trajni rezultat

Visoka postojanost boje i izvrsna mehanička svojstva osiguravaju trajni i kvalitetni završni rezultat.

### G-CEM Veneer

#### Izvrсна polimerizacija

G-CEM Veneer može se efikasno polimerizovati svjetlom kroz restauracije <2 mm uz dovoljnu translucenciju. Indiciran je **za kompozitne i keramičke ljsuke, inleje i onleje**.

#### Izuzetna otpornost na trošenje

Glatka i sjajna površina se održava duže vrijeme zbog visoke otpornosti na trošenje, **sprječavajući stvaranje rubnih pukotina i diskoloracija**. FSC tehnologija i poboljšana matrica sprječavaju gubitak čestica i osiguravaju homogenu distribuciju punila.

#### Mala debljina sloja

Prednosti čvrstoće u kombinaciji sa savršanim tečenjem... Izvršno prijanjanje postiže se **bez potrebe za prethodnim zagrijavanjem!**

### G-CEM Try-in Paste

Boje G-CEM Try-in Paste **savršeno odgovaraju** četiri G-CEM Veneer boje. Na bazi su vode za lako odstranjivanje nakon nanošenja.

