



A tökéletes folyékonyság



GC G-CEM™ Veneer

Fényre keményedő rezin
cement magas esztétikai
követelményekre és
a könnyű behelyezésért

GC


GC G-CEM Veneer

A tökéletes folyékonyág

Egy esztétikai ragasztó cement mely egyszerűen használható, és kiváló mechanikai tulajdonságokkal bír. **A G-CEM Veneer** az összetevőinek köszönhetően ragyogó végeredményt nyújt a magabiztos mosoly érdekében. A titok az optimálisan összeállított formulában rejlik, és a **Full-coverage Silane Coating (FSC) technológiában**. Ez az innovatív töltési eljárás, a töltőanyagnak a mátrixban történő homogén eloszlásával magasabb töltöttségi arány elérését engedi meg. Az eredmény: **egyedülálló kezelhetőség és kiváló fizikai tulajdonságok**.

Full-coverage Silane Coating (FSC)

A G-CEM Veneer a töltőanyag technológia legújabb fejlesztésének (Full-coverage Silane Coating, FSC) felhasználásával készült. A töltet felszíne szinte majdnem teljesen be van fedve a szilán kötőanyaggal, ezáltal tökéletes kapcsolódást biztosítva a töltet és a mátrix közt. Ez az új technológia **több töltőanyag (töltőanyag 69% w/w) hatékony elosztását** biztosítja és **tixotrópikus konzisztenciát** eredményez.

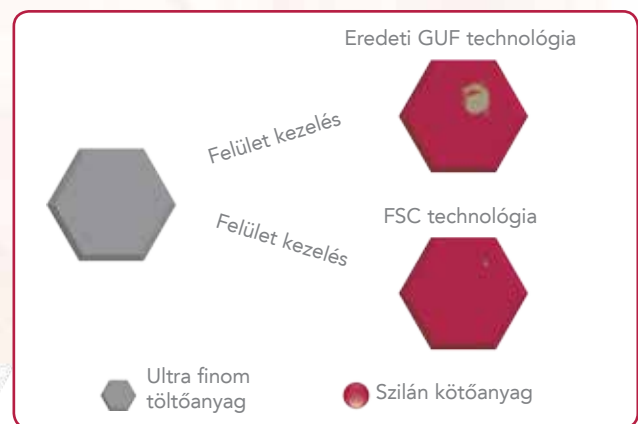

A tixotrópia előnyei

Az új FSC technológiának köszönhetően, a G-CEM Veneer **erősen tixotrópikus**. Érintetlenül egy helyben marad, de nyomás alatt folyékonyá válik. Ezáltal, a restauráció teljes felszíne egyenletesen befedhető hézagok nélkül, ugyanakkor a film vastagsága a minimumon tartható. **Az eredmény: tökéletes illeszkedés!** Az FSC technológia másik előnye: a **G-CEM Veneer nem ragad**. Ezért könnyen, és nagyfokú precizitással applikálható, majd **a felesleg könnyedén eltávolítható**. A cementet optimálisra beállított folyása teszi felhasználó-barátabbá és hatékonyabbá, összehasonlítva folyékony, vagy előmelegített hagyományos kompozitokkal. Egyedülálló konzisztenciája miatt a G-CEM Veneer az Ön **ideális partnere minden esztétikus restaurációnál**.

G-CEM Veneer



Versenytárs



Könnyítsen a bonyolult lépéseken

Egy univerzális primerrel a G-Multi PRIMER-rel, és egy univerzális bond anyaggal a G-Premio BOND-dal kombinálva, a G-CEM Veneer stabil és tartós adhéziót biztosít minden féle szubsztrát és preparáció esetén. **Héjak, inlayk és onlayk ragasztása ezután valóban sztenderdizált lesz.**

G-Premio BOND


A G-Premio BOND egy **valóban univerzális ragasztó** melynek formulája már bizonyított, és amely **bármely preparációnál alkalmazható** az erős és tartós adhézióért. A G-Premio BOND három funkcionális monomert tartalmaz ezáltal alkalmazható minden preparáció esetén, legyen az dentin, zománc, fém vagy kompozit.

A G-Premio BOND használható **mindkét savazási módszernél** melyeket vékony restaurációk esetén javasolnak, mint például a héjaknál: a zománc szelektív savazása vagy teljes savazás.

Fénypolimerizálás után a bond réteg vékony és egyenletes lesz, ezáltal mindenkor **tökéletes adaptációt** biztosítva a restaurációnak.

G-Multi PRIMER

A G-Multi PRIMER egy **univerzális primer** mely három különböző kémiai anyag felhasználásával biztosít tartós adhéziót minden helyzetben. A szilán primerhez, és nem bondhoz történő hozzáadásával **az adhézió stabilitása biztosított.**

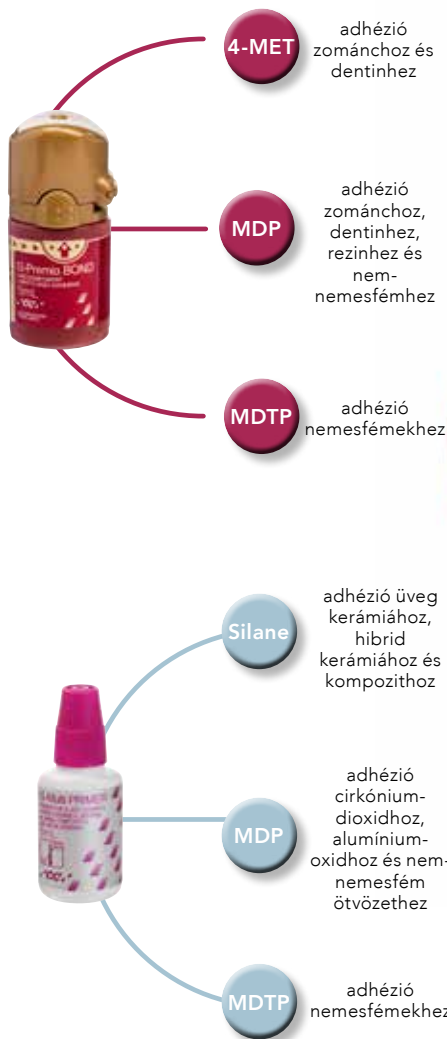

EGYÉRTELMEŰ APPLIKÁCIÓ PÁR LÉPÉSBEN

0. Előtte



Négy esztétikus árnyalat

A G-CEM Veneer négy különböző árnyalatban kapható. Gondos válogatás eredménye, hogy minden esztétikai igényt kielégítsen.

1. Próba



Kiszámítható végeredmény

A G-CEM Try-in Paste segítségével könnyen előre láthatja a végeredményt. Segít kiválasztani a megfelelő árnyalatot és opacitást.

2. Savazás



Válasszon savazási módot

Savazza csupán a zománc széleket vagy válassza a teljes savazást a minimális preparálásnál ami leginkább a zománcot érinti.

3. G-Premio BOND applikálás



Kötés minden szubsztráthoz

A G-Premio BOND bizonyított formulája biztosítja a kötést minden szubsztráthoz. Elkülönítve polimerizált, és annyira vékony, hogy nem befolyásolja a restauráció behelyezését.

G-CEM Veneer

Kiváló polimerizáció

A G-CEM Veneer hatékonyan fénypolimerizálható a restauráción keresztül is <2 mm elegendő transzluencia esetén. Javasolt **kompozit és kerámia héjak, inlayk, onlayk** esetén.

Extrém kopásálló



A sima és fényes felület megmarad az idők folyamán, köszönhetően a magas kopásállóságnak **meggátolva ezáltal a széli rés kialakulását, és ellenáll az elszíneződésnek is.** Az FSC technológia és továbbfejlesztett mátrix megakadályozza a részecskevesztést és biztosítja a töltet homogén elosztását.

Vékony filmvastagság

A szilárdság nyújtotta előnyök a tökéletes állaggal kombinálva... A tökéletes illeszkedés elérhető **előmelegítés nélkül!**

G-CEM Try-in Paste

A G-CEM Try-in Paste színei **tökéletesen igazodnak** a G-CEM Veneer négy árnyalatához. Az applikáció utáni könnyebb eltávolítás érdekében vízbázisú.

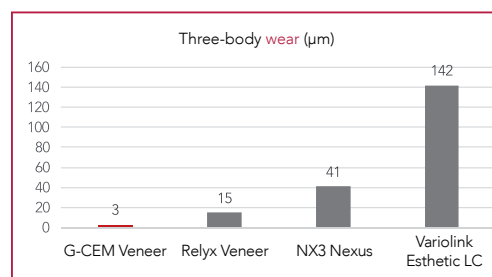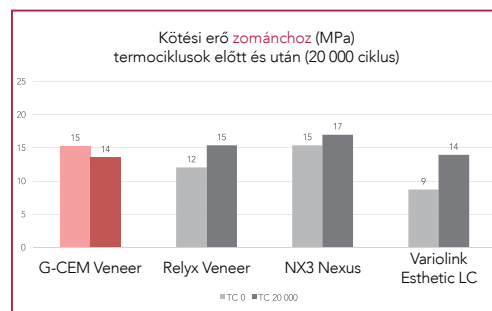

Forrás: GC R&D, Japán. Adatok elérhetők.

4. G-Multi PRIMER applikálás



Kötés minden restaurációhoz

A megfelelő előkezelés után (savazás vagy homokfújás), a G-Multi PRIMER megbízható adhéziót biztosít minden esztétikus restaurációnak.

5. Ragasztás



Precíz applikálás

A tixotrópia és a hosszú munka idő precíz applikálást enged meg.

6. Felesleg eltávolítása



Egyszerű letisztítás

1-2 másodperc polimerizáció ajánlott a felesleg eltávolítása előtt. A végső fénypolimerizálás után a szélek könnyen finírozhatók és polírozhatók magas fényre, a plakk képződés minimalizálása érdekében.

7. Végeredmény



Tartós végeredmény

A magas színstabilitás és a kiváló mechanikai tulajdonságok tartós és minőségi végeredményt biztosítanak.

Hagyja hogy lenyűgözze a teljesítménye


Kimagasló teljesítmény

A G-CEM Veneer nagy töltöttséggel és **extrém kopásállósággal rendelkezik.**

G-Premio BOND és G-Multi PRIMER használatával **magas kötést biztosít a tartós és esztétikus restaurációk érdekében.** Hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik mint a paszta állagú kompozitok, ugyanakkor az alacsony viszkozitásnak köszönhetően könnyen kezelhető.



Dr. J Mattiussi, Olaszország

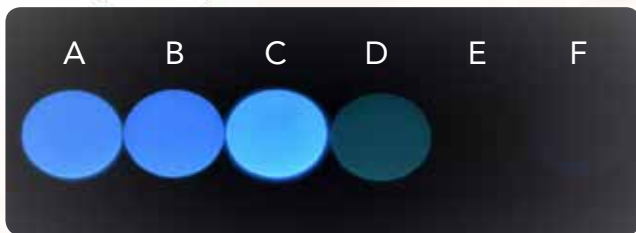

0.5 mm korongok fluoreszenciája. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic DC; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibra; F: RelyX Unicem

Természetes esztétika

A G-CEM Veneer megfelel minden magas igényt támaztó esztétikai eseténél, mivel **természetes végeredményt nyújt.**

A G-CEM Veneer **fluoreszenciája** a természetes fogakéhoz lett igazítva. Bármilyen fényviszonynál alig észrevehető.

Négy szín minden megoldáshoz

Négy szín optimális illeszkedéssel, a minden esetben nyújtott tökéletes színintegráció érdekében gondosan kiválasztva, emellett redukálva a szükséges színek számát. A próbapaszták segítségével meggyőződhet arról, hogy a kiválasztott szín a kívánt megjelenést nyújtja majd.



A2



Translucens



Opaque



Bleach

GC G-CEM Veneer

Egyedülálló kezelhetőség, kimagasló szilárdság



A2

A legtöbb ragasztásnál használandó



Transzlucens

Tökéletes nagyon vékony restaurációknál, a természetes színárnyalat megtartására.



Opaque

Az elszíneződött szubsztrátok maszkolására, szükség szerint



Bleach

Az opacitás és világosság növelésére, amikor gyöngysor fehér fogak vannak megkívánva.

G-CEM Veneer	
G-CEM Veneer Starter Kit	
012383	2 x G-CEM Veneer Refill A2 & TR, 2 x Try-in Paste Refill A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x needle tips
G-CEM Veneer utántöltő 1 ml (1.7 g) + 10 adagolócsőr	
012389	G-CEM Veneer A2 EEP
012390	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
G-CEM Try-in paste 1.2 ml (1.5 g)	
012803	G-CEM Try-in Paste A2
012804	G-CEM Try-in Paste Translucent
012805	G-CEM Try-in Paste Opaque
012806	G-CEM Try-in Paste Bleach
Kapcsolódó termékek	
901503	GC dispensing tips long needle (30 pcs.)
009553	GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695	GC G-Premio BOND, Refill 5 ml EEP

A G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER és a G-Premio BOND GC védjegyek.
A Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem és Variolink Esthetic DC nem GC védjegyek.



Töltse le GC Luting Guide App-unkat a lépésről lépésre instrukciókért bármely ragasztási eljárás esetén.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary
1027 Budapest
Fazekas utca 29-31.
Tel. +36.1.224.04.00
info.hungary@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

