



Savršeno tečenje



GC G-CEM™ Veneer

Svetlosnopolimerizujući
kompozitni cement za visoku
estetiku i lako nanošenje.

GC G-CEM Veneer

Jedinstveno rukovanje, izvrsna čvrstina.

Zadivite se rezultatima.

Izvrсни rezultati

G-CEM Veneer ima visok udeo punilaca pa je **izrazito otporan na trošenje**. Uz G-Premio BOND i G-Multi PRIMER, osigurava **visoku čvrstinu spoja za postojeane, estetske nadoknade**. Ima mehanička svojstva slična kompozitima u obliku paste, uz lako rukovanje usled niske viskoznosti.



Ustupio Dr. J Mattiussi, Italija



Fluorescencija - 0,5 mm pločice. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibri; F: RelyX Unicem

Prirodna estetika

G-CEM Veneer se prilagođava svim slučajevima zahtevne estetike, pružajući **prirodan rezultat**.

Fluorescencija G-CEM Veneera je prilagođena fluorescenciji prirodnih zuba pa će izgledati neupadljivo u svim uslovima osvetljenja.

Četiri boje pokrivaju sve

Četiri boje sa optimalnim efektom stapanja, pažljivo su izabrane za savršenu integraciju boje u svim slučajevima, uz ograničenje potrebnog broja boja. Pomoću try-in paste, može se potvrditi da će izabrana boja dati željeni estetski rezultat.



A2



Translucent
(transluentna)



Opaque (opakna)



Bleach (za beljenje)



A2

Standardna boja za cementiranje veće protetskih nadoknada



Translucent
(transluentna)

Savršena za vrlo tanke nadoknade, za zadržavanje prirodne boje



Opaque (opakna)

Koristi se za prekrivanje diskolorisanih podloga, ako je potrebno



Bleach
(za beljenje)

Koristi se za povećanje opaciteta i svetline kada se traže biserno beli zubi

G-CEM Veneer	
G-CEM Veneer Starter Kit	
012383	2 x G-CEM Veneer Refill A2 & TR, 2 x Try-in Paste Refill A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x needle tips
G-CEM Veneer Refill 1 ml (1.7 g) + 10 dispensing tips	
012389	G-CEM Veneer A2 EEP
012390	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
G-CEM Try-in paste 1.2 ml (1.5 g)	
012803	G-CEM Try-in Paste A2
012804	G-CEM Try-in Paste Translucent
012805	G-CEM Try-in Paste Opaque
012806	G-CEM Try-in Paste Bleach
Related products	
901503	GC dispensing tips long needle (30 pcs.)
009553	GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695	GC G-Premio BOND, Refill 5 ml EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER i G-Premio BOND su zaštitni znaci GC. Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem i Variolink Esthetic DC nisu GC zaštitni znaci.



Preuzmite naš **GC Luting Guide** uputstva korak-po-korak za svaku mogućnost cementiranja.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Dimitrija Tucovića 119,
6th floor, ap.35
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.24.05.419
Fax. +381.11.24.05.419
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
https://europe.gc.dental/sr-RS



GC G-CEM Veneer


Savršeno tečenje

Estetski cement za jednostavnu primenu i sa izuzetnim mehaničkim svojstvima.

G-CEM Veneer ima sastojke koji garantuju izuzetan krajnji rezultat za samouveren osmeh. Tajna je u njegovoj optimalno usklađenoj formuli **FSC tehnologije** (Full-coverage Silane Coating, potpuno prekrivajući silanski sloj). Ova inovativna tehnika punilaca omogućava postizanje većeg udela punilaca pomoću homogene raspodele punilaca u matrici. Rezultat su **jedinstvena svojstva rukovanja i izvrsna fizička svojstva**.

Potpuno prekrivajući silanski sloj (FSC)

G-CEM Veneer je izrađen na osnovu **najnovije inovacije u tehnologiji punilaca (FSC)**. Površina punilaca gotovo potpuno je prekrivena silanskim sredstvom za spajanje, što omogućava savršenu vezu između punilaca i matrice. Ova nova tehnologija omogućava disperziju **veće količine punilaca (udeo punilaca 69% w/w)** na vrlo uspešan način pa dovodi do **tiksotropne konzistencije**.

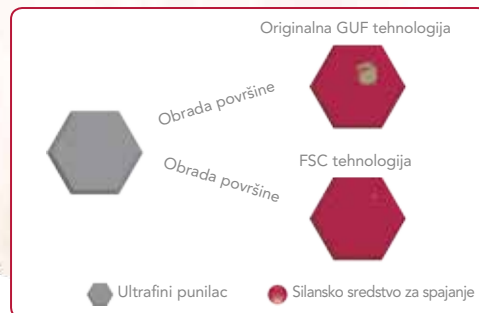


Prednosti tiksotropnosti

Zahvaljujući novoj FSC tehnologiji, G-CEM Veneer je **vrlo tiksotropan materijal**. Ako se ne dira, ostaje u meštu, a postaje tečan kada je pod pritiskom. Na taj način je celokupna površina nadoknade jednolično prekrivena bez pukotina, dok se debljina sloja održava na minimalnoj. **Rezultat: savršeno prijanjanje!** Druga prednost FSC tehnologije: **G-CEM Veneer nije lepljiv**. Zato je jednostavan za vrlo precizno nanošenje i **lako odstranjivanje viška**. Optimalno usklađeno tečenje čini ovaj cement naročito lakim za korišćenje, pristupačnim i uspešnim u poređenju sa konvencionalnim kompozitima sa visokim tečenjem ili prethodno zagrejanim. Jedinstvena konzistencija čini G-CEM Veneer **idealnim partnerom za sve estetske nadoknade**.

G-CEM Veneer



Konkurentski proizvod

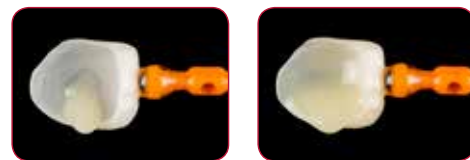

Manje problema.

U kombinaciji sa univerzalnim primerom G-Multi PRIMER i univerzalnim bondom G-Premio BOND, G-CEM Veneer garantuje stabilnu i postojanu adheziju za sve vrste podloga i preparacija. **Cementiranje postaje i u toj meri standardizirano.**

G-Premio BOND

G-Premio BOND je **istinski univerzalni adheziv**, potvrđene formule, koji se **vezuje za sve preparacije** za čvrstu i trajnu adheziju. G-Premio BOND sadrži tri funkcionalna monomera za spajanje za svaku preparaciju, bilo dentin, gleđ, metal ili kompozit.

G-Premio BOND može da se koristi u **oba načina jetkanja** pa se preporučuje za tanke nadoknade kao što su fasete: selektivno nagrizanje gleđi ili totalno nagrizanje.

Nakon svetlosne polimerizacije sloj bonda je tanak i ravnomeran, što omogućava **savršeno prilagođavanje** nadoknada u bilo koje doba.

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER je **univerzalni prajmer** koji koristi tri različita hemijska sredstva za osiguranje trajne adhezije u svim situacijama. Dodatkom silana praj-meru, a ne bondu, **garantuje se stabilnost adhezije**.



JEDNOSTAVNI KORACI ZA NANOŠENJE

0. Pre



Četiri estetske boje

G-CEM Veneer dostupan je u četiri različite boje. Pažljivo su izabrane kako bi zadovoljile sve estetske potrebe.

1. Proba nadoknade



Predvidiv završni rezultat

Pomoću try-in paste lako se može predvideti završni rezultat. Pomaže u izboru tačne boje i opaciteta.

2. Nagrizanje preparacije



Izbor načina nagrizanja

Nagrizati rubove gleđi ili koristiti pristup totalnog nagrizanja za minimalne preparacije lokalizovane uglavnom u gleđi.

3. Nanošenje G-Premio BOND



Spajanje sa svim podlogama

Dokazana formula G-Premio BOND osigurava spajanje sa svim podlogama. Zasebno se stvrdnjava i toliko je tanak da ne smeta nanošenju na nadoknadu.

4. Nanošenje G-Multi PRIMER



Spajanje sa svim nadoknadama

Nakon tačne pripreme (jetkanje ili peskarenje), G-Multi PRIMER osigurava postojanu adheziju za sve estetske restaurativne materijale.

5. Cementiranje



Precizno nanošenje

Tiksotropnost i dugo vreme rada omogućuju precizno nanošenje.

6. Odstranjivanje viška



Lako čišćenje

Kratko stvrdnjavanje od 1-2 sekundi pre odstranjivanja je optimalno. Nakon završne svetlosne polimerizacije, ivice se lako mogu završno obrađivati i polirati do visokog sjaja, kako bi se maksimalno smanjilo zadržavanje plaka.

7. Završni rezultat



Trajni rezultat

Visoka postojanost boje i izvrsna mehanička svojstva osiguravaju trajni i kvalitetni završni rezultat.

G-CEM Veneer

Izvrsna polimerizacija

G-CEM Veneer može uspešno da se polimerizuje svetlom kroz nadoknade <2 mm uz dovoljnu translucenciju. Indikovano je za **kompozitne i keramičke fasete, inleje i onleje**.

Izuzetna otpornost na trošenje

Glatka i sjajna površina održava se duže vreme zbog visoke otpornosti na trošenje, **sprečavajući stvaranje ivičnih pukotina i diskoloracija**. FSC tehnologija i poboljšana matrica sprečavaju gubitak čestica i osiguravaju homogenu distribuciju punilaca.

Mala debljina sloja

Prednosti čvrstine u kombinaciji sa savršenim tečenjem... Izvrsno prijanjanje postiže se **bez potrebe za prethodnim zagrevanjem!**

G-CEM Try-in Paste

Boje G-CEM Try-in Paste **savršeno odgovaraju** četiri G-CEM Veneer boje. Na bazi su vode za lako odstranjivanje nakon nanošenja.

