

initial™ Lustre Pastes ONE e Spectrum Stains

Soluzioni per dipingere

L'arte
di dipingere
la ceramica.



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Dipingete la vostra estetica con Initial™ di GC

GC offre agli utilizzatori di Initial le soluzioni per la ceramica più moderne ed estetiche applicabili con il pennello. In base ai requisiti del caso specifico e alle proprietà desiderate, GC offre due linee di prodotti, **Initial Lustre Pastes Family** e **Initial Spectrum Stains**, che permettono di ottenere il risultato atteso. Esse sono disponibili per un'ampia gamma di CTE e dunque vi permettono di lavorare con la gamma completa di ceramiche GC Initial e quasi tutti i tipi di altre ceramiche.


Initial Lustre Pastes ONE, gli esclusivi colori ceramici 3D di GC, assicurano fluorescenza, profondità e autenticità a tutte i tuoi preziosi lavori... con il semplice uso del pennello. Non è più necessario eseguire complesse procedure di stratificazione o cicli di cottura extra per ottenere una vitalità insuperabile e una glasura naturale per tutti i vostri restauri.

Le **Initial Lustre Pastes GUM Shades** si basano su un'attenta selezione di particelle ceramiche di colore rosa non fluorescenti per imitare perfettamente l'aspetto delle gengive naturali. È possibile ottenere facilmente una transizione realistica dal margine corona - gengiva

Initial Spectrum Stains offrono un **effetto di colorazione bidimensionale** e possono essere utilizzati per la **colorazione sia interna che esterna**. Essi permettono di ottenere un risultato finale molto raffinato con una superficie lucida ma conservando contemporaneamente la struttura superficiale.

Lustre Paste e **Spectrum Stains** sono complementari. In alcuni casi vengono utilizzati insieme; ad esempio, gli Spectrum Stains possono essere aggiunti a Lustre Pastes ONE o alle polveri per stratificazione ceramica.

Compatibilità di Lustre Pastes Family & Spectrum Stains con la linea ceramica Initial

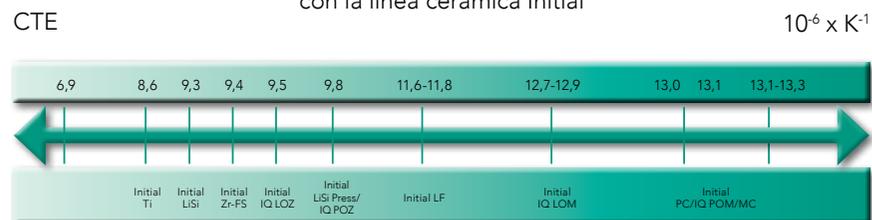


Lustre Pastes ONE V-Shades

Con le masse "Body A-D", si possono ottenere i colori Vita necessari in modo molto facile e veloce. Con gli altri colori disponibili, si possono ulteriormente caratterizzare i restauri per ottenere un risultato finale perfettamente assimilato.




Livello di fluorescenza ottimale.
Assicura l'aspetto dei denti naturali in tutte le circostanze di luce.

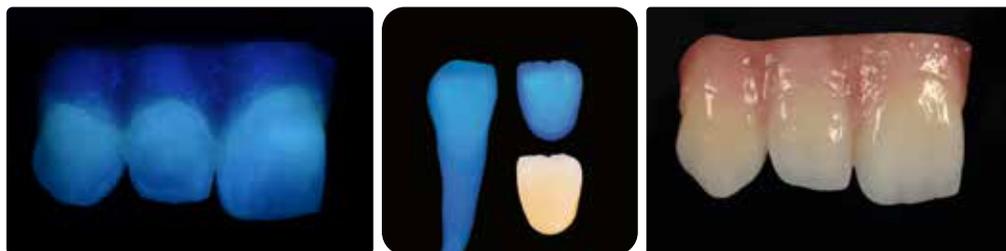

Lustre Pastes NF GUM

Le 5 esclusive Lustre Paste color gengiva consentono un adattamento individuale per abbinare le tonalità gengivali naturali in armonia. È possibile utilizzare i 4 modificatori gengiva miscelabili che consentono una creatività illimitata e di riprodurre senza problemi la gengiva più delicata.

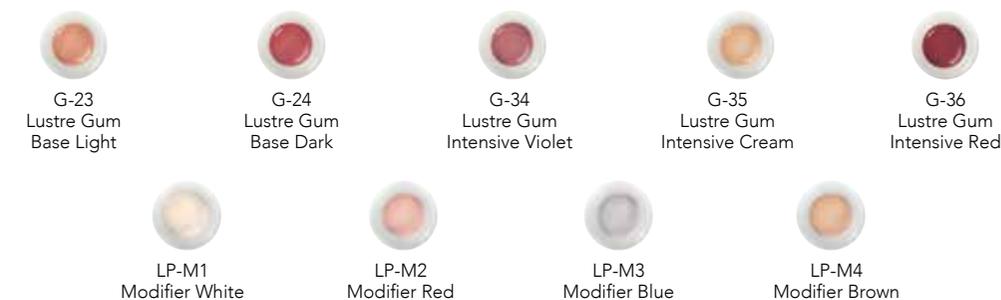

Spectrum Stains

Gli Initial Spectrum Stains sono coloranti in polvere disponibili in una varietà di 20 colori che potenziano l'estetica dei tuoi restauri. Indipendentemente dal modo di applicazione, si otterrà un risultato finale molto realistico mantenendo la tessitura superficiale e assicurando un livello di brillantezza ottimale.



Initial Lustre Pastes ONE per una bellezza superficiale eccellente

La finitura perfetta per i vostri restauri

Con Initial Lustre Pastes ONE, puoi avere fluorescenza, intensità del colore e traslucenza realistica ... semplicemente dipingendo.

Le Initial Lustre Pastes ONE si basano su uno speciale mix di particelle di ceramica fini. I passaggi per completare i vostri manufatti rimangono identici, indipendentemente dalla tecnica impiegata per creare la base. Utilizzando il liquido di diluizione, la consistenza rimane ottimale fino alla fine.

Per ottenere i colori Vita richiesti, si applicano le Lustre Pastes ONE "Body A-D". Questo processo comprende in sé tutto ciò che serve per creare i colori Vita in pochissimo tempo.

Per una caratterizzazione più marcata basterà usare gli altri colori disponibili per ottenere risultati dall'estetica eccellente.



Base



Applicazione di ONE Neutral Fluo



Applicazione di Body Shades



Restauro finale in cui si possono apprezzare colore e lucentezza

Modifiche facili

Con le Initial Lustre Pastes ONE potete facilmente modificare i vostri manufatti.

Modificare la brillantezza del colore, il valore di grigio o aggiungere lucidità superficiale extra non è mai stato così facile!



Brillantezza




Colore



Valore di grigio

Dipingere la ceramica consente una rappresentazione concreta delle emozioni

Le Lustre Pastes ONE, con fluorescenza migliorata, sono state appositamente sviluppate per aumentare la fluorescenza dei vostri restauri monolitici e garantire l'aspetto dei denti naturali in tutte le circostanze di luce.

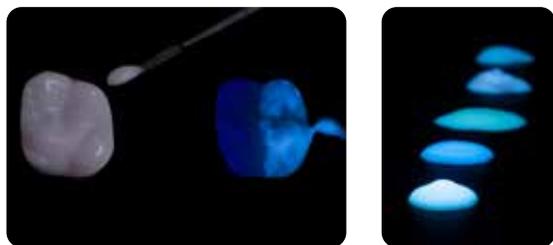

Effetto smalto lucido - Opale
Pasta base altamente opalescente da utilizzare nella zona incisale.



Aggiungete carattere ai vostri restauri mono-massa...

La speciale consistenza garantisce omogeneità nelle modifiche e nell'aspetto. La struttura e la levigatezza superficiali dello strato delle Lustre Pastes ONE sono ottenibili facendo vibrare delicatamente o condensando il restauro. Non servono procedure di stratificazione complesse o cicli di cottura supplementari. Sono veloci, facili e sicure. Le paste sono pronte all'uso con una proprietà tissotropica raffinata, per un'applicazione semplice e precisa.



I framework di forma anatomica completa in disilicato di litio, ad esempio quelli realizzati con LiSi Press, possono essere individualizzati con le Lustre Pastes ONE.



Cercate un modo nuovo per aggiungere vitalità extra ai vostri manufatti monolitici realizzati in zirconia per CAD/CAM, ad esempio con Initial Zirconia Disk? Le Lustre Pastes ONE sono la soluzione in ogni caso.



... oppure incorporate le paste negli strati per ottenere effetti profondi



Cut back



Applicazione delle Lustré Pastes ONE (+ cottura)



Applicazione delle masse Opal/Incisal (+ cottura)



Risultato finale

Potete ottenere i risultati estetici più straordinari utilizzando le Initial Lustré Pastes ONE con la tecnica di cut-back nei vostri manufatti pressati o stratificati. Dopo aver applicato con il pennello le Lustré Pastes ONE, si possono eseguire i ritocchi finali con le ceramiche per faccette dedicate GC Initial: CL-F per una traslucenza elevata e le masse Opal ed Enamel per gli effetti incisali.



Dipingete la vostra estetica bianca e rosa...

Due set, un solo approccio.



Punto di partenza



Applicazione delle diverse masse Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades



Caratterizzazione con i colori LP ONE V-Shades



Risultato finale



... con transizioni naturali, anche sui framework in zirconia.



Il livello di fluorescenza ottimale delle paste Lustre ONE garantisce l'aspetto dei denti naturali in tutte le circostanze di luce e viene utilizzato come strato di colore e individualizzazione in combinazione con Initial SQIN nella tecnica di microstratificazione.

A fronte della crescente diffusione della zirconia e dei restauri prodotti con tecniche CAD/CAM, GC offre soluzioni per mantenere i medesimi standard estetici. I vostri restauri monolitici assumeranno un aspetto naturale e vitale con le Initial Lustre Paste ONE & NF GUM. La loro speciale composizione permette una maggior interazione con la ceramica sottostante e il loro effetto visivo è analogo a quello delle polveri per stratificazione delle ceramiche, potenziando così l'effetto 3D dei vostri restauri. La semplicità può essere davvero bella!



Ampliate la gamma di possibilità con i supercolori Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains contengono pigmenti che sono sinterizzati all'interno di una matrice feldspatica per stabilizzarli e consentire di ottenere risultati uniformi e riproducibili. Con Initial Spectrum Stains potete cambiare e giocare all'infinito. Potete usare questi supercolori per la colorazione interna oppure esterna, potete aggiungerli alle masse di ceramica oppure alle Initial Lustre Pastes ONE per estendere ancora di più la gamma di possibilità!

Due consistenze che preservano entrambe la struttura superficiale


I supercolori Initial Spectrum Stains possono essere applicati nella consistenza prescelta dall'utilizzatore, come pasta oppure come prodotto più liquido. Indipendentemente dalla consistenza impiegata, il risultato finale sarà il medesimo: colorazione e lucentezza con una definizione molto fine, conservando al contempo la struttura superficiale del restauro. Sono la controparte in 2D delle Initial Lustre Pastes ONE.



Corona con struttura superficiale fine pronta per la glasura



Glasura con consistenza liquida o pastosa

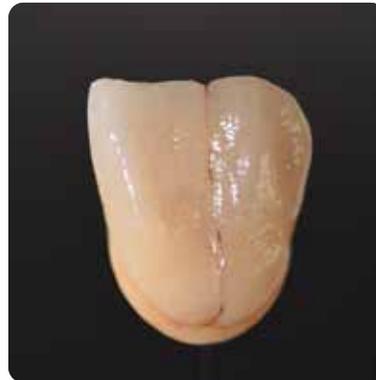

Dopo la cottura: colorazione e glasura con conservazione della struttura superficiale fine



Colorazione interna ...



... o esterna



Soluzioni per dipingere la ceramica in 2D e in 3D... da GC

GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V-Shades

- 4 Body Shades e 1 Neutral Fluo per realizzare un restauro in colore Vita nel modo più semplice.
- 11 Effect Shades per esprimere tutto il potenziale artistico e dipingere white spot, decalcificazioni, fessure sottili e linee di frattura.

Composizione del set:

1x Neutral (4g)
 1x Neutral Fluo (4g)
 1x Value (4g)
 4x Body Shades (4x4g)
 11x Enamel Effect Shades (11x4g)
 1x Diluting Liquid (8ml)
 1x Refreshing Liquid (8ml)
 1x Blocco di miscelazione
 2x Pennelli
 Scala colori
 Manuale tecnico



GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 paste pronte all'uso nei colori della gengiva con una tissotropicità ideale per un'applicazione facile e precisa.
- 4 Gum Modifiers miscelabili che consentono di esprimere la creatività senza limiti per riprodurre la naturale armonia gengivale.

Composizione del set:

5x Gum Shades (5x4g)
 4x Stain Modifier for LP NF (4x3g) Diluting Liquid (8ml)
 Refreshing Liquid (8ml)
 1 Blocco di miscelazione
 2 Pennelli
 Scala colori
 Manuale tecnico



GC Initial Spectrum Stains

- 20 supercolori in polvere per la perfezione estetica nei dettagli.
- Due consistenze per un risultato finale raffinato, conservando la struttura superficiale e producendo un grado di lucentezza ottimale.

Composizione del set:

16x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16x3g)
 1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10g)
 1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25ml)
 1x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8ml)
 1x Initial Scala colori per Initial Spectrum Stains
 Scala colori
 Manuale tecnico

Disponibili come ricambi

GC Initial Spectrum Glaze Powder
 GL-FLUO (10g)
 GC Initial Spectrum Stains
 SPS-17 - SPS-20 (3g)



*initial*TM Lustre Pastes ONE e Spectrum Stains

Soluzioni per dipingere

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<http://www.gc.dental/europe>

GC ITALIA S.r.l.

Via Luigi Cadorna, 69
20055 Vimodrone (MI) Italia
Tel.: +39 02 98282068
<https://www.gc.dental/europe/it-IT>