

Tooth Mousse ja MI Paste Plus: kun haluat terveet hampaat ja kauniin hymyn

Käyttö

Purista pieni määrä Tooth Moussea tuubista sormenpäähäsi ja levitä se hampaiden, renkaiden ja brakettien pinnoille hammashoito-henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Levitä aine kieleksi avulla joka paikkaan vaikeasti tavoitettavilla alueilla. Parhaan hyödyn saat, kun jätät sen hampaidesi pinnoille mahdollisimman pitkäksi ajaksi.

Suosittelava minimivaikutusaika on kolme minuuttia. Käyttöajan loppuksi voit sylkeä pois tai niellä loput Tooth Moussesta.

Muista myös aina sulkea tuubi ja poistaa ylimääräinen Tooth Mousse tuubin suulta.



Dr. D. Mahony, Australia

Luonnollinen suojaava järjestelmä

Tooth Mousse ja MI Paste Plus

Tooth Mousse ja MI Paste Plus ovat tahnoja/pastoja, jotka sisältävät samaa kalsiumia ja fosfaattia, joita on myös maidossa. MI Paste Plus sisältää myös fluoria. Nämä mineraalit suojaavat hampaita ja vahvistavat heikkoja alueita, joilta mineraalit ovat jo hävinneet.



CPP-ACP kehitettiin University of Melbournen hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa Australian Victoriassa. RECALDENT™-tavaramerkkiä käytetään RECALDENT™ Pty Ltd:n myöntämällä lisenssillä. RECALDENT™ CPP-ACP saadaan maidon kaseiinista, eikä se sovellu potilaille, jotka ovat allergisia maidon proteiineille ja/tai hydroksibentsosaateille.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.738.66.35
info.finland@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/fi-fi>

Tooth Mousse ja MI Paste Plus

Vahvat, terveet ja kauniit hampaat
oikomishoidon aikana ja jälkeen

käyttämällä ennalta ehkäiseviä tuotteita,
kuten Tooth Mousse ja MI Paste Plus,
voit pienentää valkoisten laikkujen esiintymisriskiä.



Osa GC:n Minimum
Intervention -ohjelmaa.



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Terveiden hampaiden ylläpito oikomishoidon aikana

Oikomishoidon aikana on tärkeää pitää hampaat terveinä. Kukaan ei halua nähdä hoidon jälkeen valkoisia pisteitä hampaissaan - ne voidaan välttää!

Ortodonttiset valkoiset pisteet

Valkoiset laikut ovat merkki alkavasta hammassairaudesta - kohtia, joissa mineraalit ovat hävinneet hampaista plakin sisältämien bakteerien tuottaman hapon vuoksi. Tätä tapahtuu enimmäkseen braketin vieressä, mihin plakkia helposti kerääntyy.



Oikomishoidon jälkeinen kalkkiutuminen




Säännöllisen Tooth Mousen käytön jälkeen

Prof. L. Walsh, University of Queensland, Australia

Tiede hymyn takana

Kliinisessä tutkimuksessa on tarkasteltu Tooth Mousse- ja MI Paste Plus -valmisteiden käyttöä valkoisten laikujen poistamiseen¹ sekä niiden käyttöä oikomishoidon aikana kertyvän plakin negatiivisten vaikutusten vähentämiseen².

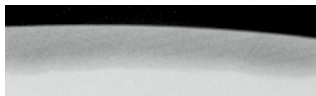

Kiille, jossa on valkoinen laikku, näyttää mikroröntgenkuvassa tältä



Jos hoidossa käytetään pelkkää fluoridia, mineraaleilla on taipumus kerrostua valkoisen laikujen pinnalle



GC Tooth Moussea käytettäessä mineraalit pystyvät tunkeutumaan valkoisen laikun sisälle

- Bailey, D. L., Adams, G. G., Tsao, C. E., Hyslop, A., Escobar, K., Manton, D. J., Reynolds, E. C. & Morgan, M. V. (2009) Regression of Post orthodontic lesions by a remineralising crème. J Dent Res 88(12):1148-1153.
- van der Veen MH, Beerens MW, van Beek H, ten Cate JM. (2009) Changes in Plaque Composition after Orthodontic treatment; the influence of CPP-ACP-F Paste. Caries Res, 43:179-244 abstr 57.

Terveellisellä ruokavaliolla terveet hampaat

Oikomishoidon aikana terveellinen ruokavalio auttaa pitämään hampaat hyvässä kunnossa.

Vinkejä terveelliseen ruokavalioon:

- Syö hedelmiä ja vihanneksia
- Juo hedelmämehuja ja muita juomia makeuttamattomina
- Juo keinotekoisesti makeutettuja nesteitä sokeria sisältävien sijasta
- Vältä sokeria sisältäviä ruokia, makeisia ja välipaloja
- Vältä välipaloja ja makeisia, jotka tarttuvat hampaisiin (esimerkiksi toffeed)



Hampaiden pitäminen puhtaana oikomishoidon aikana

Harjaaminen ja hammaslangan käyttäminen

Harjaa hampaasi huolellisesti kahdesti päivässä pehmeällä hammasharjalla, myös ortodonttisten braketin ja lankojen ympäriltä. Jos sinulla on joustavia oikomisvälineitä ne on irrotettava ennen hampaiden harjaamista ja hammaslangan käyttämistä ja asetettava heti takaisin paikoilleen. Myös hampaiden harjaaminen fluorihammastahnalla auttaa ehkäisemään valkoisia pisteitä.



Käytä myös hammaslankaa ainakin kerran päivässä. Saatavana on erityisiä hammaslankatuotteita, joiden avulla pääset lankojen ja ienrajan väliin. Pyydä hammaslääkäriltä neuvoja ja suosituksia.

Plakin silmällä pitäminen

Plakinvärjäysgeeli tuo suussa olevan plakin esiin värjäämällä sen pinkiksi/purppuraiseksi tai siniseksi. Jo 24-48 tuntia vanha plakki on vakavampi ongelma ja sisältää enemmän bakteereja; tämä plakki näkyy pinkin sijasta sinisenä.

Voit käyttää plakinpaljastusgeeliä myös plakin pH-arvon mittaamiseen - näin näet, missä bakteerit tuottavat eniten happoa hampaidesi vahingoksi.



Tri. I. Miletic, Kroatia

Käyttämällä plakinvärjäysgeeliä kotona huomaat helpommin plakin vaikeasti tavoitettavilta alueilta braketin ja joustavien oikomisvälineiden ympäriltä ja näet, mihin kohtiin olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota.