



Наносьте, формуйте,
робіть поверхню
гладкою,
насолоджуйтеся!

Нашарування
КОМПОЗИТІВ
стало
ПРОСТІШИМ

завдяки GC Modeling Liquid
та GC пензликам

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Спростіть вашу роботу з композитами, використовуючи **техніку моделювання пензликом**

Терапевтичні композити можуть бути складними в роботі: іноді вони прилипають до інструментів, їм важко надавати форму чи згладжувати потрібним вам чином, тож часом границі реставрації виходять помітними...

Використання пензлика та рідини для нанесення і моделювання композитів повністю змінює правила гри.



**Швидке та легке
нанесення та
формування**

Використання пензлика, **змоченого у моделювальній рідині**, робить композит менш липким, і як результат - **полегшене та пришвидшене нанесення та формування**.



**Гладка поверхня
для швидшої
процедури фінірування**

Нанесення фінального шару за допомогою змоченого пензлика допоможе ефективно **згладити цей шар** та отримати ідеальну поверхню. Це **спрощує процедуру фінірування** та зберігає безцінний час.



**Невидимий
для найкращих
естетичних результатів**

Не зважаючи на жовтуватість кольору під час нанесення, GC Modeling Liquid **стає повністю прозорою після полімеризації світлом**, гарантуючи **найкращий естетичний результат**.



GC Modeling Liquid є ідеальною смолою для змочування при використанні техніки моделювання пензликом:

- Оптимальна **низька в'язкість**
- **Повністю невидима** після полімеризації світлом
- Дуже **проста** процедура, **що зберігає час**
- 350 крапель в кожній пляшці для **350 реставрацій!**
- Сумісна з **усіма терапевтичними композитами**
- Зберігання при **кімнатній температурі**



Прощавайте, каверзні композити

Наносьте, формуйте, робіть поверхню гладкою, насолоджуйтеся!



Видавіть одну краплю GC Modeling Liquid на палету для замішування.



Використовуйте швидко та захистіть від світла за допомогою кришечки.



Торкніться пензликом краплі, щоб зволожити його.



Видаліть надлишки за допомогою паперового рушника.




Використовуйте плоский пензлик, щоб створити лінгвальну емалеву стінку.



Круглий пензлик можна використовувати для інтерпроксимальної частини.



Наносьте шар дентину, використовуючи плоский пензлик.

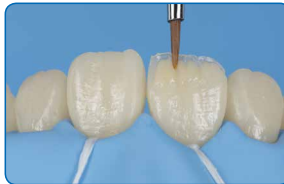

Моделюйте дентинні мамелони, використовуючи круглий пензлик.



Моделюйте дентинні мамелони, використовуючи круглий пензлик. Завдяки пензлику фінальний шар матиме гладку поверхню.

Також є оптимальним для реставрацій жувальних зубів

Круглий пензлик допоможе створити бугри та вдосконалити дизайн фісур.



Пензлик можна легко згинати для кращого доступу до порожнин на жувальній ділянці.



Пензлик можна використовувати, щоб наносити матеріал бугор за бугром.



Оптимальний для відтворення фісур та вдосконалення анатомії.

Приготуйтеся до ЛЕГКОГО нашарування КОМПЗИТІВ Із GC Modeling Liquid та пензликами Gradia



012244 - GC Modeling Liquid, пляшечка 6 мл ЕЕР 900744 - GC Composite Modeling Kit ЕЕР

001533 - GC GRADIA, Пензлик круглий, n°1 x10

001534 - GC GRADIA, Пензлик плоский, n°1 x10

001535 - GC GRADIA, Тримач для пензлика x2

Включає GC Modeling Liquid,
Gradia Пензлик плоский (x5), Gradia Пензлик
круглий (x5), Gradia Тримач для пензлика (x2)
& Палета для замішування

Відкрийте для себе ЧУДОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ та ЕСТЕТИЧНІСТЬ у поєднанні

із реставраційними композитами від GC



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aenial Anterior / Posterior



Essentia

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистрибутор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел./Факс (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

