



Гладкият път към Вашето ОКОНЧАТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

TEMPSMART™ DC
от GC

Двойно полимеризиращ
комполит за временни корони
и мостове

GC

TEMPSMART DC от GC

Открийте последната иновация:
здрава, бърза ... брилянтна!

Временните възстановявания играят важна роля в стоматологията. Те не само защитават препарирания зъб, но осигуряват **комфорт и естетика**, докато пациентът Ви чака окончателното си възстановяване. GC представя нова технология чрез TEMPSMART DC, осигурявайки лесни временни възстановявания. TEMPSMART DC е **първият временен материал без пластификатор, с двойно полимеризиране, разработен, за да направи работата на стоматолога по-лесна и по-приятна.**


Предприемете УМНИЯ път

TEMPSMART DC може да бъде **фотополимеризиран**, което Ви предлага голямо предимство: да контролирате момента на втвърдяване и да оптимизирате окончателното полимеризиране. Това позволява **по-лесна и ефикасна** процедура, с която **спестявате значително време**. Фотополимеризирането също така подобрява физическите качества на временното възстановяване, по-специално флексуралната му якост.



екстраорално
фотополимеризиране

TEMPSMART DC време на процедурата в сравнение с някои конкуренти (мин)

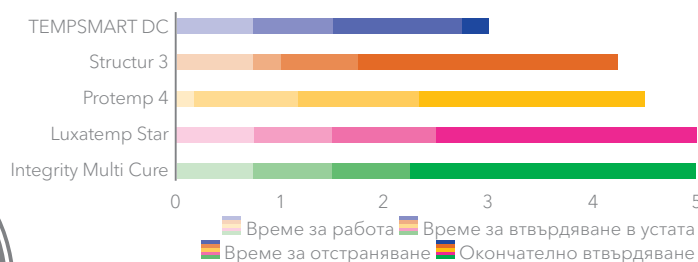


Източник: GC R&D, Япония 2018. Налични данни.

Изберете БЕЗОПАСНИЯ път

Дългите полимерни вериги формират **полимерна мрежа с голяма плътност**, водеща до изключително **висока фрактурна здравина**. Това го превръща в много подходящ материал за дълготрайни временни конструкции и многочленни мостове.

Фрактурна якост
в сравнение с конкурентни продукти (MPa·m^{1/2})

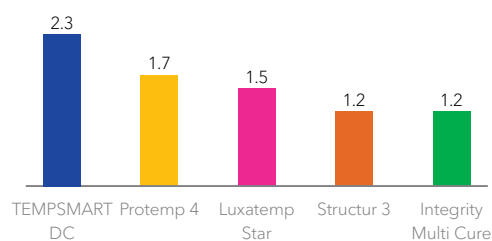

Източник: GC R&D, Япония 2018. Налични данни.

Вземете ГЛАДКИЯ път

TEMPSMART DC се предлага в **1:1 дозираща система** и не използва пластификатор в състава си. Това осигурява отлична полимеризация за твърда, **гладка, незалепаща повърхност** без почти никакъв инхибиращ слой. Ето защо, гингивата се възстановява по-добре и плаката се отстранява по-лесно.



Сравнение между стандартна 10:1 картуша с пластификатор (ляво) и резултат, постигнат с 1:1 картуша от TEMPSMART DC без пластификатор (дясно).



Голямата якост на фрактуриране го превръща в идеален материал за дистални възстановявания

1. Начален изглед.
2. Инжектиране на TEMPSMART DC в отпечатъка.
3. Отстраняване на отпечатъка 2'00"-2'30" след началото на смесване. Фотополимеризиране за 5 сек на повърхност след премахване на излишъка.
4. След полиране: циментиране на моста с Freegenol или Fuji TEMP LT.



Предоставено от Д-р. С. Lampron, Германия

Бъдете горди с ЩАСТЛИВИ пациенти!

Благодарение на нелепливата си повърхност, постигате красиви резултати само с няколко стъпки за полиране

1. Начален изглед.
2. След инжектиране на TEMPSMART DC и поставянето му в устата, възстановяването е отстранено след 2'30" и фотополимеризирано.
3. Окончателно полиране в няколко стъпки.
4. Окончателно възстановяване с голям блясък.



Предоставено от Д-р. J. Taria Guadix, Испания

Поемете по КРАСИВИЯ ПЪТ

TEMPSMART DC е наличен в **6 цвята**, всички с **естествена флуоресценция**. Благодарение на интелигентната технология на пълнителя, той се **полира лесно** до значително **голям блясък**.



Изберете голям блясък, постигнат с ръчно полиране или индивидуализиране с OPTIGLAZE color - подсилено наночистици покритие (GC).



TEMPSMART DC от GC

Лекият път към Вашите възстановявания

Предприемете ИНТЕЛИГЕНТНИЯ път

Кратка процедура благодарение на удобното си фотополимеризиране



TEMPSMART DC, 48 ml картуша, 16 смесителни накрайници EEP

Номер	12770	12771	12772	12773	12774	12775
Цвят	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

Изберете БЕЗОПАСНИЯ път

Голяма фрактурна якост за временни възстановявания, които остават

Вземете ГЛАДКИЯ път

Незалепащи възстановявания с голям блясък само в няколко стъпки

Поемете по КРАСИВИЯ път

Флуоресценция и дълготраен блясък за усмихнати пациенти



TEMPSMART DC, 10 ml картуша, 10 смесителни накрайници EEP

Номер	12776	12777	12778	12779
Цвят	A1	A2	A3	B1

Свързани продукти



Резбазиране

Unifast III



Поправка

G-aenial Universal Injectable



Индивидуализиране

OPTIGLAZE color



Временно циментиране

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Сваляне на корони

PLIERS

FREEGENOL, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color и UNIFAST Trad са търговски наименования на GC.
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 и Structur 3 не са търговски наименования на GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

