

TEMPSMART™ DC

Den lige vej til den endelige restaurering

Dualhærdende komposit til midlertidige kroner og broer



TEMPSMART DC fra GC

Oplev den ultimative nyskabelse: stærk, hurtig og...fantastisk!

Den midlertidige restaurering er af vigtig betydning. Den beskytter ikke bare de præparerede tænder, den skal også være **pladsholder, komfortabel, æstetisk og brugbar** indtil den endelige restaurering påsættes. GC introducerer den nye TEMPSMART DC som gør det nemmere og hurtigere at lave midlertidige restaureringer. TEMPSMART DC er det første midlertidige materiale som er fri for blødgøringsmiddel og **som er dualhærdende med det formål at gøre arbejdet lettere for tandlægen.**


Tag den SMARTE vej

TEMPSMART DC kan **lyshærdes** hvilket er en stor fordel: Du kan **kontrollere afbindingen** og den endelige hærdning optimeres. Dermed opnår du en **hurtigere og mere effektiv** procedure som **sparer dig for meget tid**. Lyshærdningen styrker desuden den midlertidige restaurering, specielt bøjestykken.



Lyshærdning extra-oralt

TEMPSMART DC procedure over tid sammenlignet med konkurrenterne (min)

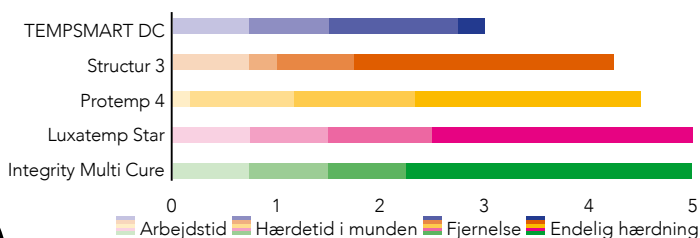


Kilde: GC R&D, Japan 2018, interne data.

Tag den SIKRE vej

De **lange polymerkæder** er med til at **øge bøjestykken og brudstyrken**, hvilket gør den ideel til langtidsprovisorier. Det betyder at risikoen for **brud er langt mindre** og dermed oplever du **færre omlavninger**; Du sparer tid og penge.

Brudstyrke sammenlignet med konkurrenterne ($\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$)

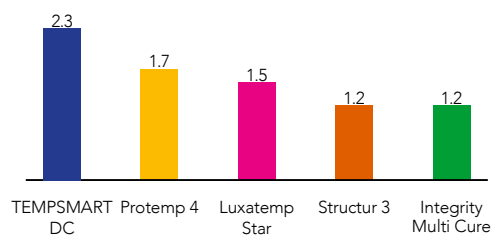

Kilde: GC R&D, Japan 2018, interne data

Tag den ENKLE vej

TEMPSMART DC findes i **1:1 systems**, og indeholder ikke blødgørende midler. Det sikrer en **optimal hærdning, en glat og ikke-klistret overflade** med næsten intet iltinhiberet lag. Dermed kan gingiva bedre hele og plak fjernes let.



Sammenligning af traditionel 10:1 magasin med blødgørende midler (venstre) versus resultat opnået med 1:1 magasin af TEMPSMART DC uden blødgørende midler (højre).

Det stærke materiale gør den ideel til posteriore midlertidige broer

1. Initial situation.
2. Applicering af TEMPSMART DC i aftrykket.
3. Fjernelse af aftrykket 2'00"-2'30" efter start af blanding. Lyshærdes i 5 sek per overflade efter fjernelse af overskud.
4. Efter polering: cementering af broen med Freegenol eller Fuji TEMP LT.



Tak til Tdl. C. Lampson, Tyskland

Vejen til den GLADE patient!

Takket være den glatte overflade og et par enkle pudsetrin opnås hurtigt et smukt resultat

1. Initiale situation.
2. Efter applicering af TEMPSMART DC og placering i munden kan restaureringen fjernes efter 2'30" min og lyshærdes.
3. Endelig polering med et par enkle trin.
4. Endelig restaurering med høj glans.



Tak til Tdl. J. Tapia Guadix, Spanien

Tag den SMUKKE vej

TEMPSMART DC fås i **6 farver**, alle med **naturlig fluorescence**. GC innovative fillerteknologi gør den **let at polere til højglans**.



Højglans med manuel polering eller karakterisering med OPTIGLAZE color nano-filled coating (GC).



TEMPSMART DC fra GC

Den lige vej til den endelige restaurering

Tag den SMARTE vej

Kort arbejdsproces takket
være lyshærdningen



Tempsmart DC, 48 ml magasin 16 blandespidser						
Ref.	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Farve	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

Tag den SIKRE vej

Holdbare
restaureringer med høj
brudstyrke

Tag den ENKLE vej

Opnå hurtig højglans
med enkle trin

Tag den SMUKKE vej

Fluorescence og holdbar
glans til glæde for dine
patienter



Tempsmart DC, 10 ml sprøjte, 10 blandespidser				
Ref.	10001479	10001480	10001481	10001482
Farve	A1	A2	A3	B1

Relaterede produkter



Rebasering

Unifast III



Reparation

G-ænial Universal
Injectable



Karakterisering

OPTIGLAZE color



Midlertidig cementering

FREEGENOL GC Fuji TEMP LT



Kronefjerner

GC PLIERS

FREEGENOL, G-ænial Universal Injectable, OPTIGLAZE color and UNIFAST Trad er GC varemærker.
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 and Structur 3 er ikke varemærker hos GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC Nordic Danish Branch

c/o Andersen Partners
Advokatpartnerselskab
Buen 11, 6
DK-6000 Kolding
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/da-DK>