

# TEMPSMART™ DC

Lihtsam tee lõpliku restauratsioonini

Kahelikõvastuv komposiit  
ajutisteks kroonideks ja sildadeks



# TEMPSMART DC GC-It

## Avastage tipptasemel innovatsioon: tugev, kiire ja suurepärane!

Ajutised restauratsioonid on restauratiivses hambaravis üliolulised. Need ei kaitse üksnes prepareeritud hambaid, vaid on ka **mugavad ja esteetilised**, kuni patsient ootab lõplikku restauratsiooni. GC tõi turule uue tehnoloogiaga TEMPSMART DC, mis teeb ajutiste materjalide kasutuse nutikamaks. TEMPSMART DC on **esimene plastifikaatoritevaba kahelikõvastuv ajutine materjal, mis on loodud selleks, et teha hambaarsti töö lihtsamaks ja nauditavamaks.**


### Valige TARGEM tee

TEMPSMART DC-d saab **valguskõvastada**, mis annab järgmised eelised: võimaldab kontrollida kõvastumishetke ja tagab parema lõpliku polümeriseerumise. See garanteerib **lihtsama ja tõhusama** protseduuri, **säästes teile aega**. Valguskõvastamine parandab ka ajutise restauratsiooni füüsikalisi omadusi, eriti paindetugevust.



Ekstraoraalne valguskõvastamine

TEMPSMART DC protseduurile kuluv aeg võrdluses konkurentidega (min)

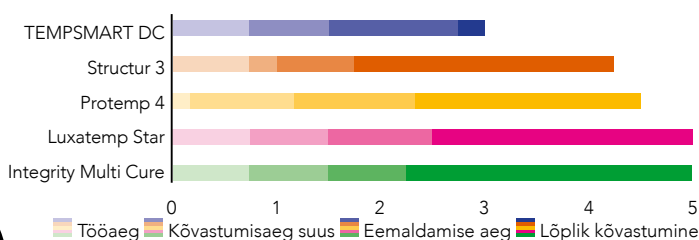


Allikas: GC R&D, Jaapan 2018, olemasolevad andmed.

### Valige OHUTUM tee

Pikad polümeerahelad moodustavad **eriti tiheda polümeervõrgu**, millel on erakordselt suur **murdumistugevus**. Seetõttu sobib see ideaalselt pikemaajalisteks ajutisteks lahendusteks ja suuremateks sillatöödeks

Murdumistugevus võrdluses konkurentidega (MPa·m<sup>1/2</sup>)

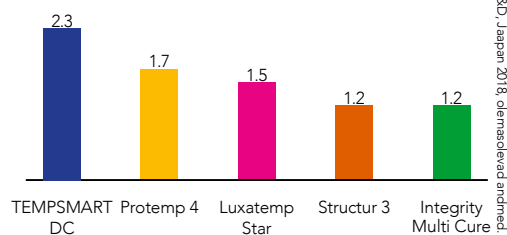

Allikas: GC R&D, Jaapan 2018, olemasolevad andmed.

### Valige KERGEM tee

TEMPSMART DC on **1:1 pakendisüsteemis** ja see ei sisalda plastifikaatoreid. See tagab kõvade, **siledade, mittekleepuvate pindade** puhul suurepärase polümerisatsiooni ilma inhibitsioonikihita. Seeläbi tervenevad igemed kiiremini ja hambakattu on lihtne eemaldada.



Traditsioonilise plastifikaatoritega 10:1 (padrun vasakul) tulemuste võrdlus plastifikaatoriteta TEMPSMART DC-ga 1:1 (padrun paremal).

Suure murdumistugevuse tõttu on see ideaalne materjal tagahammaste sildade puhul

1. Esialgne olukord.
2. TEMPSMART DC aplitseerimine jäljendisse.
3. Jäljendi eemaldamine 2'00"-2'30" minutit pärast segamise alustamist. Valguskõvastamine 5 sekundit pinna kohta pärast üleliigse materjali eemaldamist.
4. Pärast poleerimist: silla tsementeerimine Freegenoli või Fuji TEMP LT-ga.



Autor dr. C. Lampson, Saksamaa

## Tundke uhkust ÕNNELIKU patsiendi üle!

Mittekleepuv pind võimaldab saavutada ilusaid tulemusi vähese poleerimisega

1. Esialgne olukord.
2. Pärast TEMPSMART DC aplitseerimist ja suhu paigutamist eemaldatakse restauratsioon 2 minuti ja 30 sekundi jooksul ja valguskõvastatakse.
3. Restauratsiooni lõplik poleerimine käib lihtsalt.
4. Lõplik ajutine restauratsioon kõrgläikega.



Autor dr. J. Tapia Guadix, Hispaania

## Valige ESTEETILISEM tee

TEMPSMART DC on saadaval **6 värvitoonis**, mis kõik sisaldavad **naturaalset fluorestsentsi**. Nutika täiteosakeste tehnoloogia tõttu on **poleerides võimalik lihtsalt** saavutada muljetavaldavalt **hea läige**.



Valige kõrgläike saavutamiseks käsitsi poleerimine kummidega või isikupärastamist võimaldav OPTIGLAZE color nanotäiteosakeste tugevdatud kattematerjal.



# TEMPSMART DC GC-It

Lihtsam tee lõpliku restauratsioonini

## Valige TARGEM tee

Lühem protseduuriaeg tänu valguskõvastamise võimalusele



## Valige OHUTUM tee

Suure murdumistugevusega pikaajalised ajutised restauratsioonid

## Valige KERGEM tee

Mittekleepuvad restauratsioonid võimaldavad saavutada kõrgläiget väheste sammudega



## Valige ESTEETILISEM tee

Fluorestsentsus ja pikaajaline läige naeratavale patsiendile

TEMPSMART DC, 48 ml padrun, 16 segamisotsikut						
Tellimiskood	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Värvitoon	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 ml padrun, 10 segamisotsikut				
Tellimiskood	10001479	10001480	10001481	10001482
Värvitoon	A1	A2	A3	B1

## Seotud tooted



Ümberbaseerimine

Unifast III



Parandus

G-aenial Universal Injectable



Isikupärastamine

OPTIGLAZE color



Ajutine tsementeerimine

FREEGENOL GC Fuji TEMP LT



Krooni eemaldaja

GC PLIERS

FREEGENOL, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color ja UNIFAST Trad on GC kaubamärgid. Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 ja Structur 3 ei ole GC kaubamärgid.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC Nordic esindaja Eestis

Mob. +372.520.87.18  
Christine.Kuusmaa@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/et-EE>