

TEMPSMART™ DC

Den rette vei til den endelige restaurering

Dualherdende kompositt til midlertidige kroner og broer



TEMPSMART DC fra GC

Opplev den ultimative nyskapelse:
sterk, hurtig og...fantastisk!


Den midlertidige restaurering er viktig. Den beskytter ikke bare de preparerte tenner, den skal også være **plassholder, komfortabel, estetisk og brukbar** inntil den endelige restaurering settes på. GC introduserer den nye TEMPSMART DC som gjør det enklere og hurtigere å lage midlertidige restaureringer. TEMPSMART DC er det første midlertidige materiale som er fri for bløtningsmiddel og som er dualherdende med formålet å gjøre arbeidet lettere for tannlegen.

Ta den SMARTE veien

TEMPSMART DC kan **lysherdnes**, og det er en stor fordel: Du kan **kontrollere polymeriseringen**, og den endelige herdeprosess optimeres. Dermed oppnår du en **hurtigere og mere effektiv** prosedyre som **sparer deg for mye tid**. Lysherdningen styrker dessuten den midlertidige restaurering, spesielt bøyestyrken.




Lysherdning extra-oralt

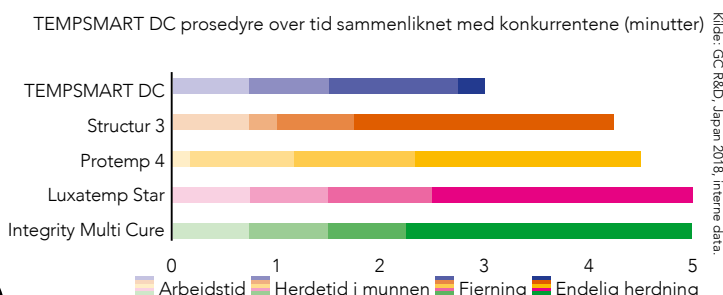

Ta den SIKRE vei

De **lange polymerkjeder** er med på å **øke bøyestyrken og bruddstyrken**, hvilket gjør TEMPSMART DC ideell til langtidsprovisorier. Det betyr at risikoen for **brudd er langt mindre** og dermed opplever du **færre omgjøringer**; Du sparer tid og penger.

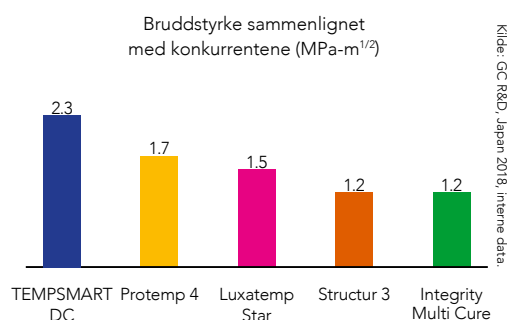

Ta den ENKLE vei

TEMPSMART DC finnes i **1:1 systemer**, og inneholder ikke bløtningsmidler. Det sikrer en **optimal herdning, en glatt og ikke-klebrig overflate** med nesten fravær av oksygeninhibert lag. Dermed kan gingiva bedre tilhele og plakk fjernes enkelt.



Sammenlikning av tradisjonell 10:1 magasin med bløtningsmidler (venstre) versus resultat oppnådd med 1:1 magasin av TEMPSMART DC uten bløtningsmidler (høyre).

Det sterke materialet gjør TEMPSMART DC ideell til posteriore midlertidige broer

1. Initial situasjon.
2. Applisering av TEMPSMART DC i avtrykket.
3. Fjerning av aftrykket 2'00"-2'30" etter start av blanding. Lysherdes i 5 sek per overflate, etter fjerning av overskudd.
4. Etter polering: Sementerering av broen med Freegenol eller Fuji TEMP LT.



Takk til Tnl. C. Lampson, Tyskland

Veien til den GLADE pasient!

Takket være den ikke-klebrige overflate og et par enkle pussetrinn oppnåes hurtig et pent resultat

1. Initiale situasjon.
2. Etter applisering av TEMPSMART DC og plassering i munnen kan restaureringen fjernes etter 2'30" min og lysherdes.
3. Endelig polering med et par enkle trinn.
4. Endelig restaurering med høy glans.



Takk til Tnl. J. Tapia Guadix, Spania

Ta den VAKRE vei

TEMPSMART DC fås i **6 farver**, alle med naturlig fluorescence. GC smarte filler-teknologi gjør den lett å polere til høyglans.



Høyglans med manuell polering eller karakterisering med OPTIGLAZE color nano-filled coating (GC).



TEMPSMART DC fra GC

Den rette vei til den endelige restaurering

Ta den SMARTE vei

Kort arbeidsprosess
takket være lysherdningen



Ta den SIKRE vei

Holdbare restaureringer
med høy bruddstyrke

Ta den ENKLE vei

Oppnå hurtig høyglans
med enkle trinn



Ta den VAKRE vei

Fluorescence og holdbar
glans til glede for dine
pasienter

TEMPSMART DC, 48 ml magasin 16 blandespisser						
Ref.	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Farve	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 ml sprøyte, 10 blandespisser				
Ref.	10001479	10001480	10001481	10001482
Farve	A1	A2	A3	B1

Relaterte produkter



Rebasering

Unifast III



Reparasjon

G-aenial Universal
Injectable



Karakterisering

OPTIGLAZE color



Midlertidig sementering

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Fjerning av kroner

PLIERS

Freegenol, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color, FREEGENOL, Fuji TEMP LT, UNIFAST Trad og PLIERS er GC varemerker. Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 and Structur 3 er ikke varemerker hos GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

NORDIC AB

Scandinavian Trade Building
Gydevang 34-41
DK-3450 Allerød
Tel. +45.51.15.03.82
info.denmark@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/no-NO>