

Tooth Mousse и MI Paste Plus: за здрави зъби и красива усмивка

Нанасяне

Истискайте малко количество Tooth Mousse от тубата върху пръста си и го нанесете върху зъбните повърхности, пръстените и брекетите, както Ви е препоръчал Вашият стоматолог. Използвайте езика си, за да разнесете крема върху всички тези трудни за достигане области. За максимален ефект, оставете го върху зъбите възможно най-дълго.

Минималното препоръчително време за нанасяне е три минути. В края на нанасянето, може да изплюете или преглътнете Tooth Mousse.

Не забравяйте винаги да затваряте тубата и да почиствате излишъка от тубата на Tooth Mousse.



Dr. D. Mahony, Australia

Система за естествена защита

Tooth Mousse и MI Paste Plus

Tooth Mousse и MI Paste Plus са кремове / пасты, които съдържат същите природни калциеви и фосфатни йони, налични в млякото. MI Paste Plus съдържа също и флуор. Тези минерали защитават Вашите зъби и могат да заздравят областите, където минералите вече са загубени.



CPP-ACP е разработен в School of dental Science към и University of Melbourne Victoria / Australia. RECALDENT™ се използва под лиценз на RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™, CPP-ACP е дериват от млечен казеин и не трябва да бъде използван при пациенти с алергия към протеин и / или хидроксibenзоати.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Силни,
здрави и
красиви ЗЪБИ
по време и след
ортодонтско
лечение

Намалете риска от бели
петна, използвайки защитни
продукти като **Tooth Mousse**
и **MI Paste Plus**.



Част от програмата Минимална
Интервенция на GC.

z O LF BG 12 21 05/11

Запазване на ЗДРАВИТЕ ЗЪБИ по време на ОРТОДОНТСКО лечение

По време на ортодонтско лечение е важно да запазите здрави зъбите си. Никой не желае да види бели петна върху зъбите си след лечението - те са предотвратими!

Ортодонтски бели петна

Белите петна са признак за ранна деминерализация на зъба - зоните, в които са били загубени минерали са причинени от киселината, продуцирана от бактериите в плаката. Това се случва главно около брекетите, където плаката се натрупва лесно.



Декалцификация след ортодонтско лечение




След редовна употреба на Tooth Mousse

Prof. L. Walsh, University of Queensland, Australia

Науката в подкрепа на усмивката

Клинични изпитания показаха ползата от употребата на Tooth Mousse и MI Paste Plus за възстановяване на белите петна¹, и тяхното използване при редуциране на негативния ефект от натрупването на плака по време на ортодонтско лечение².

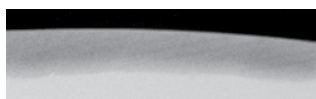

Емайлт с бели петна изглежда по този начин на микрорадиограф



При третитане само с флуор минералите се отлагат само върху горната повърхност на бялото петно



При третиране с Tooth Mousse минералите имат възможност да проникнат дълбоко в бялото петно

1. Bailey, D. L., Adams, G. G., Tsao, C. E., Hyslop, A., Escobar, K., Manton, D. J., Reynolds, E. C. & Morgan, M. V. (2009) Regression of Post orthodontic lesions by a remineralising crème. J Dent Res 88(12):1148-1153.
2. van der Veen MH, Beerens MW, van Beek H, ten Cate JM. (2009) Changes in Plaque Composition after Orthodontic treatment; the influence of CPP-ACP-F Paste. Caries Res, 43:179-244 abstr 57.

Здравословна ДИЕТА за здрави зъби

Здравословната диета по време на ортодонтското лечение ви помага да поддържате зъбите си в добра форма.

Съвети за здравословна диета:

- Хранете се с плодове и зеленчуци
- Пийте плодови сокове и други напитки, които не са подсладени
- Приемайте напитки, които са с изкуствени подсладители, несъдържащи захар
- Избягвайте храни, бонбони и закуски, които съдържат захар
- Избягвайте закуски и бонбони, които се полепват върху зъбите ви (например дъвчащи бонбони)



Поддържайте ЗЪБИТЕ СИ ЧИСТИ по време на ОРТОДОНТСКО лечение

Orthodontic

Четкане и почистване с конец
Уверете се, че внимателно измивате зъбите си два пъти дневно с мека четка за зъби, както и около ортодонтските брекети и дъги. Ако носите ластици, сваляйте ги преди миенето на зъбите и почистването с конец, след което веднага ги поставете отново. Миенето на зъбите с флуорни пасти за зъби също предпазва от бели петна.



Почиствайте с конец поне веднъж дневно. Налични са специални конци за зъби, които Ви помагат да влезете в пространството между дъгата и венеца. Попитайте своя ортодонт или стоматолог за съвети и препоръки.

Проверявайте плаката

Гелът за различаване на плаката я оцветява в устата Ви в розово - виолетов или син цвят. Плаката, която се е натрупвала поне 24-48 часа е по-сериозна и съдържа повече бактерии; тази плака се оцветява в син вместо в розов цвят.

Може да използвате гела за разкриване на плаката, за да определите и рН на плаката - това ще Ви покаже къде бактериите произвеждат най-много киселина, увреждаща зъбите Ви.



Dr. I. Miletic, Хърватия

Използването на агент за откриване на плаката вкъщи Ви помага да локализирате плаката в трудно достижимите области около брекетите и Ви показва, къде е необходимо да отделите повече внимание.