

Tooth Mousse en MI Paste Plus: voor gezonde tanden en een prachtige glimlach

Toepassing

Knijp een kleine hoeveelheid Tooth Mousse uit de tube op uw vinger en breng de mousse volgens de aanwijzingen van uw tandarts op de tandoppervlakken, bandjes en brackets aan. Gebruik uw tong om de mousse over moeilijk bereikbare delen te verspreiden. Laat de mousse voor het beste resultaat zo lang mogelijk zitten.

De minimaal aanbevolen inwerktijd bedraagt drie minuten. Aan het eind van de inwerktijd mag u de mousse uitspugen of de resterende Tooth Mousse doorslikken.

Vergeet niet om altijd de dop weer terug op de tube te schroeven en eventuele overtollige Tooth Mousse van de opening te verwijderen.



Dr. D. Mahony, Australia

Natuurlijk beschermingssysteem

Tooth Mousse en MI Paste Plus

Tooth Mousse en MI Paste Plus zijn crèmes/pasta's die hetzelfde natuurlijke calcium en fosfaat bevatten als melk. MI Paste Plus bevat als extra ook fluoride. Deze mineralen beschermen uw tanden en kunnen zwakke plekken beschermen waar de mineralen al zijn verdwenen.



CPP-ACP is ontwikkeld aan de School of Dental Science van de Universiteit van Melbourne in Victoria, Australië. RECALDENT™ wordt gebruikt onder licentie van RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP is een derivaat van melkcaseïne en mag niet worden gebruikt bij patiënten met een allergie voor melkeiwitten en/of hydroxybenzoesaat.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-NL>

Tooth Mousse en MI Paste Plus

Sterke, gezonde en mooie tanden tijdens
en na de orthodontische behandeling

Verklein het risico van witte vlekken
door preventieve producten te gebruiken
zoals Tooth Mousse en MI Paste Plus.



Maakt deel uit van het Minimale
Interventie-programma van GC.



Uw tanden gezond houden tijdens de orthodontische behandeling

Het is belangrijk dat u uw tanden tijdens de orthodontische behandeling gezond houdt. Niemand wil na de behandeling witte vlekken op zijn of haar tanden zien – ze kunnen worden voorkomen!

Orthodontische witte vlekjes

Witte vlekken zijn een teken van beginnend tandbederf en vindt plaats op plekken waar mineralen in de tand worden opgelost door het zuur dat bacteriën in plak produceren. Dit gebeurt hoofdzakelijk naast de brackets waar plak zich gemakkelijk ontwikkelt en waar poetsen met een tandenborstel lastig is.



Ontkalking na orthodontische behandeling




Na regelmatig gebruik Tooth Mousse

Prof. L. Walsh, University of Queensland, Australië

De wetenschap achter de glimlach

Er is een klinisch onderzoek uitgevoerd over het gebruik van Tooth Mousse en MI Paste Plus om witte vlekken weer te doen verdwijnen¹, en om de negatieve effecten van plakophoping tijdens de orthodontische behandeling te verminderen².

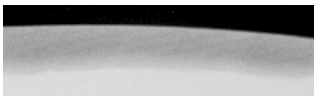

Glazuur met een witte vlek ziet er zo uit op een microradiogram



Na behandeling met alleen fluoride hebben de mineralen de neiging om op het buitenoppervlak van de witte vlek naar te slaan



Na behandeling met GC Tooth Mousse kunnen de mineralen helemaal in de witte vlek doordringen

- Bailey, D. L., Adams, G. G., Tsao, C. E., Hyslop, A., Escobar, K., Manton, D. J., Reynolds, E. C. & Morgan, M. V. (2009) Regression of Post orthodontic lesions by a remineralising crème. J Dent Res 88(12):1148-1153.
- van der Veen MH, Beerens MW, van Beek H, ten Cate JM. (2009) Changes in Plaque Composition after Orthodontic treatment; the influence of CPP-ACP-F Paste. Caries Res, 43:179-244 abstr 57.

Een gezond dieet voor gezonde tanden

Door tijdens de orthodontische behandeling gezond te eten, helpt u uw tanden in goede staat te houden.

Tips voor een gezond dieet:

- Eet groenten en fruit
- Drink vruchtensap en andere ongezoete dranken
- Drink vloeistoffen die kunstmatig zijn gezoet en geen suiker bevatten
- Vermijd voedingswaren als snoep en snacks die suiker bevatten
- Vermijd snacks en snoep welke aan uw tanden blijven plakken (zoals toffees).



De tanden goed schoon houden tijdens de orthodontische behandeling

Poetsen en flossen

Zorg dat u uw tanden tweemaal per dag met een zachte tandenborstel poetst; poets ook rondom de orthodontische brackets en draden. Als u elastiekjes gebruikt, moeten deze voor het poetsen en flossen worden verwijderd en daarna onmiddellijk worden teruggeplaatst. Als u uw tanden met fluoride houdende tandpasta poetst, helpt dit ook om witte vlekken te voorkomen.



Flos ten minste eenmaal per dag. Er zijn speciale flosproducten verkrijgbaar waarmee u de ruimten tussen de tanden en bij uw tandvlees goed kunt bereiken. Vraag uw orthodontist en tandarts om advies en aanbevelingen.

Houd plak onder controle

Disclosinggel kleurt de plak in uw mond rozeachtig paars of blauw. Plak die ten minste 24-48 uur oud is, vormt een ernstiger bedreiging en bevat meer bacteriën; deze plak kleurt in plaats van roze, blauw.

U kunt de plak disclosinggel ook gebruiken om de zuurgraad (pH) van plak te meten – dit maakt duidelijk waar de bacteriën het meeste zuur produceren en uw tanden aantasten.



Dr. I. Miletic, Kroatië

Door thuis disclosinggel te gebruiken, kunt u de plak op moeilijk bereikbare plaatsen om de brackets en elastiekjes opsporen en kunt u zien waar u extra aandacht aan moet besteden.