

Tri Plaque ID Gel™

Ainutlaatuinen, kolmivärinen plakinvärjäysgeeli, joka tunnistaa uudet, vanhat ja happoa tuottavat plakkikerrokset

Näe niin uskot!



Osa GC:n kudosta säästävää hoito-ohjelmaa








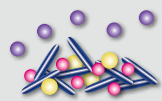
Since 1921
100 years of Quality in Dental



Useinhan ihmisten on nähtävä uskoakseen.

GC Tri Plaque ID -geeli paitsi **osoittaa eron vanhan ja uuden plakin välillä**, tämä ainutlaatuinen geeli **myös paljastaa tarkasti, missä bakteerit ovat aktiivisimpia** osoittamalla happaman pH:n. Tämä lisätieto on suureksi avuksi päivittäisessä työssäsi motivoiessasi potilaita huolehtimaan suuhygieniastaan paremmin.

Tri Plaque ID -geeli =  Sininen pigmentti  Punainen pigmentti  Sakkaroosi
 Asido-fiiliset  Bakteerit



UUSI PLAKKI

Kun plakkikerrosta on vähän, sininen pigmentti huuhtoutuu helposti pois ja jättää jälkeensä punaisen pigmentin, joka näyttää punaisen/vaaleanpunaisen tuloksen.




VANHA PLAKKI (>48 H)

Kun plakkikerros on vanhaa, se on rakenteeltaan tiheää, joten sekä sininen että punainen pigmentti tarttuvat siihen ja tuloksena on sininen/violetti kerros.



ERITTÄIN KORKEAN RISKIN PLAKKI

Korkean riskin plakin sisältämät asido-fiiliset bakteerit hajottavat GC Tri Plaque ID -geelin sisältämän sakkaroosin. Tuloksena oleva happo alentaa plakin pH-arvoa (<pH4,5), joten punainen pigmentti ei näy vaan väri on vaaleansininen.

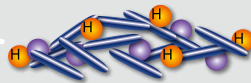

Tri G. Ghani, Iso-Britannia

Kolme väriä, kolme helppoa vaihetta potilaan motivoimiseksi.

1 Levitä geeli vanupuikolla, mikroharjalla tai vanupallolla.

2 Huuhtelee alue varovasti.
Plakki näkyy kolmena eri värinä:

- punainen / vaaleanpunainen - vastamuodostunut plakki
- sininen / purppura - vanha plakki (yli 48 tuntia)
- vaaleansininen - korkean riskin plakki

Pakkaus

004273 40 g:n putkilo (36 ml) plakinvärjäysgeeliä.

3 Diagnoosin jälkeen hampaat puhdistetaan harjaamalla.



Kun pyritään ennaltaehkäisevään hammashoittoon, sinä ja potilaasi tarvitsevat mahdollisimman paljon keinoja parhaan mahdollisen suun terveyden saavuttamiseen. GC Tri Plaque ID -geelistä voi tulla arvokas osa päivittäisiä diagnosointiritutieneja.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.738.66.35
info.finland@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/fi-FI>