

HANTERING STEG FÖR STEG

Exempel GC UNIFAST TRAD



Patient med krona av metallbundet porslin som skall ersättas



Avtryckstagning före preparation



Färdig preparation



Blanda GC UNIFAST TRAD i 10-15 sek.



Fyll avtrycket med blandad GC UNIFAST TRAD



Placera i munnen




Avlägsna 2 min. 30 sek. efter start av tillblandningen. Materialet når en temperatur av $\pm 40^{\circ}\text{C}$



Temporär krona före finishering



Finishering av den temporära kronan 4 min. efter start av tillblandning

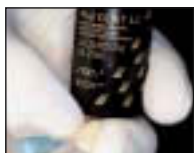

En skinande yta erhålles genom applikation av GC Fuji COAT LC



Cementera den temporära kronan gjord av GC UNIFAST TRAD med GC Freegenol



Slutligt resultat

GC PRODUKTER FÖR TEMPORÄRA RESTAURATIONER. EN ÖVERSIKT

GC PROVITEC

Temporärt kron och bro material med Bis-akryl kompositbas



GC FREEGENOL

Eugenolfritt temporärt kron och bro cement



GC K.Y. PLIER

Tång för avlägsnande av temporära protetiska ersättningar



FÖRPACKNINGAR

GC UNIFAST TRAD



• REFILLFÖRPACKNINGAR

100 g pulver, ivory, N.3X, N.8
250 g pulver, ivory, N.3X, N.8
1 kg pulver, ivory, N.3X, N.8
100 g vätska
250 g vätska

GC UNIFAST LC



• INTRODUKTIONSFÖRPACKNING

30 g pulver A2, A3, B2, B3, C2, translucent
Vätska 2 x 60 g

• REFILLFÖRPACKNINGAR

50 g pulver A2, A3, B2, B3, C2, translucent
2 x 15 g vätska

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
E-mail info@gceurope.com
http://www.gceurope.com


GC EUROPE N.V.
Scandinavian Office
Kungspörsen 4 A
S - 427 50 Billdal
Tel. +46 31 939553
Fax. +46 31 914246
E-mail info@scandinavia.gceurope.com
http://scandinavia.gceurope.com

z O L F SW 6 35 - 07/99

GC
FIRST IS QUALITY

GC UNIFAST

TEMPORÄRT KRON OCH BRO
MATERIAL MED AKRYLATBAS

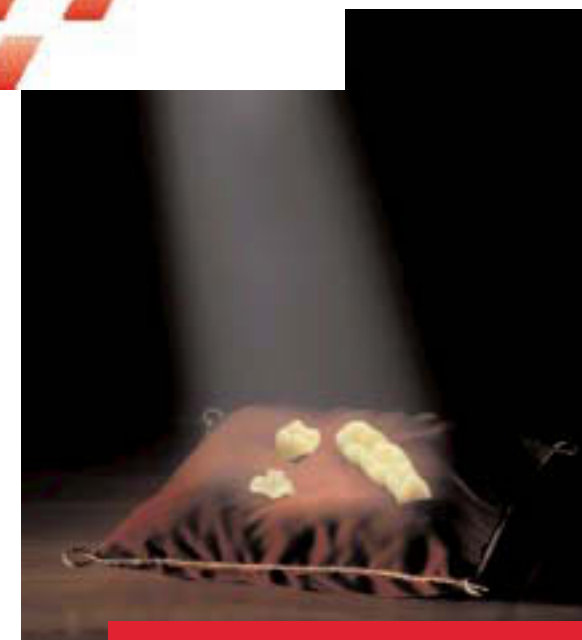

GC UNIFAST I BLICKFÅNGET

- EKONOMISK
- INTELLIGENT STELNINGSKURVA MED MINNEEFFEKT
- SNABB OCH KONTROLLERBAR (LJUSPOLYMERISERING) ARBETSTID

Vita är ett registrerat varumärke av Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland

GC UNIFAST

FRÅN PROBLEM TILL LÖSNING

Temporär behandling av preparerade tänder och apalier är en väsentlig del av ett lyckat protetiskt arbete med god passform. Hänsyn måste tas till såväl funktionella, periodontiska och estetiska aspekter. Klinisk erfarenhet visar att ett enda material inte kan uppfylla alla dessa önskemål.

Beaktande dessa frågor har GC utvecklat **GC UNIFAST TRAD** och den ljuspolymeriserande motsvarigheten **GC UNIFAST LC** båda precis matchande användarnas behov.

Korttids, temporära restaurationer, den mest vanliga indikationen, ställer väldigt speciella krav på materialet, såsom;

- snabb behandling
- problemfritt avlägsnande under stelningsfasen
- ekonomiskt.

GC UNIFAST¹, baserat på resin av metylmetakrylat, uppfyller dessa behov superb. Fördelarna med denna typ av material matchar perfekt de speciella behoven för korttids temporära provisorier

- inlays/onlays
- singelkronor
- enkelledade mindre brokonstruktioner

¹ Denna information gäller för såväl **GC UNIFAST TRAD** som **GC UNIFAST LC**

PRODUKTKARAKTÄRISTIK

Metylmetakrylatbasen är en nyckelfaktor för lämpligheten av **GC UNIFAST** i praktiken. Den goda våtbarheten av pulvret gör det lätt att framställa en homogen blandning fri från blåsor.

GC UNIFAST's typiska gummiaktiga elasticitet ger ett problemfritt avlägsnande av den temporära restaurationen, även från preparationer med mindre underskär eller i svåråtkomliga preparationsområden.

En annan fördel är återhämtningen hos **GC UNIFAST**, mer känd som "minneseffekten". Detta motverkar effektivt långvarig deformation under avlägsnandet, vilket är ett känt problem med andra material.

För att uppfylla de estetiska behoven för en protetisk restauration, finns det ett urval av färger för båda versionerna av **GC UNIFAST**. Bra färganpassning och färgstabilitet uppfyller behoven för en tandfärgad temporär restauration.



Estetisk protetisk restauration



Problemfritt avlägsnande

PRODUKTFÖRDELAR

Mycket ekonomisk

Metylmetakrylat är kostnadseffektivt. Den handblandade versionen kräver inga kostsamma tillbehör.

GC UNIFAST TRAD – praktik-orienterad arbetstid

Denna aspekt, som är viktig för ekonomisk och tidsbesparande behandling av patienten, täcks perfekt av **GC UNIFAST TRAD**. Bara 2 min. och 30 sek. efter tillblandning kan den temporära restaurationen avlägsnas från munnen.

GC UNIFAST LC – arbete utan tidspress

Detta visar fördelen hos en specialprodukt. Ljuspolymeriseringen ger klinikern tid för justeringar och att utföra reparationer. Även mycket komplicerade indikationer kan genomföras perfekt utan tidspress.

2'30''

GC UNIFAST TRAD

Praktik-orienterad arbetstid



GC UNIFAST LC

Arbete utan tidspress