

〈CA用〉ポイントもラインナップ。 ジルコニアやプレスを含むすべてのセラミックスの 効率的な研削・研磨を実現します。



- ダイヤモンド砥粒の高密度配合により、硬いジルコニアコーピングなどを効率的に切削・調整できます。
- 用途に応じた形態・粒度を使用することで効率的な作業が行えます。
- 適切な切削感が得られ、切削痕を残さないため研磨が容易です。

《 効率的な研削・研磨方法 》

HP用



- ラボワークに適した形態バリエーションを4種類用意しました。
- 形態修正用のエクストラコース(E)と中研磨用のコース(C)の2種類からお選びいただけます。
- 切削面が均一なためポリッシング仕上げが短時間で効率よく行えます。
- 一気に切削したい、狙った分だけ一層削除したいなど思い通りの切削、調整が行えます。

CA用

咬合面コンタクト等細かいエリアの調整



128C

128M

128F

隣接面コンタクト等、広いエリアを一気に研磨したい場合



112C

112M

研磨フェルト

研磨フェルト

セラミック用研削・研磨ポイント

セラシャイン

形態●14種=CA:112C、112M、112F、128C、128M、128F
HP:101E、101C、113E、113C、115S E、115S C、115E、115C

包装●

1箱:2本入:128C、128M、128F

1箱:1本入:112C、112M、112F

101E、101C、113E、113C、115E、115C

115S E、115S C



ダイヤモンドポリッシャーペースト

歯科用ゴム製研磨材 ジーシー セラシャイン 一般医療機器 28B3X10005000011

歯科用研磨器材 ジーシー 研磨フェルト (フェルト マンドレルセット)

一般医療機器 13B3X10377000108 製造販売元:株式会社クロダブラシ 荒川工場

歯科用研磨器材 ジーシー ダイヤポリッシャーペースト

一般医療機器 23B2X00038000027 製造販売元:株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

HP用

形態番号	101E、113E、115E、115S E	101C、113C、115C、115S C
粗さ	エクストラコース (E)	コース (C)
砥粒粒度/色調	#170 / 灰	#400 / 青
用途	形態修正	中研磨



101E 113E 115E 115S E



101C 113C 115C 115S C

CA用


形態番号	112C、128C	112M、128M	112F、128F
粗さ	コース (C)	ミディアム (M)	ファイン (F)
砥粒粒度/色調	#320 / 青	#800 / 赤紫	#2000 / 橙
用途	コンタクトポイント等の初期調整	中研磨	仕上げ研磨



112C 128C



112M 128M

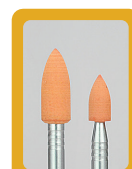

112F 128F

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2026年10月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 マシンツール中央
東京都文京区本郷3丁目2番14号 兵庫県西宮市津門大塚町7-5

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ



IC006H2610