

# デンタルプレスケールⅡ

咬合力測定システム用フィルム

保険適用

GC



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



# 咬合力測定システム用フィルム「デンタルプレスケールⅡ」&咬合力分析ソフト「バイトフォース アナライザ」は、咬合力を可視化し、客観的に把握することができる咬合力分析システムです。

咀嚼機能の維持・改善を図るためには咀嚼能力を検査し、評価することが大切です。

食べ物を「噛める」「噛めない」ということは、必要な咬合力が発揮されているか否かである、とされています。

天然歯あるいは人工歯の咬合面部に発現する咬合力は、力を発現する側の筋機能の問題と、

その力を受ける側の歯、歯根膜（義歯、粘膜）、さらには咬合が関係しています。

ジーシーの咬合力分析システムは、咀嚼機能の根源である咬合力を、

患者さんへの負担も少なく、簡便・短時間で

測定することができるシステムです。

参考文献：臨床咬合学事典。医歯薬出版株式会社、1997


咬合力測定システム用フィルム

## デンタルプレスケールⅡ

## 「ギュッ」と咬むだけ 簡単 検査

デンタルプレスケールⅡは、歯科用に設計した感圧シートを使用し、10～120MPaの幅広い帯域で咬合圧を測定可能。患者さんの負担も少なく簡単に検査が行えます。

### ■ デンタルプレスケールⅡの内部構造

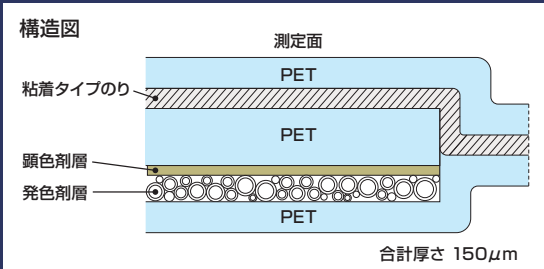

デンタルプレスケールⅡは、PETフィルムの支持体に顕色剤を塗布し、両面を極薄層のPETフィルムでラッピングしています。

### ■ 圧力フィルタ機能による自動クリーニング

圧力フィルタ機能とは、デンタルプレスケールⅡ上のノイズ（咬みしめ以外が原因の発色）が多く含まれる部位を自動的に除去する機能です。

ただし、圧力フィルタ機能による自動クリーニングのあり/なしで得られる解析結果が異なりますので、口腔機能低下症の診断における咬合力低下の基準値\*については下記をご参照ください。

圧力フィルタ機能による自動クリーニングあり/なしの場合の基準値

| 圧力フィルタ機能による<br>自動クリーニングありの場合 | 圧力フィルタ機能による<br>自動クリーニングなしの場合 |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>350N未満</b>                | <b>500N未満</b>                |

参考文献：口腔機能低下症に関する基本的な考え方。日本歯科医学会、令和6年3月



約3秒  
咬みしめる  
だけ！

デンタルプレスケールⅡを噛み  
スキャナで読み取れば  
咬合力を手軽に可視化できます



※コンピュータ、スキャナは付属しません。  
※イラストはイメージです。


咬合力分析ソフト

## バイトフォース アナライザ

## 多彩な表示機能により力の状態をビジュアルとデータで把握


読み取ったデータは咬む力の強さやバランスがひと目で確認ができ、多角的に解析が行えます。また患者さんごとに検査情報を管理することで、経過観察をスピーディに比較できます。患者さんにもわかりやすい“コミュニケーション”画面表示も可能です。

### ■ フォースバランス

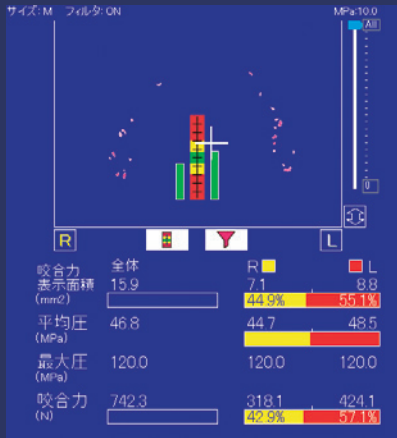

バイトフォース アナライザの基本画面です。咬合力が発現した部位と、咬合力、咬合力表示面積、最大圧、平均圧、重心の位置やバランスなどを数値とビジュアルで表示します。

### ■ クローズアップ

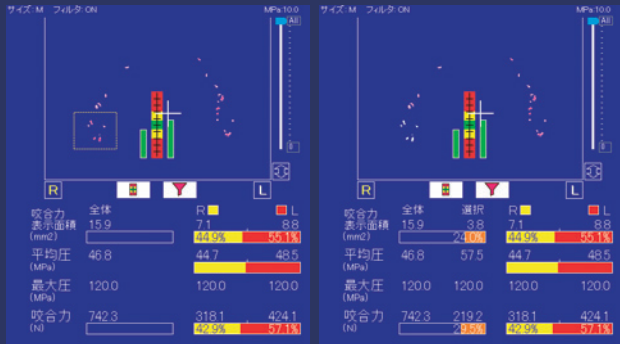

マウスをドラッグして囲むだけで、注目したい部位の、咬合力、咬合力表示面積、平均圧等を抽出し表示します。また、咬合力、咬合力表示面積の全体の値に対する割合も表示します。

### ■ アニメーション



最小圧力から順次最大へ、またはその逆を動的に表示します。圧力ごとの出現部位をひと目で把握することができます。

スクリーニング検査

術前・術後比較

経過観察

## デンタルプレスケールⅡ

再使用禁止



詳しい製品情報は

▼▼コチラ▼▼



サイズ●3種=S、M、L

包装●1箱:40枚入

歯科用咬合力計 デンタルプレスケールⅡ

一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000295

咬合力分析ソフト

## バイトフォース アナライジングセット



## ■バイトフォース アナライザ(ソフトウェア)動作環境

OS:Windows 10/11(各OS 32/64Bit版)

プログラム:Microsoft .Net Framework 4.6以上必須

CPU:Intel i3以降


メモリー:2GB以上

ディスプレイ:最低解像度 800×600以上

USBポート(2ケ):USB1.1/2.0/3.0

CD-ROMドライブ

※上記動作環境を満たしていても、全てのコンピュータでの動作を保証するものではありません。

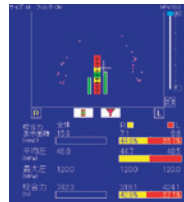

包装●バイトフォース アナライザソフトウェアCD 1枚、ライセンスドングル 1個、キャリブレーションシート 1枚、位置決めテンプレート 1枚、'デンタルプレスケールⅡの咬ませ方'マニュアル

※使用するコンピュータにはバイトフォース アナライザソフトウェアのインストール及びスキャナ接続設定が必要になります。インストール設定作業は弊社では行いませんので、予めご了承ください。

※デンタルプレスケールⅡはオクルーザー(703,705,707,709)で読み込むことはできません。

※既存製品のデンタルプレスケールは本製品のバイトフォース アナライザ(ソフトウェア)・弊社指定のスキャナシステムで読み込むことはできません。

## ■ サイズ [目安]

| S     | M     | L           |
|-------|-------|-------------|
| 小児    | 成人女性  | 成人女性 / 成人男性 |
| 約68mm | 約76mm | 約81mm       |
| 約47mm | 約53mm | 約60mm       |

咬合力分析システム

## デンタルプレスケールⅡ 咬合圧検査 スターターキット

包装●デンタルプレスケールⅡ(サイズM、L×各1箱)、バイトフォースアナライジングセット


デンタルプレスケールⅡ読み取り用スキャナ




※イラストはイメージです。

弊社ではお取り扱いしておりません。ジーシーホームページ「製品カタログ」ページにて弊社指定のスキャナをご確認の上、別途お求めください。(弊社が指定するスキャナ以外は使用することができません)

## ■ 検査の主な流れとポイント

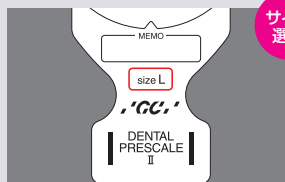サイズ  
選択

1 模型と合わせたり被蓋関係を確認するなどし、適切なサイズをS、M、Lから選択します。

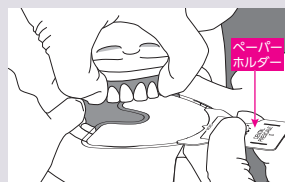
ペーパー  
ホルダー

2 歯列全体がフィルムに納まるようにデンタルプレスケールⅡを口腔内へ挿入します。



約3秒

3 デンタルプレスケールⅡを約3秒間咬み締めてもらいます。

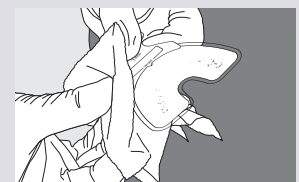

4 プレスケールシートに付いた唾液をやさしく拭き取り、消毒用エタノール等で清拭消毒します。




読み取る

5 位置決めテンプレートとデンタルプレスケールⅡをスキャナにセットし、読み込みます。



新規読込

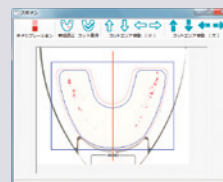アイコンを  
クリック

6 不要な外形をトリミングし、咬んで発色した部位を抽出します。



表示

7 咬合力等の解析結果が表示されます。

※掲載情報は2025年8月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store からダウンロード  
Google Play でダウンロード  
どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

