

GC Fuji LINING LC PASTE PAK

IDENTIFICATION OF PARTS BEZEICHNUNG DER TEILE IDENTIFICATION DES PARTIES I COMPONENTI

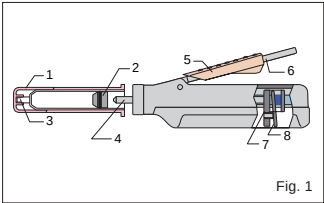


Fig. 1

DIRECTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D'EMPLOI ISTRUZIONI PER L'USO

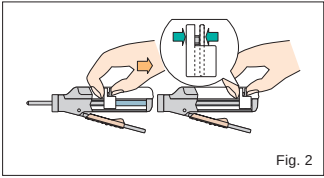


Fig. 2

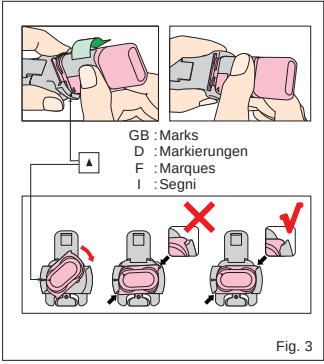


Fig. 3

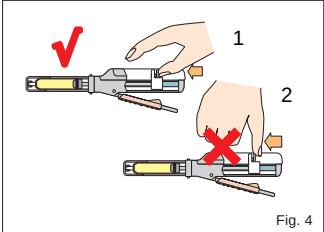


Fig. 4

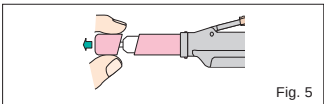


Fig. 5

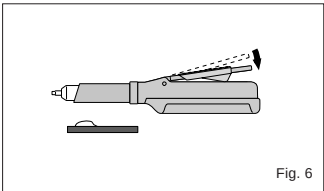


Fig. 6

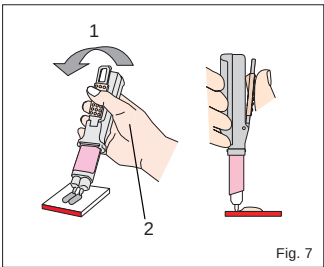


Fig. 7

GC Fuji LINING LC PASTE PAK RADIOPAQUE LIGHT CURED GLASS IONOMER LINING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK is the first radiopaque, light cured resin-modified glass ionomer lining cement available in paste-paste presentation. GC Fuji LINING LC PASTE PAK is available in a cartridge pack and can be dispensed easily and correctly using a special dispenser called Paste Pak Dispenser.

RECOMMENDED INDICATIONS

As a base or liner in prepared cavities.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.
2. In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

IDENTIFICATION OF PARTS

- (Paste Pak Cartridge)
1. Cover
 2. Inner plunger
 3. Tip (Paste Pak Dispenser)
 4. Piston
 5. Finger grip Long
 6. Lever
 7. Slide block
 8. Release lever (Fig. 1)

Paste / Paste Ratio (g/g)	1,0 / 1,1
Mixing Time (sec.)	10"
Working Time (min., sec.)	2'15"
Light Curing Time (sec.) (Halogen)	20"
Depth of Cure (mm)	1,3

Test conditions : Temperature (23 +/-1°C)
Relative humidity (50 +/-10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Light-activated cements)(Type I)

DIRECTIONS FOR USE

1. **PASTE PAK CARTRIDGE LOADING**
 - a) Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser. (Fig. 2)
Note :
To retract the piston, hold both the slide block and release lever (on the underside of the dispenser) with fingers and pull them back together.
b) Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Ensure the ▲ mark on the cartridge lines up with the ▲ mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated.
2) Then turn the cartridge fully to the right position.
Note :
1) If the cartridge is stored in a refrigerator, before use leave it at room temperature (23°C / 73.4°F) for 30 minutes.
2) To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.
c) After cartridge loading, slide the release lever forward until it stops. (Fig. 4)
1) Push the front of the release lever.
2) Do not push the upper slide.

2. **DISPENSING**
 - a) Remove the cartridge cover. (Fig. 5)
b) Depress the lever to dispense the required amounts of pastes onto the mixing pad.
Note :
1) Before dispensing the first material from a new cartridge or when dispensing after a long interval, bleed the pastes in order to prevent the incorporation of air bubbles into the material.
2) The finger grip can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed.
Position of Finger Grip Long for lining. (Fig. 6)
c) While depressing the lever, level and cut off the extruded material from the tips of the cartridge by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad. (Fig. 7)
1. Level and cut off material.
2. Depressing the lever.
- When the lever is released after dispensing, residual pastes at the tips are retracted into the cartridge. Replace the cartridge cover.
Note :
1) If any surplus paste is retained on the cartridge tips after dispensing, remove with gauze, etc.
2) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the slide block on the underside of the dispenser. As the cartridge has a translucent tip on one of the barrels, the residual amount can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the tip.
3) Do not drop the dispenser with the cartridge. Otherwise the cartridge may be damaged.

3. **MIXING**

After dispensing, incorporate and spread the material out in a thin layer on the mixing pad using a plastic spatula. Mix thoroughly with lapping strokes, for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.
Note :
1) The working time is 2 minutes 15 seconds from the start of mixing at 23°C (73.4°F).
Higher temperatures will shorten working time.
2) Do not mix pastes with other materials.

4. **RESTORATIVE TECHNIQUE**
 - a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is not necessary.
 - b) Wash and dry but DO NOT DESICCATE. For pulp capping use calcium hydroxide.
 - c) Mix the cement (as above).
 - d) Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
 - e) Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placement instrument, covering dentine up to the dentino-enamel junction.
 - f) Light cure with a halogen, plasma arc or LED light curing device*. Place light source as closely as possible to the

* Irradiation time (Halogen)	GC Co-bee, Coe Lunar TA	20 sec.
(Plasma arc)	GC Flipo	10 sec.
(LED)	GC e-Light (Mode : Fast cure)	18 sec.

- cement surface.
Note :
If application exceeds 2 mm in depth, use a layering technique.
g) Proceed with standard composite or amalgam restorative techniques.

- Cleaning / Sterilization of Paste Pak Dispenser**
1. Clean the dispenser and the finger grip with gauze soaked in alcohol.
 2. The dispenser may be steam autoclaved at 121-135°C (250-275°F) for 10-30 minutes or disinfected using alcohol. (Please remove the finger grip and the cartridge before autoclaving the dispenser.) The use of various chemical disinfectants / sterilants may cause damage to the dispenser and therefore is not recommended.
Note :
After autoclaving, the release lever of the dispenser may not easily be moved forwards and backwards by fingers. In such a case, slide the release lever forward until it stops. Apply a very small quantity of petroleum jelly onto the entire surface of the piston. Do not apply excess petroleum jelly. Then move the release lever back and forth a few times to ensure smooth movement.

SHADE

Universal

STORAGE

Store in a cool and dark place (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F)
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGE

Paste Pak Cartridge (7.0g / 4.7mL) (1) with mixing pad (No.22)
Option : Paste Pak Dispenser (1)

CAUTION

1. In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with cotton, gauze or a sponge soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In rare cases metal may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of Paste Pak Dispenser (nickel-plated aluminum) and refer to a physician.
4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as iodine tincture containing halogen element. Otherwise the dispenser may discolor.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK RÖNTGENSICHTBARER LICHTHÄRTENDER GLAS IONOMER- UNTERFÜLLUNGSGEMENT

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Anwendungsbereiche zu verwenden.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK ist der erste röntgenopake, lichthärtende kunststoffverstärkte Glasionomer - Unterfüllungs-Zement in Paste-Paste Form. GC Fuji LINING LC PASTE PAK steht in Kartuschen zur Verfügung und kann sehr leicht und korrekt mit dem speziellen Paste Pak Dispenser ausgedrückt werden.

EMPFÖHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Als Unterfüllung oder Liner in präparierten Kavitäten.

GEGENANZEIGEN

1. Pulpenüberkappung.
2. In seltenen Fällen kann das Produkt bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen beobachtet werden, das Produkt nicht weiter anwenden und einen Arzt aufsuchen.

BEZEICHNUNG DER TEILE

- (Paste Pak Kartusche)
1. Deckel
 2. Innerer Kolben
 3. Spitze (Paste Pak Dispenser)
 4. Kolbenstange
 5. Dosierschieber-lang
 6. Hebel
 7. Sperrhebel
 8. Lösehebel (Fig. 1)

Paste / Paste Form / Konsistenz (g/g)	1,0 / 1,1
Anmischzeit (Sek.)	10"
Arbeitszeit (Min., Sek.)	2'15"
Licht Härtezeit (Sek.) (Halogen)	20"
Härtetiefe (mm)	1,3

Testbedingungen: Temperatur (23 +/-1°C)
Relative Luftfeuchtigkeit (50 +/- 10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Lichtaktivierte Zemente) (Typ I)

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. **EINSETZEN DER (PASTE PAK) KARTUSCHE**
 - a) Es muß sichergestellt werden, daß die Kolbenstange komplett in den Dispenser zurückgeschoben wurde. (Fig. 2)
Hinweis :
Um die Kolbenstange zurückzuschieben, sowohl den Sperrhebel als auch den Lösehebel (an der Unterseite des Dispensers) mit den Fingern zusammendrücken und nach hinten schieben.
b) Einlegen der Kartusche in den Paste Pak Dispenser. (Fig.3)
1) Es ist sicherzustellen, daß sich die Markierung (▲) auf der Kartusche und die Markierung (▲) auf dem Paste Pak Dispenser wie abgebildet auf einer Linie befinden.
2) Dann die Kartusche nach rechts in Position drehen.
Hinweis :
1) Wenn Sie die Kartuschen in einem Kühlschrank aufbewahren, lassen Sie sie mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur (23°C / 73.4°F) liegen.
2) Um die Kartusche herauszunehmen, die Kolbenstange komplett zurückziehen und die Kartusche an der markierte Position zurückdrehen.
c) Nach dem Einsetzen der Kartusche den Lösehebel bis zum Anschlag vorschieben. (Fig. 4)
1) Den Lösehebel mit dem Daumen in der Mitte nach vorne schieben.
2) Schiebt man den Lösehebel an der Oberseite nach vorne, blockiert er.

2. AUSDRÜCKEN

- a) Den Kartuschendeckel entfernen. (Fig. 5)
b) Den Hebel zusammenpressen, um die erforderliche Menge der Pasten auf dem Mischblock auszudrücken.
Hinweis :
1) Vor dem erstmaligen Ausdrücken von Material aus einer neuen Kartusche oder vor dem Ausdrücken nach einem längeren Zeitraum, etwas von beiden Pasten ausdrücken, um die Bildung von Luftblasen im Material zu vermeiden.
2) Der Dosierschieber kann sowohl nach vorne als auch nach hinten geschoben werden, um die Menge des auszu drückenden Materials zu verändern.
Position des Griffes beim Unterfüllen. (Fig. 6)
c) Während der Hebel gedrückt wird, Dispenser waagrecht halten. Zum Abstreifen des herausgedrückten Materials Kartusche und Dispenser in eine aufrechte Position auf dem Mischblock bringen. (Fig. 7)
1. Waagrecht halten und Abstreifen des Materials.
2. Drücken des Hebels.

Wenn der Hebel nach dem Herausdrücken losgelassen wird, werden die Pastenrückstände an der Spitze in die Kartusche zurückgezogen. Den Kartuschendeckel wieder aufsetzen.

- Hinweis :
1) Falls überschüssiges Material nach dem Ausdrücken an der Kartuschenspitze haftet, kann dieses mit einem Wattepellet etc. entfernt werden.
2) Die Menge des verbleibenden Materials in der Kartusche kann man die verbleibende Menge an der Position des inneren Kolbens erkennen.
3) Den Dispenser mit der Kartusche nicht fallenlassen, da es sonst zu einer Beschädigung der Kartusche kommen könnte.

3. Mischen

Nach dem Ausdrücken das Material mit einem Plastikspatel dünn auf dem Mischblock ausstreichen. 10 Sekunden mit überlappenden Streichen sorgfältig mischen. Darauf achten, daß keine Luftblasen untergemischt werden.

- Hinweis :
1) Die Verarbeitungszeit beträgt nach dem Anmischen bei 23°C (73.4°F) 2 min. 15 Sek. Höhere Temperaturen verkürzen die Arbeitszeit.
2) Mischen Sie die Paste nicht mit anderen Materialien.

4. FÜLLUNGSTECHNIK

- a) Den Zahn in gewohnter Weise präparieren. Extensive mechanische Retention ist nicht erforderlich.
- b) Ausspülen und trocknen, aber NICHT ÜBERTROCKNEN. Zur Überkappung der Pulpa ein Kalziumhydroxid-Präparat verwenden.
- c) Den Zement anmischen (siehe oben).
- d) Feuchtigkeit von der Oberfläche entfernen, aber NICHT AUSTROCKNEN.
- e) Mit der Spitze oder einem anderen geeigneten Instrument den Zement in die Kavität platzieren, dabei das Dentin bis zur Schmelzgrenze auskleiden.
- f) Mit Halogenlicht , Plasma-Licht oder LED Licht härten*. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die

* Aushärtungszeit (Halogen)	GC Co-bee, Coe Lunar TA	20 Sek.
(Plasma Licht)	GC Flipo	10 Sek.
(LED)	GC e-Light (Modus: Fast Cure)	18 Sek.

- Zementoberfläche halten.
Hinweis :
Bei Applikationen über 2 mm, nach der Schichttechnik verfahren.
g) Die Füllung mit Komposit oder Amalgam in gewohnter Weise legen.

Reinigung / Sterilisation des Paste Pak Dispensers

1. Den Dispenser und den Dosierschieber mit einem in Alkohol getränkten Wattepellet reinigen.
Hinweis :
Bei Applikationen über 2 mm, nach der Schichttechnik verfahren.
g) Die Füllung mit Komposit oder Amalgam in gewohnter Weise legen.
2. Der Dispenser kann bei 121-135°C (250-275°F) für 10 bis 30 Minuten dampfautoklaviert oder mit Alkohol desinfiziert werden (Bitte den Dosierschieber vor dem Autoklavieren des Dispensers entfernen). Die Anwendung verschiedener chemischer Desinfektions-/Sterilisationsmittel kann zu Beschädigungen des Dispensers führen und wird deshalb nicht empfohlen.
Hinweis :
Nach dem Autoklavieren kann es vorkommen, daß sich der Lösehebel des Dispensers mit den Fingern nicht störungsfrei vorwärts und rückwärts schieben läßt. In solchen Fällen den Lösehebel mit einem geeigneten Schmiermittel wieder gängig machen.

FARBE

Universal

LAGERUNG

Kühl und dunkel lagern (4 - 25°C)
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Produktionsdatum)

HANDELSFORM

Paste Pak Kartusche (7.0g / 4,7mL) (1) mit Mischblock (No.22)
Zubehör : Paste Pak Dispenser (1)

ACHTUNG

1. Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem alkoholgetränkten Wattepellet oder Schwamm entfernen. Gut mit Wasser abspülen.
2. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. In seltenen Fällen können Metalle bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen auftreten, die Anwendung des Paste Pak Dispenser (nickelüberzogenes Aluminium) nicht fortsetzen und einen Arzt aufsuchen.
4. Bei Kontakt mit jodhaltigen Tinkturen kann eine Verfärbung auftreten!

GC Fuji LINING LC PASTE PAK CVI RADIOOPAQUE PHOTOPOLYMERISABLE POUR FOND DE CAVITÉ ET LINER

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'utilisation.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK est le premier ciment verre ionomère modifié à la résine photopolymérisable pour fond de cavité radioopaque disponible en version pâte/pâte. GC Fuji LINING LC PASTE PAK est disponible en cartouche et s'utilise facilement et proprement avec un distributeur spécial appelé bloc distributeur de pâtes (Paste Pak Dispenser).

INDICATIONS

Comme base ou liner.

CONTRE-INDICATIONS

1. Pulcapiement pulpaire.
2. Dans de rares cas, ce produit peut entraîner, chez certaines personnes, une réaction allergique. Si cela se produit, cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin.

IDENTIFICATION DES PARTIES

- (Cartouche de pâtes)
1. Capuchon
 2. Piston (crémaillère) interne
 3. Embout (Bloc distributeur de pâtes)
 4. piston
 5. Grip rectangulaire "long"
 6. Levier
 7. bloc coulissant
 8. taquet de libération (Fig. 1)

MODE D'EMPLOI

Ratio pâte/pâte (g/g)	1,0 / 1,1
Temps de mélange (sec.)	10"
Temps de travail (min., sec.)	2'15"
Temps de photopolymérisation (sec.) (Halogène)	20"
Profondeur de polymérisation (mm)	1,3

Conditions de test : Température (23 +/-1°C)
Humidité relative (50 +/-10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) ciment activé par la lumière (type I)

CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE DE PÂTES

- a) Assurez-vous que le piston est complètement enfoncé dans le distributeur. (Fig. 2)
Note :
Pour retirer le piston, saisissez le bloc coulissant et le tirez le taquet (en dessous du distributeur).
b) Charger la cartouche dans le bloc distributeur de pâtes. (Fig. 3)
1) Faites coïncider la marque ▲ de la cartouche avec la marque ▲ du distributeur comme indiqué.
2) Puis, tourner complètement la cartouche en position droite.
Note :
1) Si la cartouche est stockée au réfrigérateur, la laisser à température ambiante (23°C/73.4°F) 30 minutes avant utilisation.
2) Pour enlever la cartouche, retirer entièrement le piston et tourner de nouveau la cartouche pour revenir à la position initiale.
c) Une fois la cartouche en place, (ne pas enlever le capuchon de la cartouche), faites glisser le taquet vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Fig. 4)
1) Pousser le taquet face à vous.
2) Ne pas pousser la partie du dessus.

2. DISTRIBUTION

- a) Retirer le capuchon de la cartouche. (Fig. 5)
b) Abaisser le levier pour obtenir la quantité nécessaire de pâtes sur le bloc de mélange.
Note :
1) Avant de distribuer le matériau d'une nouvelle cartouche ou lorsque ce matériau n'a été utilisé pendant un long moment, extraire un peu de pâtes pour éviter toute incorporation de bulle d'air dans le matériau.
2) Le grip peut être déplacé avant ou après la distribution du matériau.
Position du grip pour protection de la cavité (lining). (Fig. 6)
c) Pendant que vous abaissez le levier, égalisez et coupez la quantité de matériau extraite des embouts de la cartouche en positionnant la cartouche et le distributeur en position verticale sur le bloc de mélange. (Fig. 7)
1. Egaliser et couper le matériau.
2. Relâcher le levier.

Lorsque le levier est relâché après distribution, les excédents de pâtes sur les embouts se rétractent dans la cartouche. Replacer le capuchon de la cartouche.
Note :
1) Si des excédents de pâtes subsistent sur les embouts de la cartouche, retirez-les avec de la gaze, etc...
2) On peut connaître la quantité de matériau restant dans la cartouche par la position du bloc coulissant sous le distributeur. Comme la cartouche a un embout transparent sur une des cartouches, la quantité résiduelle peut être confirmée par la position du piston interne (crémaillère) visible à travers l'embout.
3) Ne pas laisser le distributeur avec la cartouche. Sinon, la cartouche peut être endommagée.

3. Mélange

- Après distribution, incorporer et étaler le matériau en fine couche sur le bloc de mélange en utilisant une spatule en plastique. Mélanger soigneusement, en tournant, pendant 10 secondes. Faites attention de ne pas incorporer de bulles d'air.
Note :
1) Le temps de travail est de 2 minutes 15 secondes à partir du début du mélange à 23°C (73.4°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
2) Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.

4. TECHNIQUE DE RESTAURATION

- a) Préparer la dent selon les techniques habituelles. Une extension pour rétention mécanique n'est pas nécessaire.
- b) Nettoyer et sécher mais SANS DESHYDRATER. Pour un coffrage pulpaire, utiliser un ciment hydroxyde de calcium.
- c) Mélanger le ciment (voir ci-dessus).
- d) Eliminer l'humidité de la surface mais, sans déshydrater.
- e) Placer le ciment au moyen d'une seringue ou d'un instrument adapté pour Fond de cavité, jusqu'à la jonction Aml-Dentine.
- f) Photopolymériser avec une unité lumineuse de type halogène, arc à plasma ou LED*. Placer la source lumineuse le plus près possible de la surface du ciment.

* Temps d'irradiation (Halogène)	GC Co-bee, Coe Lunar TA	20 sec.
(Arc à plasma)	GC Flipo	10 sec.
(LED)	GC e-Light (Mode : Fast cure)	18 sec.

- Note :
Si la couche de matériau finale doit excéder 2mm, travailler par couches successives.
g) Procéder aux techniques habituelles de restauration par Composite ou Amalgame.

Nettoyage / stérilisation du bloc distributeur de pâtes

1. Nettoyer le distributeur et le grip avec de la gaze imbibée d'alcool.
2. Le distributeur peut être plongé dans un bain de vapeur à 121-135°C (250-275°F) pendant 10-30 minutes ou désinfecté à l'alcool. (N'oubliez pas de retirer le grip et la cartouche avant le nettoyage du distributeur). L'utilisation de divers désinfectants chimiques / stérilisants peut causer des dommages au distributeur et dès lors, ne sont pas recommandés.
Note :
Après passage à l'autoclave le déverouillage du distributeur peut ne pas être aisé. Dans ce cas, retractor complètement le piston et appliquer un peu de vaseline (gel) sur toute la surface du piston. Puis, actionner le piston dans les deux sens quelques fois pour obtenir une "glisse" satisfaisante.

TEINTE

Universelle

STOCKAGE

Conservé dans un endroit frais et sombre (4 à 25°C) (39.2-77°F)
(Préemption : 2 ans à partir de la date de fabrication)

PRESENTATION

- 1 Cartouches de pâtes (7,0g / 4,7 mL), bloc de mélange (n°22)
Option : 1 bloc distributeur de pâtes

AVERTISSEMENT

1. En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool. Rincer aussitôt avec de l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
3. Dans de rares cas, le métal peut causer, chez certaines personnes, des réactions allergiques. Si de telles réactions se produisent, cessez d'utiliser ce Paste Pak Dispenser (Nickel plaqué aluminium) et consultez un médecin.
4. Conserver le distributeur de pâtes loin de produits chimiques comme la teinture d'iode contenant des éléments halogène. Le distributeur pourrait être décoloré.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK VETROIONOMERO RADIO-OPACO FOTOPOLIMERIZZABILE PER SOTTOFONDI

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK è il primo vetro-ionomero fotopolimerizzabile radio-opaco addizionato di resina per fondo di cavità disponibile in formulazione pasta-pasta. GC Fuji LINING LC PASTE PAK è disponibile in cartuccia e può essere facilmente e correttamente distribuito utilizzando uno speciale dispenser chiamato Paste Pak Dispenser.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

Come base o sottofondo per le cavità preparate.

CONTROINDICAZIONI

1. Impiacciamento pulpare.
2. In rari casi il prodotto può causare reazioni di sensibilizzazione in alcune persone. Se si verifica questa reazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

I COMPONENTI

- (Paste Pak Cartuccia)
1. Cappuccio
 2. Siantuffo interno
 3. Punta (Paste Pak Dispenser)
 4. Pistone
 5. Impugnatura Lunga
 6. Leva
 7. Blocco di scorrimento
 8. Leva di rilascio (Fig. 1)

ISTRUZIONI PER L'USO

Proporzione Pasta/Pasta (g/g)	1,0 / 1,1
Tempo di miscelazione (sec.)	10"
Tempo di lavorazione (min., sec.)	2'15"
Tempo di fotopolimerizzazione (sec.) (Alogena)	20"
Profondità di polimerizzazione (mm)	1,3

Condizioni di prova : Temperatura (23 +/-1°C)
Umidità relativa (50 +/-10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Cementi foto-attivi)(Tipo I)

1. CARICAMENTO DELLA CARTOUCIA PASTE PAK

- a) Accertarsi che il pistone sia completamente ritratto nel dispenser. (Fig. 2)
Nota :
Per ritrarre il pistone, tenere con le dita sia il blocco di scorrimento che la leva di rilascio (nella parte inferiore del dispenser) e tirare entrambi contemporaneamente.
b) Caricare la cartuccia nel Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Assicurarsi che il segno ▲ posto sulla cartuccia sia in linea con il segno ▲ posto sul CD DISPENSER come illustrato.
2) Quindi, ruotare completamente la cartuccia verso destra.
Nota :
1) Se la cartuccia è conservata in frigo, prima dell'uso lasciarla a temperatura ambiente (23°C / 73.4°F) per 30 minuti.
2) Per togliere la cartuccia, ritirare completamente il pistone e ruotare la cartuccia fino a riportarla nelle posizioni contrassegnate.
c) Dopo aver caricato la cartuccia far scorrere in avanti la leva di rilascio finché non si arresta. (Fig. 4)
1) Fare pressione sulla parte anteriore della leva di rilascio.
2) Non fare pressione sul lato superiore.

2. EROGAZIONE DEL MATERIALE

- a) Togliere il cappuccio dalla cartuccia. (Fig. 5)
b) Premere la leva per estrarre la quantità necessaria di paste sul blocco di miscelazione.
Nota :
1) Prima di dispensare il primo materiale da una nuova cartuccia o quando si estrude dopo un lungo periodo di non utilizzo, far uscire un po' di pasta in modo da prevenire l'eventuale incorporazione di bolle d'aria.
2) L'impugnatura può essere spostata in avanti o indietro per modificare la quantità di materiale da estrarre. Posizione del dosatore lungo per il dosaggio del fondo di cavità. (Fig. 6)
c) Mentre si preme la leva, stendere e staccare il materiale estruso portando la cartuccia e il dispenser in posizione verticale sul blocco di miscelazione. (Fig. 7)
1. Stesura e distacco del materiale.
2. Pressione sulla

GC Fuji LINING LC PASTE PAK

IDENTIFICACION DE PARTES BENOEMING VAN DE ONDERDELEN FORTEGNELSE OVER KOMPONENTER FÖRTECKNING ÖVER INGÅENDE KOMPONENTER

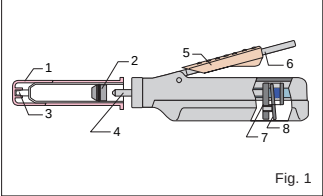


Fig. 1

INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

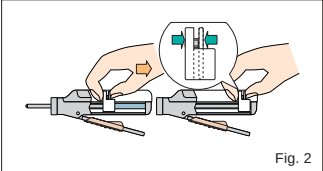


Fig. 2

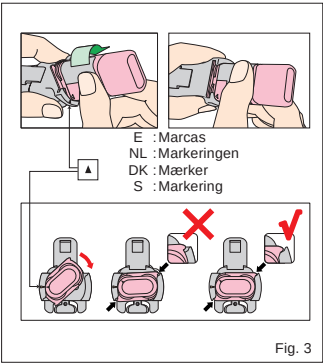


Fig. 3

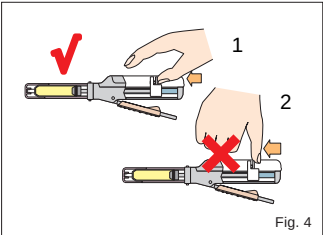


Fig. 4

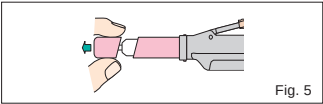


Fig. 5

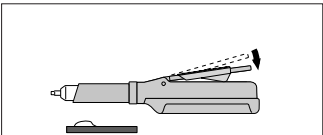


Fig. 6

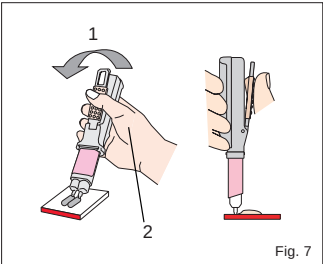


Fig. 7

GC Fuji LINING LC PASTE PAK CEMENTO PROTECTOR DE IÓNÓMERO DE VIDRIO RADIOPACO FOTOCURABLE

Para uso exclusivo de profesionales de odontología bajo las indicaciones recomendadas.

El GC Fuji LINING LC PASTE PAK es el primer material protector de iónomero de vidrio fotocurable, modificado con resina, disponible en fórmula pasta/ pasta. GC Fuji LINING LC PASTE PAK está disponible en envase de cartucho y puede administrarse fácil y correctamente por medio de un aplicador especial llamado Paste Pak Dispenser.

INDICACIONES RECOMENDADAS

Como base o protección de cavidades preparadas.

CONTRAINDICACIONES

- En casos excepcionales el producto puede producir sensibilidad en algunas personas. Si se producen dichas reacciones, interrumpir el uso del producto y dirigirse a un médico.
- Cofías en pulpa dental.

IDENTIFICACION DE PARTES

- (Paste Pak Cartucho)
1. Tapa
 2. Embolo interior
 3. Punta (Aplicador Paste Pak Dispenser)
 4. Pistón
 5. Agarradero largo
 6. Palanca
 7. Bloque deslizable
 8. Palanca de liberación (Fig. 1)

INSTRUCCIONES DE USO

Cantidad pasta (gr./gr.)	1,0 / 1,1
Tiempo de Mezcla (seg.)	10"
Tiempo de Trabajo (min., seg.)	2'15"
Tiempo de foto-curado (seg.) (Halógeno)	20"
Profundidad de curado (mm)	1,3

Condiciones de Test: Temperatura (23+/-1°C) Humedad Relativa (50+/-10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Cementos activados por luz) (Tipo 1)

- CRAGA DEL CARTUCHO PASTE PAK**
 - Asegúrese de que el pistón está completamente replegado dentro del aplicador. (Fig. 2)
Nota :
Para desplegar el pistón, sujetar a la vez con los dedos el bloque deslizable y la palanca de liberación (en la parte inferior del aplicador) y tirar hacia atrás de ellos juntos.
 - Cargar el cartucho dentro del aplicador Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Haga coincidir la marca ▲ del cartucho con la marca ▲ del aplicador Paste Pak Dispenser como se muestra.
2) Entonces gire totalmente el cartucho a la derecha en la posición correcta.
Nota :
1) Si el cartucho está conservado en la nevera, antes del uso hay que ponerlo a temperatura ambiente para 30 minutos (23°C / 73.4°F).
2) Para quitar el cartucho, repliegue completamente el pistón y gire el cartucho de nuevo a las posiciones marcadas.
 - Después de cargar el cartucho, deslice la palanca de liberación hacia delante hasta que se detenga. (Fig. 4)
1) Empuje la parte frontal de la palanca de liberación.
2) No empuje la parte superior.

2. DOSIFICACIÓN

- Quitar la tapa del cartucho. (Fig. 5)
- Presionar la palanca para distribuir en el bloque de mezclas las cantidades necesarias de las pastas.
Nota :
1) Antes de dispensar el primer material de un cartucho nuevo o al dispensarlo después de un largo intervalo de tiempo, sangrar las pastas para evitar que haya burbujas de aire en el material.
2) El agarre para el dedo puede moverse hacia delante o hacia atrás para cambiar la cantidad de material a obtener. La posición del agarradero largo para el revestimiento. (Fig. 6)
- Mientras presione la palanca, nivele e interrumpa el material que sale de las puntas del cartucho moviendo el cartucho y el aplicador a una posición vertical sobre el bloque de mezclas. (Fig. 7)
1. Iguala y detenga la salida de material.
2. Presione la palanca.

- Al soltar la palanca después de la distribución, las pastas residuales de las puntas se repliegan al interior del cartucho. Reponer la parte del cartucho.
- Nota :
- Si quedara algún resto de pasta en las puntas del cartucho después de la dosificación, elimínala con una gasa, etc.
 - La cantidad de material residual en el cartucho puede confirmarse por la posición del bloque deslizable en la parte inferior del aplicador. Dado a que el cartucho tiene una punta transparente en un uno de los tubos, se puede verificar la cantidad restante del producto, viendo la posición interna.
 - No deje caer el aplicador con el cartucho. De lo contrario el cartucho podría estropearse.

3. MEZCLA

Después de distribuirlo, incorpore y extienda el material en una capa fina sobre el block de mezcla con la ayuda de una espátula de plástico. Mezclar minuciosamente, revolviendo a golpecitos, durante 10 segundos. Poner especial cuidado para no incorporar burbujas de aire.

- El tiempo de trabajo es de 2 minutos 15 segundos desde el inicio de la mezcla, a 23°C (73.4°F).
A mayor temperatura menor tiempo de trabajo.
- No mezclar las pastas con otros materiales.

4. TÉCNICA DE RESTAURACIÓN

- Preparar el diente siguiendo técnicas estándar. No son necesarias espaciales retenciones mecánicas.
- Lavar y secar por NO DESECAR. Para recubrimiento de la pulpa utilizar cemento de hidróxido de calcio.
- Mezclar el cemento (según lo indicado arriba).
- Eliminar la humedad superficial pero NO DESECAR.
- Utilizando una jeringa u otro instrumento adecuado, aplicar el cemento en la preparación cubriendo la dentina hasta la unión dentina-esmalte.
- Polimerizable con una lámpara de halógeno, o con una arc de plasma, o también con un equipo de polimerización de tecnología LED*. Colocar la fuente de luz tan cerca como sea posible de la superficie del cemento.

* Tiempo de irradiación	
(Halógeno) GC Co-bee, Coe Lunar TA	20 seg.
(Arco plasma) GC Filpo	10 seg.
(LED) GC e-Light (Modo : Polimerización rápida)	18 seg.

- Nota :
Si la aplicación excede los 2mm de profundidad, use la técnica por capas.
- Seguir aplicando composite o amalgama utilizando la técnica de restauración estándar.

Limpieza / Esterilización del aplicador Paste Pak Dispenser

- Limpia el aplicador y el agarre para el dedo con una gasa empapada en alcohol.
- El aplicador puede esterilizarse al vapor en autoclave a 121-135°C (250-275°F) de 10 a 30 minutos o desinfectarse con alcohol. (Por favor, quite el agarre para el dedo antes de esterilizar con autoclave al aplicador). La utilización de diversos desinfectantes químicos/esterilizantes puede producir daños en el aplicador y por tanto está desaconsejada.
Nota :
Después de la esterilización en autoclave, la palanca de liberación no puede deslizarse con facilidad hacia delante y hacia atrás con los dedos. Aplicar una cantidad mínima de vaselina en toda la superficie del pistón. No aplique demasiada vaselina. Después, mueva varias veces la palanca de liberación para adelante y para atrás con el fin de asegurar un movimiento suave.

COLOR

Universal

ALMACENAJE

Guardar en sitio fresco y preservado de la luz (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F)
(Tiempo de vencimiento : dos años, después de la fabricación)

ENVASES

Cartucho Paste Pak (7,0g / 4,7mL) (1) con bloque de mezcla (No. 22)
Opción : Aplicador Paste Pak Dispenser (1)

PRECAUCIONES

- En caso de contacto con el tejido oral o la piel, eliminar inmediatamente con una esponja o bola de algodón empapada en alcohol. Aclarar con agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y buscar atención médica.
- En casos excepcionales el metal puede producir sensibilidad en algunas personas. Si se produce dicha reacción, interrumpir el uso del Paste Pak Dispenser (aluminio laminado con níquel) y dirigirse a un médico.
- Manténgase el distribuidor de la pasta lejos de químicos, como tintura de yodo que contiene halógeno. De lo contrario, el distribuidor puede desteñirse.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK RADIOPAK LICHTUITHARDEND GLASIONOMEER ONDERLAAGCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermeldte toepassingen.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK is het eerste röntgenopaak lichtuithardend kunststof versterkt glasionomeer lining-cement in een pasta-pasta uitvoering. GC Fuji LINING LC PASTE PAK is leverbaar in een cartridge verpakking en kan eenvoudig en op de juiste wijze worden ge-extrudeerd door een speciale dispenser te gebruiken, de Paste Pak Dispenser.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

Als onderlaag en voor isolatie in geprepareerde caviteiten.

CONTRA-INDICATIES

- Pulpa overkapping.
- Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

BENOEMING VAN DE ONDERDELEN

- (Paste Pak Cartridge)
1. Dop
 2. Dubbele zuiger cartridge
 3. dubbele tip cartridge
 4. Dubbele plunjer
 5. Vingergrip lang
 6. Hefboom
 7. Schuifblok
 8. Ontgrendelhendel (Fig. 1)

GEBRUIKSAANWIJZING

Pasta / Pasta Ratio (g/g)	1,0 / 1,1
Mengtijd (sec.)	10"
Verwerkingstijd (min., sec.)	2'15"
Belichtingstijd (sec.) (Halogeen)	20"
Diepte van uitharding (mm)	1,3

Test condities: Temperatuur (23 +/-1°C) Relatieve vochtigheid (50 +/-10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Door licht te activeren cementen)(Type I)

- Het plaatsen van de Paste Pak cartridge**
 - Verzeker u ervan dat de dubbele plunjer volledig in de dispenser is geschoven. (Fig. 2)
Opmerking :
Om de dubbele plunjer terug te schuiven, houd u beide, het schuifblok en de ontgrendelhendel (aan de uitsparing van de dispenser) tussen uw vingers en u trekt ze samen terug.
 - Het plaatsen van de cartridge in de Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Zorg ervoor dat het ▲ markeringssteken op de cartridge en het ▲ markeringssteken op de Paste Pak Dispenser tegenover elkaar staan, zoals afgebeeld.
2) Draai dan de cartridge volledig naar rechts.
Opmerking :
1) Wanneer de cartridge in de koelkast wordt bewaard, deze een half uur voor gebruik op kamertemperatuur (23°C / 73.4°F) laten komen.
2) Om de cartridge te verwijderen, trek u de dubbele plunjer volledig terug en draait u de cartridge terug tot de markeringen samenvallen.
 - Na het plaatsen van de cartridge, (de dop van de cartridge nog niet verwijderen) schuift u de ontgrendelhendel naar voren tot hij niet verder kan. (Fig. 4)
1) Druk daarvoor op de voorkant van de ontgrendelhendel.
2) Druk niet op de bovenste rand.

2. EXTRUDEREN

- Verwijder de dop van de cartridge. (Fig. 5)
- Druk de hefboom in om de benodigde hoeveelheid pasta's op het mengblokje aan te brengen.
Opmerking :
1) Het eerste materiaal dat men uit de dispenser extrudeert moet men niet gebruiken in het geval dat men de cartridge voor het eerst gebruikt in of in het geval dat de cartridge gedurende langere tijd niet is gebruikt. Dit om te voorkomen dat er luchtbelletjes in het materiaal wordt ingesloten.
2) De plastic vingergrip kunt u voorwaarts of achterwaarts bewegen om zo de hoeveelheid te extruderen materiaal te veranderen.
Positie van de vingergrip Lang voor lining. (Fig. 6)
- Tijdens indrukken van de hefboom, maakt u het ge-extrudeerde materiaal gelijk en snijdt u het af door de cartridge en dispenser op het mengblokje in een opwaartse richting te bewegen. (Fig. 7)
1. De opwaartse beweging en het afsnijden van materiaal.
2. Het indrukken van de hefboom.

Wanneer de hefboom wordt losgelaten na het extruderen, worden de pasta restanten aan de mond van de tips terug gezogen in de cartridge. Plaats de dop van de cartridge terug.

Opmerkingen :

- Als er overmaat aan pasta achterblijft op de tips van de cartridge, verwijder dit dan met een gaasje.
- De hoeveelheid aan restmateriaal in de cartridge kan worden vastgesteld door middel van de positie van het schuifblok aan de onderkant van de dispenser. Doordat een deel van de cartridge een transparant uiterste heeft, kan het restmateriaal worden vastgesteld door de positie van de zuiger, welke zichtbaar is door dit uiterste.
- Laat de dispenser met de cartridge niet vallen. De cartridge kan worden beschadigd.

3. MENGEN

- Na extruderen, verdeel en spreid het materiaal uit, met behulp van een plastic spatel, tot een dunne laag op het mengblokje. Meng grondig in overlappende stroken, gedurende 10 seconden. Zorg ervoor dat er geen luchtbelletjes ontstaan.
- Opmerkingen :
- De verwerkingstijd is 2 minuten 15 seconden vanaf het begin van mengen bij 23°C (73.4°F). Hogere temperaturen zullen de verwerkingstijd bekorten.
 - Meng de pasta's niet met andere materialen.

4. RESTAURATIVE TECHNIK

- Prepareer het element volgens de gebruikelijke techniek. Het creëren van uitgebreide mechanische retentie is niet noodzakelijk.
- Spoel en droog maar VOORKOM UITDROGEN. Gebruik zo nodig calciumhydroxide als pulpa-overkappingsmateriaal.
- Meng het cement (zoals hierboven beschreven).
- Verwijder vocht van de cavitetswanden maar VOORKOM UITDROGEN.
- Breng het cement aan op de preparatie met een spuit of een geschikt instrument, waarbij het dentine tot aan de glazuurgrens wordt bedekt.
- Belicht met een halogeen- of plasmalamp of met LED zichtbaar licht *. Plaats de lichtbron zo dicht mogelijk bij het cementoppervlak.

* Belichtingstijd	
(Halogeen) GC Co-bee, Coe Lunar TA	20 sec.
(Plasmalamp) GC Filpo	10 sec.
(LED) GC e-Light (Mode : Fast Cure)	18 sec.

- Opmerking :
Bij een dikkere laag dan 2mm, pas dan een laagsgewijze opbouw toe.
- Ga verder met de gebruikelijke techniek voor compositief of amalgaamrestauraties.

Reinigen / Steriliseren van de Paste Pak Dispenser

- Maak de dispenser en de vingergrip schoon met een gaasje gedrenkt in alcohol.
- De dispenser kan 10 tot 30 minuten worden ge-autoclaveerd op 121-135°C (250-275°F) of worden gedesinfecteerd met behulp van alcohol. (Verwijder de vingergrip en de cartridge voordat u de dispenser autoclaveert). Het gebruik van verscheidene chemische desinfectie- en sterilisatiemiddelen, kan schade veroorzaken aan de dispenser en wordt daarom niet aanbevolen.
Opmerking :
Na het autoclaveren kan het zijn dat de ontgrendelhendel, met de vingers, niet soepel heen en weer is te schuiven. Is dit het geval, schuif dan de dubbele plunjer volledig terug en breng een beetje vet aan op de mondstukken van de plunjer. Daarna de ontgrendelhendel een aantal malen heen en weer schuiven tot dat deze weer soepel glijdt.

KLEUR

Universeel

OPSLAG

Bewaar op een koele en donkere plaats (4 - 25°C) (39.2 - 77.0°F) (Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de datum van fabricage)

VERPAKKING

Paste Pak Cartridge (7,0g / 4,7mL) (1) met mengblokje (No.22)
Optie : Paste Pak Dispenser (1)

WAARSCHUWING

- In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, het gemorst materiaal onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet gedrenkt in alcohol, daarna spoelen met water.
- In geval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk met water en win medisch advies in.
- In uitzonderingsgevallen kunnen metalen (van de Paste Pak Dispenser), gevoeligheidsreacties veroorzaken bij sommige personen. Wanneer zulke reacties zich voordoen, gebruik het product (vermijld aluminium) niet meer en raadpleeg een arts.
- Bewaar de Paste Pak Dispenser zodanig dat deze niet in contact kan komen met chemicaliën zoals jodium welke halogeen bevat, waardoor de dispenser kan verkleuren.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK RADIOPAKE LYSPOLYMERISERENDE GLASIONOMER-LINGCEMENT

Kun til anvendelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK er den første lysghardende resin modificeret glasionomer liner med røntgenkontrast i pasta-pasta version. GC Fuji LINING LC PASTE PAK leveres i magasiner og kan enkelt og korrekt doseres ved at bruge en speciel dispenser - Paste Pak Dispenser.

INDIKATIONER

Dentinerstatning eller liner under amalgam eller komposit.

KONTRAIKINDIKATION

- Pulpa overkapping.
- Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

FÖRTEGNELSE ÖVER KOMPONENTER

- (Paste Pak Magasin)
1. Hætte
 2. Inderste stempel
 3. Spids (Paste Pak Dispenser)
 4. Stempel
 5. Langt Fingergreb
 6. Doseringsarm
 7. Bevægelig blokeringsknap
 8. Doseringsarm (Fig. 1)

BRUGSANVISNING

Paste / Paste forhold (g/g)	1,0 / 1,1
Udrøringstid (min.)	10"
Arbejdstid (min., sek.)	2'15"
Hærdetid (sek.) (Halogenlys)	20"
Hærdedybde (mm)	1,3

Testbetingelser : 23±1°C og rel. fugtighed 50±10%
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Lyspåvirkelig cement) (Type I)

- INDSÆTTELSE AF PASTE PAK MAGASIN**
 - Kontroller at stemplet er helt trukket tilbage i dispenseren. (Fig. 2)
Bemærk :
For at få stemplet trukket tilbage hold både knappen i gledeskinen og doseringsarmen (på undersiden af dispenseren) med fingrene og træk dem tilbage samtidigt.
Sæt magasinet ind i Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Anbring det ▲ mærke på magasinet udfor det ▲ mærke på Paste Pak Dispenser som illustreret.
2) Drej magasinet helt til højre position.
Bemærk :
1) Opbevarer magasinerne i køleskab, skal de tages ud ca. 30 minutter før anvendelse og anbringes i rumtemperatur (23°C / 73.4°F).
2) Ved fjernelse af magasinet skal stemplet være trukket tilbage og magasinet drejes tilbage til det ▲ mærke.
 - Efter indsættelse af magasinet (fjern ikke beskyttelseshætten på magasinet) tryk doseringsarmen opad indtil den stopper. (Fig. 4)
1) Tryk på fronten af doseringsarmen.
2) Tryk ikke på oversiden af doseringsarmen.

2. DISPENSERING

- Fjern beskyttelseshætten. (Fig. 5)
- Tryk på doseringsarmen for at få få den ønskede mængde af materiale ud på blandebløkken.
Bemærk :
1) Før dispensering af materiale fra et nyt magasin eller efter et langt stykke tid uden brug, så skal materialet have rumtemperatur. Herved forhindres det at der ikke så let inkorporeres luftbobler i materialet.
2) Fingergrebet kan flyttes fremad eller tilbage alt efter ønsket mængde materiale der ønskes.
Position af langt fingergrip. (Fig. 6)
1) Medens doseringsarmen trykkes ned, bedøm og tryk en jævn mængde materiale som opbevares og vend dispenseren op til opretstående (vinkelret) på blandebløkken for at stoppe yderligere materiale. (Fig. 7)
1. Bedøm og stop yderligere materiale.
2. Tryk doseringsarmen ned.

Når doseringsarmen slippes efter dispensering bliver overskuddet i spidserne trukket ind i magasinet. Sæt beskyttelseshætten på magasinet

Bemærk :

- Hvis overskydede materiale har sat sig fast på magasinspidserne, så fjern dette evt med et stykke gaze.
- Mængde af materiale i magasinet kan ses ved at kikke på positionen af knappen i gledeskinne på undersiden af dispenseren. Idet magasinet har gennemsnitlige spidser, kan den resterende mængde materiale, altid bestemmes ved at se på stemplets position gennem spidserne.
- Tab ikke dispenseren med magasinet på gulvet, så kan magasinet beskadiges.

3. BLANDING

Efter dispensering, bland og spred materialet ud i et tyndt lag på blandebløkken med en plastik spatel. Bland omhyggeligt med rolige bevægelser i ca. 10 sekunder. Vær omhyggelig med ikke at indkorporerer luftbobler.

- Bemærk :
- Arbejdstiden er 2 minutter 15 sekunder fra start af mix ved 23°C (73.4 °F). Høj temperatur vil afkorte arbejdstiden.
 - Bland ikke materialet med andre materialer.

4. FYLDNINGSTEKNIK

- Preparer kaviteten på sædvanlig vis. Mekanisk retentio er ikke nødvendig.
- Skyt og tørblæs, UDTØR IKKE. På dybe og pulpanære områder anbefales at lægge en afgrænset Ca (OH)² bunddækning.
- Bland cementen (se ovenfor).
- Fjern fugt fra kaviteten, men UDTØR IKKE.
- Applcér materialet i kaviteten ved hjælp af en Centrix sprøjte eller et passende instrument. Dæk dentinoverfladen op til emalje- / dentinrænsen.
- Lysghard med en halogen, plasma eller LED polymeriseringslampe*. Hold lyslederen så tæt på materialet som muligt.

* Belysningstid

(Halogenlys) GC Co-bee, Coe Lunar TA	20 sek.
(Plasmalampe) GC Filpo	10 sek.
(LED) GC e-Light (Polymeriseringsmetode : Hurtig hædning)	18 sek.

Bemærk :
Hvis det er nødvendigt mere end 2 mm dentinerstatning anvendes lagvis opbygning.

RENGØRING / Sterilisering af Paste Pak Dispenser

- Rein dispenseren og fingergrebet med gaze vådet i alkohol.
- Dispenseren kan autoclaveres ved 121-135°C (250-275°F) i 10-30 minutter eller alternativt desinfiseres med alkohol. (Fjern fingergrebet før autoclaving af dispenseren). Anvendelse af forskellige kemiske desinfektionsmidler/ præparater kan forårsage beskadigelse af dispenseren, hvorfor dette ikke anbefales.
Bemærk :
Efter autoclaving, kan den bevægelige knap til udløsning af stemplet måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette tilfælde skal stemplet trækkes helt tilbage og u anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæges sig frit igen.

FARVE

Universal

OPBEVARING

Opbevares på et køllet og mørkt sted (4-25°C). (Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

PAKNING

Paste Pak Magasin (7,0g / 4,7mL) (1) med blandeblok (Nr. 22)
Tilbehør : Paste Pak Dispenser (1)

ADVARSEL

- I tilfælde af kontakt med slimhinde eller hud fjernes materialet omgående med et stykke alkoholvådet gaze og skylles omhyggeligt med vand.
- I tilfælde af at materialet kommer i øjnene skylles omhyggeligt med vand og læge konsulteres.
- I tilfælde, kan metal give allergiske reaktioner. Søg læge såfremt det viser sig at allergiske reaktioner fremkommer ved brug af Paste Pak Dispenser (nikkel belagt aluminium).
- Paste Pak Dispenseren må ikke opbevares sammen med kemikalier, idet disse kan forårsage misfarvning af metallet.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK RÖNTGENKONTRASTERANDE LJUSHÄRDANDE GLASJONOMERLINER

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade indikationer.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK är den första resinmodificerade, ljushärdande samt röntgenkontrasterande glasjonomerliner som finns tillgänglig i pasta-pasta form. GC Fuji LINING LC PASTE PAK finns i patronförpackning och kan enkelt och korrekt doseras med en Paste Pak Dispenser.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

Underfyllning eller liner under amalgam eller komposit.

KONTRAIKINDIKATIONER

- Pulpaöverkapping.
- I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. I fall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt hänvisa patienten till en dermatologisk läkarmottagning.

FÖRTECKNING ÖVER INGÅENDE KOMPONENTER

- (Paste Pak Patron)
1. Lock
 2. Inre påskjutningskolv
 3. Spets (Paste Pak Dispenser)
 4. Pistong
 5. Långt fingergrepp
 6. Håvarm
 7. Rörig blockeringsvägg
 8. Håvarm för dosering (Fig. 1)

BRUKSANVISNING

Blandningsförhållande (g/g)	1,0 / 1,1
Blandningstid (sek.)	10"
Arbetstid (min., sek.)	2'15"
Ljuspolymeriseras under (sek.) (Halogen)	20"
Hårdningsdjup (mm)	1,3

Testförhållanden : Temperatur (23+/-1°C) Relativ luftfuktighet (50+/-10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Ljuspåverkad cement) (Type I)

- LADDNING AV PASTE PAK PATRON**
 - Kontrollera att pistongen är helt tillbaka dragen i dispensern. (Fig. 2)
OBS :
För att dra tillbaka pistongen, håll i båda sidorna på blockeringsväggen och lösör hövarmen (på undersidan av dispensern) med fingrarna och dra dem tillbaka samtidigt.
 - Laddning av patron i Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)
1) Försäkra er om att linjerna upp ▲ märket på patronen med ▲ märket på Paste Pak Dispenser enligt illustrationen.
2) Vid sedan patronen helt till dess rätta position.
OBS :
1) Vid förvaring i kylskåp, ta ut produkten från