



GC Ibérica

Ofertas y Novedades
Enero - Junio 2023



G-CEM ONE™

Cemento de resina autoadhesivo.

Simplemente EL ÚNICO.

Universal

Excelente fuerza de adhesión, tanto a piezas como a todo tipo de superficies y materiales: esmalte, dentina, zirconio, metal, cerámica² y cerámica híbrida².

Estético

Margen invisible para la obtención de resultados estéticos

Sencillo

Stock reducido para una reproducibilidad y un flujo de trabajo optimizados y rápidos.



Fiable

Fuerza de adhesión óptima para preparaciones retentivas y no retentivas¹ gracias a la capacidad exclusiva de **GC Touch Cure** del primer opcional, **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**, que mejora la adhesión.

No sensible a la técnica

Seguridad de una capacidad de autopolimerización optimizada. Extracción y limpieza sencilla del exceso. Tolerancia a la humedad y la saliva¹. Flujo optimizado de la pasta. Sensibilidad postoperatoria prácticamente inexistente³.

Rendimiento independientemente de la translucidez



Metal

Cortesía de
Dr. Kazunori Otani, Japan



Disilicato de Litio

Cortesía de
Dr. Akimasa Tsujimoto, Japan

¹ Con **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**.

² Con **G-Multi PRIMER**.

³ Resultados del test de campo. Utilizando solo **G-CEM ONE**.
Datos en archivo.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer opcional

Para todo tipo de pilares y cavidades.

- ✓ **Acelerador** → adhesión fuerte al pilar del diente y a la cavidad gracias a **GC Touch Cure**.
- ✓ **MDP**: adhesión a la estructura dental, zirconio y metal no preciosos.
- ✓ **4-MET**: adhesión a la estructura dental.
- ✓ **MDTP**: adhesión a metal precioso.

Sin fotopolimerización y con secado sencillo:

Espera de 10s

Aire fuerte durante 5s

G-CEM ONE System Kit

Ref. 013663

G-CEM ONE System Kit

1x G-CEM ONE Syringe A2 (4,6g),
1x G-CEM ONE Syringe TR (4,6g),
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer, 4ml.
15x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo Tips,
1x G-Multi PRIMER, 5ml.



OFERTA

rec 174,80€

128,00€

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 013666 - 013667

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.

PVP REC

69,00€



G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

Ref. 013664 - 013665

G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

2x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
15x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo Tips.

PVP REC

131,70€



G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 013668


8x G-CEM ONE Syr A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

OFERTA

rec 496,80€

299,00€

Jeringa: 37,35 €/Ud.

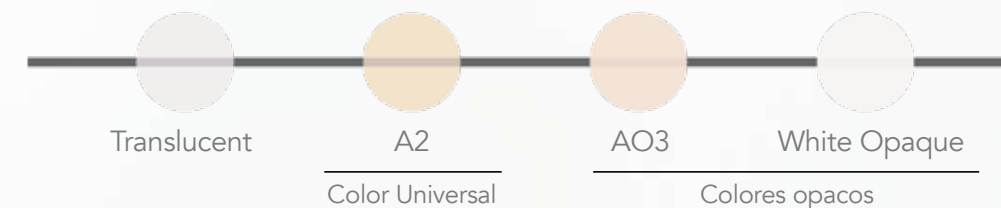

Cómo eliminar fácilmente el exceso al cementar con **G-CEM ONE**

Soluciones protésicas





El revolucionario G-ænial® A'CHORD de GC

G-ænial A'CHORD es un composite universal que permite realizar **restauraciones invisibles de larga duración**. Diseñado para ahorrar tiempo y por lo tanto dinero, presenta una tecnología superior en un producto sencillo. Ahora puede utilizar con confianza un material fácil de manipular, incluso en casos complejos.


5 colores base "camaleónicos" para cubrir los 16 colores de la guía Vita. Un stock reducido y un resultado predecible.

Restauraciones invisibles ¡incluso por las noches! Fluorescencia natural en cualquier condición de iluminación, incluso con luz negra, que proporciona a los pacientes una sonrisa con la que sentirse cómodos y seguros.


Pulido fácil y rápido para lograr un alto brillo.

Flexible pero fácil de esculpir con un instrumento de modelar o con un pincel gracias a su tecnología.

Combinación de 3 tecnologías para una **alta resistencia**, un **bajo desgaste** y una **estabilidad del color** a lo largo del tiempo.

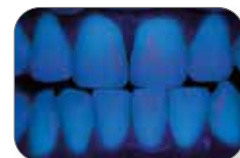

G-ænial® A'CHORD

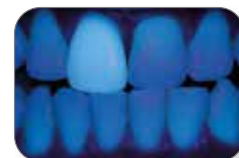

Composite convencional



Dr. Boujmaa, France



Dr. A. Mak, Australia.



El revolucionario
G-ænial® A'CHORD
de GC

Más información de
G-ænial A'CHORD y solicitud de muestra:
<http://gaenialachord.com>



G-ænial A'CHORD Core Kit Syr + Instrumento de regalo

Refs. 10007328

Por la compra de
1x **G-ænial A'CHORD** Core Kit Syringe
(5 jeringas 2.1ml/4g: 1x A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ Instrumento "American Eagle M5 SCULPT".




G-ænial A'CHORD Syr & Unitips

G-ænial A'CHORD, Syringe 2.1ml (4g).
G-ænial A'CHORD, Unitip 15x0.16ml.

OFERTA
rec 65,15€ **48,00€**

OFERTA
rec 69,90€ **51,00€**

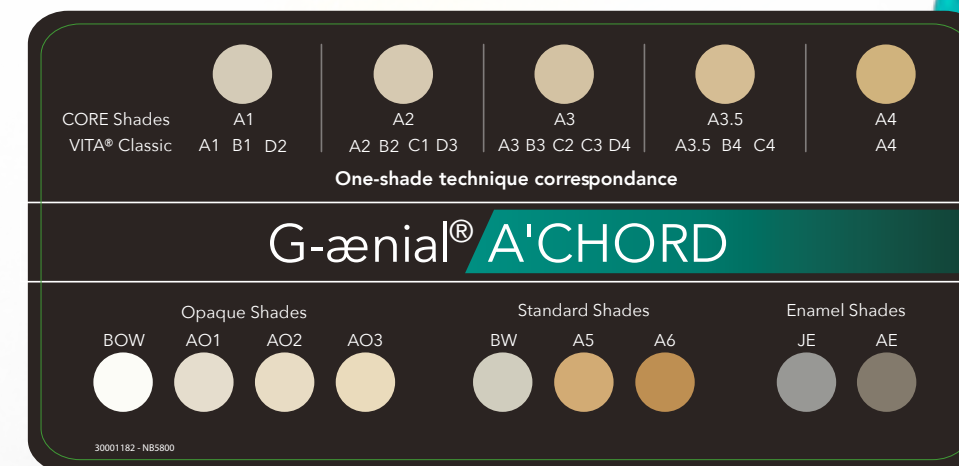

OFERTA

rec 292,85 € **215,00€**



**Soluciones
anteriores directas**



Impresione a sus pacientes con esta **solución simplificada**



G-ænial® Universal Injectable

Transforme la forma en que trabaja.

Empiece a inyectar con nuestro Composite inyectable de alta resistencia

Inyectar, dar forma y contornear al mismo tiempo

Como **G-ænial Universal Injectable** no se descuelga ni gotea, usted tiene todo el control para adaptar, dar forma y contornear a medida que inyecta para que las restauraciones sean rápidas y fáciles. Se adapta perfectamente a la base de la cavidad y le permite crear contornos, cúspides e incluso paredes proximales de forma sencilla.

Capacidad de pulido inigualable con una estética bonita

Aplicación universal para toda clase de cavidades

Colocación más rápida sin desperdicios



G-ænial Universal Injectable Kit + G-Premio BOND

Ref. 10003741

3 x **G-ænial Universal Injectable** Syringe 1ml (A1, A2, A3) + 1x **G-Premio BOND** 5ml, 30x Dispensing Tip Long Needle, 3x Light-protective cap.

OFERTA

rec 256,50 € **160,00 €**



INJECTION MOULDING KIT

Ref. 10003753

3 jeringas **G-ænial Universal Injectable** (A1,A2,A3) + 1x Cartucho **EXACLEAR**.

OFERTA

rec 157,30 € **115,00 €**



Menos tiempo, sin desperdicio, menos estrés.

Soluciones posteriores directas



G-ænial® Universal Injectable EverX Flow™

everX Flow™




La última renovación en restauración.

Fuerte hasta el núcleo.

Descubra **everX Flow**, un composite fluido reforzado con fibras cortas diseñado para sustituir la dentina y reforzar las restauraciones. Siguiendo el mismo principio de las barras de hierro en la construcción, las fibras de vidrio de **everX Flow** refuerzan las restauraciones y evitan que se agrieten. Con su fácil aplicación, sus dos colores y su increíble resistencia, **everX Flow** está a punto de convertirse en su nuevo producto para todas sus restauraciones que necesiten un núcleo fuerte, así como para las preparaciones de reconstrucciones de muñones.

Dos colores para dar respuesta a todas sus necesidades:

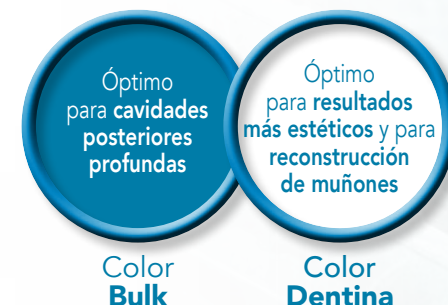

Óptimo para **reforzar** grandes cavidades y conseguir **resultados estéticos** a largo plazo



Preparación de la cavidad



Aplicación de everX flow



Capa final con **Essentia** (color universal)



Situación post-operatoria

everX Flow / G-ænial Universal Injectable Starter Kit Syringe

Ref. 10004834

2 x jeringas **everX Flow** Syringe 2ml (Bulk & Dentin shade), 2 x **G-ænial Universal Injectable** Syringe 1ml (A2 & A3), 40 x Dispensing Tip III Plastic, 20 x Dispensing Tip Long Needle, 4 x Light-protective Cap



OFERTA

rec 266,15 € **135,00 €**

Restauraciones directas con **everX Flow** y **Essentia Universal** con el Dr. Rudolf Novotny.

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de junio de 2023 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

EQUIA Forte™ HT - Sistema de restauración de vidrio híbrido

para obturación en bloque




Una alternativa fuerte y biomimética a la amalgama

El material se puede colocar en bloque y es fácil de aplicar y contornear.

¡Solo se necesitan 3'25" para completar una restauración!*

**Asumiendo tiempos medio de procedimiento siguiendo las instrucciones de uso*

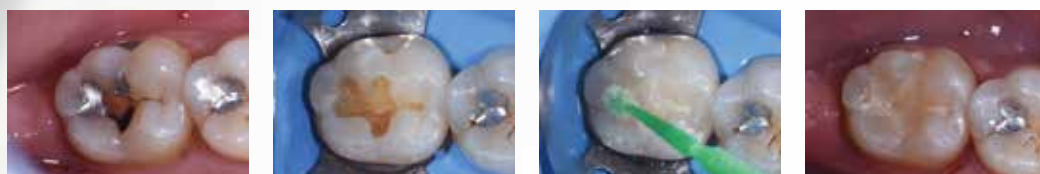

Cortesía del
Dr. V. Cedillo Felix,
(California)

Restauración de un diente posterior en un paciente con elevado riesgo de caries


La tolerancia a la humedad de **EQUIA Forte HT** permite restaurar fácilmente cavidades profundas, incluso cuando no se puede colocar un dique de goma. El uso de la matriz seccional contribuirá a la durabilidad de las restauraciones.



Cortesía del
Dr. Z. Bilge Küçük
(Turquía)

Restauración de dientes sensibles e hipomineralizados con MIH

La adhesión química del material, incluso a la dentina no tratada, ofrece una solución más sostenible cuando hay problemas de adhesión. El material se puede aplicar fácilmente tras una remoción de caries manual, haciendo que sea sencillo de usar en pacientes con hipersensibilidad o pacientes con Hipoplasia Inciso Molar (MIH).

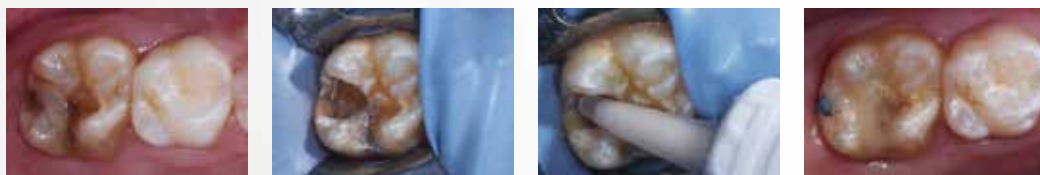

Cortesía del
Dr. P. Rouas
(Francia)

Vidrio híbrido biocompatible de alta densidad con una estética superior

Un sistema basado en la simplicidad,
la estabilidad y la confianza



EQUIA Forte HT Intro Pack

Refs.: 10004846 - A2 / 10004796 - A3

20 cápsulas **EQUIA Forte HT**, A2 Fil ó A3 Fil,
20 monodosis **EQUIA Forte Coat**
y 25 aplicadores.

OFERTA

rec 116,70€ **80,55€**

EQUIA Forte Refill Pack - 50 Cápsulas

Referencias:

10004855 - **GC EQUIA Forte HT Refill Assorted Pack** → 10 Cápsulas de cada color: A2, A3, A3.5, B1, B3

10004873 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, A1** → 50 Cápsulas

10004841 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, A2** → 50 Cápsulas

10004901 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, A3** → 50 Cápsulas

10004872 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, A3.5** → 50 Cápsulas

10004878 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, B1** → 50 Cápsulas

10004856 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, B2** → 50 Cápsulas

10004864 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, B3** → 50 Cápsulas

10004794 - **GC EQUIA Forte HT Refill Pack, C4** → 50 Cápsulas

OFERTA

rec 185,65€ **135,00€**

Por la compra de 400 Cápsulas

SIN CARGO un Vibrador de Cápsulas SilverMix

Ref.: 70000070 (valorado en 380,00€).

SILVER MIX será enviado desde **GC Ibérica**.

Remita su factura de compra a comercial.spain@gc.dental



Verdadera obturación
en bloque



Tolerante
a la humedad



Indicaciones
extendidas



Durabilidad
probada



**Soluciones
posteriores directas**





Essentia® de GC

Abra la puerta de la simplificación.

7 colores para el **90%** de las **restauraciones** & **3 composiciones** para **optimizar** el manejo y las **propiedades óptica**.



Essentia Starter Kit Syringe

Ref. 10003517

7 jeringas (2ml), 1 de cada color: LD, MD, DD, LE, DE, U, 20 Dispensing Tips III Plastic, Essentia molde para guía y soporte de guía.

OFERTA

rec 389,25€

285,00€

3 colores de **Dentina**:

Su manejo es sencillo gracias a su viscosidad suave, para un uso tanto con pincel como con espátula.

2 colores de **Esmalte**:


Le sorprenderá la facilidad de pulido en tan solo unos pasos y la excelente retención del brillo a largo plazo. Es ligeramente más denso para obtener la dureza exterior final.

1 color **Universal**:

Un monocolor para todas sus restauraciones donde no sea necesaria la estratificación, como en las cavidades pequeñas o posteriores.

1 color **Masking Liner**:

Para el bloqueo de decoloraciones.

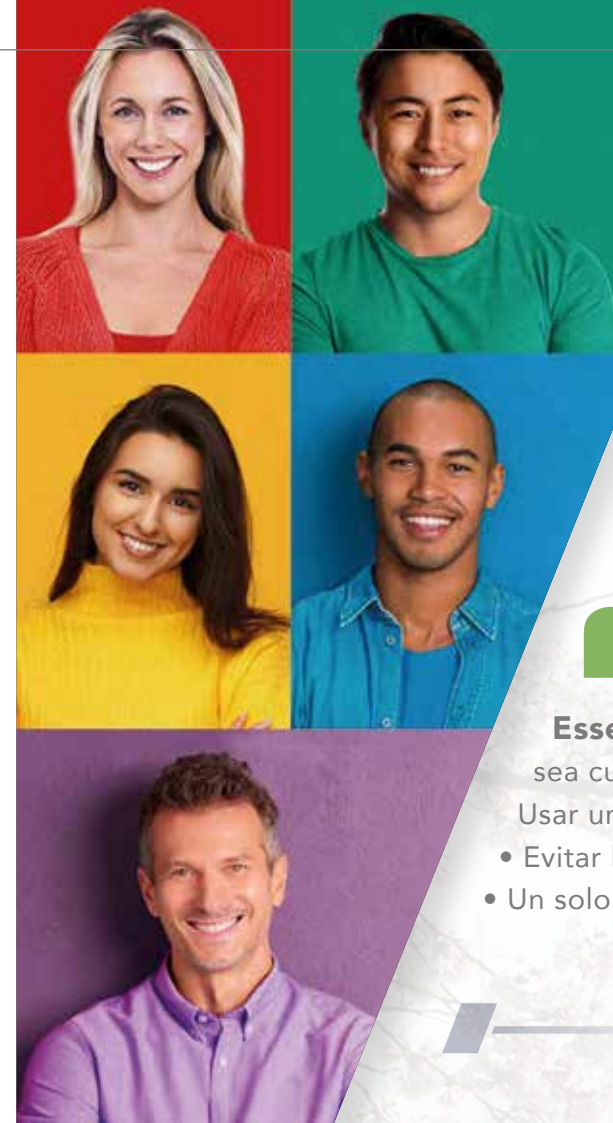

Essentia® Universal

Un color que se ajusta a todo.

Essentia Universal no solo se integra perfectamente, sino que también se adapta a sus preferencias de manejo. Con **tres viscosidades disponibles**, ¡elija la que más le convenga!

¡Descubra la integración perfecta!

Essentia Universal se adapta tan bien que es invisible sea cual sea el color del diente.

Usar un solo color para todos los casos tiene muchas ventajas...

- Evitar la complicación de elegir el color.
- Un solo producto.



Essentia HiFlo
Composite fluido
con una alta
humectabilidad

Essentia LoFlo
Composite Injectable
con una baja fluidez

Essentia
Composite
condensable

Essentia Universal

Ref. 10003524

GC Essentia, Syringe 2ml (4.0g), U

Ref. 10003383

GC Essentia HiFlo, Syringe 2ml (3.6g), U

Ref. 10003385

GC Essentia LoFlo, Syringe 2ml (3.44g), U

OFERTA

rec 61,80€

45,00€ c/u

Essentia Universal,
el composite fotopolimerizable de GC.
¡Un color que se adapta a todo!



G-Premio BOND

Adhesivo universal
monocomponente fotopolimerizable



G-Premio BOND 3 Bottle Pack

Ref. 10001458

3x G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml.



Frasco de silicona
y boquilla fina para una
dispensación más precisa:
hasta 300 gotas
por frasco. Estable hasta
la última gota...

OFERTA

rec 285,00€ **210,00€**

Bote: 70 €/Ud.

¿Por qué Universal?

Universal
en cuanto a los modos de grabado
¡Usted elige!



Autograbado Grabado selectivo Grabado total

Universal
en cuanto a las indicaciones
¡Es multiuso!



Restauraciones directas* Casos de reparación* Tratamiento de la hipersensibilidad**

Universal en cuanto al rendimiento ¡Un rendimiento óptimo en diferentes sustratos!

Gracias a la combinación de tres monómeros funcionales:

para obtener una adhesión fiable
al **esmalte** y la **dentina**

4-MET

MDP

MDTP

para obtener una adhesión
a los **metales preciosos*****

para obtener una adhesión
excelente al **esmalte, zirconio,
alúmina y metales no preciosos**

Fotos cortesía de: * Dr. S. Koide (Japón) / ** Dr. E. Sauji (Japón)
*** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

Solución adhesiva universal



G2-BOND Universal

Liderando el camino hacia
...un nuevo estándar

G2-BOND Universal

El nuevo estándar
de adhesión
universal de 2 botes.



Para todos los métodos de grabado.

Durabilidad superior y mayor fuerza de adhesión.

Fácil manipulación y dispensación.

Sin sensibilidad postoperatoria ni capa de adhesión estética.

G2-BOND Universal Kit

Ref. 13645

G2-BOND Universal,
1x 1-PRIMER Bottle Kit 5ml,
1x 2-BOND 5ml,
Accesorios.

OFERTA

rec 171,45€ **125,00€**



Ideal para la Técnica IDS (Sellado Dentinario Inmediato)



Grabado de la
estructura dental



Aplicación del
1-PRIMER



Aplicación del
2-BOND



Después de la fotopolimerización,
la dentina sellada está lista
para la impresión digital



FujiCEM™ Evolve

Innovador cemento de
ionómero de **vidrio modificado** con resina:

Viscosidad óptima

- ✓ Extrusión controlada para un procedimiento sencillo.
- ✓ Grosor de película reducido y adaptación precisa.
- ✓ Opción de fijación con polimerización para facilitar la retirada del exceso (Tack-cure).

Rendimiento fiable

- ✓ Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- ✓ No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
- ✓ Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
- ✓ Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
- ✓ Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- ✓ Excelente sellado y adaptación marginal.



La solución al zirconio

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Ref. 10004928

3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
45x «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

rec 267,35€

195,00€



FujiCEM Evolve Single Pack

Ref. 10004926

1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

rec 104,80€

77,00€



FujiCEM™ Evolve
TEMPSMART™ DC
FREEGENOL

TEMPSMART™ DC

Un camino agradable hasta su
restauración final.

Composite de polimerización dual para
coronas y puentes provisionales.

TEMPSMART DC - Cartridge 48ml

Referencias:

10001463 - A1 / 10001464 - A2 / 10001465 - A3
10001466 - A3.5 / 10001467 - B1 / 10001468 - BW

Cartridge 48ml

OFERTA

rec 117,40€

85,80€



Elija el camino Inteligente: Se puede **fotopolimerizar** por lo que puede ahorrarle tiempo haciendo que sea más fácil y rápido el proceso.



Elija el camino Seguro: Material ideal para provisionales de larga duración y para puentes de gran envergadura, gracias a la **red de polímeros de alta densidad**.



Elija el camino Atractivo: Se puede pulir fácilmente para obtener un nivel de **brillo elevado**.



Elija el camino Fácil: Garantiza una **excelente polimerización** para superficies duras, lisas y no pegajosas, y sin apenas capa de inhibición, porque no usamos plastificantes en su composición.

FREEGENOL

Cemento de fijación sin eugenol para la **cementación provisional** de **restauraciones indirectas**.

Es totalmente compatible y seguro para su uso con materiales de resina acrílica. Biocompatible con la estructura dental y el tejido blando, **FREEGENOL** es fácil de usar y se mezcla hasta alcanzar una consistencia suave y cremosa.

Ref. 10000009

1x GC FREEGENOL
TEMPORARY 1-1 Pack

OFERTA

rec 61,90€

35,00€




D-Light® Pro

Vea lo que el ojo no ve

Lámpara de fotopolimerización LED
con doble longitud de onda,
que abre los ojos a lo invisible:

Fotopolimeriza, Protege y Detecta

- ✓ Pequeña como un bolígrafo y ligera, 90 grs.
- ✓ Visualización por fluorescencia de la actividad bacteriana y de los excesos de antiguas restauraciones o cementos.

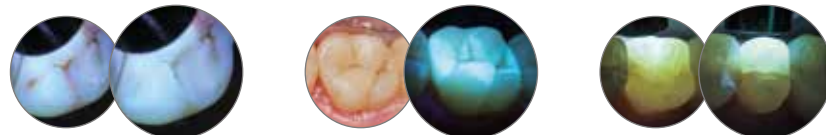

- ✓ Autoclavable: Retirar el módulo electrónico y la batería antes del tratamiento en autoclave.

¡La primera lámpara autoclavable!



D-Light Pro Kit

Ref. 70000008

Pieza de mano (funda & módulo electrónico),
Guía de luz de 8mm, 2 packs baterías,
Estación de carga, Fuente de alimentación,
Adaptadores UE/UK, Protector ocular duro,
3 protectores oculares blandos.



OFERTA

rec 1.432,10€ 985,00€

✓ 3 años de garantía
(Excepto para la batería, 1 año)

GRADIA™ CORE de GC

Composite de polimerización dual para la reconstrucción
de muñones y la cementación de postes

Simplifique su trabajo diario con un sistema inteligente

- Fácil adhesión en menos pasos
- Cómodo sistema de dispensación en cartuchos
- Cementación y reconstrucción de muñones con un único material
- Sensación al tallar similar a la de la dentina
- Radiopacidad superior al esmalte

Post-cementación y
reconstrucción de muñones
en un material tixotrópico



Unión segura
con adhesión universal



Polimerización óptima
de todos los componentes



Fuerte y homogéneo
para una base sólida



GRADIA CORE Intro Pack

Ref. 10004896

1 GRADIA CORE cartucho 10ml (20g);
1 G-Premio BOND 5 ml;
1 G-Premio BOND DCA 3ml;
20 puntas de mezcla,
20 puntas de extensión Endo
y pistola dispensadora.

OFERTA

rec 250,80€ 185,00€



El tratamiento de las hipersensibilidades

Refuerza, Restituye y Protege
con cada pincelada

MI Varnish Refill Pack Fresa o Menta

Ref. 10003390
35 monodosis MI Varnish Refill **Fresa**
(35x0,50ml), 50 pinceles.

Ref. 10003391
35 monodosis MI Varnish Refill **Menta**
(35x0,50ml), 50 pinceles.

PVP REC
108,70€



Aplicación MI Varnish vs Duraphat. Dr. Stephane Browet.

- ✓ Color neutro con translucidez natural.
- ✓ No se produce ningún cambio de color al aplicarse sobre el diente.

Tooth Mousse 10-Pack

Calcio y fósforo biodisponibles.
Crema dental remineralizante, sin azúcar
y de uso tópico con RECALDENT™ CPP-ACP.



PVP REC
201,80€

Mínima intervención

MI Paste Plus 10-Pack

Calcio, fósforo y flúor biodisponibles. Crema dental
remineralizante, sin azúcar y de uso tópico con
RECALDENT™ CPP-ACP y flúor.



PVP REC
225,65€

Sabores:
melón, fresa, macedonia, menta y vainilla;
40g (35ml) por tubo.



Una innovadora
tecnología de implantes

Un kit para los 3 perfiles de implantes:
Estándar, Cónico, Corto

3 Diámetros: 3,3N - 4R - 5W

Longitud: de 6 a 14mm

Tratamiento menos invasivo.

Tecnología de superficies Anchor® para una
Osteointegración mejorada.

Conexión fiable:
cono morse y hexágono interno.



30 implantes (incluyendo tornillo de cierre)
+ Kit quirúrgico.

Descuento
52,7%

OFERTA INICIAL*

rec 7.200,00€ **3.400,00 €**

* limitada a una por cliente

Más características del implante...

- Cuello mecanizado para la profilaxis de periimplantitis.
- Rosca autorroscante para una inserción suave y mínimamente invasiva.
- Geometría angular externa del cuello del implante.
- Reduce el riesgo de periimplantitis.
- Microespiras de la corona.
- Promueve la rigidez del cuello del implante y distribuye el estrés óseo periférico.



Para cualquier información adicional, póngase en contacto con el
delegado comercial de su zona o a través de comercial.spain@gc.dental.

www.gctech.eu/es/





Un nuevo estándar en educación y formación

ENE'23

25 - WEBINAR

Manejo del dolor en MIH

Dra. Patricia Gatón y Esther Ruiz de Castañeda

26 - MADRID ▶



Estampado e inyectado: Sector Posterior

Dra. Olga González

26 & 27 - LEUVEN

Simplicidad, estética y rendimiento en tus manos

Dra. Simone Moretto

FEB'23

2 & 3 - LEUVEN

Simplicidad, estética y rendimiento
en tus manos

Dra. Simone Moretto



◀ 9 - MADRID

Maquilla tus restauraciones en clínica

Sergi Barcia

10 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rehabilitación directa sector anterior

Dr. Jesús Peláez



◀ 23 - MADRID

Técnica de inyectado y estampado

Dra. Sara Rodríguez

ABR'23

14 - ALMERIA

Rehabilitación directa sector anterior

Dr. Jesús Peláez

MAR'23



◀ 3 - MADRID

Restauraciones CAD/CAM

Dr. Javier Tapia

20 & 21 - LEUVEN

Soluciones estéticas en restauraciones
indirectas de CAD/CAM

Dra. Simone Moretto

24 - VIGO

Rehabilitación directa sector anterior

Dr. Jesús Peláez

27 & 28 - LEUVEN

Soluções estéticas e restaurações
directas e indirectas

Dr. Adriano Teixeira

MAY'23

11 - WEBINAR

Hipomineralización Incisivo Molar

Dra. Rocio Lazo

12 - ALMERÍA

Rehabilitación directa sector anterior

Dr. Jesús Peláez

JUN'23



◀ 2 - MADRID

Estratificar, inyectar o estampar:
Sector anterior y posterior

Dr. Bora Korkut



◀ 9 - MADRID

Composites fluidos. Aplicaciones clínicas

Dr. Javier Ortega

12 & 13 - LEUVEN

Simplicidad, estética y rendimiento en tus manos

Dra. Simone Moretto



◀ 23 - MADRID

Composite smile makeup

Dr. Javier Tapia



¡Tenemos un **curso** a su medida!

Encuentre todos los **cursos actualizados** en nuestra página web:

