



INITIAL™ IQ ONE SQIN
Nuevo concepto de microestratificación
más info pág. 4

GC Ibérica

Ofertas y Novedades

Julio - Diciembre 2023

GC


¡Felicidades Initial!

20 años de innovación y creatividad

un mundo de di
un sistema
riqueza,



versidad infinita y sorprendente belleza natural de cerámica para una belleza y simpleza

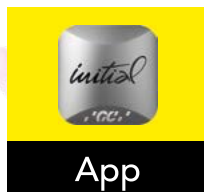

App



Guía de Estratificación de Initial

Para ayudarle a conseguir unos resultados óptimos con su gama de cerámicas, hemos desarrollado una **herramienta exclusiva** que le guiará a través de una **presentación en 3D** por las diferentes fases de aplicación de **Initial**.

La **Guía de estratificación GC Initial** le guiará, de una forma sencilla, a través del proceso de estratificación de las diversas capas de la restauración. Durante el paso a paso, podrá girar la restauración en cualquier momento para obtener una **visión perfecta de cómo estratificar las diferentes masas**. Las imágenes pueden cambiarse a vista estándar, vista transparente o vista de contorno para una visualización óptima. Es más, encontrará las **instrucciones de cocción** perfectas, las **guías de color** correspondientes y muchas otras características que le ayudarán a sacar el máximo partido de las cerámicas Initial. presente un valor bajo.

¿Por qué no empezar mañana?

Si aún no conoce las muchas ventajas que ofrece Initial, no dude en ponerse en contacto con GC para obtener más información y/o solicitar un estuche de prueba en Initial.Spain@gc.dental.



¡Tenemos un curso a su medida!

Encuentre todos los **cursos actualizados** en nuestra página web:



Solicite su oferta personalizada. **Descuentos** de hasta el **50%** para clientes nuevos.

¡Nuevo concepto de microestratificación -

La solución rápida y sencilla para los

Con **GC Initial IQ ONE SQIN**,
resultados estéticos de calidad, comparables

GC Initial IQ ONE SQIN System Set

Ref.: 10006991

GC Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g
10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g; 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml
5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
IQ LP ONE Mixing Dish
IQ LP ONE Brush 00, Brush 2
IQ ONE SQIN Manual
SPS Colour Chart

OFERTA* (50% Dto)**

rec 1.645,35 €

822,65 €

**Solicitar condiciones para
adquirir el descuento.



Soluciones protésicas

Initial™ IQ, ONE SQIN de GC

initial™
IQ ONE SQIN

monolíticos y la microestratificación en zirconio y Disilicato de Litio.

el sistema de cerámica para dar color y forma pintando, podrá obtener de forma rápida y sencilla a las restauraciones estratificadas convencionales, pero con un importante ahorro de tiempo.

¿Por qué elegir Initial ONE SQIN? ...tantas razones!

Estética comparable a la cerámica estratificada pero con un ahorro de tiempo considerable.

Fluorescencia natural bajo todas las circunstancias.

Verdaderamente **O**palescente.

Propiedades de autoglaseado.

Infinitas posibilidades de caracterización con **Lustre Pastes ONE & Spectrum Stains**.

La **S**olución ideal para las restauraciones anteriores y posteriores de disilicato de litio y zirconio.

La técnica ONE SQIN para todas sus restauraciones con zirconio y disilicato de litio

- Cree detalles de forma y textura fina en la fase húmeda: **sin cambios tras la cocción**.
- Propiedades de **autoglaseado**: consiga un bonito glaseado con una sola cocción.
- Nivel de **fluorescencia** óptimo: garantiza el aspecto natural de los dientes en cualquier condición lumínica.
- **Estética máxima** dentro de una microcapa.



GC Initial IQ ONE SQIN,
maquillando un monolítico con
Lustre Pastes ONE



Microcapas con IQ ONE SQIN
Maquillaje con Lustre Pastes ONE
MDT Andreas Pilch,
Hetjens Dental-Labor, Alemania



MDT Michael Brusch,
Alemania



DT Carsten Fischer,
Alemania



DT Carsten Fischer,
Alemania



MDT Andreas Pilch, Hetjens Dental-Labor, Alemania



MDT Patric Freudenthal,
Suecia

Initial™ IQ, Lustre Pastes ONE -

Initial Lustre Pastes ONE, exclusiva cerámica en 3D para maquillar

Pinte su estética en rojo y blanco con

Dos sistemas, un método



Punto de partida




Aplicación de los diferentes colores Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades



Con la creciente popularidad del zirconio y las restauraciones producidas con CAD/CAM, **GC ofrece soluciones que permiten mantener los mismos estándares estéticos.** Sus estructuras monolíticas tendrán un aspecto natural y radiante con **Initial Lustre Paste ONE & NF GUM.** Su composición única ofrece una mayor interacción con el material cerámico subyacente y actúa ópticamente como los polvos de reconstrucción cerámica, lo que potencia el efecto 3D de su restauración.

¡La sencillez
puede ser hermosa!

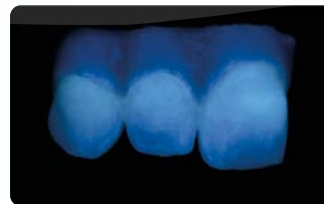

El nivel óptimo de fluorescencia de las **Lustre Pastes ONE** asegura el aspecto de los dientes naturales debajo de cualquier circunstancia de luz y se utilizan como capa de color e individualización en combinación con **Initial IQ SQIN** en la técnica de micro capas.



- El arte de pintar cerámica

que aportan fluorescencia, profundidad y autenticidad a todos sus valiosos trabajos... simplemente pintando.

transiciones naturales, incluso sobre estructuras de zirconio



Caracterización con colores
LP ONE V-Shades



Resultado final



Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set

Ref.: 10007017

Neutral L-N, 4g;
Neutral Fluo L-NFL, 4g;
Value L-V, 4g; 1x Opal L-OP (4g);
Diluting Liquid, 8ml;
Refresh Liquid, 8ml;
1x Mixing Dish; Brush 00; Brush 2;
4x Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D), 4g;
10x Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4,
L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10), 4g;
IQ LP ONE Colour Chart;
Manual.



OFERTA

rec 947,85 €

640,00 €

Initial IQ Lustre Pastes GUM Shades Set

Ref.: 10003186

5x IQ LP NF Lustre Paste
(G-23,24,34,35,36), 4g,
4x Stain Modifier
(LP-M1,M2,M3M4), 3g,
IQ LP NF Diluting Liquid, 8ml,
IQ LP NF Refresh Liquid, 8ml,
IQ LP NF mixing dish,
IQ LP NF Brush A, Brush B,
IQ LP NF, Manual



OFERTA

rec 524,25 €

320,00 €





Initial™ LiSi Press

initial™
LiSi Press

La nueva cerámica de **Disilicato de Litio inyectable** con la **estética** y la **resistencia** que los protésicos dentales exigen sin que presente un valor bajo.

- **Fluorescencia, brillo y naturalidad**

En todas las circunstancias combinando LiSi Press e Initial LiSi.

- **Una estructura cristalina más fina y más densa**

Un Disilicato de Litio más suave con menos desgaste del diente en sí y el antagonista.

- **Un proceso más rápido y sencillo**

Requiere menos pasos y le ahorrará, al menos, **15 minutos** por restauración, gracias a su nuevo proceso exclusivo.


- **Una resistencia superior - 508 MPa**




¡Por fin!

Una cerámica de **disilicato de litio con la estética** y la **resistencia que los protésicos dentales** exigen sin que presente un valor bajo.


Alta Translucidez (HT)

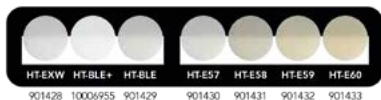


Media Translucidez (MT)

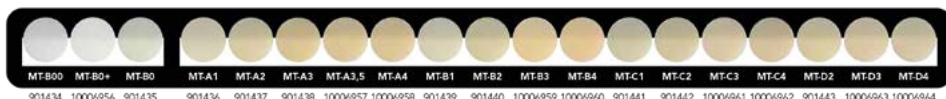

Baja Translucidez (LT)

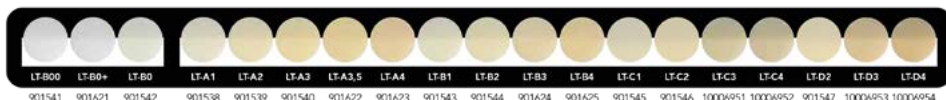

Baja Translucidez
Concepto One body
(LT-IQ)

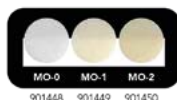

Media Opacidad (MO)

OFERTA

rec 109,65 €

74,00€

Initial LiSi Press

5x Initial LiSi Press, 3g



G-CEM ONE™

Cemento de resina universal, autoadhesivo y dual.


- Diseñado para la adhesión definitiva de restauraciones indirectas de composite, total-cerámica y metal.
 - Ideal para la cementación de aditamentos híbridos en el propio laboratorio.
 - Garantiza una fuerza de adhesión y durabilidad inigualables tanto al titanio y zirconia, sin la necesidad de aplicar un pre-tratamiento con Primers.
- ¡Mínimo espesor (5µm) - ajuste perfecto!

Cementación extraoral de aditamentos híbridos



Con la punta de mezcla, aplicar el cemento alrededor de la circunferencia de la parte superior del aditamento de Ti. El cemento fluirá lentamente hacia abajo. Esto le ayudará a evitar burbujas en la línea del cemento.

Importante: Siempre desechar la primera pasta extruida de la punta de mezcla ya que puede no presentar una dosificación ideal de las pastas A y B.

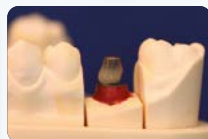

Colocar el aditamento de Zr en su posición. El tiempo de trabajo del cemento es 2'45" desde el inicio de la mezcla. No permita ningún movimiento del aditamento de Zr.



Fotopolimerizar cada lado durante 20seg. con una lámpara halógena/ LED con un mínimo de 700 mW / cm² (longitud de onda entre 430 y 480 nm).



Retirar los excesos. Alternativamente, esto se puede hacer antes de la fotopolimerización. Para ello, espere hasta que el cemento alcance una consistencia gomosa para eliminar los excesos.



Aditamento híbrido después de la cementación.



Pulir los márgenes con una goma de pulido y Gradia Diapolisher.



¡Simplemente EL ÚNICO!

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

G-CEM ONE

Single Refill AO3 o WO

1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.

OFERTA

rec 70,75€

51,75€

G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 10006925

8x G-CEM ONE Syr A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

OFERTA

rec 428,90 €

315,00€

Jeringa: 39,40 €/Ud.



Soluciones protésicas

GRADIA® PLUS

Donde la innovación confluye con la indicación

Sistema de composite modular para restauraciones indirectas

Descubra GRADIA PLUS, el sistema de composite indirecto de vanguardia que superará todas sus expectativas en torno a los materiales de restauración, para un amplio espectro de indicaciones y técnicas, desde reconstrucciones clásicas o muticromáticas hasta enfoques monolíticos.

El concepto:

- + Racional (menos = más...)
- + Modular (compre lo que necesite)
- + Una estética en rojo y blanco....en perfecta armonía
- + Una amplia gama de indicaciones
- + Una sola unidad para todas las polimerizaciones
- + Reducción de costes



Fotos: S. Maffei



GRADIA PLUS – Técnica de Inyección
cortesía de Roeland De Paepe.

PROMO



GRADIA



- 2 texturas: pasta y fluido (Heavy Body & Light Body)
- Masas fluorescentes y opalescentes
- Resistencia a la flexión: 160 MPa - Dureza: 60 Hv

LAYER SET

Ref.: 10003559

rec 1.148,30€

575,00€

LAYER PRO SET

Ref.: 10003652

rec 1.039,40€

520,00€

ONE BODY SET

Ref.: 10003562

rec 640,70€

320,00€

PAINT SET

Ref.: 10003560

rec 725,30€

363,00€

GUM SHADE SET

Ref.: 10003561

rec 749,40€

375,00€

ACCESORY SET

Ref.: 10003563

rec 652,75€

326,00€

* Solicitar condiciones para adquirir el descuento.



OPTIGLAZE® color

Soluciones de maquillaje
fotopolimerizable

Ref. 10001150

2,6ml (A Plus, B Plus, C Plus, Blanco, Blanco Marfil, Pink, Amarillo, Naranja, Marrón rojizo, Oliva, Rosa anaranjado, Lavanda, Gris, Azul, Rojo). Clear 5ml, Clear HV 5ml, Pincel plano, Pincel redondo, bandeja dispensadora desechable.

OFERTA

rec 810,65 €

595,00 €



Durabilidad: color, brillo y alta resistencia al desgaste para todas sus restauraciones.

Rápido: listo para usar, fácil manejo y tiempo de pulido reducido.

Estética: 17 colores para la caracterización interna y externa.



Caracterización de acrílicos
con OPTIGLAZE color



GRADIA® PLUS
OPTIGLAZE® Color
Labolight DUO

Labolight DUO

Unidad de fotopolimerización
de luz LED

1 máquina...2 modos de
polimerizado:

- Pre-polimerizado (*modo paso a paso*)
- Polimerización final (*modo completo*)

Labolight DUO

Ref. 10001246



PROMO

rec 3.359,60€


2.545,00 €

La tecnología LED de doble longitud de onda con dos picos de intervalos espectrales de:

- 465 nm - 485 nm (12 ledes azules)
- 390 nm - 400 nm (3 ledes violeta)

Fácil utilización

Sistema rotatorio automatizado y placa reflectante

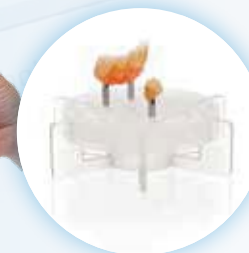

Precios y contenidos válidos del 1 de Julio al 31 de Diciembre 2023 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

NUEVO

Aadva™ ALS 2+



A todo color

Escaneo de texturas; alto contraste y resolución



Velocidad y calidad

Eje Z automatizado y pantalla táctil



Cámara Full HD 5 MP

Triangulación con luz por franjas, luz azul LED

exocad

Integración total con Exocad

Archivos abiertos (STL y PLY)

Precisión constante

Precisión de 4 micras según ISO 12836

Escaneado

de arcada completa en 18s.



Solicite información de su cuota mensual mediante renting

OFERTA

rec 16.500 €

11.500 €

(sin ordenador)



GET CONNECTED
SMILE
PROGRAM

El **Programa de Sonrisas** de **Get Connected** es accesible a través de una aplicación móvil que podrá descargarse desde Google Play Store y Apple Store. Así podrá tener acceso a los productos de **GC**, artículos, videos, webinars, formaciones y "sonrisas" ("smiles") por participar y mucho más....

GC



Descárgate
la APP