


GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JULI BIS DEZEMBER 2025

PRAXIS

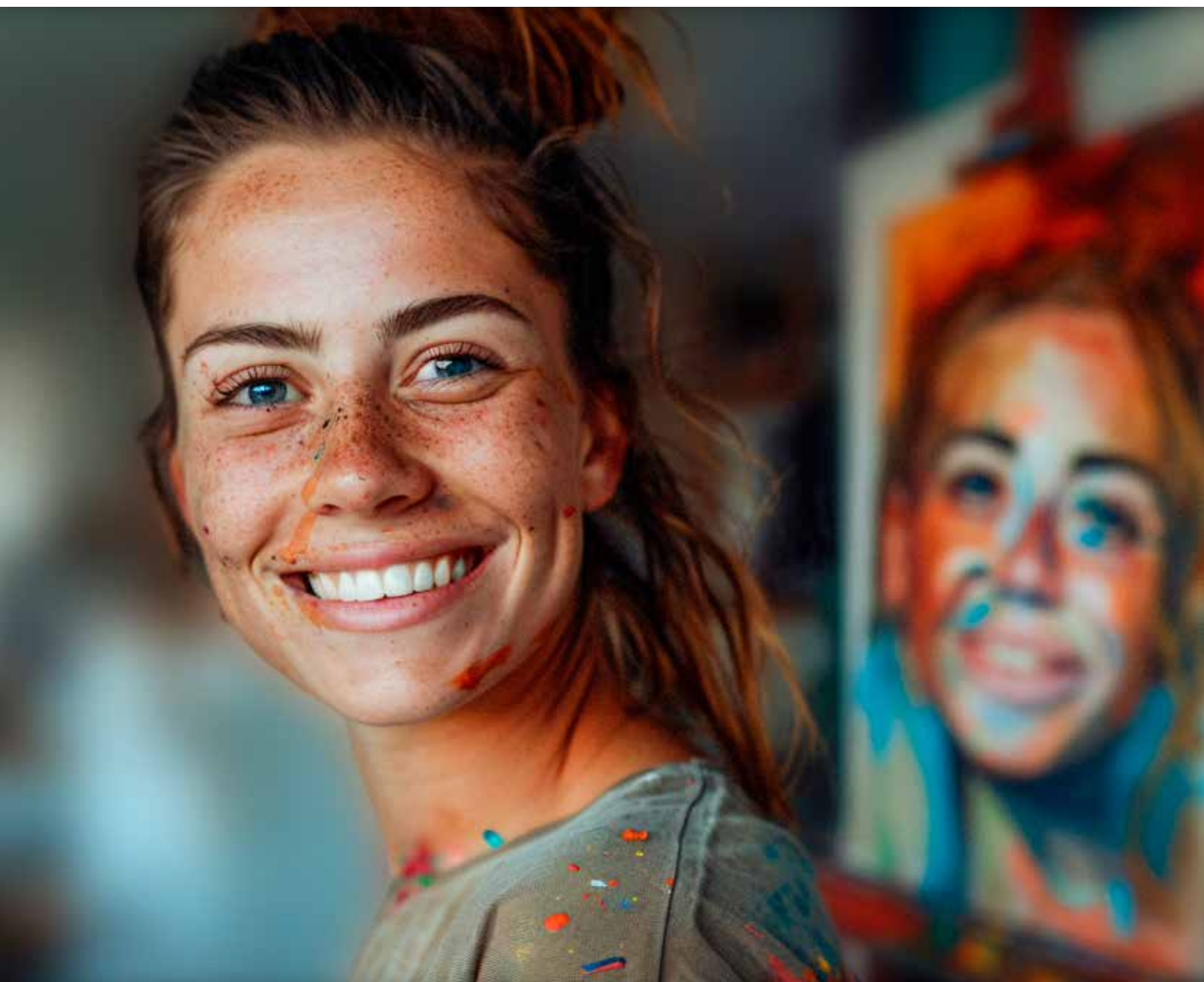

Since 1921
100 years of Quality in Dental



Für ein strahlendes Lächeln

Von direkt bis indirekt – mit Know-how und Kreativität

Ein schönes Lächeln stärkt das Selbstvertrauen, hebt das Selbstwertgefühl – und öffnet Türen, privat wie beruflich. Für Patienten, die sich ein schöneres Lächeln wünschen, ist eine direkte Behandlung in der Regel die erste Wahl. Denn oft reichen schon kleine, gezielte Massnahmen für ein dauerhaft attraktives Lächeln. Scannen Sie den QR-Code auf der Seite und erfahren Sie mehr!



Alle Produkte unserer „Für ein strahlendes Lächeln“-Kampagne sind mit diesem Hinweis gekennzeichnet.

Dauerhafter Verbund

Schönheit, die bleibt



Weniger ist mehr - den passenden Behandlungsweg finden

Injection-Moulding-Technik



- Am wenigsten invasiv, erhält natürliches Gewebe
- Kostengünstig
- Reparaturfähig



Abgenutzte, erodierte Zähne.



Eine leichte Präparation ist möglich, insbesondere wenn eine KFO-Behandlung nicht in Frage kommt.



Eine dünne Schicht **G-Premio BOND** sorgt für eine starke, dauerhafte Haftung – nach vorherigem Ätzen des Schmelzes.



Injection-Moulding-Technik mit **G-aenial Universal Injectable**.



Die Form wird vom Wax-up kopiert, was Zeit beim Finieren und Polieren spart.



G-aenial Universal Injectable lässt sich leicht auf Hochglanz polieren.



VORHER



NACHHER

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. M. Fostiropoulou, Griechenland

Veneers



- Minimalinvasiv
- Äusserst langlebig
- Hervorragende Ästhetik



Erhebliche Abrasion und Erosion. Palatinal waren bereits Veneers eingegliedert worden.



Minimalinvasive Zahnpräparation.



Initial LiSi Block ist vollständig kristallisiert und kann auf Hochglanz poliert werden. Kein Brennen erforderlich.



Die adhäsive Befestigung erfolgt idealerweise unter absoluter Isolierung.



Verkleben der Veneers mit einem zuverlässigen Befestigungskomposit (z. B. **G-CEM ONE**).



Die Oberflächen haben einen schönen Glanz und eine natürliche Textur.



VORHER



NACHHER

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. M. Fostiropoulou, Griechenland

Kronen



- Schutz des verbleibenden Gewebes
- Äusserst langlebig
- Hervorragende Ästhetik



Ausgangssituation mit grossen Kompositrestaurationen und freiliegenden Zahnhälsen.



Nach der Zahnpräparation.



Restaurationen aus Zirkonoxid bieten hohe Festigkeit und Ästhetik.



FujiCEM Evolve gewährleistet eine zuverlässige Befestigung.



Nach dem Anpolymerisieren lassen sich Überschüsse leicht entfernen.



Für die Kronen war Zirkonoxid das Material der Wahl.



VORHER



NACHHER

Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. R. Sorrentino, Italien

Die hydrolytische Degradation ist die grösste Gefahr für einen dauerhaften Haftverbund. Zahnschmelz sollte stets so weit wie möglich erhalten werden, im Dentin sollten HEMA-freie, hydrophobe Adhäsive und Kunststoffzemente oder Glasionomerzemente zum Einsatz kommen.

Minimalinvasiv

Je nach Ausgangssituation können indirekte Versorgungen auch minimalinvasiv sein.



G-Premio BOND
Lichthärtendes
Einkomponenten-
Universaladhäsiv

**G-aenial Universal
Injectable**
Hochfestes Universal-
Komposit

**Initial™ LiSi Press
und Block**
Hochwertige Lösungen
mit Lithium-Disilikat

**Initial Zirconia Disk
Multilayer Elite**
CAD/CAM-Zirkonoxid-
Ronden

Initial IQ ONE SQIN
Keramiksistem für
Maltechnik und Micro-
Layering

G-CEM™ Veneer
Lichthärtendes
Befestigungskomposit

G-CEM ONE™
Universelles,
selbstadhäsives
Befestigungskomposit

FujiCEM™ Evolve
Kunststoffverstärkter
Paste-Paste-
Glasionomerzement

G2-BOND Universal

Der neue Standard der
2-Flaschen-Universal-Bondings –
wegweisend für einen
neuen Standard in Ihren Händen

G2-BOND Universal mit seiner patentierten
Dual-H-Technologie, die für fortschrittlich
optimierten Haftverbund sowohl am Zahn als
auch am Komposit sorgt, ist ein vielseitig
einsetzbares 2-Flaschen-Universal-System,
das die zahnärztlichen Anforderungen in
Hinblick auf die existierenden Goldstandards
für Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER)
erfüllt und darüber hinaus folgendes bietet:

- Auswahl des bevorzugten Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit und
erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit
gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung
und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes und ergo-
nomisches Design: 1-PRIMER / 2-BOND

Optimal geeignet
für die IDS-Technik
(IMMEDIATE DENTIN
SEALING Technik)!

Ein neuer 2-Flaschen-Bonding-Standard
für alle Ätzverfahren

Für eine rundum Zufriedenheit und
den Komfort Ihrer Patienten!



Verkleinerter Kontaktpunkt
zwischen Schutzhülle
und Flasche

Lamelle für effektives
Drücken der Flasche

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an
Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an
Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid,
Aluminiumoxid und Nichteelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch
nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

¹ Indikationen: Direkte Komposite | Intraorale Reparatur | Sofortige Dentinversiegelung (IDS) | Behandlung von Hypersensibilitäten |
Behandlung freiliegender Wurzeloberflächen | Befestigung indirekter Restaurationen (mit G-CEM LinkForce) | Stiftbefestigung & Stumpfaufbau
(mit GRADIA CORE & GPB DCA).



JETZT EINSTEIGEN

174,10 CHF

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
Zubehör;
174,10 CHF pro Flaschen Kit

Weitere Verpackungseinheiten:
Nachfüllpackungen

Art.-Nr. 10006821
G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill
1 x Flasche 5 ml; 127,50 CHF

Art.-Nr. 10006822
G2-BOND Universal 2-BOND Refill
1 x Flasche 5 ml; 53,90 CHF



G-Premio
BOND DCA

die duale Aushärtung
mit GRADIA CORE bei
Stiftbefestigung und
Stumpfaufbau

G-PREMIO BOND
BOTTLE

111,60 CHF

Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 Flasche à 5 ml,
111,60 CHF pro Packung

Weitere erhältliche
Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10001242
G-Premio BOND Unitdose
50 Stück à 0,1 ml, Zubehör;
140,40 CHF

Art.-Nr. 10001457
G-Premio BOND Kit
1 Flasche 5 ml, Zubehör;
141,60 CHF

Art.-Nr. 10001349
G-Premio BOND DCA
1 Flasche 3 ml Dual
Cure Activator (DCA);
58,30 CHF

G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für

Direktes
Bonding


Reparaturfälle

Indirekte
Befestigung


Stumpfaufbauten

Behandlung von
Überempfindlichkeiten


Kann mit allen
Ätzverfahren
angewendet werden

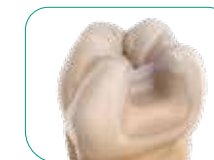

Keine Kompromisse in der Leistung – Keine Kompromisse in der Anwendung

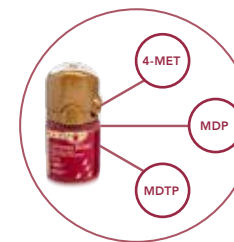

3 funktionelle
Monomere:
hoher Haftverbund
an Dentin, Schmelz
und Zr, Al, NEM
& EM

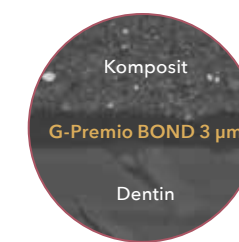


Komposit

G-Premio BOND 3 µm

Dentin

Geringe Filmstärke:
vermindertes
Risiko von
Verfärbungen,
perfekte Rand-
passung & hohe
Ästhetik

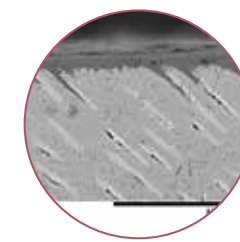

Ausgezeichnete
Durchdringung:
geringe
postoperative
Empfindlichkeiten

PREISVORTEIL

BUNDLEPACK G-ænial Universal
Injectable + G-Premio BOND

~~273,30 CHF~~ 225,- CHF

Art.-Nr. 10003741
**G-ænial Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Inhalt: G-ænial Universal Injectable
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml),
1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND
5 ml Flasche, Zubehör
225,- CHF (Preis pro Bundlepack)



Praktische
Flip-Top
Kappe



Weniger
Abfall

schmale Öffnung:
bis zu 300 Tropfen
pro Flasche

G-PREMIO BOND 3ER-PACKUNG

G-ÆNIAL ACHORD
SPRITZE ODER UNITIPS
GRATIS

Kaufe 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Packung
und erhalte zusätzlich 1 x G-ænial A'CHORD
Spritze oder Unitipspackung gratis!

Gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

G-PREMIO BOND
PACKUNG

G-ÆNIAL UNIVERSAL
INJECTABLE GRATIS

Kaufe 1 x G-Premio BOND
(gültig für alle erhältlichen G-Premio
BOND Packungen) und erhalte
zusätzlich 2 x G-ænial Universal
Injectable Spritzen oder
Unitipspackungen gratis!

Gültig für alle G-Premio BOND
Verpackungseinheiten
und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.
Farbmix möglich.

PREISVORTEIL

G-Premio BOND 3-Flaschen-Packung

285,50 CHF

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; 285,50 CHF pro Packung

G-ænia™ Universal Injectable

Hochfestes Füllungskomposit

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.



- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 **AB 43,90 CHF**

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænia Universal Injectable zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-ænia Universal Injectable zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Hier geht's zu den Videos



PREISVORTEIL

BUNDLEPACK G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND
~~273,30 CHF~~ **225,- CHF**

Art.-Nr. 10003741

G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND Bundlepack



Inhalt: G-ænia Universal Injectable je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND 5 ml Flasche, Zubehör 225,- CHF (Preis pro Bundlepack)



Aussergewöhnliche Stärke und Verschleissfestigkeit

Injizieren, Formen und Konturieren zugleich

3 in 1 Formen und Konturieren während der Injektion

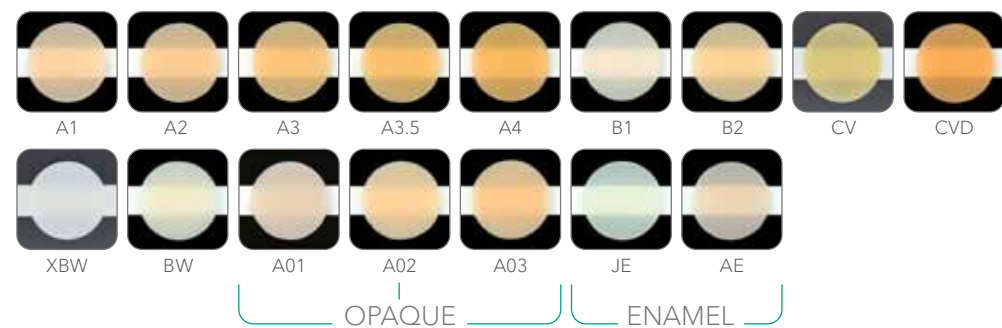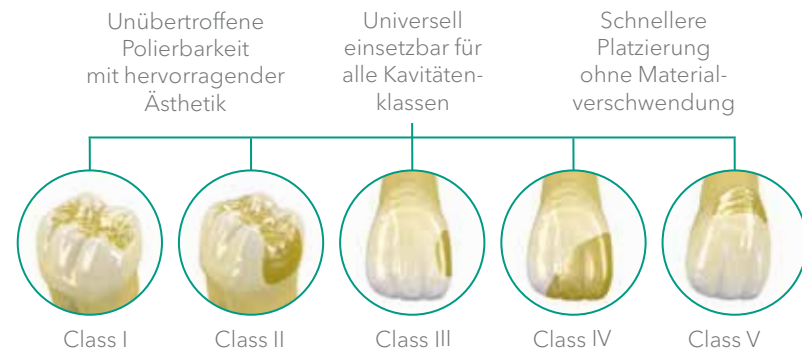

G-ænia Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 43,90 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10003705 **A1**
Art.-Nr. 10003706 **A2**
Art.-Nr. 10003707 **A3**
Art.-Nr. 10003708 **A3.5**
Art.-Nr. 10003709 **A4**
Art.-Nr. 10003718 **AE**
Art.-Nr. 10003714 **AO1**
Art.-Nr. 10003715 **AO2**
Art.-Nr. 10003716 **AO3**
Art.-Nr. 10003710 **B1**
Art.-Nr. 10003711 **B2**
Art.-Nr. 10003704 **BW**
Art.-Nr. 10003712 **CV**
Art.-Nr. 10003713 **CVD**
Art.-Nr. 10003717 **JE**
Art.-Nr. 10003703 **XBW**

G-ænia Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 66,10 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006896 **A1**
Art.-Nr. 10006897 **A2**
Art.-Nr. 10006898 **A3**
Art.-Nr. 10006899 **A3.5**
Art.-Nr. 10006900 **A4**
Art.-Nr. 10006909 **AE**
Art.-Nr. 10006905 **AO1**
Art.-Nr. 10006906 **AO2**
Art.-Nr. 10006907 **AO3**
Art.-Nr. 10006901 **B1**
Art.-Nr. 10006902 **B2**
Art.-Nr. 10006911 **BW**
Art.-Nr. 10006903 **CV**
Art.-Nr. 10006904 **CVD**
Art.-Nr. 10006908 **JE**
Art.-Nr. 10006910 **XBW**

Injection-Moulding-Technik

Neuartige Spritzgusstechnik zur Behandlung von Patienten mit hohen ästhetischen Ansprüchen



Sehen Sie hier Injection-Moulding-Techniken!



PREISVORTEIL

10% 140,40 CHF
~~156,- CHF~~

Art.-Nr. 10003753

Injection Moulding Kit

Inhalt: je 1 Spritze G-ænia Universal Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Kartusche 48 ml;

140,40 CHF anstatt 156,00 CHF



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung Für Komposite, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzit-verstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperative Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 6.



Nähere Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 5.



JETZT INFORMIEREN



Injection-Moulding-Technik mit EXACLEAR und G-ænia Universal Injectable mit Dr. Serhat Köken



EXACLEAR

Klares Vinyl-Polysiloxan-Material

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz
- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren
- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reissfestigkeit

Perfekt geeignet für:
• Injection Moulding Technik: einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung

PREISVORTEIL

4 + 1 82,70 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen Exaclear zum Preis von 4!

Art.-Nr. 10001483 **Exaclear**
2 x Kartuschen à 48 ml (51 g), 6 x Mixing Tips II L (blue); 82,70 CHF pro Packung

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-CEM ONE™

Technische Anleitung

Wann sollte G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER oder G-Premio BOND angewendet werden? (nur für Zahn/Abutment: Vorgehensweise s. Rückseite)

Retentive Präparation

Material für die Restauration	AEP oder G-Premio BOND
Metall, Zirkonoxid, Keramik	optional
Hybridkeramik Composite	verbindlich ✓

Nichtretentive Präparation

Material für die Restauration	AEP oder G-Premio BOND
Metall, Zirkonoxid, Keramik	verbindlich ✓
Hybridkeramik Composite	verbindlich ✓

Wann sollte G-Multi PRIMER angewendet werden? (NUR für Restaurationen)

Material für die Restauration	G-Multi PRIMER
Metall, Zirkon	optional*
Keramik, Glasfaserstift, Hybridkeramik Composite	verbindlich ✓

*G-CEM ONE enthält MDP, daher ist G-Multi PRIMER für Metall- und Zirkonoxid optional.

Überprüfen Sie vor dem Aufsetzen der Anmischspitze die beiden Öffnungen der Spritze, um sicherzustellen, dass sich die Pasten auf gleicher Höhe befinden, oder lassen Sie eine kleine Menge an Pasten ab, um ein gleichmäßiges Fließverhalten aus der Spritze zu gewährleisten.

BEFESTIGUNGSTECHNIK für alle Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers

Wenn mehr Haftfestigkeit benötigt wird

1. Reinigen und spülen Sie den Stiftraum und trocknen Sie ihn anschließend gründlich mit Papierspitzen. **Verwenden Sie kein H₂O, und/oder EDTA** zur chemischen Reinigung des Stiftraums.
2. Wenn mehr Haftfestigkeit benötigt wird, G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER auftragen, 10 Sekunden warten und mit MAXIMALEM Luftdruck trocknen, bis die Primerlösung nicht mehr aus dem Wurzelkanaleingang austritt. Entfernen Sie überschüssige Primerlösung mit Papierspitzen. **Verwenden Sie in diesem Fall NICHT G-Premio BOND.**
3. Bereiten Sie den Stift/Stumpfaufbau gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.
4. Applizieren Sie das Material direkt in den Kanal. Setzen Sie den Stift **innerhalb von 1 Minute nach Materialapplikation in den Kanal ein.**
5. Üben Sie weiterhin moderaten Druck aus und achten Sie darauf, dass der Stift in Position bleibt und entfernen Sie überschüssiges Material.
6. Aushärten aller Oberflächen/Ränder unter Beibehaltung des moderaten Drucks.
7. Lassen Sie das Material für 4 Minuten abbinden.

Belichtungszeit	G-CEM ONE
Hochleistungs-LED (mehr als 1200 mW/cm ²)	10 Sekunden
Halogene / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 Sekunden

BEFESTIGUNGSTECHNIK für alle Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers

Vorbereitung des Zahns

Wenn mehr Haftfestigkeit benötigt wird

1. Den vorbereiteten Zahn reinigen, abspülen und gründlich trocknen.
- 2A. G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER auftragen, 10 Sekunden warten und mit MAXIMALEM Luftdruck trocknen bis die Primerlösung nicht mehr aus dem Wurzelkanaleingang austritt. Entfernen Sie überschüssige Primerlösung mit Papierspitzen. **KEINE LICHTHÄRTUNG NOTWENDIG.**
- 2B. **Nach dem Schütteln der Flasche G-Premio BOND** auftragen, 10 Sek. warten und 5 Sek. lang mit MAXIMALEM Luftdruck trocknen, um Flüssigkeitsansammlungen im Gingivavulvulus zu vermeiden und **lichthärten**. Die Belichtungszeit entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

* Bei der Befestigung von Veneers und Onlays den Schmelz 10-15 Sekunden lang mit 35-40%iger Phosphorsäure ätzen und sorgfältig abspülen.

Vorbereitung der Restauration

Anwendung

3. Die Restauration gemäß den Anweisungen des Herstellers vorbereiten.
4. Die Anmischspitze anbringen und das Material direkt in die Restauration applizieren.
5. Sofort einsetzen und moderaten Druck beibehalten. Die Verarbeitungszeit beträgt 2'45" bei 23°C (die bei Verwendung von G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER reduziert wird).
- 6A. Härten Sie aus, indem Sie mit dem Lichtleiter eines Polymerisationsgeräts **1 Sekunde** lang über das überschüssige Material schwenken, bis dieses eine gummiartige Konsistenz erreicht.
- 6B. Behalten Sie moderaten Druck bei, bis es eine feste gummiartige Konsistenz erreicht.
7. Überschüssigen Zement entfernen und zeitgleich moderaten Druck beibehalten.
- 8A. Polymerisieren Sie unter Beibehaltung von moderatem Druck alle Flächen / Ränder gleichmäßig aus.
- 8B. Lassen Sie das Material 4 Minuten lang aushärten, falls die Restauration lichtundurchlässig ist.

Belichtungszeit	G-Premio BOND	G-CEM ONE
Hochleistungs-LED (mehr als 1200 mW/cm ²)	5 Sekunden	10 Sekunden
Halogene / LED (700-1200 mW/cm ²)	10 Sekunden	20 Sekunden

****Flüssigkeitsansammlungen im Gingivavulvulus**

Die Schritt-für-Schritt Anleitungen für alle Ihre Befestigungen finden Sie im GC Luting Guide

Flüssigkeitsansammlungen

20012121
041122SK

G-CEM ONE™

Selbstadhäsives Befestigungskomposit

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der einzigartigen GC Touch Cure Technologie des optionalen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primers.

Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid, Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 73,20 CHF

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art.-Nr. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**
Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; 139,70 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art.-Nr. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill Weiss Opak**
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; 73,20 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art.-Nr. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Transluzent**
Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; 443,70 CHF pro Packung

G-CEM ONE Universal Kits

Universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit

Vereinfachtes Universal-Adhäsiv in nur einer Flasche dank G-Premio BOND:

- Die Kombination aus drei funktionellen Monomeren, sorgt für eine optimale Haftung – nur ein Adhäsiv für alle direkten und indirekten Workflows!
- Einfache Anwendung: G-Premio BOND auftragen, 10 Sekunden warten, Luft trocknen, Lichthärtung für 10 Sekunden. Kompatibel mit allen Ätzverfahren (Self-Etch, Selektive und Total-Etch).

¹ Mit G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
² Mit G-Multi PRIMER | ³ Feldtestergebnisse, nur für G-CEM ONE. Daten auf Anfrage.

Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“ Überschussentfernung, hohe Toleranz gegenüber Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit ideal für Befestigungen, praktisch keine postoperative Sensibilitäten³.

Ästhetisch

Unsichtbare, abrasionsstabile Ränder für ästhetische Ergebnisse.



Optional: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Für alle Pfeilerzähne und Kavitäten

- MDP: Verbund zur Zahnhartsubstanz, Zirkonoxid und Nichtedelmetall
- 4-MET: Verbund zur Zahnhartsubstanz
- MDTP: Verbund zu Edelmetall
- Beschleuniger – Starker Verbund an Pfeilerzahn und Kavität durch GC Touch Cure-Funktion


Art.-Nr. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art.-Nr. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Transluzent**
Inhalt pro Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 84,90 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006920 **G-CEM ONE System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular, 5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml; 185,40 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006833 **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Preis pro Packung 75,80 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10003289 **Automix Tip for Endo** 10 Stk. mit Verlängerungstip; 14,00 CHF
Art.-Nr. 10003335 **Automix Tip Regular** 10 Stk.: 12,90 CHF

Farben G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal

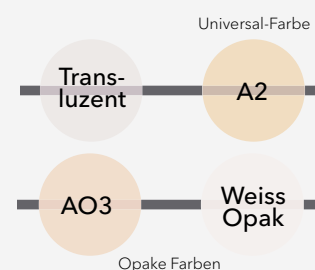

Jetzt auch mit G-Premio BOND kombinierbar!

GC-CEM ONE ist nun zusätzlich in drei neuen Packungen in Kombination mit G-Premio BOND verfügbar, aus denen Sie Ihr bevorzugtes Befestigungsprotokoll wählen können.



Art.-Nr. 10037114 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 137,90 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10037115 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Transluzent**
1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 137,90 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10037116 **G-CEM ONE Universal System Kit**
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; 197,50 CHF pro Packung

GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.

Ideal für Metall- und Zirkonrestorationen

- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung

Zubehör:

Art.-Nr. 10004917
Push and Click Mixing Tips Regular
(15 Stk.); 20,60 CHF

Art.-Nr. 10004929
Push and Click Mixing Tips Endo
(15 Stk.); 30,60 CHF



Hier geht's zu den Videos



PREISVORTEIL

JETZT EINSTEIGEN
FUJICEM EVOLVE SINGLE PACK

3 + 1 105,40 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10004926

FujiCEM Evolve Single Pack

Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g/5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10006621

FujiCEM Evolve Klinikpackung

Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9,2 g/5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 543,30 CHF

PREISVORTEIL

20 % AB 183,36 CHF
~~229,20 CHF~~

Preis pro Triple Pack

Art.-Nr. 10004928

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g/5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular;

214,88 CHF anstatt 268,69 CHF

Art.-Nr. 10004916

FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix

Inhalt pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g/5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22;

183,36 CHF anstatt 229,20 CHF

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement in Kombination mit der innovativen Force & Fusion Technologie



PREISVORTEIL

25 % 399,- CHF
~~531,80 CHF~~


Art.-Nr. 10003468 **FujiCEM 2 SL Eco pack**

Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13,3 g/7,2 ml)
399,- CHF anstatt 531,80 CHF

Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungsleitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials. Er enthält darüber hinaus Informationen zu den einzelnen Befestigungsschritten. Mehr Informationen finden Sie in unserem Befestigungsleitfaden oder in der App!

Die schrittweise Anleitung für alle Befestigungen finden Sie im **GC Luting Guide** (Befestigungsleitfaden)

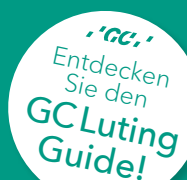

Hier gehts zur
Webpage:
www.initiallisiblock.com

initial
LiSi Block

GC FUJICEM EVOLVE
GC INITIAL LISI BLOCK
CERASMART270



GC Initial LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem – können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.



- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik
- Einfach schleifen, polieren, einsetzen



INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

497,90 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007322 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**

Initial LiSi Block, CEREC, Grösse 14, 5 Farben à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml Zubehör; 497,90 CHF

CERASMART™270



Kraftabsorbierende Hybridkeramik CAD/CAM-Block

Natürliche Passform und Flexibilität – Präzision, Stärke und Flexibilität kombiniert mit einer leicht anzuwendenden, lichthärtenden Oberflächenversiegelung

- Flexibilität für die Absorption von Stossbelastungen
- für langlebige Restaurationen
- Extrem passgenaue Ränder für nahtlose Übergänge
- Hervorragende Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit
- Optimale Fluoreszenz und Transluzenz
- Implantatgestützte Krone
- Ersatz einer grossen Kompositrestauration mit parapulpären Stiften
- Restauration eines zweiten Molaren
- Restauration eines Quadranten



Farben

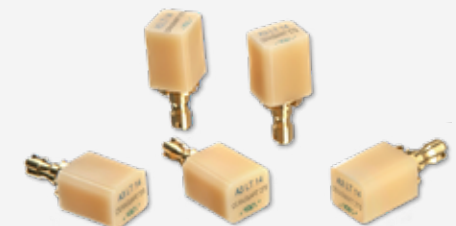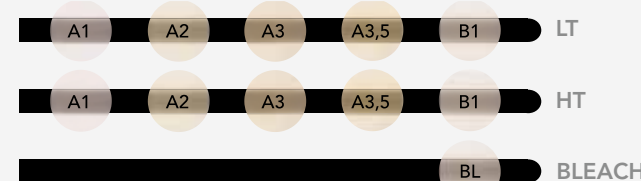

PREISVORTEIL

4 + 1 10 + 3 AB 134,80 CHF

Preis pro Packung (5 Blöcke pro Packung)

Erhalte 5 Packungen CERASMART 270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen CERASMART270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb der selben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,

A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach

Grösse 12: 134,80 CHF pro Packung

Grösse 14: 147,10 CHF pro Packung

Grösse 14L: 159,60 CHF pro Packung

CERASMART270 Blöcke sind CEREC-kompatibel und im aktuellen CEREC Software-Update gelistet. Verfügbar für Bestellungen durch autorisierte CEREC Händler.



Hier geht's zu den Videos

G-aenial A'CHORD

Lichthärtendes Universalkomposit-Füllungsmaterial
Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

A'CHORD revolutionäre Technologie


- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleissfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

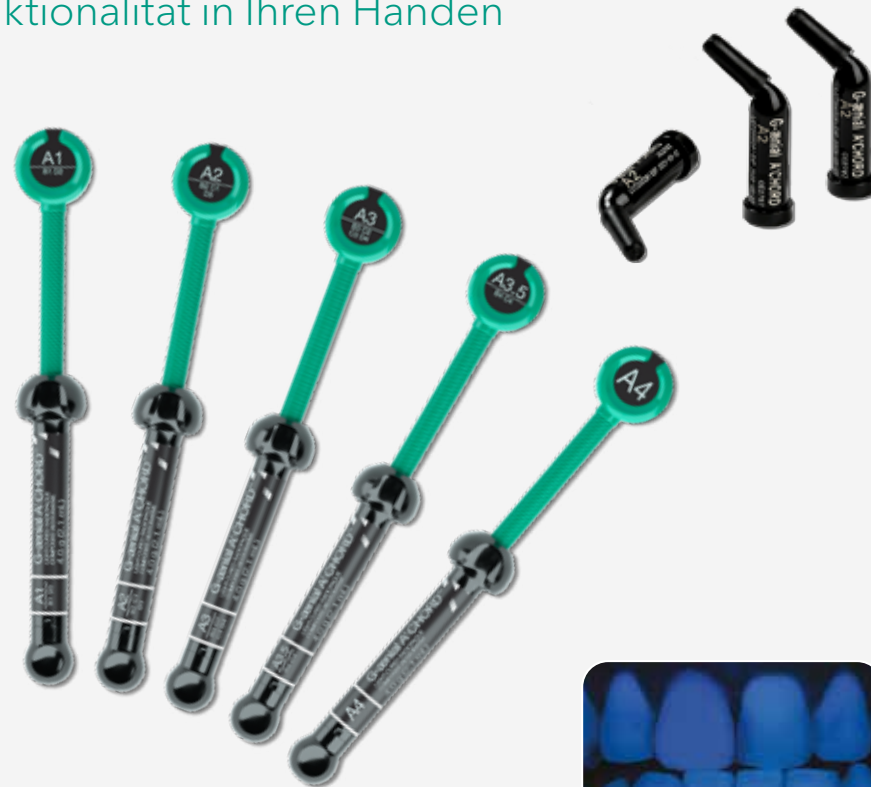

Vor Politur Nach Politur



© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB
65,50
CHF

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-aenial A'CHORD zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-aenial A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.



UNITIPS

Art.-Nr. 10006772
G-aenial A'CHORD Layering Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE
(à 15 x 0,16 ml);
315,60 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773
G-aenial A'CHORD Core Kit Unitips
15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3.5, A4
(à 15 x 0,16 ml);
315,60 CHF (Preis pro Packung)

Unitips Refill
à 15 x 0,16 ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 70,20 CHF (Preis pro Packung)

SPRITZEN


Art.-Nr. 10006767
G-aenial A'CHORD Layering Kit
1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE
(à 2,1 ml/4 g);
294,20 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768
G-aenial A'CHORD Core Kit
1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3.5; A4
(à 2,1 ml/4 g);
294,20 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769 **Trial Kit A**
3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
177,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006771
G-aenial A'CHORD Bleach Kit
1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)
177,40 CHF (Preis pro Packung)
G-aenial A'CHORD Bleach KIT nur in Spritzenform erhältlich. Bleachfarben für Unitips als Refill verfügbar.

Spritzen Refill
à 2,1 ml/4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 65,50 CHF (Preis pro Packung)

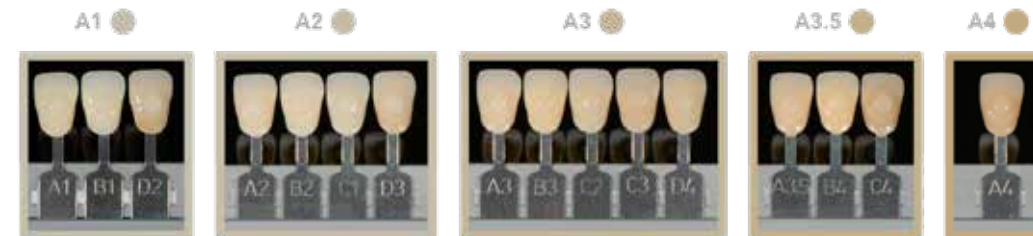

DIAPOLISHER PASTE Diamantpolierpaste



Art.-Nr. 1000892
DIAPOLISHER PASTE

Inhalt: DIAPOLISHER PASTE Spritze 2 g,
1 x Dispensing Tip (needle type)
& 1 x Protective cover;
53,40 CHF pro Packung

GC Composite Modeling Liquid Flüssigkeit zum Modellieren von Kompositmaterialien für Direktrestaurationen



Art.-Nr. 10003387
GC Composite Modeling Kit

Inhalt: 1 x GC Modeling Liquid 6 ml,
2 x Gradia Brush Pinselhalter,
5 x Gradia Pinsel flach, 5 x Gradia
Pinsel rund, 1x Mischblock
109,20 CHF pro Packung

Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC
Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Glasionomeren, Glas-Hybriden und/oder Restaurationskomposit.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



G-ænia

Das Allroundkomposit für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlssystem



- G-ænia Anterior überzeugt durch
- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
 - Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
 - Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
 - Mühelose Verarbeitung

- G-ænia Posterior überzeugt durch
- Ein angepasstes Farbsystem
 - Sehr gute Röntgensichtbarkeit
 - Seine gute Stopfbarkeit
 - Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit



Hier geht's zu den Videos

PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	77,30 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænia Anterior / Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænia Anterior / Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000805 **Anterior Spritzen A2**
 Art.-Nr. 10000806 **Anterior Spritzen A3**
 Art.-Nr. 10000826 **Posterior Spritzen PA2**
 Art.-Nr. 10000827 **Posterior Spritzen PA3**
 ab 77,30 CHF pro Packung

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	109,80 CHF

Preis pro Packung (20 Unitips)

Erhalte 5 Packungen G-ænia Anterior / Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænia Anterior / Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.


Art.-Nr. 10000776 **Anterior Unitip A2**
 Art.-Nr. 10000777 **Anterior Unitip A3**
 Art.-Nr. 10000798 **Posterior Unitip PA2**
 Art.-Nr. 10000799 **Posterior Unitip PA3**
 ab 109,80 CHF pro 20er Packung

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips à 109,80CHF: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE;
 Farben: Anterior Packung mit 10 Unitips à 55,20 CHF: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW;
 Farben: Posterior Packung mit 20 Unitips à 109,80 CHF: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

Wir standardisieren unsere Kompositspritzen!

Folgende Produkte sind beinhaltet:

G-ænia A'CHORD
 G-ænia Anterior & Posterior
 Gradia Direct Anterior & Posterior
 Gradia Direct X

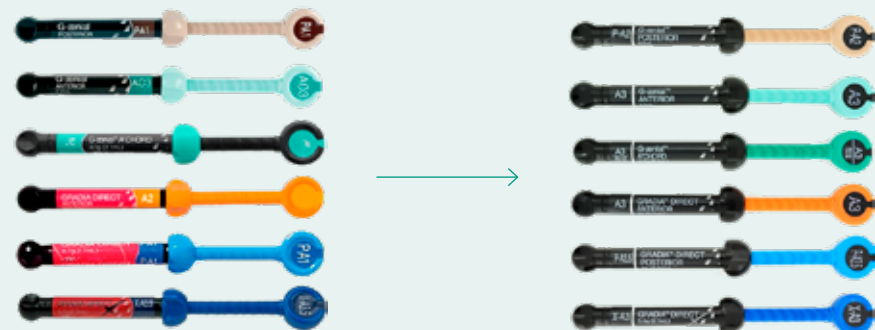

G-ænia Flo X

Der perfekte Partner!

G-ænia Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllgrösse (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

PREISVORTEIL

4 + 1	10 + 3
77,90 CHF	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænia FloX Spritzen zum Preis von 4!
 Erhalte 13 Packungen G-ænia FloX Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10003362 **G-ænia Flo X A2**
 Art.-Nr. 10003363 **G-ænia Flo X A3**
 Spritze 3,6 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
 Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-ænia Universal Injectable

Hochfestes Komposit für Restaurationen
 Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

G-ænia Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationskomposit mit ausserordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-ænia Universal Injectable ausserordentliche Festigkeit.

PREISVORTEIL

4 + 1	10 + 3
AB 43,90 CHF	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænia Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 4!
 Erhalte 13 Packungen G-ænia Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Preis pro Spritzen-Packung 43,90 CHF
 Art.-Nr. 10003706 **A2 Spritze**
 Art.-Nr. 10003707 **A3 Spritze**

Preis pro Unitip-Packung 66,10 CHF
 Art.-Nr. 10006897 **A2 Unitip**
 Art.-Nr. 10006898 **A3 Unitip**



Weitere Informationen zu G-ænia Universal Injectable finden Sie auf Seite 6 im Praxisteil.

G-ænia Universal Flo

Fließfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen

Durch die einzigartige Fließfähigkeit lässt sich G-ænia Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Komposit. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

PREISVORTEIL

4 + 1	10 + 3
79,60 CHF	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænia Universal Flo Spritzen zum Preis von 4!
 Erhalte 13 Packungen G-ænia Universal Flo Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10000839 **G-ænia Universal Flo A2**
 Art.-Nr. 10000840 **G-ænia Universal Flo A3**
 Spritze 3,4 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
 Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
 Innenfarben: AO2, AO3; Aussenfarben: JE, AE

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



everX Flow®

Mit Glasfasern verstärktes fliessfähiges Komposit für den Dentinersatz

Überzeugend stabile Struktur


everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstandsfähige und unkomplizierte Verstärkung all Ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.



Hier geht's zu den Videos

Konventionelles Komposit:


Rissfortpflanzung durch die Füllung UND die Zahnstruktur

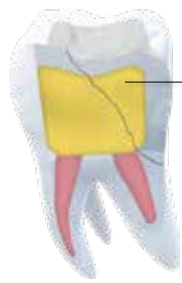

Kompositstruktur

everX Flow :

Rissausfortpflanzung wird gestoppt

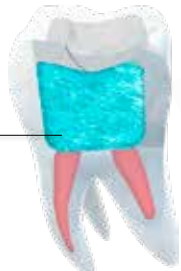

Substruktur



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB
67,40
CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing
Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing
Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

BUNDLEPACK everX Flow
+ G-ænial Universal Injectable

~~267,- CHF~~ 199,- CHF

Art.-Nr. 10004834
**everX Flow +
G-ænial Universal Injectable Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-ænial Universal Injectable
Spritzen 1 x A2, 1 x A3, Zubehör;
199,- CHF (Preis pro Bundlepack)



AUCH ALS BULK-FARBE
BEI TIEFEN KAVITÄTEN MIT
AUSHÄRTUNGSTIEFE BIS
5,5 MM OPTIMAL GEEIGNET!

everX Posterior®

Glasfaserverstärkte Komposit-
Unterkonstruktion für grosse Kavitäten

Art.-Nr. 10001048 **everX Posterior**;
90,90 CHF pro Packung; 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art.-Nr. 10001148 **everX Posterior**;
272,80 CHF pro Packung; 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips



D-Light® Pro

LED-Polymerisationslampe mit dualer
Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode



Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 – 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 – 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z.B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschliesslich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z.B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risstiefe

Autoklavieren

Hochstabiler Lichtleiter
Gesteigerte Akkuleistung



GC PRODUKT AKTION

D-LIGHT PRO GRATIS

Kaufe GC-Produkte
(G-ænial, Essentia, everX Flow,
CERASMART270 oder EQUIA Forte HT)
im Wert von 2900,- CHF
und erhalte die D-Light Pro gratis!

Produktmix möglich.
Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

AKTIONSPREIS

~~1447,- CHF~~ 999,- CHF

Art.-Nr. 70000008 **D-Light Pro**
Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul,
Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation,
Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschutzschild,
weicher Augenschutz (3 Stk.)

Das Unsichtbare sehen



Restorative Solutions

Die beste Wahl bei allen Indikationen



Langzeit-Restaurationsmaterial ● Hochviskoses Glasionomer ● Niedrigviskoses Glasionomer ● Kunststoffverstärktes Glasionomer ● Lichthärtendes Material			SEITENZAHNBEREICH							
			Klasse I		Klasse II			Klasse V	Basis (Sandwich-Technik)	
			Klein, ohne Kaudruckbelastung	Groß, mit Kaudruckbelastung	Klein, ohne Kaudruckbelastung	Klein, mit Kaudruckbelastung	Groß, mit Kaudruckbelastung*			
EQUIA Forte HT (Glas-Hybrid)			+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	
EQUIA			+++	+++	+++	+++		++	+	
Fuji II LC			+					++	+++	
Fuji TRIAGE										
Fuji IX GP			+		+			+	+++	
Fuji IX GP FAST			+		+			+	+++	
Fuji IX GP EXTRA			+		+			+	+++	

Langzeit-Restaurationsmaterial ● Hochviskoses Glasionomer ● Niedrigviskoses Glasionomer ● Kunststoffverstärktes Glasionomer ● Lichthärtendes Material			FRONTZAHNBEREICH		WEITERE INDIKATIONEN				
			Klasse III	Klasse V	Stumpfaufbau	Milchzähne	Schutz von Fissuren	Schutz der Wurzeloberfläche	Provisorische Restaurationen
EQUIA Forte HT (Glas-Hybrid)				++	+++	++		+	+
EQUIA				+++	++	++		+	+
Fuji II LC			+++	+++	++	+++			
Fuji TRIAGE							+++	+++	+++
Fuji IX GP				+	++	+		+	+++
Fuji IX GP FAST				+	++	++		+	+++
Fuji IX GP EXTRA				+	++	++		++	+++

* Die Präparation sollte einen Abstand von 1 bis 1,5 mm zu den Höckerspitzen haben. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung
** Bestellset für den Farbton Rosa

Kontaktieren Sie uns oder Ihren persönlichen GC Fachberater um ein Sample anzufordern.



EQUIA Forte™ HT

Das Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restorationssystem - Ihr verlässlicher Partner für Seitenzahnrestorationen



- Stärkeres und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Feuchtigkeitstolerant, Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestorationen in wenigen Schritten - ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten
- Kosteneffiziente Langzeit-Restaurations-Alternative

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3

186,60 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 EQUIA Forte HT Nachfüllpackung zum Preis von 4!
Erhalte 13 EQUIA Forte HT Nachfüllpackung zum Preis von 10!

Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL 10% ON TOP

EQUIA FORTE HT NACHFÜLLPACKUNGEN A2 ODER A3

10% 167,94 CHF
~~186,60 CHF~~

Preisvorteil von 10 % gilt ausschliesslich für die Nachfüllpackung in Farbe A2 (Art-Nr. 10004841) oder die Nachfüllpackung in Farbe A3 (Art-Nr. 10004901)

Weitere Verpackungseinheiten:

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung; 186,60 CHF; Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte HT, 0,40 g Pulver und 0,13 g (0,10 ml) Liquid; gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intropackung; 105,10 CHF; Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promopackung; 363,90 CHF Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Klinikpackung; 615,80 CHF Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml Farben: A2, A3, B2

Art.-Nr. 10004885
EQUIA Forte Coat FlipCap
4 ml Flasche, Zubehör, 91,40 CHF

Art.-Nr. 10003513
EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung
50 Unitdose (à 0,1 ml) 120,80 CHF

1 x EQUIA Forte HT PROMOPACKUNG
Inhalt: à 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

1 x EQUIA Forte HT INTROPACKUNG GRATIS
Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung (à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und erhalte 1 x EQUIA Forte HT Intropackung (20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose) gratis!


Aktion nur gültig für alle Promopackungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Hauptindikationen für EQUIA Forte HT



- INDIKATIONEN
- Klasse-I-Restaurationen/permanent
 - Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen/permanent
 - Interimsfüllungen
 - Klasse-V- und Wurzeloberflächen-restaurationen Stumpfaufbau
 - Amalgam-Alternative
 - MIH

Amalgamersatz

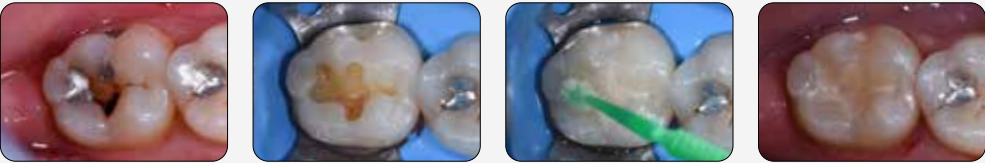


Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Victor Cedillo Felix, USA

Kariesrisikopatient



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Zeynep Bilge Kütük, Türkei

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,0 (CHF/EUR). Preisirrtümer vorbehalten.
Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 31.12.2025.
Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

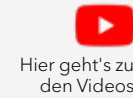

Hier geht's zu den Videos







1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG
 Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

+ 1 CM-II KAPSELMISCHER GRATIS!
+ 1 CAPSULE APPLIER IV GRATIS!

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung und erhalte 1 CM-II Kapselmischer (im Wert von 749,10 CHF) und 1 Capsule Applier IV (im Wert von 120,70 CHF) gratis!

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren Klinikpackungen gültig.

EQUIA Forte HT Klinikpackung
615,80 CHF pro Packung
Inhalt: 200 Kapseln,
1 x Equia Forte Coat (4 ml)
Farben: A2, A3, B2

**GC GLASIONOMER/
GLAS-HYBRID-
MATERIAL
(5 PACKUNGEN)**

**CM-II
KAPSELMISCHER
GRATIS !**



Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer oder GC Glas-Hybrid + 1 CM-II Kapselmischer (im Gesamtwert von 749,10 CHF) gratis!

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer/Glashybrid Kapselpackungen gültig.

Farbmix möglich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Restorative-Guide

Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!




CAVITON

Provisorisches Füllmaterial

Temporäres Füllmaterial für Kavitäten und bei endodontischen Behandlungen. Einfach in der Anwendung, mit hervorragender Konsistenz (ohne auszutrocknen).



PREISVORTEIL
4 + 1 22,50 CHF

Erhalte 5 Packungen Caviton zum Preis von 4!

Art.-Nr. 10000101 **CAVITON**
Jar, 30 g, White; 22,50 CHF pro Packung

Merkmale und Vorteile

- Abbinden wird durch Wasser und Speichel ausgelöst
- Hervorragende Adaptierbarkeit
- Einfach zu entfernen

GC Fuji™ II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationsmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



PREISVORTEIL

4 + 1 10 + 3	188,60 CHF
-------------------------------	-----------------------------

Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 4 !
Erhalte 13 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 10 !

Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0,10 ml);

Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikrospaltbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



PREISVORTEIL

4 + 1 10 + 3	161,- CHF
-------------------------------	----------------------------

Preis pro Packung

Erhalte 5 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 4 !
Erhalte 13 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 10 !

Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0,14 ml)

Aktion für alle Farben gültig.
Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Remineralisierende zuckerfreie Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ CPP-ACP
Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.



Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Ausserdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff RECALDENT™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten

- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz
- MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid

PREISVORTEIL

10er PACKUNGSAKTION

5 + 1 203,90 CHF

Kaufe 5 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von Tooth Mousse.

Verpackungseinheiten:

GC Tooth Mousse 10-Packung
203,90 CHF pro Packung

Art-Nr. 10001743
GC Tooth Mousse, sortiert
(je Geschmacksrichtung 2 Tuben)
Art-Nr. 10001746
GC Tooth Mousse, Melone
Art-Nr. 10001747
GC Tooth Mousse, Minze
Art-Nr. 10001745
GC Tooth Mousse, Erdbeere
Art-Nr. 10001748
GC Tooth Mousse, Tutti-Frutti
Art-Nr. 10001744
GC Tooth Mousse, Vanille

Art-Nr. 10003205
GC Tooth Mousse, Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung 1 Tube)
110,80 CHF pro Packung



PREISVORTEIL

10er PACKUNGSAKTION

5 + 1 228,- CHF

Kaufe 5 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von MI Paste Plus.

Verpackungseinheiten:

GC MI Paste 10-Packung
228,00 CHF pro Packung

Art-Nr. 10001749
GC MI Paste Plus, sortiert
(je Geschmacksrichtung 2 Tuben)
Art-Nr. 10001752
GC MI Paste Plus, Melone
Art-Nr. 10001750
GC MI Paste Plus, Minze
Art-Nr. 10001751
GC MI Paste Plus, Erdbeere
Art-Nr. 10001754
GC MI Paste Plus, Tutti Frutti
Art-Nr. 10001753
GC MI Paste Plus, Vanille

Art-Nr. 10003270
GC MI Paste Plus, Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung 1 Tube)
119,90 CHF pro Packung



PREISVORTEIL

PROMOPACKUNG

5 + 1 110,80 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben Tooth Mousse
(je Geschmacksrichtung 1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)
+ 1 Tube Tooth Mousse gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für Tooth Mousse Promopackung



PREISVORTEIL

PROMOPACKUNG

5 + 1 119,90 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben MI Paste Plus
(je Geschmacksrichtung 1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere)
+ 1 Tube MI Paste Plus gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für MI Paste Plus Promopackung



RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez International Group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkeise gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)

Ein globales Problem,
von dem jedes siebte Kind betroffen ist



Milde Form von MIH
Mit freundlicher Genehmigung
von Prof. van Amerongen,
Niederlande



Moderate MIH
Mit freundlicher Genehmigung
von Prof. Baroni, Italien



Schwere MIH
Mit freundlicher Genehmigung
von Prof. Baroni, Italien



Von MIH betroffene Inzisiven
Mit freundlicher Genehmigung
von Prof. Baroni, Italien

Stärkung und Desensibilisierung
mit GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus und MI Varnish

Eine Lokaltherapie bietet sich an, um bei MIH die Zähne zu stärken und die Sensibilität zu verringern. Die Anwendung von Recaldent (CPP-ACP), das einen hohen Anteil an bioverfügbarem Kalzium und Phosphat enthält, hat sich als wirksam erwiesen.

Tooth Mousse (ohne Fluorid)
MI Paste Plus

- (900 ppm Fluorid)
- Topische Creme mit Recaldent (CPP-ACP) für die tägliche Anwendung zu Hause
- Nach dem Putzen und vor dem Schlafen gehen auftragen, nicht ausspülen
- Bietet zusätzlichen Schutz für die Zähne
- Neutralisiert Säure

MI Varnish (22600 ppm Fluorid)

- Fluoridlack mit Recaldent (CPP-ACP) für vierteljährliche Anwendung in der Praxis
- Anwendung nach der Prophylaxe
- Versiegelt effektiv die Dentintubuli, desensibilisiert die Zähne und hinterlässt einen Schutzfilm auf der Oberfläche



Zahnoberflächen schützen
mit GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, ein flüssiges Glasionomer-material, schützt die Zahnoberfläche vor Kariesbildung und Hypersensibilität

- Fuji TRIAGE geht in feuchter Umgebung eine chemische Verbindung mit der Zahnoberfläche ein.
- Die Zähne können bereits vor dem kompletten Durchbruch geschützt werden.
- Das Abbinden von Fuji TRIAGE im Farbton Rosa kann durch Polymerisationslicht beschleunigt werden. Durch einen frühzeitigen Schutz können Komplikationen vermieden werden.



Restaurative Behandlung
Minimalinvasive Restaurationen mit EQUIA Forte HT

Permanente Restaurationen

- Das Glas-Hybrid-System EQUIA Forte HT eignet sich als langfristiges, minimalinvasives Restaurationsmaterial. Darüber hinaus kann das Bulk-Material schnell appliziert werden – ein grosser Vorteil bei jungen, ängstlichen Patienten.
- Der chemische Haftverbund und die Feuchtigkeitstoleranz von EQUIA Forte HT bietet bei hypomineralisiertem Schmelz einen grossen Vorteil.
- Bei schwer zu betäubenden Zähnen kann die atraumatische restaurative Behandlung (ART) angewendet werden; hierbei erfolgt vor der Anwendung von EQUIA Forte HT eine manuelle Kariesexkavation.
- Das Komposit kann eingesetzt werden, wenn die Läsionen sehr gut abgegrenzt sind und nicht allzu viel zusätzliches Zahngewebe entfernt werden muss.

Therapeutische Interims-Restaurationen



1 von 7 Kindern leidet an Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation. GC hat Lösungsansätze zur Behandlung von MIH.



Mehr zu MIH

Weitere Informationen, das klinische Erscheinungsbild, die Symptome und den GC-Behandlungsplan finden Sie hier:



TEMPSMART® DC

Schnell und effizient zur
provisorischen Restauration



Dualhärtendes Komposit für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Mit TEMPSMART DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

- SICHERE HALTBARKEIT**
Hohe Bruchstabilität,
ideal für Seitenzahnbrücken
- ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE**
Fluoreszenz und
langanhaltender Glanz
- BEQUEME VERARBEITUNG**
Nicht-klebrig,
Hochglanz in wenigen Schritten
- INTELLIGENTES KONZEPT**
Kurze Verarbeitungszeit
durch Lichthärtung



48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen; 118,00 CHF

Art.-Nr.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5

Art.-Nr.	10001467	10001468
Farbe	B1	BW

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen; 70,30 CHF

Art.-Nr.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B1

PREISVORTEIL
4 + 1 AB **70,30** CHF

Preis pro Packung

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche
115,60 CHF pro Packung
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC
48 ml Kartusche zum Preis von 4!

TEMPSMART DC 10 ml Kartusche
68,90 CHF pro Packung
Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC
10 ml Kartusche zum Preis von 4!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb
gleicher Verpackungseinheit und
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Zubehör:
Art.-Nr. 10003754
Mischkanülen II Grösse SSS
(60 Stk.) 70,00 CHF
Art.-Nr. 10003335
GC Automix Tip Regular
(10 Stk.) 12,90 CHF

Lucerne Festival Ark Nova

GC auf dem Lucerne Festival Ark Nova – Wo Wissenschaft auf Klangkunst trifft

Luzern, 12. September 2025 – GC lädt zu einem aussergewöhnlichen Abend voller Inspiration, Innovation und kultureller Tiefe in die ikonische Konzerthalle Ark Nova – mitten im Herzen des Lucerne Festivals.

Im Rahmen des renommierten Lucerne Festival Ark Nova gestaltet GC einen exklusiven Abend, der klassische Musik, zukunftsweisende Themen der Zahnmedizin und japanisch-schweizerische Werte auf besondere Weise vereint. In der aufblasbaren Konzerthalle, entworfen von Anish Kapoor und Arata Isozaki, treffen medizinischer Fortschritt und kulturelle Vielfalt in einem ebenso visionären wie emotionalen Rahmen aufeinander – ein Erlebnis, das inspiriert und verbindet.

GC – A Century of Excellence. A Moment of Culture. Seit über 100 Jahren steht GC für kompromisslose Qualität, Präzision und eine tiefe Verantwortung gegenüber Gesundheit und Gesellschaft. Mit dem Engagement im Rahmen des Lucerne Festival unterstreicht das Unternehmen nicht nur seine Innovationsführerschaft in der Dentalbranche, sondern auch seine kulturelle Haltung und enge Verbundenheit zur Schweiz.



Ein Programm mit Haltung, Inspiration und Atmosphäre

Das Programm am 12. September 2025 bietet eine einzigartige Mischung aus wissenschaftlicher Expertise, internationaler Perspektive und musikalischer Brillanz:

- 17:00 Uhr: Begrüssung durch Michael Haeffliger, Intendant des Lucerne Festival
- 17:05 Uhr: Makoto Nakao, Chairman der GC Gruppe, über die Geschichte des Unternehmens und seine besondere Verbindung zur Schweiz
- 17:10 Uhr: Grusswort von S.E. Yoshinori Fujiyama, Botschafter von Japan in der Schweiz
- 17:15 Uhr: Keynote-Vortrag von Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets (Universität Hamburg) „Neue Trends in der Zahnmedizin – neue Biomaterialien, Scannen, KI, AR, 3D-Druck – wo könnte die Reise hingehen?“
- 18:30 Uhr: Konzert des renommierten japanischen Piano-Duos Mari & Momo Kodama
- ab 19:30 Uhr: Apéro im Verkehrshaus Luzern – persönlicher Austausch und Netzwerkpflege in entspannter Atmosphäre

Hinweis: Vorläufiger Zeitplan vom 4. Juni 2025 – Änderungen vorbehalten.

Ein Abend für besondere Gäste

Diese exklusive Veranstaltung richtet sich gezielt an ein breites Fachpublikum der Dentalbranche: Zahnärzt:innen, Kieferorthopäd:innen, Dentallabore, Vertreter:innen von Universitäten, Handelspartner sowie weitere langjährige Wegbegleiter und Partner von GC.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Gästezahl ist auf maximal 300 Personen begrenzt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird jede Anmeldung individuell geprüft. Die finale Teilnahmebestätigung mit allen organisatorischen Details erfolgt etwa vier Wochen vor der Veranstaltung.

**LUCERNE
FESTIVAL**

WANN
Freitag,
12. September 2025

WO
Ark Nova
auf der Wiese hinter dem
Verkehrshaus Luzern

TEILNEHMERANZAHL
Max. 300 geladene Gäste

**WEITERE INFORMATIONEN
UND ANMELDUNG**



KONTAKT
GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Zürichstrasse 31
6004 Luzern
Tel.: +41 41 520 01 78
Fax: +41 41 520 01 77
info.switzerland@gc.dental
www.gc.dental/europe/de-CH





Kompositworkshop

Direkte adhäsive Komposit-Restaurationen

Praktischer Workshop:
mit 3D-Demonstrationen

REFERENT

Prof. Dr. Ivo Krejci

KURS 1

WANN

Freitag, 29. August 2025
9.00 Uhr – 17.00 Uhr

WO

Hotel Walhalla
Poststrasse 27
9000 St. Gallen

KURS 2

WANN

Freitag, 28. November 2025
9.00 Uhr – 17.00 Uhr

WO

GC International AG
Zürichstrasse 31
6004 Luzern

KURSBEBÜHR pro Kurs

490,- CHF pro Person

TEILNEHMERZAHL

max. 15

KONTAKT/ANMELDUNG

kontaktieren Sie bitte
GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78oder Ihren persönlichen
GC Fachberater:

Eveline Wangler

Produktspezialistin Praxis
Zürich, Zentralschweiz,
Mittelland
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Manuela Schuler

Produktspezialistin Praxis,
Ostschweiz
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental

Nicole Niederberger

Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental

Felix Gloor

Zahntechniker
Produktspezialist, Westschweiz
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental

In diesem Workshop dürfen Sie keine Scheu vor praktischen Arbeiten haben. Nach einer kurzen theoretischen Einführung mit PowerPoint-Unterstützung geht es gleich in die Praxis sämtlicher Arten von direkten Kompositfüllungen. Angefangen mit der nichtinvasiven adhäsiven Restauration bis zum direkten Höckeraufbau aus Komposit in ausgedehnten Kavitäten mit subgingival liegenden Rändern wird der Referent sämtliche Techniken von A bis Z am Modell mit Hilfe eines 3D-Mikroskops demonstrieren. Anschliessend werden die Teilnehmer jede Technik Schritt für Schritt am Modell praktisch umsetzen. Für die Teilnahme ist eine Lupenbrille unabdingbare Voraussetzung.

Melden Sie sich frühzeitig an – first come, first serve. Die Rechnung wird nach Erhalt der Anmeldung verschickt und ist innert 14 Tagen fällig. Eine Annullierung ist bis eine Woche vor Kursbeginn kostenlos möglich. Danach kann die Kursgebühr nicht mehr rückerstattet werden. Die Einzahlungsbestätigung berechtigt zur Kursteilnahme. Ihre Anmeldung ist erst nach Zahlungseingang gültig.



Praktischer Demo- und Hands-on-Kurs

Injection-Moulding-Technik

Lernen Sie die spannende, neue Behandlungsmethode Injection-Moulding-Technik in einem praktischen Demo- und Hands-on-Kurs kennen. Im Vergleich zur Präparation und dem Einsetzen von Keramikveneers ist diese Technik kostenfreundlicher für die Patienten, weniger invasiv und reparabel. Gegenüber der Freihand-Composite-Schichtung ist sie einfacher, besser vorhersagbar und reproduzierbar. Mit der Injection-Moulding-Technik lassen sich zuverlässig dauerhafte Ergebnisse erzielen, vorausgesetzt die Fallauswahl ist adäquat und es wird sorgfältig vorgegangen.

Alle Teilnehmer werden Composite-Veneers mit unterschiedlichen Modifikationen der Injection-Moulding-Technik herstellen.
Mitzubringen sind Modellierinstrumente und Lupenbrille

Schwerpunkte

- Klinische Fälle veranschaulichen das breite Anwendungsspektrum
- Erarbeitung verschiedener «Injection- Techniken», so z. B. Single-Shade, Schichten, Cut-Back und Shade-Mixing an Frontzähnen
- Injection-Moulding mit Komposit (alle Klassen)
- Herstellung eines individuellen, glasklaren Silikonschlüssels
- Individuell geschichtete Frontzahnrekonstruktionen, direktes Veneering
- Vergleich analoger und digitaler Workflow bei der Herstellung von Veneers
- Materialkunde und Vergleich verschiedener fließfähiger Komposite

Dr. Maximilian Dobberty M.Sc.

- Zahnarzt in Frankfurt am Main
- Zertifizierter Spezialist für Ästhetisch - Rekonstruktive Zahnmedizin (M.Sc. Danube Private University)
- Assistant Professor im postgradualen Master-Programm der Danube Private University, Krems, Österreich



Allgemeine Geschäftsbedingungen: Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu bezahlen. Eine Stornierung der Anmeldung muss schriftlich erfolgen und wird nicht telefonisch entgegen-genommen. Bei Abmeldungen bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin wird die Kursgebühr abzüglich der Umtriebsentschädigung (CHF 80.-) zurückerstattet. Bei späterer Abmeldung wird die Kursgebühr nicht zurückerstattet und bleibt geschuldet. Mit der Anmeldung wird eine Bewilligung für eine periodische Kontaktaufnahme per E-Mail (Newsletter) erteilt und Einverständnis mit den vollständigen AGB erklärt. Die vollständigen AGB finden Sie auf www.fbrb.ch. Auf das Rechtsverhältnis ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich-Stadt. CHE-112.295.268 MWST



REFERENT

Dr. Maximilian Dobberty

WANN

Samstag,
27. September 2025
09.00 – 17.00 Uhr

WO

Hotel St. Gotthard (am HB)

KURSBEBÜHR

680,- CHF pro Person

BEST FRIENDS

BONUS 20%

Motivieren Sie weitere
zwei Ihrer KollegInnen
teilzunehmen und erhalten
Sie alle 20 % Rabatt.

KONTAKT/ANMELDUNG

Telefon 055 415 30 58
info@fbrb.ch
www.fbrb.ch

Erfolgreiche Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



RESTORATIVE
SOLUTIONS



LUTING
SOLUTIONS

CEREC-Kurs für Zahnärzte

Erleben Sie die Zukunft der Zahnmedizin

Die digitale Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ist heute ein unverzichtbarer Teil moderner Behandlungsabläufe. Viele Praxen nutzen inzwischen Intraoralscanner und fast die Hälfte davon kombiniert diese bereits mit der CEREC-Rekonstruktionssoftware. Die Technologie ist so ausgereift, dass Spitzenresultate mit erstaunlicher Effizienz erzielt werden können. In unserem praxisorientierten Tageskurs lernen Sie, wie Sie Ihre CEREC-Fähigkeiten perfektionieren und das volle Potenzial Ihres Systems ausschöpfen. Erfahren Sie, wie Sie ästhetische Restaurationen auf höchstem Niveau erstellen – das sogar in nur einer Sitzung, wenn Sie es wünschen.

- Präparationsgrundlagen: Optimierungsmöglichkeiten
- Materialien: Vor- und Nachteile, Kombinationsmöglichkeiten
- Aufnahmeprotokolle: wie unterstütze ich das System und vermeide Fehler
- Design: Biogenetik, Kopieren, Spiegeln
- Herstellung: Fräsen - Schleifen
- Finalisieren: Konturieren, Individualisieren, Glasieren
- Isolation: Tipps und Tricks
- Zementieren

Im Anschluss des theoretischen Teils werden sämtliche Möglichkeiten im Rahmen einer Live-Behandlung vertieft.



REFERENT

Dr. Konstantinos Tokmakidis

WANN

Freitag, 19. September 2025
09.00 - 17.00 Uhr

WO

Vormittag:

Restaurant Rössli, Dorfstrasse 1,
6045 Adligenswil

Nachmittag:

Praxis in Adligenswil
(Dr. Konstantinos Tokmakidis),
Obgardrain 7, 6043 Adligenswil

TEILNEHMERZAHL 10

KURSBEBÜHR

490,- CHF pro Person

KONTAKT/ANMELDUNG

kontaktieren Sie bitte
GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78

oder Ihren persönlichen
GC Fachberater:

Eveline Wangler

Produktspezialistin Praxis
Zürich, Zentralschweiz,
Mittelland
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Manuela Schuler

Produktspezialistin Praxis,
Ostschweiz
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental

Nicole Niederberger

Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental

Felix Gloor

Zahntechniker Produktspezialist,
Westschweiz
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental

Sie haben Interesse
an weiteren Workshops?
Hier finden Sie
alle Informationen!



Holen Sie sich noch heute unser GC Get
Connected Smile Program als App auf Ihr Handy
und bleiben Sie up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine für unsere
Workshops finden Sie unter
<https://www.gc.dental/europe/de-CH/education/courses>



CLAUS NÜSSELE
Regional Sales Manager DACH
Managing Director Germany
Country Manager Switzerland
M: 079 172 19 85
claus.nuessle@gc.dental

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Wir freuen uns, Sie zur aktuellen und bereits zweiten Ausgabe 2025 der GC News & Highlights Broschüre unter dem Motto „Ein strahlendes Lächeln – von direkt bis indirekt mit Know-how und Kreativität“ begrüßen zu dürfen.

Verschönern Sie das Lächeln Ihrer Patientinnen und Patienten mit Sorgfalt!
Ein schönes Lächeln stärkt das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl und wirkt sich positiv auf persönliche und berufliche Interaktionen aus. Für Patientinnen und Patienten, die eine Verbesserung ihres Lächelns anstreben, ist eine direkte Behandlung mit kleinen Veränderungen in vielen Fällen bereits ausreichend, um dabei ein schönes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Bei komplexen Fällen mit umfangreicher Karies, strukturellen Schäden oder grösseren ästhetischen Problemen, ist es jedoch unbedingt anzuraten, das zahntechnische Labor für Techniken, wie die Injection-Moulding-Technik oder Teilrestaurationen wie Veneers oder Kronen und Brücken zu involvieren.

Weniger ist mehr: unter Berücksichtigung des therapeutischen Gradienten.

Der therapeutische Gradient, der von den am wenigsten invasiven bis zu den am meisten invasiven Behandlungen reicht, wird berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die am besten geeignetste und konservativste Methode gewählt wird. Dieser Ansatz trägt wesentlich zur Erhaltung natürlicher Zahnschubstanz Ihrer Patientinnen und Patienten bei und erlaubt es gleichzeitig, optimale therapeutische Ergebnisse zu erzielen. Je nach Ausgangssituation können auch indirekte Verfahren minimalinvasiv sein. Weiterentwicklungen bei zahnmedizinischen Materialien und Techniken ermöglichen eine schonendere Zahnpräparation. Zum Beispiel können moderne Keramiken und starke Komposit-Materialien verwendet werden, um dünne Restaurationen herzustellen, bei denen weniger gesunde Zahnschubstanz entfernt werden muss. Schliesslich ist die natürliche Zahnschubstanz immer noch das schönste Material, aus dem ein Zahn besteht. Wir freuen uns für Sie mit unserem hochqualifizierten Team an Produktspezialisten in der Schweiz unterstützen zu dürfen und stehen jederzeit für die Beratung und Live-Demos in Ihrer Praxis zur Verfügung.

Die Schwierigkeit liegt nicht so sehr darin neue Ansätze zu entwickeln, als vielmehr darin sich von den alten zu lösen!

Ihr GC SWISS Team!



MARVIN HANANY
Field Product Specialist
Manager & Laboratory/Digital
Product Specialist
M: 079 351 27 63
marvin.hanany@gc.dental

FELIX GLOOR

Zahntechniker;
Produktspezialist Praxis/Labor
Region Westschweiz, Wallis
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental




GC Fachberaterinnen und GC Fachberater



EVELINE WANGLER
Produktspezialistin Praxis
Region Basel, Aargau,
Zentralschweiz
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental



MANUELA SCHULER
Produktspezialistin Praxis
Region Ostschweiz,
Zürich, Liechtenstein
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental

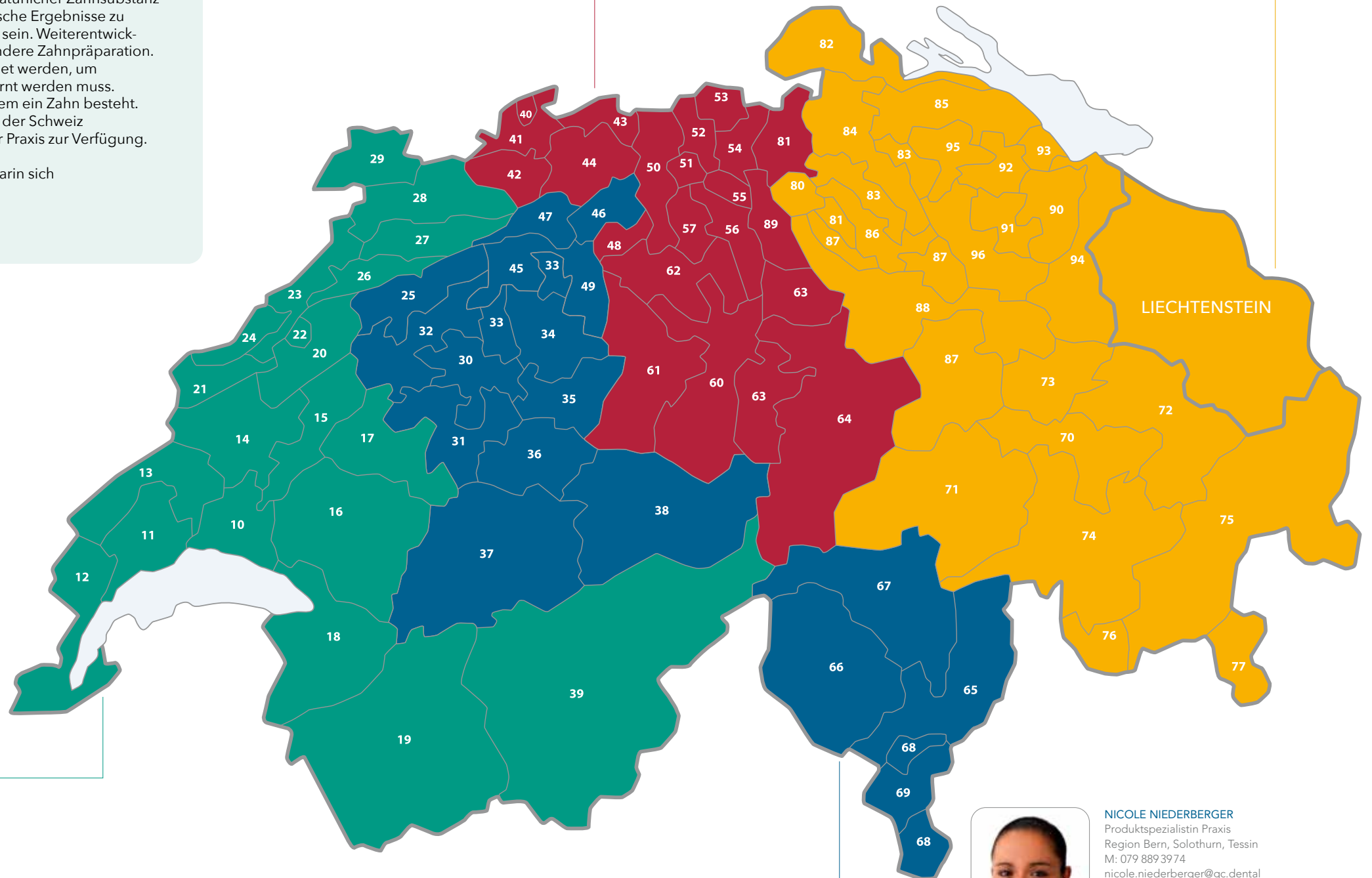

NICOLE NIEDERBERGER
Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcswitzerland



Besuchen Sie unsere Homepage
<https://www.gc.dental/europe/de-CH>



Besuchen Sie uns auf Instagram:
[gc_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

Optimale Verklebung
von Hybrid-Abutments!

G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen
von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungskomposit zum Verkleben aller Keramiken, Metall und Kompositrestaurationen. Die Eigenschaften und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewährleistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer. Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal Passung Ihrer Prothetik.* G-CEM ONE ist in einer Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3 (opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird. Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen, ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque (weiss opak) erhältlich.

*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



PREISVORTEIL

4 + 1 73,20 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006923

G-CEM ONE

Single Refill AO3

Art.-Nr. 10006924

G-CEM ONE

Single Refill Weiss Opak

Inhalt pro Single Refill:

1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),

8 x GC Automix Tips Regular,

2 x GC Automix Endo Tips;

Preis pro Packung 73,20 CHF

Weitere Details siehe Seite 9 im Praxisteil.

Zubehör:

Art.-Nr. 10003289

Automix Tip for Endo

10 Stk. mit Verlängerungstip;

13,50 CHF

Art.-Nr. 10003335

Automix Tip Regular

10 Stk.; 12,90 CHF



Opake Farben — AO3 — Weiss Opak

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadva-Abutment mit
Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog
+ Abutment auf Ti-Basis
+ Gingivamaske
(okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit
Gingiva-Maske
(laterale Ansicht)



Implantat Analog
+ Ti-Basis-Abutment
+ Vollkeramik-Krone
(Zirkonoxid-Basis)

GC LABORSPECIALS



EINTAUSCH

Keramik-Sets ALT gegen NEU

50 %

PREIS-
VORTEIL

Beispiel: Das alte Set wird gegen das neue Set getauscht (gekauft) und dazu gibt es 50% Rabatt auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis.



EINTAUSCH

Ronden/Blöcke ALT gegen NEU

50 %

PREIS-
VORTEIL

Beispiel: 20x Ronden/Blöcke kaufen
davon 10 x Gratis-Ronden/Blöcke



EINTAUSCH

Komposit-Sets ALT gegen NEU

35 %

PREIS-
VORTEIL

Beispiel: Das alte Set wird gegen das neue Set getauscht (gekauft) und dazu gibt es 35% Rabatt auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis.

Weitere Details siehe Laborteil Seite 11



EINTAUSCH

Malfarben-Sets ALT gegen NEU

50 %

PREIS-
VORTEIL

Beispiel: Das alte Set wird gegen das neue Set getauscht (gekauft) und dazu gibt es 50% Rabatt auf den vorgeschlagenen Verkaufspreis.

Weitere Details siehe Laborteil Seite 5 und Seite 8

Haben Sie Interesse an unseren Specials?



So einfach geht's:
Schicken Sie mir Ihre Bestellung
oder Terminanfrage.
Nennen Sie mir Ihr Wunsch-Depot –
ich Sorge für Ihr Spezialangebot!

Marvin Hanany:
marvin.hanany@gc.dental
oder telefonisch
unter 079 351 27 63

Wichtig zu wissen:

Alle Bestellungen laufen weiterhin über den Handel/Depot, aber mit mir als Ihrem Ansprechpartner gibt's die Extra-Vorteile obendrauf!

Was ich Ihnen biete:

- Persönliche Besuche in Ihrem Labor – ich komme gerne vorbei!
- Kostenlose Demo-Stellungen für fast alle GC-Produkte inkl. Modell-Scanner und Lichthärtegerät.
- Exklusive Vorteile bei Bestellungen über mich

Ich freue mich auf unseren Austausch und möchte gerne:

- Ihr Labor und Team kennenlernen
- Ihre Wünsche und Bedürfnisse verstehen
- Sie bestmöglich unterstützen

Aadva™ Lab Scanner 3

Sie sind auf der Suche nach einem einzigartigen und mitreissenden Scan-Erlebnis?

Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

Der Aadva Lab Scanner 3 von GC ist ein Scanner der nächsten Generation mit zahlreichen ausgeklügelten und praktischen Funktionen. Dieser gestengesteuerte Laborscanner vereint ein einzigartiges Benutzererlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Sicherheit, die Sie in einem modernen CAD/CAM-Workflow benötigen.

- Überzeugendes Benutzererlebnis durch patentierte Projektionstechnologie
- Schnelligkeit und Präzision vereint durch ein abgewinkeltes Doppelkamera-Set-up und Hochgeschwindigkeitsmotoren
- Einfache Positionierung durch vollautomatische Objekterkennung
- Augensicheres LED-Blaulicht
- Hybrid-Scan für das Arbeiten ohne Sägeschnitt-Modellvorbereitung.
- Smart Occlusion für das Arbeiten ohne vestibulär Scan.



JETZT NEU

AADVA ALS 3
14.999,- CHF



Sie möchten unseren ALS 3 testen?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Teststellung unter info.switzerland@gc.dental oder telefonisch unter 041 5200178.

PATTERN RESIN LS

Schrumpfungsoptimierter Modellierkunststoff

Der bewährte Modellierkunststoff zum modellieren von Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klammern, Klebebrücken, Palatinalbügeln, Verbindungsteilen usw. – auch als Kunststoffstumpfmateriale für die Galvanotechnik verwendbar!

- Minimale Schrumpfung:
Präzise Modelle und Gussresultate
- Hohe Festigkeit und Stabilität:
Sehr dünne Schichtstärken realisierbar
- Brennt rückstandsfrei aus:
Glatte, saubere Gussoberfläche
- Leichtes Ausarbeiten: Kann direkt im Mund angewendet werden



Pattern Resin LS

+ METALLSTAND GRATIS

Art.-Nr. 10003198
PATTERN RESIN LS Stand Promo
+ Metallstand gratis!

Inhalt: 100 g Pulver, 105 ml Liquid,
2 Mixing cups,
1 Pinsel Nr.4, 1 Pipette; 109,60CHF

OPTIGLAZE color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung zur Individualisierung indirekter Kompositrestaurationen



Zur Charakterisierung
aller Komposite
und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Kompositrestaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Kompositblöcken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke



796,20 CHF

Art.-Nr. 10001150 **OPTIGLAZE color Set**;
Inhalt: 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Farbe 2,6 ml); 1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml); 5x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU, 1 x OPTIGLAZE color Technique Card; 796,20 CHF pro Packung

65,80 CHF

OPTIGLAZE® color Nachfüllpackung
Art.-Nr. 10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
Art.-Nr. 10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
Art.-Nr. 10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
Art.-Nr. 10001154 **OPTIGLAZE color, White**
Art.-Nr. 10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
Art.-Nr. 10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
Art.-Nr. 10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
Art.-Nr. 10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
Art.-Nr. 10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
Art.-Nr. 10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
Art.-Nr. 10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
Art.-Nr. 10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
Art.-Nr. 10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
Art.-Nr. 10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
Art.-Nr. 10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Preis pro Einzelpackung 65,80 CHF à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
Art.-Nr. 10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Preis pro Einzelpackung 65,80 CHF à 5 ml

GC FUJIVEST® PLATINUM II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Platinum II ist eine Einbettmasse, die speziell für Edel- und Halbedelmetalllegierungen geschaffen wurde. Mit ihrer langen, komfortablen Verarbeitungszeit und der verbesserten Fließfähigkeit wird das Einbetten bei schwierigen Fällen einfacher als je zuvor. Der erweiterte Ausdehnungsbereich macht diesen Premium-Werkstoff sogar noch vielseitiger. Die extrem glatte Oberfläche von Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Gussstücke. Diese Spitzen-Einbettmasse kann sowohl in Verfahren mit schneller als auch mit schrittweiser Erhitzung eingesetzt werden.

Indikationen

Präzisionseinbettmasse für schnelle und konventionelle, schrittweise Erhitzungsverfahren. Für Edelmetall-, Halbedelmetall und auf Palladium basierende Legierungen.

- Längere Verarbeitungszeit, bessere Fließfähigkeit
- Sorgt für eine perfekte Passung bei schwierigen Fällen, wie Implantat-Suprastrukturen und weit spannende Brücken
- Äußerst glatte Werkstückoberflächen
- Einfach zu steuern und großer Ausdehnungsbereich
- Einfache Entnahme, mit geringerem Risiko, die Gussstücke zu beschädigen

PREISVORTEIL

20 % **145,20 CHF**
~~181,50 CHF~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10003339 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 170,08 CHF anstatt 212,60 CHF

Art.-Nr. 10003340 **GC Fujivest Platinum II, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 145,20 CHF anstatt 181,50 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10003343 **GC Fujivest Platinum II, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; 29,28 CHF anstatt 36,60 CHF

GC LISI PRESSVEST

Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren

(Typ I) Klasse 2



Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abzustrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren:
Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren

GC FUJIVEST® SUPER

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Super, eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Guss von Edelmetall-, Halbedelmetall- und palladiumbasierten Legierungen, auch für anspruchsvolle Implantatgüsse.

Indikationen

Hohe Genauigkeit für Edel- und Halbedelmetalllegierungen, sogar für weit spannende Restaurationen. Bitte fragen Sie nach unseren besonderen Verarbeitungsanweisungen für den Einsatz bei implantologischen Arbeiten.

- Schnellaufheiz-Methode
- Gesamtexpansion bis zu 2,34 % - spezielle Flüssigkeit für eine hohe Expansion erhältlich
- Cremige Konsistenz mit hoher Fließfähigkeit und hoher Benetzbarkeit für eine exzellente Detailreproduktion
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung für hochpräzise Passformen
- Einfache Entnahme
- Genaue Definition für exakte Oberflächenreproduktion und präzisen Guss

PREISVORTEIL

20 % **AB 149,68 CHF**
~~187,10 CHF~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10001776 **GC Fujivest Super, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 149,68 CHF anstatt 187,10 CHF

Art.-Nr. 10001778 **GC Fujivest Super, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 163,12 CHF anstatt 203,90 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10001777 **GC Fujivest Super, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; 30,32 CHF anstatt 37,90 CHF

Art.-Nr. 10001780 **GC Fujivest Super High Expansion**
900 ml Bottle | 900 ml; 30,32 CHF anstatt 37,90 CHF

GC FUJIVEST® PREMIUM

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



GC Fujivest Premium ist eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken, geeignet für alle Dentallegierungstypen mit besonderem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Egal, ob die Erhitzung schnell oder konventionell erfolgt, mit oder ohne Kuvette: Die zuverlässige Expansionskontrolle von Fujivest Premium sorgt für konsistent präzise Gussstücke.

Indikationen

Geeignet für alle Dentallegierungen mit speziellem Schwerpunkt auf NEM-Legierungen. Für die Verwendung in schnellen und schrittweisen Erhitzungsprozeduren.

- Bietet einen weiten Ausdehnungsbereich von bis zu 3,5 % - Implantat-Suprastrukturen mit NEM-Legierungen sind jetzt sicher und einfach
- Ermöglicht Verfahren ohne Muffeln bei schnellen und schrittweisen Aufheizprozeduren
- Hochpräzise Passformen aufgrund einfacher Expansionssteuerung mit der Anmischflüssigkeit.
- Hohe Fließfähigkeit und glatte Konsistenz
- Robuste Einbettmasse, aber einfache Entnahme

PREISVORTEIL

20 % **AB 120,64 CHF**
~~150,80 CHF~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10003213 **GC Fujivest Premium, Powder**
40 x 150 g Bags | 6 kg; 120,64 CHF anstatt 150,80 CHF

Art.-Nr. 10003214 **GC Fujivest Premium, Powder**
67 x 90 g Bags | 6 kg; 137,68 CHF anstatt 172,10 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10003215 **GC Fujivest Premium, Liquid**
900 ml Bottle | 900 ml; 29,28 CHF anstatt 36,60 CHF

PREISVORTEIL

20 % **175,76 CHF**
~~219,70 CHF~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 110003664 **GC LiSi PressVest Intro Kit**
6 x 100 g Pulver, 135 ml Flüssigkeit, 30 ml SR Flüssigkeit; 61,00 CHF

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest**
60 x 100 g; 175,76 CHF anstatt 219,70 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid**
900 ml; 35,52 CHF anstatt 44,40 CHF

Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid**
100 ml; 67,10 CHF

GC FUJIVEST® II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse



Eine karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Präzisionsguss von Kronen und Brücken mit allen Dentallegierungen, inklusive Ni-Cr und Co-Cr.

Indikationen

Perfekter Guss mit NEM-Legierungen, ermöglicht schnelle und langsame Aufheizverfahren.

- Karbonfrei
- Muffellose Verfahren sind sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Aufheizverfahren möglich.
- Hohe Fließfähigkeit und hohe Benetzbarkeit
- Glatte Oberfläche
- Kontrolliertes Abbinden und Wärmeausdehnung
- Spezielle Flüssigkeit mit geringer Ausdehnung

PREISVORTEIL

20 % **AB 158,80 CHF**
~~198,50 CHF~~

Preis pro 150 g-Packung

Art.-Nr. 10001770 **Fujivest II, Powder**
100 x 60 g | Bags; 173,28 CHF anstatt 216,60 CHF

Art.-Nr. 10001771 **Fujivest II, Powder**
40 x 150 g | Bags; 158,80 CHF anstatt 198,50 CHF

Art.-Nr. 10003332 **Fujivest II, Powder**
4 x 2 kg; 180,48 CHF anstatt 225,60 CHF

Art.-Nr. 10001773 **Fujivest II, Powder**
67 x 90 g | Bags; 169,52 CHF anstatt 211,90 CHF

Liquid

Art.-Nr. 10001772 **Fujivest II, Liquid;**
900 ml Bottle; 30,16 CHF anstatt 37,70 CHF

Art.-Nr. 10001792 **Fujivest II, Low Expansion;**
900 ml Bottle; 30,16 CHF anstatt 37,70 CHF

- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis - hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Größerer Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht - keine Flusssäure

Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung - Step Modus | Endhärtung - Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zweiwelligen LED-Technologie ausgestattet, die jedes GC Komposit sicher und dauerhaft härtet. Es verfügt über einen Wellenlängenbereich von 380 nm - 510 nm mit maximalen Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet einerseits eine optimale Härtung von allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen und verkürzt andererseits die Lichthärtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe von allen Seiten. Auf der Halterung der Härtungslampe werden die Objekte während sämtlicher Lichthärtungszyklen sicher positioniert.



Kompaktes, ergonomisches Design

Die Labolight DUO von GC kann nicht nur den Grossteil Ihrer Arbeiten fertigstellen. Es sieht dabei auch noch gut aus. Das preisgekrönte, schlanke, moderne Design mit den glatten Oberflächen lässt sich ganz einfach reinigen und in Ihrem Labor platzsparend aufstellen. Das Design ist zudem auch noch anwenderfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und intuitiv. Die inneren Komponenten sind dank der breiten Öffnung leicht zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS

10%

2.998,08 CHF

3.331,20 CHF

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
2.998,08 CHF anstatt 3.331,20 CHF
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



GRADIA® PLUS

Modulares Kompositsystem für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen und die Reproduktion von Farben



Technisches Handbuch GRADIA PLUS

Farbtabelle GRADIA PLUS



- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiss-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie



PREISVORTEIL A

35%

1.612,85 CHF

2.481,30 CHF

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 733,07 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 463,06 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

PREISVORTEIL B

35%

2.276,43 CHF

3.502,20 CHF

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 733,07 CHF
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** 663,59 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 463,06 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

PREISVORTEIL C

35%

1.288,82 CHF

1.982,80 CHF

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** 409,05 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 463,06 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

PREISVORTEIL D


35%

895,12 CHF

1.377,10 CHF

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** 478,40 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 416,72 CHF

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

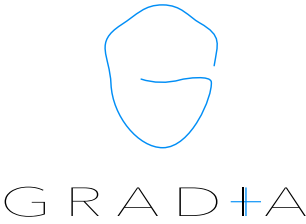

Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Informationen!

Initial LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennbarkeit
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!

Initial Zr-FS

Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION
JETZT **AB 1.985,40 CHF**

Preis pro Packung
Initial Zr-FS Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; 1985,40 CHF
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; 1985,40 CHF
Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; 366,90 CHF
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; 332,00 CHF


Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL
5 + 1 **INITIAL ZR-FS**
INITIAL MC

Erhalte 6 Nachfüllpackungen von Initial Zr-FS oder Initial MC zum Preis von 5!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,0 (CHF/EUR). Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 31.12.2025. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

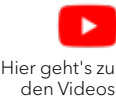

AKTION
JETZT **AB 847,20 CHF**

Preis pro Packung
Initial LiSi Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 766,00 CHF
Art.-Nr. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 928,40 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Initial MC

Metall-Keramik

AKTION
JETZT **AB 2.132,55 CHF**

Preis pro Packung
Aktionspreis für Initial MC Basic (Paste) + Basic Plus (Paste) + Advanced Set
Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; 1743,30 CHF
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1577,10 CHF
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; 1734,40 CHF
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1622,20 CHF
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; 1065,80 CHF
Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; 292,40 CHF
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 260,50 CHF
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; 358,90 CHF
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaquer Set**; 601,30 CHF
Art.-Nr. 10003114 **Initial MC Paste Opaquer Set**; 689,60
Art.-Nr. 10003183 **Initial MC Chroma Shade Translucent Set**; 341,20 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik


Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil

PREISVORTEIL
4 + 1 **98,50 CHF**

Preis pro Packung
Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater

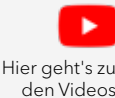

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrieraset an!



Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote ab.

Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht.

Medium Opacity (MO)



GC LiSi PressVest

Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren (Typ I) Klasse 2

Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abzustrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren: Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren



- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis – hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Grössere Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht – keine Flusssäure

PREISVORTEIL
20 % **175,76 CHF**
~~219,70 CHF~~

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest Powder** 100 g x 60, EU/US | 6 kg;
175,76 CHF anstatt 219,70 CHF pro Packung

PREISVORTEIL
20 % **35,52 CHF**
~~44,40 CHF~~

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid** 900ml, EU/US | 900 ml;
35,52 CHF anstatt 44,20 CHF pro Packung
Weitere Verpackungseinheit:
Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid** 100 ml, EU/US | 100 ml; 67,10 CHF

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,0 (CHF/EUR). Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 31.12.2025. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Initial Zirconia Disk

CAD/CAM-Zirkonoxid-Ronde

Starke Lösungen für schöne Zähne
Mit Initial Zirconia Disk haben Sie die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Restaurationen und sie passt perfekt zur Initial-Keramik.

Initial Zirconia Disk: Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle

- Hohe Kaubelastung
- Subgingivale Ränder
- Auswahl bei Transluzenz und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Mit einem Durchmesser von 98,5 mm und Dicken von 12, 14, 18 und 25 mm passen die Scheiben in die meisten CAD/CAM-Fräsmaschinen

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis
10006708	98,5x12 mm	ST	202,20 CHF
10006709	98,5x14 mm		215,40 CHF
10006710	98,5x18 mm		250,40 CHF
10006711	98,5x25 mm		311,80 CHF

Standard Translucent (ST) und High Translucent Zirconia (HT)

- Front- und Seitenzahnkronen
- Mehrgliedrige Brücken
- Hybrid-Abutments
- Implantatgerüste

Ultrahoch-transluzentes Zirkonoxid (UHT)

- Inlays
- Onlays
- Veneers
- Front- und Seitenzahnkronen
- Dreigliedrige Brücken (einschliesslich Molaren)

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis
10006712	98,5x12 mm	HT	202,20 CHF
10006713	98,5x14 mm		215,40 CHF
10006714	98,5x18 mm		250,40 CHF
10006715	98,5x25 mm		311,80 CHF

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis
10006716	98,5x12 mm	UHT	202,20 CHF
10006717	98,5x14 mm		215,40 CHF
10006718	98,5x18 mm		250,40 CHF
10006719	98,5x25 mm		311,80 CHF

Initial Spectrum Stains

2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik

PREISVORTEIL

3 + 1 INITIAL SPECTRUM STAINS

Erhalte 4 Packungen Initial Spectrum Stains zum Preis von 3!

20 Pulvermalifarben (3 g) à 57,90 CHF:
SPS-1 Ivory White, SPS-2 Melon Yellow, SPS-3 Signal Yellow, SPS-4 Light Terracotta, SPS-5 Savannah Gold, SPS-6 Caramel, SPS-7 Camel, SPS-8 Olive, SPS-9 Brown, SPS-10 Dark Walnut, SPS-11 Coral, SPS-12 Denim Blue, SPS-13 Twilight, SPS-14 Deep Orange, SPS-15 Sunset, SPS-16 Midnight, SPS-17 Dark Brown, SPS-18 Illusion 1, SPS-19 Illusion 2, SPS-20 Illusion 3

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial™ Spectrum Stains beraten und sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!



Art.-Nr. 10003190
Initial Spectrum Stain Set
966,90 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.



Charakterisierung aussen

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

Hier geht es zum Technischen Handbuch:



Hier gehts zur Painting Solution Broschüre:

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Die erste Wahl für höchste Ansprüche

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und aussergewöhnlicher Ästhetik und eignet sich sowohl für Frontzahn- wie Seitenzahnrestaurationen.

HERVORRAGENDE ÄSTHETIK


Naturgetreuer Farb- und Transluzenzgradient für Restaurationen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich.

HOHE FESTIGKEIT

Eingestuft in Klasse V nach DIN EN ISO 6872 mit einem Mittelwert von > 1100 MPa.

OMNIFUNKTIONAL

Vielseitig und für ein breites Spektrum an klinischen Indikationen geeignet. Für konventionelles und schnelles Sintern.

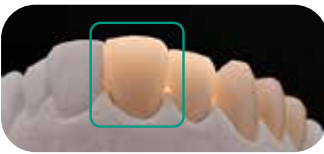

Transluzenz > 49% Festigkeit 800 MPa	5Y	Inzisal	20%
	4-5Y	Übergangsschicht 1	15%
	4-5Y	Übergangsschicht 2	15%
	4-5Y	Übergangsschicht 3	15%
Transluzenz > 45% Festigkeit 1150 MPa	4Y	Zervical	35%



PREISVORTEIL

3 + 1 AB 179,- CHF

Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen Initial Zirconia Disk Multilayer Elite zum Preis von 3!

Farbmix möglich, Aktion nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL ZR COLORING LIQUID GRATIS

Kaufe 3x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite und erhalte 1x Initial Zr Coloring Liquid gratis!

Farbmix möglich, Aktion nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit möglich. Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Die Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ist erhältlich in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Typen, in den Scheibengrössen 14, 16, 20 und 25 mm jeweils mit einem Durchmesser von 98,5 mm.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3

INITIAL ZIRCONIA DISK
INITIAL KERAMIK
INITIAL ZIRCONIA DISK
MULTILAYER ELITE
ZIRCONIA COLOR LIQUID

NEU



Physikalische Eigenschaften

- Zirkonoxid Typ II: Klasse V nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert \geq 1100 MPa
- Hoher Transluzenzgradient: > 45% bis > 49%
- Schnelles Sintern für Kronen und Brücken mit bis zu 3 Gliedern

Art.-Nr. 70017398 bis 70017416
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 14 mm 179,- CHF pro Packung

Art.-Nr. 70017417 bis 70017435
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 16 mm 199,- CHF pro Packung

Art.-Nr. 70017436 bis 70017454
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 20 mm 239,- CHF pro Packung

Art.-Nr. 70017455 bis 70017473
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 25 mm 278,- CHF pro Packung

Initial Zirconia Coloring Liquid

Coloring Liquid für ZrO2


- Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restaurationen
- Die erforderliche Charakterisierungszeit verkürzen
- Zeitsparend, kalkulierbar und massgeschneidert
Das Initial Zirconia Coloring Liquid bietet einen individuellen Ansatz von der Basis bis einschliesslich zahnfleischfarbenen Bereichen.
- Bemalen oder Tauchen

PREISVORTEIL

4 + 1 AB 25,- CHF

Erhalte 5 Initial Zr Coloring Liquid Nachfüllpackungen zum Preis von 4!

Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater.

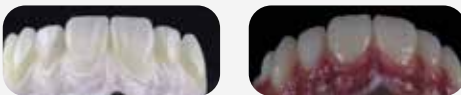

PREISVORTEIL

20 % 479,20 CHF
~~599,- CHF~~

Art.-Nr. 10041648 **Initial Zr Coloring Liquid Set**
479,20 CHF anstatt 599,- CHF

Inhalt: 700 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml:
1 x Body A, 1 x Body B, 1 x Body C, 1 x Body D,
1 x Cervical A, 1 x Cervical B, 1 x Cervical C,
1 x Cervical D, 1 x Effect Blue, 1 x Effect Grey,
1 x Effect Pink, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue,
1 x Yellow, 1 x Green, Technisches Handbuch

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10041649
Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit;
190,- CHF pro Packung
Inhalt: 250 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A,
1 x Cervical A, 1 x Effect Grey,
1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml:
1 x Red, 1 x Blue,
Kurze Gebrauchsanweisung

Nachfüllpackungen à 50 ml;
53,50 CHF
Initial Zr Coloring Liquid:
Body A, B, C, D; Cervical A,
B, C, D; Effect Blue, Effect Grey,
Effect Pink, Neutral

Nachfüllpackungen à 25 ml;
25,00 CHF
Initial Zr Marking Liquid:
Red, Blue, Yellow, Green

NEU



Initial IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und
Micro-Layering-Keramiksyste




initial™
IQ ONE SQIN



ONE SQIN-Technik - für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand - keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften - für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz - für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.

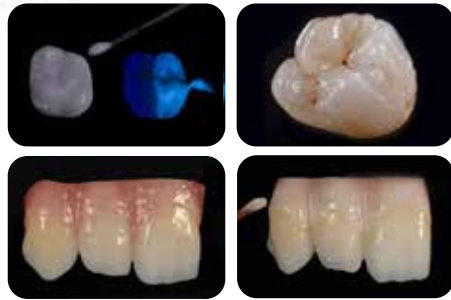

© ZTM Michael Brusch
© ZTM Stefan M. Roosen

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Farben

Zwei Systeme - ein Ansatz:
Malen Sie Ihre rote und weisse Ästhetik



Initial IQ Lustre Paste
ONE V-Shades Set

+ INITIAL ZIRCONIA DISK
MULTILAYER ELITE GRATIS

Kaufe 1 x Initial IQ Lustre Paste
ONE V-Shades Set und erhalte
1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
(jede Grösse) gratis!

Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



Ausgangssituation

Endergebnis

PREISVORTEIL

15% **400,- CHF**
~~470,60 CHF~~

Art.-Nr. 10003186

Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set

5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x
Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF
Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml);
1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP
NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF, Color
Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual;

400,- CHF anstatt 470,60CHF pro Set



PREISVORTEIL

15% **723,01 CHF**
~~850,60 CHF~~

Art.-Nr. 10007017

Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g;
4 x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g;
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 /
L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel
Effect Opal (L-OP), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value
(L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP
ONE/NF; Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE Mixing
dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2;
1 x IQ LP ONE Colour Chart;

723,01 CHF anstatt 850,60CHF pro Set



Für ein strahlendes Lächeln
Von direkt bis indirekt - mit Know-how und Kreativität

Teil unserer
aktuellen Kampagne:
Weitere Informationen
siehe Praxisteil
Seite 2-3

PREISVORTEIL

4+1 INITIAL
IQ ONE SQIN

Erhalte 5 Nachfüllpackungen von
Initial IQ ONE SQIN zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater und
innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

RISK-FREE EINFÜHRUNGS-AKTION

~~1.476,60 CHF~~ **1.107,45 CHF**

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



INITIAL IQ SQIN SHADES SET

604,10 CHF


Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006990


Initial IQ SQIN SHADES SET

5 x IQ SQIN Powder Dentin
(Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel
(E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translu-
cent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM
(light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture
Liquid, 25 ml 1 x IQ SQIN;
Technical Manual

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben (4 g), 69,80 CHF

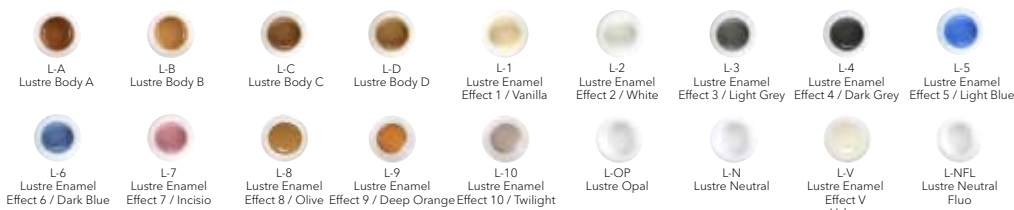

Lustre Pastes NF Gum Farben (4 g), 57,90 CHF

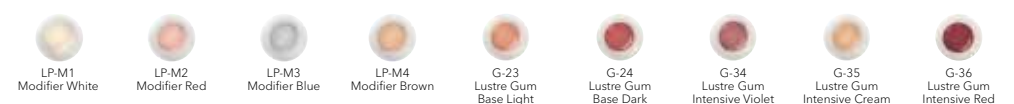

PREISVORTEIL

4+1 INITIAL IQ LUSTRE
PASTE ONE

Erhalte 5 Nachfüllpackungen von
Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater und
innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

INITIAL IQ ONE SQIN
INITIAL IQ LUSTRE
PASTES ONE

NEU





GC AUSTRIA SWISS OFFICE **NEWS & HIGHLIGHTS**

JULI BIS DEZEMBER 2025

LABOR



Since 1921
100 years of Quality in Dental

