

GC GERMANY – NEWS & HIGHLIGHTS

Angebote für Praxis und Labor
Juli bis Dezember 2026



Tooth Wear ist real. Unsere Lösungen auch.

Langfristige indirekte Versorgungskonzepte bei ausgeprägtem Zahnverschleiß

Direkt oder indirekt?

Bei der Versorgung von Zahnverschleiß gibt es keine feste Regel. Entscheidend ist ein möglichst minimalinvasives Vorgehen. In vielen Fällen wird zunächst mit direkten Restaurationen begonnen. Bei komplexen Fällen mit ausgeprägtem oder pathologischem Zahnverschleiß können jedoch auch indirekte Versorgungen erforderlich werden. Hier sind Materialien gefragt, die im Langzeiteinsatz zuverlässig sind und gleichzeitig die vorhandene Zahnschubstanz schonen. GC Produkte wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und unterstützen den gesamten Behandlungsablauf zuverlässig.

Bei der Auswahl sollte Folgendes berücksichtigt werden:



Ausmaß des Substanzverlusts



Ätiologie



Progression des Zahnverschleißes



Bei schwerem generalisiertem Zahnverschleiß ist eine sorgfältige Planung entscheidend, um Ästhetik, Funktion und Phonetik in Einklang zu bringen und möglichst minimalinvasiv vorzugehen. Die Literatur zeigt, dass die vertikale Dimension der Okklusion (VDO) innerhalb der Komfortzone des Patienten sicher erhöht werden kann - **typischerweise um bis zu 5 mm im Inzisalbereich.**

TEMPSMART DC Dualhärtendes Bisacryl-Komposit für temporäre Kronen und Brücken

- ✓ Angenehme, nicht klebrige Verarbeitung
- ✓ Hohe Bruchzähigkeit
- ✓ Schnelle Politur und langanhaltender Glanz
- ✓ Reparierbar und unterfütterbar

Dieser Fall erforderte eine Erhöhung der vertikalen Dimension. Die Versorgung mit **TEMPSMART DC**-Provisorien lässt unmittelbar erkennen, wie die definitive Versorgung aussehen wird. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. C. Lampson, Deutschland.)




CERASMART270 Kraftabsorbierender CAD/CAM-Hybridkeramikblock

- ✓ Homogene Füllstoffverteilung dank FSC-Technologie - stabil, glatt und langlebig
- ✓ Puffert hohe Kaukräfte
- ✓ Einfache intraorale Reparatur



Bei einem Patienten mit Bruxismus wurde die Okklusion im Seitenzahnbereich mit **CERASMART270** wiederhergestellt. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. C. Moussally, Frankreich.)

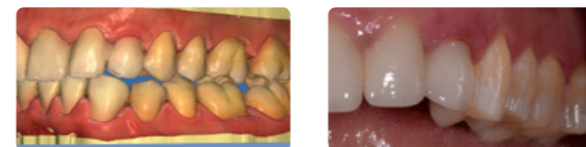

G-CEM ONE zeichnet sich durch eine hohe Farbstabilität aus. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. Pongione, Italien.)

G-CEM ONE Universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit

- ✓ Universell einsetzbar und selbstadhäsiv
- ✓ Hohe Haftfestigkeit in allen Applikationsmodi
- ✓ Verfärbungsresistent
- ✓ Hohe Verschleißfestigkeit



FujiCEM Evolve ist feuchtigkeits-tolerant, und die Überschüsse lassen sich einfach entfernen. (Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. R. Sorrentino, Italien.)

FujiCEM Evolve Kunststoffverstärkter Glas-ionomer-Befestigungszement

- ✓ Applikation in einem Schritt
- ✓ Weniger techniksensitiv als Befestigungskomposit
- ✓ Feuchtigkeits-tolerant
- ✓ Optimale Haftung an Zirkonoxid
- ✓ Geringe Filmstärke und präzise Adaptierung

Klinische und funktionelle Diagnose

Ästhetische und funktionelle Behandlungsplanung

Mock-up und Mock-up-geführte Präparation

Intermediäre Phase mit Provisorien

Befestigung

Wax-up, Erstellung von Modellen, Schlüsseln und Provisorien

Herstellung der Restaurationen



Eine klare Kommunikation zwischen Behandler und Labor ist entscheidend für eine funktionelle und ästhetische Rehabilitation.



Alle Produkte unserer Tooth Wear-Kampagne sind mit diesem Hinweis gekennzeichnet.



Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr!

GC Temp PRINT Lichthärtendes 3D-Druck-Komposit für temporäre Kronen und Brücken

- ✓ MMA-frei, für DLP-Druck geeignet
- ✓ Kompatibel mit OPTIGLAZE color




Selbst feinste anatomische Strukturen lassen sich einfach realisieren. Kleine okklusale Anpassungen lassen sich problemlos durch Beschleifen oder Ergänzen mit Komposit vornehmen. **GC Fuji TEMP LT** eignet sich ideal für die temporäre Befestigung. (Mit freundlicher Genehmigung von ZT Stephen Lusty, Großbritannien.)



Initial LiSi Block & Press Lithium-Disilikat-Lösungen zum Schleifen und Pressen

- ✓ Hervorragende Ästhetik
- ✓ Lithium-Disilikat mit HDM-Technologie und hervorragenden physikalischen Eigenschaften
- ✓ Glatte Ränder und sehr gute Polierbarkeit durch homogene Struktur

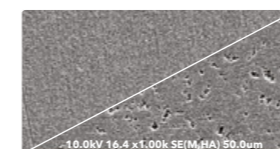

Vergleich der polierten Oberfläche (zweite Politur) von **Initial LiSi Press** (oben links) und konventionellem Lithium-Disilikat (unten rechts) bei identischer Vergrößerung.



Ein Patient mit ausgeprägtem erosivem Zahnverschleiß wurde mit Teilkronen aus **Initial LiSi Press** im Seitenzahnbereich versorgt.



(Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Z. Ali, Großbritannien.)

Bei diesem Patienten mit ausgeprägtem erosivem Zahnverschleiß musste eine insuffiziente Krone an Zahn 16 ersetzt werden. Die Versorgung erfolgte mit Zirkonoxid. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Z. Ali, Großbritannien.)



Initial Zirconia Solutions ermöglichen ein Höchstmaß an Individualisierung bei minimalem Materialeinsatz.

Initial Zirconia Solutions Hochfeste Zirkonoxid-Disks und Optionen zur Charakterisierung

- ✓ Omnifunktional: breites Indikationsspektrum, konventionelles oder Speed-Sintern
- ✓ Dünne Restaurationen für unterschiedliche Präparationsarten
- ✓ Hervorragende Ästhetik mit Initial IQ ONE SQIN
- ✓ Erhältlich als ST, HT, UHT und Multilayer



Unsere Produkt-Highlights Praxis

G-ænial™ Universal Injectable

Universelles, injizierbares und hochfestes Restaurationsmaterial für alle Kavitätenklassen



Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Sie setzen auf eine thixotrope Konsistenz, Vielseitigkeit in der Anwendung und Ästhetik?

G-ænial Universal Injectable punktet in allen Indikationen dank injizierbarer Viskosität: Es bleibt an Ort und Stelle und passt sich jeder Kavität an. Das Komposit ist für alle Kavitätenklassen – auch kaudruckbelastete – geeignet. Viele Eigenschaften machen G-ænial Universal Injectable aus: Seine hohe Festigkeit und Abrasionsbeständigkeit, seine Langlebigkeit und der starke Verbund der Füllstoffe

in der Matrix dank innovativer FSC-Technologie – einem Füllstoffbehandlungsverfahren zur homogenen Dispersion. Durch die Möglichkeit, okklusale Oberflächen beim Injizieren zu modellieren, kann wertvolle Zeit eingespart werden. Optimale Glanzbeständigkeit und Polierbarkeit sorgen bei G-ænial Universal Injectable für ästhetische Ergebnisse. Die große Auswahl an Farbtönen und 3 Transluzenzstufen erlauben eine individuell auf den Patienten abgestimmte ästhetische Farbgestaltung.

Die Revolution von GC: G-ænial™ A'CHORD

Lichthärtendes Universal-Komposit-Füllungsmaterial

Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

G-ænial A'CHORD ist ein vielseitiges Universal-Komposit für Front- und Seitenzahn-Restaurationen. Dank seines einfachen Unishade-Systems erreicht es mit 5 Core-Farben die Ästhetik der 16 klassischen VITA®-Farben. Es ermöglicht unsichtbare Restaurationen mit einem reduzierten Materialeinsatz und schneller Politur, wodurch es effizient und wirtschaftlich im Einsatz ist.

A'CHORD Vereinfachung

- einfaches Unishade-System
- einfache Handhabung
- einfach universell



Ein vereinfachtes Unishade-System mit 5 Core-Farben erreicht die Ästhetik der 16 klassischen VITA®-Farben.



Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems

PROMO

10%



Injection Moulding Kit

1x EXACLEAR Kartusche 48ml (51g); 1x A1 G-ænial Universal Injectable Spritze; 1ml (1,7g); 1x A2 G-ænial Universal Injectable Spritze 1ml (1,7g); 1x A3 G-ænial Universal Injectable Spritze 1ml (1,7g); 3x Mixing Tips Typ II L, Dispensing Tips (10003753) **nur 143,90€** (statt 159,90€)

PROMO

statt 280,10€ nur **229,00€**



G-ænial Universal Injectable Spritze + G-Premio BOND Kit

3x G-ænial Universal Injectable Spritze 1,0 ml (1,7g) in A1, A2, A3, 1x G-Premio BOND 5 ml, 30x Dispensing Tip Long Needle, 3x Lichtschutzkappe (10003741) **nur 229,00€** (statt 280,10€)



G-ænial A'CHORD Unitip

(10006753–10006759) 7 Standard Farben je 15 Unitips à 0,30g (0,16ml)
(10006761–10006763) 3 Opaque Farben je 15 Unitips à 0,30g (0,16ml)
(10006765, 10006766) 2 Enamel Farben je 15 Unitips à 0,30g (0,16ml)
(10006760, 10006764) 2 Bleach Farben je 15 Unitips à 0,30g (0,16ml)
Preis pro Packung **nur 72,00€**

PROFITIEREN SIE VON WEITEREN TOP-ANGEBOTEN – JETZT ÜBER IHREN GC HANDELSPARTNER BESTELLEN!



G-ænial A'CHORD Spritze

(10006739–10006745) 7 Standard Farben à Spritze 4g (2,1 ml)
(10006747–10006749) 3 Opaque Farben à Spritze 4g (2,1 ml)
(10006751, 10006752) 2 Enamel Farben à Spritze 4g (2,1 ml)
(10006746, 10006750) 2 Bleach Farben à Spritze 4g (2,1 ml)
Preis pro Packung **nur 67,10€**

EQUIA Forte™ HT

Glashybrid-Bulk-Fill-System für permanente Restaurationen



Zervikale Restauration mit EQUIA Forte HT
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Javier Tapia Guadix, Spanien



Welches Material nutzen Sie, wenn Sie kein Komposit verwenden können?

Kennen Sie diese Fälle aus der Praxis?

- Suche nach einer bezahlbaren Lösung
- Bedarf an einem zugelassenen, permanenten Füllungsmaterial für den Langzeiteinsatz im Seitenzahnbereich
- Schwer zu isolierende Karies
- Probleme mit der Adhäsion
- Wenig Zeit (z. B. mangelnde Mitarbeit des Patienten; pflegebedürftige und vulnerable Patienten)

Haben Sie EQUIA Forte HT bereits in Betracht gezogen?

Darum lohnt sich der Einsatz:

- Bewährte Kosteneffizienz und Leistung
- Schnell und einfach zu verarbeiten – Bulk-Fill-Verfahren
- Feuchtigkeitstolerant – kein Kofferdam erforderlich
- Selbstadhäsiv und biokompatibel
- Abrechenbar

Besonders für folgende Indikationen geeignet:

- Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen*
- Klasse-V-Restaurationen
- MIH (Restaurierung MIH-betroffener Zähne)
- Minimalinvasive Restaurationen bei partieller Kariesentfernung
- Amalgamersatz

Hauptindikationen für EQUIA Forte HT



* Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung bzw. den technischen Leitfaden zur empfohlenen Kavitätengröße.

EQUIA Forte HT Fil, Nachfüllpackung, A2

50 Kapseln EQUIA Forte HT Fil (0,40g) Pulver und 0,13g (0,10ml) Flüssigkeit, gemischtes Volumen pro Kapsel (0,14ml) (10004841) **nur 171,27€ (statt 190,30€)**

EQUIA Forte HT Fil, Nachfüllpackung, A3

50 Kapseln EQUIA Forte HT Fil (0,40g) Pulver und 0,13g (0,10ml) Flüssigkeit, gemischtes Volumen pro Kapsel (0,14ml) (10004901) **nur 171,27€ (statt 190,30€)**

EQUIA Forte Coat

1 Flasche EQUIA Forte Coat, 4 ml, Einweg-Applikator (25) (10004885) **nur 83,88€ (statt 93,20€)**



PROMO
10%

everX Flow™

Mit kurzen Glasfasern verstärktes fließfähiges Komposit


Perfekte Viskosität für einfache Applikation und hervorragende Anpassung

Entdecken Sie everX Flow, ein mit kurzen Glasfasern verstärktes fließfähiges Komposit zur Verstärkung von Restaurationen. Ein neues, vereinfachtes Vorgehen ermöglicht es nun, everX Flow direkt in Klasse-II-Kavitäten zu applizieren – ohne Abdeckung der approximalen Flächen. Mit seiner einfachen Anwendung, den zwei Farbtönen und seiner hohen Stabilität ist es Ihr Produkt der Wahl für alle direkten Restaurationen sowie für Stumpfaufbauten.

Überzeugend stabile Struktur



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lucile Dahan, Frankreich

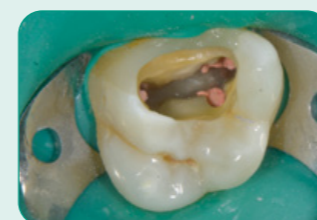

Kavitätenpräparation



Applikation von everX Flow Bulk-Farbe



Abdeckschicht mit G-ænial Universal Injectable Farbe A3



Endergebnis

PROMO statt 267,00€ **nur 199,00€**



everX Flow Bulk

1x Spritze 2 ml (3,7 g);
20x Dispensing Tip III Plastic;
Lichtschutzkappe
(10001488) **nur 69,10€**

everX Flow Dentin

1x Spritze 2 ml (3,7 g);
20x Dispensing Tip III Plastic;
Lichtschutzkappe
(10001489) **nur 69,10€**



everX Flow + G-ænial Universal Injectable Starter Kit

1x everX Flow Spritze 2ml (3,7 g) Bulk-Farbe
1x everX Flow Spritze 2ml (3,7 g) Dentin-Farbe
1x A2 G-ænial Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g)
1x A3 G-ænial Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g)
4 x Dispensing Tip III Plastic, 20x Dispensing Tip Long Needle, 4x Lichtschutzkappe
(10004834) **nur 199,00€ (statt 267,00€)**

PROFITIEREN SIE VON WEITEREN TOP-ANGEBOTEN – JETZT ÜBER IHRE GC FACHBERATUNG BESTELLEN!

FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter
Glasionomerzement für die
zuverlässige, tägliche Anwendung



Einen Schritt voraus: Breites Indikationsspektrum, hohe Feuchtigkeittoleranz und die Möglichkeit zum Tack-Cure, um überschüssiges Material leicht zu entfernen.



Hervorragender Haftverbund an Zirkonoxid

Handmisch- oder Automix-Variante – alles in einem System erhältlich

- Hervorragender Haftverbund an Zirkonoxid aufgrund der hohen Benetzbarkeit
- Keine Kontamination der Pasten durch weit auseinanderliegende Kartuschenöffnungen
- „Push & Click“-Mischkanüle ist einfach zu platzieren
- Kann (mittels Endo-Mischkanüle) direkt in die Restauration oder den Wurzelkanal appliziert werden
- Einfache Überschussentfernung



Einfache Dosierung

Einfaches Entfernen von Überschüssen

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Tapia Guadix, Spanien

PROMO
20%



FujiCEM Evolve Single Pack

1 x FujiCEM Evolve Spritze (9,2g/5,0ml); 15x GC Push and Click Tip Regular (10004926) **nur 86,40€** (statt 108,00€)



FujiCEM Evolve Clinic Pack

8x FujiCEM Evolve Spritze (9,2g/5,0ml);
2x Mixing Pad Nr. 22
(10006621) **nur 556,90€**

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle Befestigungen finden Sie im **GC Luting Guide** (Befestigungsleitfaden).



FujiCEM™ 2 SL

Hochwertiger kunststoffmodifizierter
Glasionomer-Befestigungszement



FujiCEM 2 SL Eco Pack

4 x Kartusche FujiCEM 2 SL je 13,3g (7,2ml)
(10003468) **nur 409,00€** (statt 542,40€)

PROMO

statt 542,40€

nur 409,00€

- Chemische Adhäsion an der Zahnstruktur für eine hervorragende Randdichtigkeit
- Feuchtigkeittolerant: ein absolutes Muss, wenn keine Feuchtigkeitskontrolle garantiert werden kann
- Schnell und einfach: Ätzen oder Bonding nicht erforderlich

- Gummiartige Konsistenz zum einfachen Entfernen von überschüssigem Material
- Nahezu keine postoperative Empfindlichkeit: pulpafreundliche Lösung

G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-
Universaladhäsiv

WEITERE ANGEBOTE JETZT ÜBER IHREN GC HANDELSPARTNER BESTELLEN!




G-Premio BOND

Dreierpackung, 3x Flasche je 5ml
(10001458) **nur 292,60€**

Seien Sie kompromisslos!

Profitieren Sie von ...

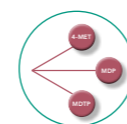

... optimalem Haftverbund



... weniger Verfärbungen





... sicherer Handhabung



... weniger Materialverbrauch

... vielseitiger Anwendung

... weniger postoperativen Sensitivitäten

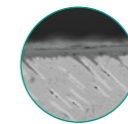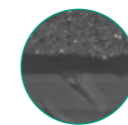

Entdecken Sie das lichthärtende Einkomponenten-Universaladhäsiv von GC: Keine Kompromisse in der Leistung – keine Kompromisse in der Handhabung

- Kompatibel in allen Ätztechniken (selbstätzend, selektives Ätzen oder Total-Etch)
- Geeignet für direktes Bonding, aber auch für die Behandlung von Hypersensitivitäten und Reparaturen
- Optimale Leistung auf unterschiedlichen Substraten aufgrund der drei funktionellen Monomere: 4-MET, MDP, MDTP
- Extrem geringe Filmstärke (3 µm)
- Keine postoperativen Sensitivitäten durch perfektes Eindringen in die Dentintubuli
- Sehr einfaches Verfahren mit geringer Techniksensitivität
- Keine Verschwendung dank präziser Dosierung und einer dünnen Flaschenöffnung, die bis zu 300 Tropfen pro Flasche abgibt

G-CEM ONE™

Universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit

G-CEM ONE, das selbstadhäsive Befestigungskomposit von GC, bietet ein einfaches Befestigungsprotokoll mit hohen Haftwerten, einfacher Überschussentfernung, dauerhaft ästhetischen Ergebnissen sowie mit einer ausgeprägten, optimierten Dunkelhärtung für alle Indikationen.

Der optionale Adhesive Enhancing Primer (AEP) mit innovativer GC „Touch Cure“-Funktion kann in anspruchsvollen klinischen Situationen, z. B. nicht-retentiven Präparationen, verwendet werden, um die Haftwerte zu optimieren. G-CEM ONE bietet mit wenigen Komponenten und Arbeitsschritten verlässliche Befestigungsergebnisse.



Jetzt auch mit G-Premio BOND kombinierbar!



G-CEM ONE ist nun zusätzlich in neuen Packungen in Kombination mit G-Premio BOND verfügbar, aus denen Sie Ihr bevorzugtes Befestigungsprotokoll wählen können.

G-CEM ONE Universal System Kit

1x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Spritze TR (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo Tips; 1x G-Premio BOND 5ml; 1x G-Multi PRIMER 5ml (10037116) **nur 202,40€**

G-CEM ONE System Kit

1x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Spritze TR (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo Tips; 1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml; 1x G-Multi PRIMER 5ml (10006920) **nur 190,00€**

G-CEM ONE Twin Refill A2 (10006921)

G-CEM ONE Twin Refill Transluzent (10006922)
Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung **nur 141,30€**

G-CEM ONE Single Refill AO3 (10006923)

G-CEM ONE Single Refill Weiß Opak (10006924)
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung **nur 75,00€**

G-CEM ONE Value Refill A2 (10006925)


G-CEM ONE Value Refill Transluzent (10006926)
Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung **nur 454,80€**

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (10006833)

Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml; Preis pro Packung **nur 77,70€**



Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle Befestigungen finden Sie im **GC Luting Guide** (Befestigungsleitfaden)

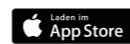

GC Initial™ LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat



Funktion trifft auf Ästhetik

Ihre Vorteile

- Zeitersparnis, da kein Brennvorgang erforderlich ist
- Vollkristallisiertes Lithium-Disilikat
- Dauerhafte Ästhetik und passgenaue Ränder
- Glatte Oberflächen, ausgezeichnete Kantenstabilität
- Natürliche Opaleszenz


Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Andreas Kurbad




Ausgangssituation
Zahn 46



Präparation/Scan

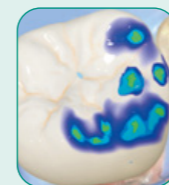

Design

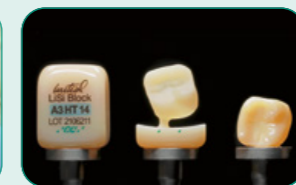

Geschliffene Initial LiSi Block
Restauration



Charakterisierung
mit Initial IQ Lustre
Pastes ONE



Befestigung mit
G-CEM ONE &
Überschussentfernung



Endergebnis



GC Initial LiSi Block Aesthetic Kit

Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 1 Block in 5 Farben: 1x A1 HT; 1x A2 HT; 1x A2 LT; 1x A3 HT; 1x A3 LT, GC Initial IQ, Lustre Pastes ONE, 1 Packung in 5 Farben: Lustre Pastes Neutral, L-NFL, 4 g, Lustre Body Shade A, L-A, 4 g, Enamel Effect Shade 3, L-3, 4 g, Enamel Effect Shade 2, L-2, 4 g, Enamel Effect Shade OP, L-OP, 4 g, GC Initial IQ, Lustre Pastes ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml, GC Initial IQ, Lustre Pastes ONE/NF, Refresh Liquid, 8 ml, GC Initial Pinsel 00 LP, GC Initial Pinsel 02 LP, Anmischblock (10007322) **nur 510,30€**

PROFITIEREN SIE VON WEITEREN TOP-ANGEBOTEN – JETZT ÜBER IHRE GC FACHBERATUNG BESTELLEN!

GC Initial LiSi Block CEREC

(10004844) Initial LiSi Block, CEREC, A1 HT (10004956) Initial LiSi Block, CEREC, A2 HT (10004957) Initial LiSi Block, CEREC, A3 HT (10037273) Initial LiSi Block, CEREC, A3.5 HT (10004886) Initial LiSi Block, CEREC, B1 HT (10004887) Initial LiSi Block, CEREC, A1 LT (10004958) Initial LiSi Block, CEREC, A2 LT (10004888) Initial LiSi Block, CEREC, A3 LT (10037274) Initial LiSi Block, CEREC, A3.5 LT (10004889) Initial LiSi Block, CEREC, B1 LT (10037275) Initial LiSi Block, CEREC, BL LT
Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.) **nur 131,00€**

CERASMART™ 270

Kraftabsorbierender Hybridkeramik-CAD/CAM-Block für CEREC® und universelle CAD/CAM-Systeme

**Präzise Passung.
Hohe Flexibilität.
Natürliche Ästhetik.**



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hohe Biegefestigkeit und Verschleißbeständigkeit
- Flexibel und antagonistenfremdlich
- Hoher Füllstoffgehalt dank FSC-Technologie
- Hohe Bruchenergie zur Dämpfung von Kaukräften
- Warme Farben, glatte Oberflächen und langanhaltender Glanz
- Präzise Randpassung und hohe Röntgensichtbarkeit
- Auch für implantatgetragene Kronen geeignet

CERASMART270 UNIVERSAL

Je Refill à 5 Blöcke
Größe 14 alle Farben (10001424–10001434) **nur 150,80 €**

CERASMART270 CEREC

Je Refill à 5 Blöcke
Größe 12 alle Farben (10001391–10001401) **nur 138,20 €**
Größe 14 alle Farben (10001413–10001423) **nur 150,80 €**
Größe 14 L alle Farben (10001435–10001445) **nur 163,60 €**


**WEITERE ANGEBOTE JETZT ÜBER IHREN
GC HANDELSPARTNER BESTELLEN!**

Wählen Sie die gewünschte Endbearbeitung

Charakterisierung

Weil in Farbe alles besser aussieht


Verleihen Sie Ihren Restaurationen mit einem Pinselstrich individuellen Charakter, dank OPTIGLAZE color, einer gebrauchsfertigen und verschleißfesten Oberflächenversiegelung.

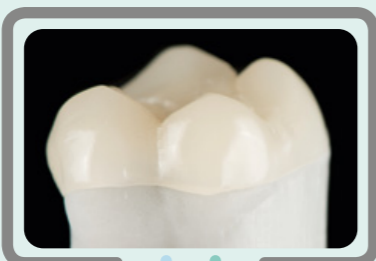


Politur

Schnelles und einfaches Polieren

Beeindruckender Glanzgrad in wenigen und einfachen Polierschritten.

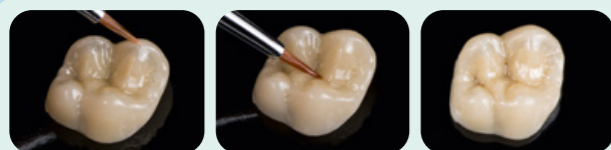

Sie können aus einer Vielzahl von Farben wählen oder die transparente Variante (Clear) verwenden, um eine Hochglanz-Oberfläche zu schaffen.

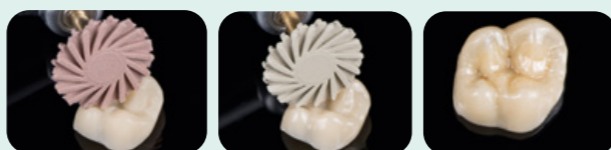

Die Politur kann mit Ihren herkömmlichen Polierern und Fräswerkzeugen durchgeführt werden.

TEMPSMART™ DC

Dualhärtendes Komposit für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Sie schützen präparierte Zähne und sorgen gleichzeitig für Komfort und Ästhetik, bis die definitive Versorgung eingesetzt wird.

TEMPSMART DC kombiniert dualhärtende Technologie mit einem weichmacherfreien Materialkonzept und unterstützt so eine einfache, effiziente und ästhetische Herstellung temporärer Restaurationen.

Intelligentes Konzept

TEMPSMART DC lässt sich lighthärten und bietet dadurch große Vorteile: Sie können den Zeitpunkt der Aushärtung steuern, und die endgültige Polymerisation wird optimiert. So wird das Verfahren einfacher, effizienter und Sie können viel Zeit sparen. Zudem verbessern sich durch die Lighthärtung die physikalischen Eigenschaften der provisorischen Restauration, insbesondere die Biegefestigkeit.

Durch seine hohe Bruchzähigkeit eignet sich TEMPSMART DC auch für längerfristige Provisorien und großspannige Brücken.

**Schnell und effizient zur
finalen Restauration**



Ästhetische Ergebnisse

TEMPSMART DC ist in 6 Farbtönen erhältlich, jeweils mit natürlicher Fluoreszenz. Dank der intelligenten Füller-Technologie lässt es sich leicht polieren und erhält dadurch einen bemerkenswerten Hochglanz. Wählen Sie zwischen Hochglanz durch manuelle Politur und der Charakterisierung mit der nanogefüllten Oberflächenglanzveredelung OPTIGLAZE color.



Extraorale
Lighthärtung



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. C. Lampson, Deutschland



Manuelle Politur (links) und Charakterisierung mit OPTIGLAZE color (rechts)

**PROMO
10%**



Mixing Tips Typ II SSS

60 Stk. für 48 ml Kartusche (10003754) **nur 72,10 €**

TEMPSMART DC Kartusche

TEMPSMART DC A1, 1 x Kartusche à 48 ml (10001463)
TEMPSMART DC A2, 1 x Kartusche à 48 ml (10001464)
TEMPSMART DC A3, 1 x Kartusche à 48 ml (10001465)
TEMPSMART DC A3.5, 1 x Kartusche à 48 ml (10001466)
TEMPSMART DC B1, 1 x Kartusche à 48 ml (10001467)
TEMPSMART DC BW, 1 x Kartusche à 48 ml (10001468)
nur 108,90 € (statt 121,00 €)

TEMPSMART DC Spritze

TEMPSMART DC A1, 1 x Spritze à 10 ml (10001469)
TEMPSMART DC A2, 1 x Spritze à 10 ml (10001470)
TEMPSMART DC A3, 1 x Spritze à 10 ml (10001471)
TEMPSMART DC B1, 1 x Spritze à 10 ml (10001472)
nur 64,89 € (statt 72,10 €)

GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Remineralisierende Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ CPP-ACP

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff RECALDENT™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz
- GC MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid



PROMO
5+1



GC MI Paste Plus Aktionspackung 5+1
5 Tuben à 40 g (35 ml), Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille + 1 Tube 40 g (35 ml) (10003271) **nur 122,90€**

JETZT WIEDER ERHÄLTLICH!

PROMO
5+1



GC Tooth Mousse Aktionspackung 5+1
5 Tuben à 40 g (35 ml), Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille + 1 Tube 40 g (35 ml) (10003210) **nur 113,60€**

1 von 7 Kindern* leidet an Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation.


GC bietet Lösungsansätze zur Behandlung von MIH.

Mehr zur MIH

Weitere Informationen, das klinische Erscheinungsbild, die Symptome und den GC-Behandlungsplan finden Sie hier:



*1. Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S, Bekes K, Manton DJ, Krois J: Global burden of molar incisor hypomineralization. J Dent, 2018; 68: 10-18.
2. Zhao D, Dong B, Yu D, Ren Q, & Sun Y: The prevalence of molar incisor hypomineralization: evidence from 70 studies. Int J Paediatr Dent, 2018; 28: 170-179.

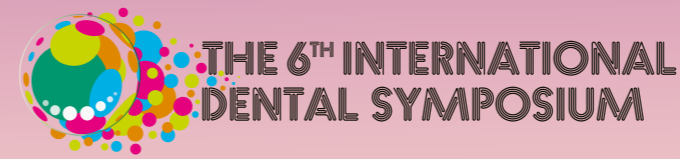

The 6th International Dental Symposium
Gather Knowledge. Create 8 Billion Smiles!

Zwei Tage voller Wissen, Inspiration und GC Spirit in Tokio

Zum 70-jährigen Bestehen der GC Membership Society lädt GC zum 6. International Dental Symposium nach Tokio ein. Freuen Sie sich auf ein international besetztes Fachprogramm mit aktuellen Forschungsergebnissen, klinischen Erkenntnissen, Produktinnovationen und praxisnahen Workshops.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern, neue Impulse für Praxis und Labor mitzunehmen und sich mit Fachleuten aus aller Welt zu vernetzen. Ein besonderes Event für alle, die Zahnmedizin international denken und erleben möchten.

- 72 Fachvorträge international anerkannter Experten
- Praxisorientierte Workshops zu aktuellen Trendthemen
- Networking, Events und kulturelle Highlights in Tokio
- Fortbildungspunkte (CE Credits) gemäß ADA/CERP anerkannt

The 70th anniversary of the GC Membership society

2026.10.3 SAT ▶ **4 SUN**

Tokyo International Forum
(Chiyoda City, Tokyo)

Programm ansehen und anmelden:
QR-Code scannen und alle Details zum Symposium entdecken.



Unsere Produkt-Highlights Labor



GC Fortbildungen Labor



Termine und Informationen zu unseren Hands-on-Kursen mit namhaften Referenten finden Sie unter:
www.gc.dental/europe/de-DE/events/home

Wir bieten Ihnen individuelle Fortbildungstermine in Ihrem Labor an. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und die Ihres Laborteams. Sprechen Sie uns einfach an und wir planen mit Ihnen Ihren Inhouse-Kurs!

Telefonisch unter +49.6172.99.596.11 oder per E-Mail unter events.germany@gc.dental



GC Initial™ IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem

initial
IQ ONE SQIN

What you see is
what you get!



Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden. Das Ergebnis ist konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig, jedoch mit einem deutlichen Zeitgewinn!

FRAGEN SIE IHRE GC FACHBERATUNG
NACH EINEM INDIVIDUELLEN ANGEBOT!

GC Initial™ LP NF-Set in Gingiva-Farben

LP NF Gingiva-Farbtone G-23/G-24/G-34/G-35/G-36, 4g Farb-Modifizierer für LP NF LP-M1/LP-M2/LP-M3/LP-M4, 3g LP NF Verdünnungsflüssigkeit, 8ml LP NF Auffrischungsflüssigkeit, 8ml LP NF, Pinsel AILP NF, Pinsel BLP NF, Anmischschale LP NF, Kunststoffabdeckung LP NF, Farbkarte LP NF, Technisches Handbuch (10003186) nur 410,00€ (statt 482,40€)



PROMO
15%



PROMO
25%

statt 1.513,50€ nur 1.135,13€

GC Initial™ IQ ONE SQIN SYSTEM SET

10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g; 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g; 1x SPS Glaze Liquid, 25ml; 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g; 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g; 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g; 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml; 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml; 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g; 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g; 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g; 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g; 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml; 1x IQ LP ONE Mixing Dish; 1x IQ LP ONE Brush 00; 1x IQ LP ONE Brush 2; 1x IQ LP ONE Plastic Cover; 1x IQ ONE SQIN Technical Manual, 1x IQ LP ONE Colour Chart; 1x SPS Colour Chart (10006991) nur 1.135,13€ (statt 1.513,50€)

GC Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Coloring Liquid für ZrO₂



Ihre Vorteile

Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restorationen

Passen Sie die vorgesinterten Zirkonoxid-Versorgungen an, indem Sie das Initial Zirconia Coloring Liquid auftragen. Dies ermöglicht eine zeitsparende, einfache und ästhetische Individualisierung mit Keramik wie z.B. dem Initial IQ ONE SQIN Konzept. Speziell für die GC Initial Zirconia HT-Ronden entwickelt, nutzt das Initial Zirconia Coloring Liquid seine natürlichen Farbtöne optimal aus. Nach dem Schleifen wird das Liquid einfach auf die monolithische oder anatomisch reduzierte Restauration mit der Pinsel- oder Tauchtechnik aufgetragen.

Verkürzt die erforderliche Charakterisierungszeit

Mit einem Gerüst in der passenden Farbe wird wertvolle Zeit bei der Individualisierung durch Bemalen oder Micro-Layering eingespart.

Zeitsparend, kalkulierbar und maßgeschneidert

Das Initial Zirconia Coloring Liquid bietet einen individuellen Ansatz von der Basis bis einschließlich zahnfleischfarbenen Bereichen. Mit nur 11 Farben vereinfacht das Initial Zirconia Coloring Liquid die Lagerhaltung und garantiert gleichzeitig die Nachbildung von natürlich schönen Effekten und naturgetreuen Farben vor dem Sintern.



Bemalen oder Tauchen

Sie können das Initial Zirconia Coloring Liquid entweder gemäß einem standardisierten oder einem individuellen Verfahren verwenden.

Individuell – ganz nach Ihren Vorstellungen!

Mit freundlicher Genehmigung von ZTM Stefan Roozen, Österreich



initial™



Nachfüllpackungen à 50 ml

Initial Zr Coloring Liquid: Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D; Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral (10041650–10041661) **nur 54,80 €**

Nachfüllpackungen à 25 ml

Initial Zr Marking Liquid: Red, Blue, Yellow, Green (10041662–10041665) **nur 25,60 €**

PROMO
20%

GC Initial Zr Coloring Liquid Set

700g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50ml: 1x Body A, 1x Body B, 1x Body C, 1x Body D, 1x Cervical A, 1x Cervical B, 1x Cervical C, 1x Cervical D, 1x Effect Blue, 1x Effect Grey, 1x Effect Pink, 1x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25ml: 1x Red, 1x Blue, 1x Yellow, 1x Green, Technisches Handbuch; (10041648) **nur 491,20 €** (statt 614,00 €)

GC Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit

250g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50ml: 1x Body A, 1x Cervical A, 1x Effect Grey, 1x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25ml: 1x Red, 1x Blue, Kurze Gebrauchsanweisung; (10041649) **nur 194,80 €**



GC Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

CAD/CAM-Zirkonoxid-Ronde

NEU

Die erste Wahl für höchste Ansprüche!

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und außergewöhnlicher Ästhetik und eignet sich sowohl für Frontzahn- wie Seitenzahnrestorationen.



Hervorragende Ästhetik

Naturgetreuer Farb- und Transluzenzgradient für Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.



Hohe Festigkeit

Eingestuft in Klasse V nach DIN EN ISO 6872 mit einem Mittelwert von > 1.150 MPa.



Omnifunktional

Vielseitig und für ein breites Spektrum an klinischen Indikationen geeignet. Für konventionelles und schnelles Sintern.

High-End-Individualisierung

Ideale Synergien mit Initial Zirconia Coloring Liquid und dem IQ ONE SQIN Konzept.

Transluzenz > 49%
Festigkeit 980 MPa

Verblüffend natürlich

Ein nahtloser Übergang von zervikal nach inzisal in Farbe und Transluzenz, der die natürliche Zahnstruktur optimal nachahmt.

Transluzenz > 45%
Festigkeit 1.310 MPa


Physikalische Eigenschaften

- Zirkonoxid Typ II: Klasse V nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert > 1.150 MPa
- Hoher Transluzenzgradient: > 45% bis > 49%
- Schnelles Sintern für Kronen und Brücken mit bis zu 3 Gliedern



Natürlicher Farbgradient

5Y	INZISAL	20%
4-5Y	ÜBERGANGSSCHICHT 1	15%
4-5Y	ÜBERGANGSSCHICHT 2	15%
4-5Y	ÜBERGANGSSCHICHT 3	15%
4Y	ZERVIKAL	35%

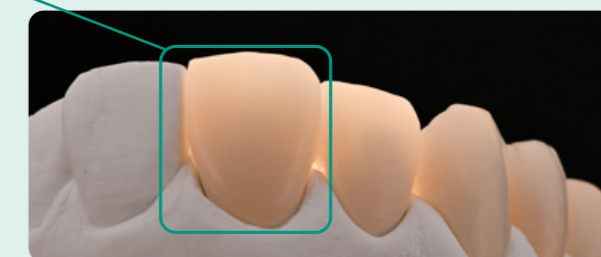

FRAGEN SIE IHRE GC FACHBERATUNG NACH EINEM INDIVIDUELLEN ANGEBOT!

GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Erhältlich in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Typen, in den Scheibengrößen 14, 16, 20 und 25 mm jeweils mit einem Durchmesser von 98,5 mm. Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3. Scheibengröße 14 mm (70017398 bis 70017416) **nur 179,00 €** Scheibengröße 16 mm (70017417 bis 70017435) **nur 199,00 €** Scheibengröße 20 mm (70017436 bis 70017454) **nur 239,00 €** Scheibengröße 25 mm (70017455 bis 70017473) **nur 278,00 €**

GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite Shade Guide (70017646) **nur 480,00 €**



JETZT NEU: DER ORIGINALE INITIAL ZIRCONIA MULTILAYER ELITE FARBSCHLÜSSEL

GC Initial™ REVO MC

Das [R]EVOLUTIONÄRE Metallkeramiksistem für moderne Zahntechnik

Die Zahnmedizin entwickelt sich stetig weiter. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Zahntechnik. Mit der zunehmenden Verbreitung monolithischer und minimal verblendeter Materialien müssen Arbeitsabläufe schneller, effizienter und vorhersagbarer werden, ohne ästhetische Ansprüche zu vernachlässigen.

Initial REVO MC definiert einen neuen Standard in der Metallkeramik. Das System kombiniert die bewährte Stabilität eines Metallgerüsts mit einem zeitgemäßen, reduzierten keramischen Design. Das Ergebnis: reduzierte Verblendschichten, vereinfachte Arbeitsprozesse und hochwertige ästhetische Resultate.

Vorteile auf einen Blick:



Effizienz neu definiert

- Vereinfachte Workflows mit reduzierter Prozesskomplexität
- Höhere Produktivität und weniger Neuanfertigungen



Ästhetik ohne Komplexität

- Überzeugende Ergebnisse in minimaler Schichtstärke
- Vollständige Farbdeckung, einschließlich Bleach- und Gingivafarben




Zuverlässige Leistung

- Hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit für eine langfristig stabile Versorgung
- Exzellente, reproduzierbare Farbwiedergabe

Mehr als klassische Metallkeramik: Initial REVO MC steht für reduzierte Komplexität, hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare Ästhetik. Inspiriert von der Effizienz moderner vollkeramischer Workflows.



Effizienz maximieren.
Ergebnisse optimieren.

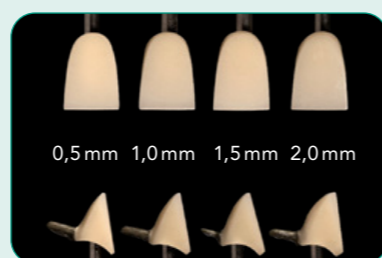

Stabile Farbwiedergabe über unterschiedliche Schichtstärken



Natürliche Lichtdynamik für eine besonders natürliche Ästhetik

FRAGEN SIE IHRE GC FACHBERATUNG
NACH EINEM INDIVIDUELLEN ANGEBOT!



Initial REVO MC, Starter Set

3x Paste Opaque: Light / Medium / Dark,
2x Body: Body A Light / Body A Dark,
3x Enamel: Light / Medium / Dark,
3x Effect: Opal Booster / CL-F / TN,
1x Modelling Liquid, 1x MC Shoulder Liquid,
1x Spectrum Glaze Powder GL,
1x Spectrum Glaze Liquid
(10042511) nur 700,00€

Schritt für Schritt zur
sicheren Anwendung.
Jetzt QR-Code scannen.



GRADIA™ PLUS

Das modulare Komposit-System für indirekte Restaurationen


Wenn Innovation
auf Indikation trifft

Ein neuer Standard für natürliche Farbmischungen und reproduzierbare Ästhetik.

- **Innovation trifft auf Indikation** – Ästhetik und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- **Modernste Keramik-Polymer-Technologie** – ultrafeine Füllstoffe mit hoher Dichte; ein Garant für Langlebigkeit
- **Rot-Weiß-Ästhetik in perfekter Harmonie** – Leuchtkraft, Transluzenz, Chroma, eine natürliche Opaleszenz und Fluoreszenz, die mit einer Keramik gleichzusetzen sind
- **Indikationsspezifische Konsistenz** – Heavy Body & Light Body
- **Effizient, modular und ökonomisch** – individuell für jede Anforderung und Indikation

GRADIA PLUS Painting- & Micro-Layering-Technik:

Mit einer ausgewählten Kombination aus GRADIA PLUS Lustre Paints, Light Body- und Heavy Body-Spritzen sowie Gingivafarben lassen sich digital designte und gefertigte Gerüste aus PMMA, Komposit oder Hybridkeramik (Hybrid-Implantatversorgung) einfach charakterisieren. So entstehen überzeugende, natürliche und ästhetische Ergebnisse.

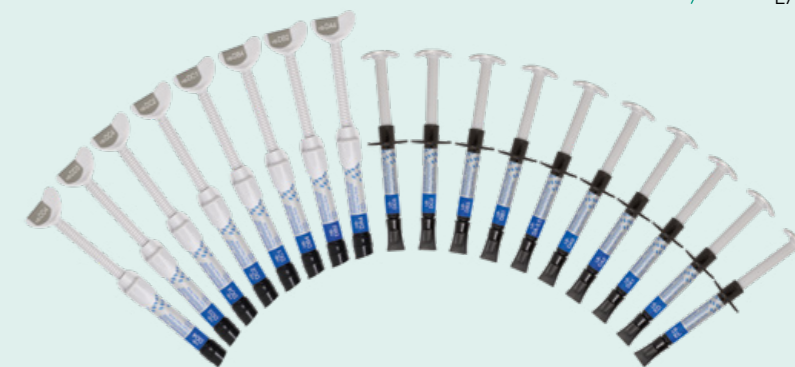

Die neuen Farben von
GRADIA PLUS:

Mit 8 neuen HEAVY BODY Dentin-Farben deckt GRADIA PLUS nun die gesamte Farbpalette aller 16 V-Farben ab, wodurch der Anwender alle gewünschten Farbtöne erzielen kann – und das mit geringem Aufwand, aber maximalem ästhetischen Ergebnis.

8 neue Dentin- und 2 neue Schmelzfarben in der LIGHT BODY Konsistenz wurden speziell für die Injektionstechnik entwickelt. Mit den GRADIA PLUS Light Body Pasten lassen sich, bei geringem Aufwand, vorhersagbare, überzeugende und sehr ästhetische Ergebnisse erreichen.

NEU

Schritt für Schritt zur
sicheren Anwendung.
Jetzt QR-Code scannen.



GC GRADIA PLUS Painting & Microlayering Set

5x GRADIA PLUS Lustre Paint 0,8 ml, 1x GRADIA PLUS Gum Shades Lustre Paint 0,8 ml, 1x GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting Liquid 3ml, 1x GRADIA PLUS Paste Light Body 2,0 ml, 1x GRADIA PLUS Gum Shades Heavy Body 3,3ml, 10x GRADIA PLUS Dispensing Tip Plastic Type Wide, 10x Light Protective Cover, 5x GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type, 5x Light Protective Cover, 1x GRADIA PLUS Modeling Liquid 3ml, 1x Ceramic Primer II 3ml, 1x Acrylic Primer 5ml, 10x Brush Round, N°1, 10x Brush Flat, N°1, 2x Brush Holder (Ivory & White), 5x Disposable Palette, 1x Mixing Pad No°14B, 1x Plastic Spatula N°2 Blue (10006940) nur 770,00€

GC PATTERN RESIN LS

Selbsthärtender Modellierkunststoff mit geringer Schrumpfung

Ihre Vorteile

- Minimale Schrumpfung und einfach zu bearbeiten – für eine perfekte Anpassung und Reproduktion
- Hohe Härte und Stabilität sogar bei dünnen Schichten
- Brennt rückstandsfrei aus, daher sehr saubere Gussoberflächen

GC PATTERN RESIN LS mit Aluminium-Ständer

1x GC PATTERN RESIN LS Pulver 100g,
1x Liquid 105ml, 2x Mixing Cups,
1x Pinsel Nr. 4
+ Aluminium-Ständer gratis
(10003198) **nur 112,30€**



AKTIONSPACKUNG: JETZT WIEDER MIT ALUMINIUM-STÄNDER ERHÄLTlich!

Das Original

GC Fujivest® Platinum II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse

Exaktere Passung
als jemals zuvor!

Ihre Vorteile

- Speziell entwickelt für hochpräzise Güsse – sowohl für hochgoldhaltige, goldreduzierte als auch palladiumhaltige Legierungen
- Verlängerte Verarbeitungszeit, verbesserte Fließfähigkeit
- Perfekte Passung auch bei implantatgetragenen Suprastrukturen und großspannigen Brücken
- Extrem glatte Gussoberflächen
- Ermöglicht eine optimale Expansionssteuerung
- Einfaches Ausbetten spart Zeit und Arbeit



PROMO
20%

GC Fujivest Platinum II

6 kg Pulver in 67x 90 g Beuteln
(10003339) **nur 174,32€** (statt 217,90€)

6 kg Pulver in 40x 150 g Beuteln
(10003340) **nur 148,80€** (statt 186,00€)

Liquid 900 ml (10003343) **nur 30,00€** (statt 37,50€)

GC Fujivest® II

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse

PROMO
20%

Bessere Passung
als jemals zuvor!

Ihre Vorteile

- Universell einsetzbare, qualitativ hochwertige und äußerst unempfindliche „Allround-Einbettmasse“
- Reduzierte Anmischzeit
- Exakte Wiedergabe selbst feinsten Details dank dünnfließender Konsistenz
- Problemlose Einbindung in den Arbeitsablauf
- Spezielle Flüssigkeit mit geringer Expansion



GC Fujivest II

6 kg Pulver in 100x 60 g Beuteln (10001770) **nur 177,60€** (statt 220,00€)

6 kg Pulver in 40x 150 g Beuteln (10001771) **nur 162,80€** (statt 203,50€)

6 kg Pulver in 67 x 90 g Beuteln (10001773) **nur 173,76€** (statt 217,20€)

Liquid 900ml (10001772) **nur 30,88€** (statt 38,60€)

Low Expansion 900ml (10001792) **nur 30,88€** (statt 38,60€)

GC Fujivest® Premium

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse

PROMO
20%

Vielseitig, robust
und einfach!

Ihre Vorteile

- Geeignet für alle Dentallegierungen, auch speziell für NEM. Auch ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen)
- Vielseitig und robust
- Exakte Güsse und perfekt glatte Oberflächen mit einem Material
- Anwendungsfreundlich, praktisch und für den täglichen Gebrauch
- Zuverlässig und hochqualitativ für den perfekten Sitz – bei jedem Guss
- Breiter Expansionsbereich bis zu 3,5% – auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen mit NEM sind jetzt sicher und verlässlich herstellbar.
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung stellt die perfekte Passung sicher



GC Fujivest Premium

6 kg Pulver in 40x 150 g Beuteln
(10003213) **nur 123,68€** (statt 154,60€)

6 kg Pulver in 67x 90 g Beuteln
(10003214) **nur 141,12€** (statt 176,40€)

Liquid 900 ml
(10003215) **nur 30,00€** (statt 37,50€)

GC Fujivest® Super

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse

Hochgenaue Güsse in einer neuen Dimension!

- Überzeugende Zeitersparnis
- Speed-Einbettmasse – schon 20 Minuten nach dem Anmischen erfolgt das Aufsetzen bei Endtemperatur
- Hochpräzise Einbettmasse
- Einfache Handhabung
- Für die Speed-Technik und schrittweise Erhitzung
- Mit besonderer Berücksichtigung edler und halbedler Legierungen
- Perfekte Passung auch für Brücken mit großer Spannweite



GC Fujivest Super
6 kg Pulver in 40 x 150 g Beuteln (10001776) **nur 153,44 €** (statt 191,80 €)

6 kg Pulver in 67 x 90 g Beuteln (10001778) **nur 167,20 €** (statt 209,00 €)

Liquid 900 ml (10001777) **nur 31,04 €** (statt 38,80 €)

High Expansion 900 ml (10001780) **nur 31,04 €** (statt 38,80 €)

PROMO
20%

GC LiSi PressVest

Phosphatgebundene Einbettmasse für perfekte Pressergebnisse

- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Pressvorgang
- Zeiteinsparung – großer Vorteil für Arbeitsabläufe im Labor
- Größere Anstiftungskapazität
- Bessere interne Anpassung
- Problemloses Abtragen der Reaktionsschicht – keine Flusssäure erforderlich

Einbetten leicht gemacht!




GC LiSi PressVest
6 kg Pulver in 60 x 100 g Beuteln (10003661) **nur 180,16 €** (statt 225,20 €)

Liquid 900 ml (10003662) **nur 36,40 €** (statt 45,50 €)

PROMO
20%

Mit freundlicher Genehmigung von ZTM Christian Rothe, Deutschland

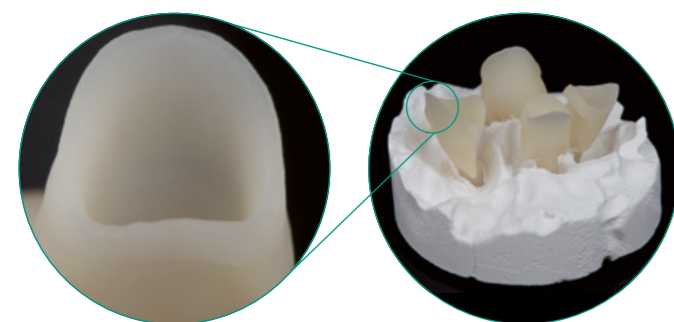

Labolight DUO

Für indirekte Komposit-Technik:
LED-Lichthärtegerät mit zwei Modi

PROMO
10%

statt 3.397,80 € **nur 3.058,02 €**

Ihre Vorteile

Neueste LED-Technologie

Labolight DUO besticht durch seine integrierte Doppelwellenlängen-LED-Technologie und kann zur sicheren und haltbaren Aushärtung aller Komposite von GC eingesetzt werden. Das Gerät deckt einen Wellenlängenbereich von 380 nm bis 510 nm mit den folgenden Spektralbereichsspitzen ab:

- 465 nm bis 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm bis 400 nm (3 violette LEDs)


Die integrierte Technologie gewährleistet eine optimale Aushärtung aller lichthärtenden Dentalwerkstoffe, während die hohe Ausgangsleistung die Lichthärtungszyklen verkürzt.

Automatisiertes Drehsystem

Die reflektierende Platte verteilt das gesamte Licht effizient und gleichmäßig und sorgt gleichzeitig für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich – von allen Seiten. Der integrierte Objekthalter ermöglicht derweil eine sorgfältige Positionierung der Objekte während aller Lichthärtungszyklen.

Schlankes und ergonomisches Design

Labolight DUO erledigt nicht nur den Großteil aller anfallenden Arbeiten, sondern punktet auch mit einer hervorragenden Optik. Sein preisgekröntes, schlankes und modernes Design mit glatten Oberflächen ermöglicht eine problemlose Reinigung bei minimalem Platzbedarf. Ansprechende Anwenderfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche lässt sich unkompliziert und intuitiv bedienen und auch die innenliegenden Bauteile sind dank der breiten Öffnung problemlos zugänglich.

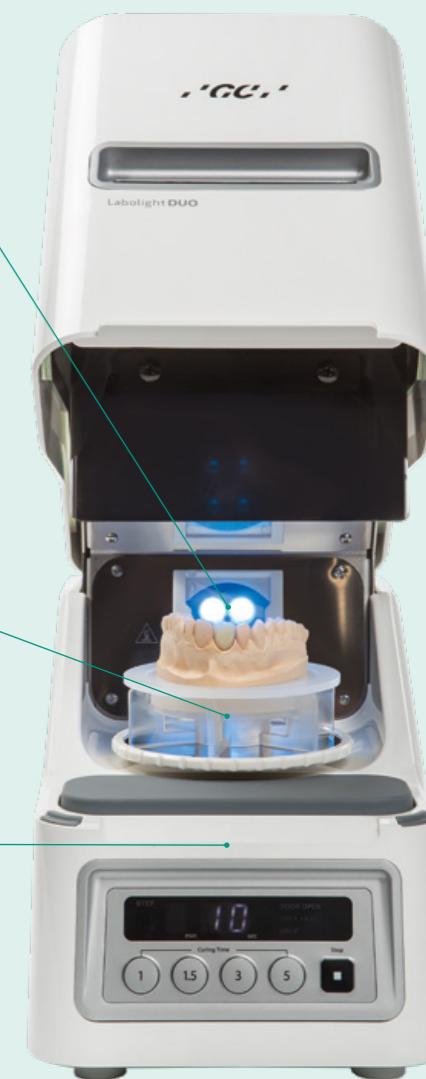

Vorhärtung



Endaushärtung



Labolight DUO Aktion

1 x Labolight DUO, 1 x Netzteil, 1 x Netzkabel, 1 x Drehplatte, 1 x Schale, 1 x Objekthalter-Set, 1 x Lampenabdeckung, Gebrauchsanweisung (10001246) **nur 3.058,02 €** (statt 3.397,80 €)

Ihre GC Fachberatung für Praxis und Labor

Region West


Vertriebsleiter Region West
Alexander Dohr
 Telefon +49.175.8296556
 Alexander.Dohr@gc.dental

Praxis

- 1 Sabine Bodoci**
 PLZ-Bereiche 53–54 | 56–57
 Telefon +49.175.8912422
 Sabine.Bodoci@gc.dental
- 2 Andreas Jentsch**
 PLZ-Bereiche 42 | 50–51 | 58
 Telefon +49.162.2529183
 Andreas.Jentsch@gc.dental
- 3 Emine Morold**
 PLZ-Bereiche 34–37
 Telefon +49.162.2529932
 Emine.Morold@gc.dental
- 4 Marion Schmidt**
 PLZ-Bereiche 40–41 | 46–47 | 52
 Telefon +49.162.2529931
 Marion.Schmidt@gc.dental
- 5 Susan Schreiter**
 PLZ-Bereiche 44–45 | 59
 Telefon +49.162.2529192
 Susan.Schreiter@gc.dental

Labor

- 1 Jessica Feuersenger**
 PLZ-Bereiche 35 | 40–48 | 50–59 | 66–67
 Telefon +49.162.2529185
 Jessica.Feuersenger@gc.dental

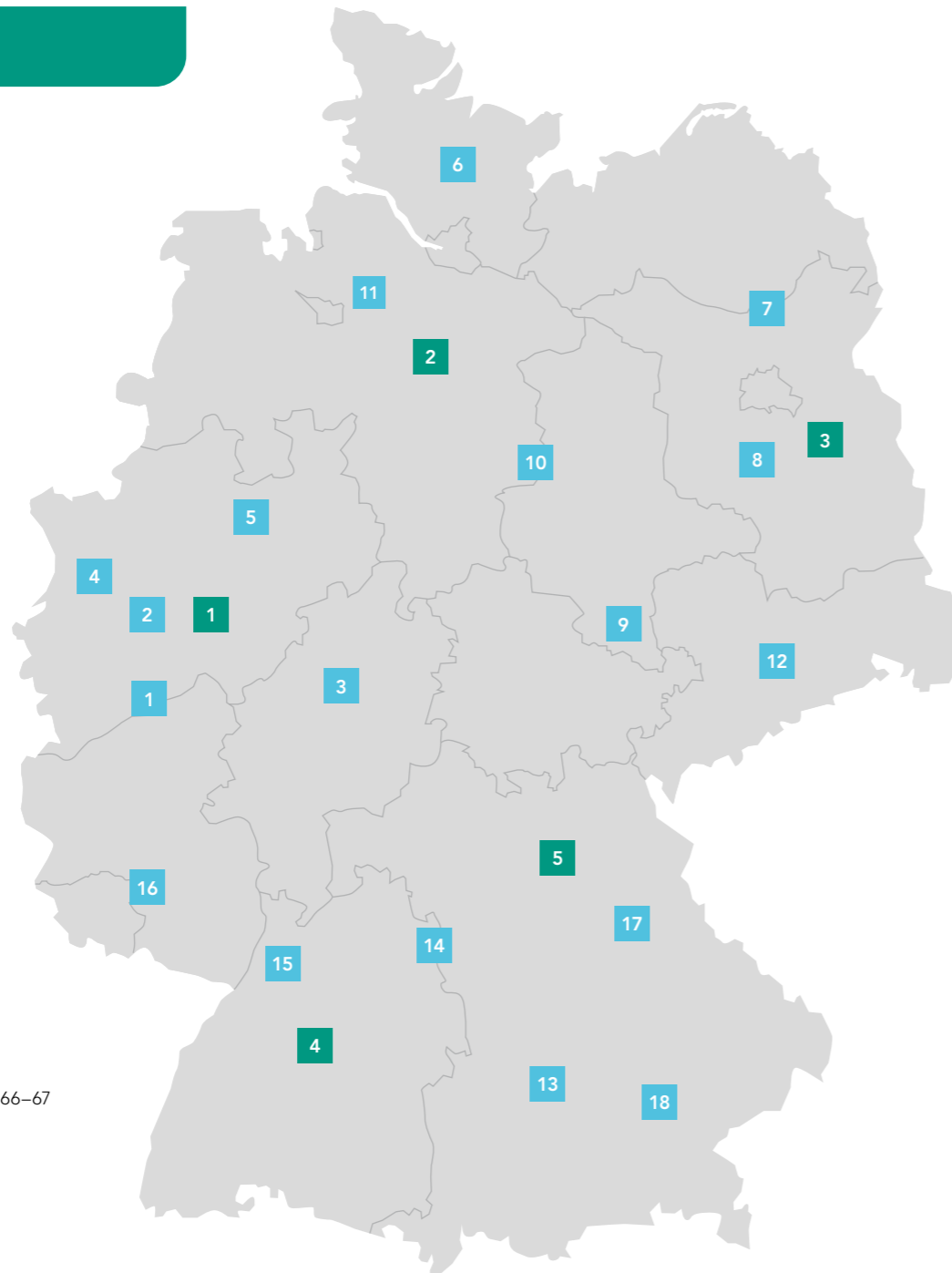

Region Nord/Ost

Vertriebsleiter Region Nord/Ost
Fabian Jurisch
 Telefon +49.171.8482736
 Fabian.Jurisch@gc.dental

Praxis

- 6 Christine Müller-Metge**
 PLZ-Bereiche 20 | 22–25
 Telefon +49.162.2529936
 Christine.Mueller-Metge@gc.dental
- 7 Sebastian Roetger**
 PLZ-Bereiche 13 | 16–19
 Telefon +49.162.2529947
 Sebastian.Roetger@gc.dental
- 8 Judith Pietsch**
 PLZ-Bereiche 10–12 | 14–15
 Telefon +49.162.2529941
 Judith.Pietsch@gc.dental
- 9 Cindy Sittner**
 PLZ-Bereiche 04 | 06–07 | 99
 Telefon +49.162.2547567
 Cindy.Sittner@gc.dental
- 10 Laura Ehleben**
 PLZ-Bereiche 29–31 | 38–39
 Telefon +49.171.1856719
 Laura.Ehleben@gc.dental
- 11 Anja Winkelhoch**
 PLZ-Bereiche 21 | 26–28
 Telefon +49.151.56020741
 Anja.Winkelhoch@gc.dental
- 12 Adrian Aue**
 PLZ-Bereiche 01–03 | 08–09
 Telefon +49.162.2529945
 Adrian.Aue@gc.dental

Labor

- 2 Frank Milius**
 PLZ-Bereiche 20–34 | 36–38 | 49
 Telefon +49.162.2529943
 Frank.Milius@gc.dental
- 3 Carsten Heuer**
 PLZ-Bereiche 01–06 | 08–19 | 39
 Telefon +49.151.26248139
 Carsten.Heuer@gc.dental

Region Süd

Vertriebsleiterin Region Süd
Sabine Eichenseer
 Telefon +49.151.28357063
 Sabine.Eichenseer@gc.dental

Praxis

- 13 Lothar Baylacher**
 PLZ-Bereiche 806 | 812–814 | 821–822 | 850–852 | 86–87
 Telefon +49.162.2529180
 Lothar.Baylacher@gc.dental
- 14 Jonas Bohnsack**
 PLZ-Bereiche 70–71 | 73–74
 Telefon +49.162.2529181
 Jonas.Bohnsack@gc.dental
- 15 Mirijam Janecki**
 PLZ-Bereiche 68–69 | 75–77 | 79
 Telefon +49.175.2282989
 Mirijam.Janecki@gc.dental
- 16 Christine Bebek**
 PLZ-Bereiche 55 | 64–67
 Telefon +49.162.2529934
 Christine.Bebek@gc.dental
- 17 Sonja Rotheneichner**
 PLZ-Bereiche 84 | 92–94
 Telefon +49.160.98481899
 Sonja.Rotheneichner@gc.dental
- 18 Sebastian Kober**
 PLZ-Bereiche 803–805 | 807–809 | 815–820 |
 823–828 | 83 | 853–857
 Telefon +49.175.2527040
 Sebastian.Kober@gc.dental

Labor

- 4 Kerstin Thunert**
 PLZ-Bereiche 60–65 | 68–79 | 88–89
 Telefon +49.162.2529944
 Kerstin.Thunert@gc.dental
- 5 Denny Födisch**
 PLZ-Bereiche 07 | 80–87 | 90–99
 Telefon +49.162.2529930
 Denny.Foedisch@gc.dental

Dental Service Organizations

DSO-Managerin Deutschland
Susanne Hasselbach
 Telefon +49.162.2529935
 Susanne.Hasselbach@gc.dental

Inside Sales Specialist

Nina Bock-Miszok (West)
 Telefon +49.151.14495137
 Nina.Bock-Miszok@gc.dental

Michelle Helwer (Nord/Ost)
 Telefon +49.6172.9959625
 Michelle.Helwer@gc.dental


Laura Casillo (Süd)
 Telefon +49.6172.9959623
 Laura.Casillo@gc.dental



CDE GmbH,
Center of
Dental Education,
SAM Gauting



GC Europe
Campus, Leuven,
Belgien

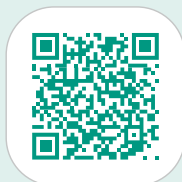

Fortbildungen von GC für Praxis und Labor

Entdecken Sie unsere aktuellen Fortbildungsangebote für Zahnmedizin und Zahntechnik.

Auf unserer Kursseite finden Sie praxisnahe Präsenzkurse, Hands-on-Workshops, Webinare sowie internationale Kursangebote.

Wählen Sie das passende Thema aus und melden Sie sich direkt online an:

www.gc.dental/europe/de-DE/events

Sie haben Fragen zu unseren Fortbildungen? Sprechen Sie uns gerne an.

Telefonisch unter
+49.6172.99.596.11
oder per E-Mail unter:

events.germany@gc.dental



Noch individueller: Lunch & Learn in Ihrer Praxis

Oder möchten Sie ein Lunch & Learn in Ihrer Praxis?

Ein kompaktes Training, ein gemeinsamer Lunch und konkrete Impulse für Ihren Praxisalltag.


Unsere GC Fachberatung kommt zu Ihnen in die Praxis und gestaltet gemeinsam mit Ihrem Team einen individuellen Hands-on-Workshop. Im Fokus stehen praxisnahe Tipps, sichere Workflows und der gezielte Einsatz moderner Materialien im Behandlungsalltag.



Interessiert?
Einfach QR-Code scannen
und Termin anfragen.

- ✓ Individueller Hands-on-Workshop
- ✓ Fundiertes Wissen für den Praxisalltag
- ✓ Qualitätszeit fürs Team – mit Genuss!

 Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/gcgermany

 Besuchen Sie uns auf Instagram:
www.instagram.com/gc_germany/

 Besuchen Sie uns auf LinkedIn:
www.linkedin.com/company/gcgermany



GC Germany GmbH
Tel +49.6172.99.596.0
info.germany@gc.dental
www.gc.dental/europe/de-DE