

GC Aadva IOS

סורק אינטרא-אורלי למטבעים דיגיטליים




רפואת שיניים דיגיטלית
הופכת לפשוטה ויעילה עם
GC Aadva IOS

רפואת שיניים דיגיטלית בקצה האצבעות שלך:
טכנולוגיה מתאמת להרגלי העבודה שלך



המערכת של GC Aadva

מלווה את עבודת השיקום שלך מא' ועד ת'

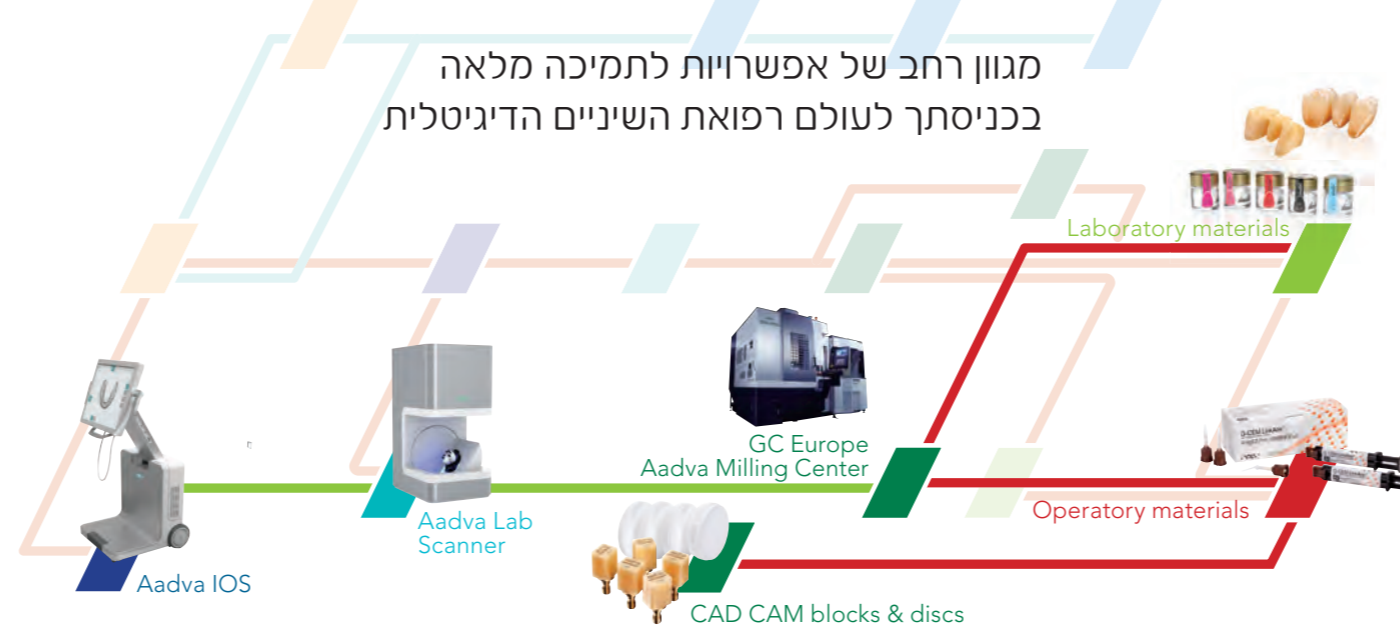

מגוון רחב של אפשרויות לתמיכה מלאה
בכניסתך לעולם רפואת השיניים הדיגיטלית

GC Aadva IOS	Technical specifications
Precision	25 micron half arch and 15 micron single tooth*
Process time	process time for average restoration around 6 minutes
Focus distance from the surface	0-15 mm
Calibration	not needed
Obtained file	open source STL
Light type of projector	LED
Imaging technique	data is acquired continuously with imaging technique
Scanning technique	stereo
Weight and size of handpiece	70 grams
Cart dimensions (h x w x d)	120 cm x 50 cm x 50 cm
Cart weight	20 Kg
Hard disc capacity	2TB
Disinfection	spray and wipe disinfection
Dimension and Resolution of touch screen	19 inch
Operative system	Windows 8.1 embedded
Power Supply	5 0/60Hz 110-220 V
External web connection	
USB port 2.0 and 3.0	
Micro SD card slot	

* Internal data available on request

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC Israel
4 Koifman st.
Tel Aviv
Israel 68012
Tel. +972.3.79.79.610
Fax. +972.3.51.61.982
info@gcisrael.com
http://www.gcisrael.com



GC Aadva Connect

הסביבה הדיגיטלית הפתוחה והבטוחה שלך

הנך מוזמן להנות מהיתרונות של GC Aadva Connect, הסביבה הדיגיטלית הפתוחה והבטוחה. כלי זה מאפשר לך לשתף ולאחסן קבצים, לעבד ולעקוב אחר הזמנות, לתקשר עם המעבדות המועדפות עליך, להתייעץ אודות מקרים קליניים, לקבל עדכונים, עזרים ועוד. על ידי GC Aadva Connect תהיה לך גישה לפלטפורמות מקוונות שונות שיענו על כל צרכיך:
GC Aadva Safe - אחסון והעברת קבצים בטוחה
GC Aadva Care - תמיכה טכנית אונליין
GC Aadva Campus - מרכז הדרכה אונליין



GC Aadva Safe

שירות ארכיון מבוסס ענן, לאחסון בטוח ובלתי מוגבל של הקבצים שלך. תהנה מהעברה נוחה של ההוראות הדיגיטליות למעבדה המועדפת עליך.



GC Aadva Care

שירות מבוסס ענן המיועד לסייע בבעיות טכניות ולשפר את ממשק התקשורת עם המעבדה לתוצאות אופטימליות.



GC Aadva Campus

המאמן האינטרנטי שלך תמיד זמין כשאתה צריך אותו. עם GC Aadva Campus יש לך גישה מקוונת לתוכניות לימוד, וובינרים (הרצאות אונליין), הדרכה ע"י וידיאו, שאלות ותשובות, טיפים וטריקים וכלים שונים המסייעים לשפר את רמת ההכשרה שלך ולעדכן אותך בכל מה שחדש.



GC Aadva CAD Soft

האם אתה זקוק לשליטה מלאה על תהליך היצור של עבודת השיקום שלך? GC Aadva Soft הינה תוכנת CAD קלה ויעילה שפותחה במיוחד עבור רופאי שיניים. היא מאפשרת לך לעצב את השיחזור בסביבת העבודה במרפאה או בעזרת אינטרקציה מקצועית נוספת עם המעבדה שלך.

ברוכים הבאים לרפואת שיניים מודרנית עם מערכת דיגיטלית GC Aadva IOS

עולם חדש של חומרים וכלים מתקדמים ואפשרות להיכנס בקלות לרפואת שיניים דיגיטלית

לקיחת המטבעים ותהליך השיקום מעולם לא היו כה מהירים ויעילים. ללא קשר לשיטת העבודה המועדפת עליך, GC Aadva IOS תמיד תתאים לצרכיך.



עם כל כך הרבה מקום לטעויות, לקיחת המטבעים המסורתית מהווה אתגר לרופא המשקם ואינה נעימה למתופא. תגלו את הדרך החדשה של לקיחת מטבעים דיגיטליים אשר תתאים לצרכיכם ותוכלו ליהנות מהיתרונות הרבים שלה.

- לקיחת מטבע קלה תוך זמן קצר, ללא שום צורך למטבע חוזר
- הערכה של איכות ההשחזה בזמן אמת: אין צורך לחזור על המטבע
- דיוק רב להתאמה מושלמת של השיקום שלך
- תקשורת קלה ומהירה עם מעבדת השיניים, ללא אי הבנות
- חסכון כספי על חומרים ומשלוחים
- שביעות רצון רבה יותר של מתופאים: טיפול נוח יותר, קבלת שיקום מוכן מהר יותר



GC Aadva IOS - פתרון אוניברסלי וארגונומי



GC Aadva IOS מציע פתרון ארגונומי וגמיש לכל הצרכים שלך

זרוע מתכווננת בשילוב עם מסך מסתובב מבטיחים את נוחות העבודה בכל תנוחה של המתופא



עם GC Aadva IOS,

תהליך הסריקה רץ מהר
תוך לכידת הפרטים הכי קטנים בדיוק רב

מערכת GC Aadva IOS מבוססת על מערכת אופטית ייחודית ומהפכנית המאפשרת סריקה של שיניים ורקמות רכות במהירות ובדיוק רב. שחזורים קיימים בפה, אזורים אינטרפרוקסימליים נסרקים בקלות וכל זה ללא שימוש באבקת ספריי הלא נעים למתופא ומסרבל את העבודה כולה.

ידית סריקה ארגונומית, תהליך עבודה אינטואיטיבי, דיוק רב ללא צורך בכיול: עולם שלם של יתרונות בקצה האצבעות שלך:

- ידית סריקה קטנה וקלה אשר מגיע למקומות הכי בעייתיים בחלל הפה
- אין כפתורים מסובכים: תחילת וסיום הסריקה על ידי לחיצה אחת על מסך המגע
- אין צורך באבקת ספריי: עבודה נקייה ונעימה למתופא
- סריקה מהירה מודרכת על ידי קידוד צבעים ייחודי עם שליטה בזמן אמת על המסך
- ניתן להפסיק את הסריקה ולסיים אותה בכל עת ללא צורך לחזור על האזורים שכבר נסרקו
- תהליך עיבוד המידע מהיר: לא יותר מ-5 דקות עד לקבלת קובץ STL
- אין צורך בכיול
- קבצי STL פתוחים מקנים לך חופש עבודה

תהליך עבודה אינטואיטיבי מהתחלה ועד הסוף

