

Intuitivni digitalni tijek rada za svakodnevne izazove



GC Aadva
rješenja
intraoralnog
skeniranja
temeljena na tehnologiji
umjetne inteligencije (AI)

GC


Modularna digitalna rješenja **prilagođena vašoj praksi**



IOS 100 P

IOS 100

IOS 200

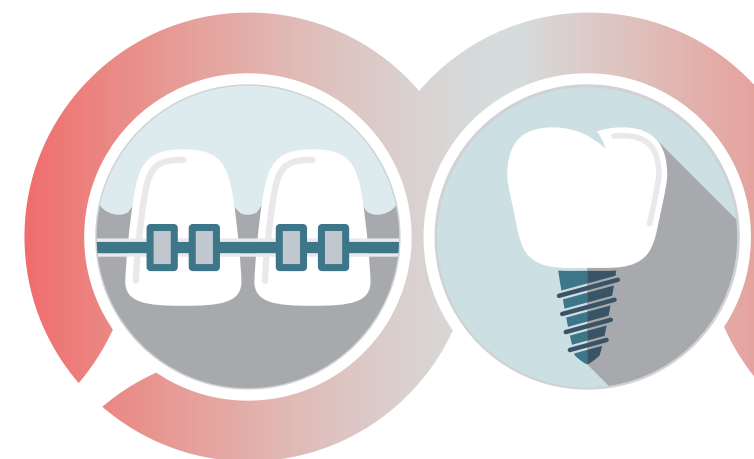

Ortodontski
modul

Implantološki
modul



Odaberite skener


GC nudi raznovrsne intraoralne skenere



Odaberite tijekom rada


GC nudi modularna i intuitivna rješenja upravljanja slučajevima

Odabir izvršite na

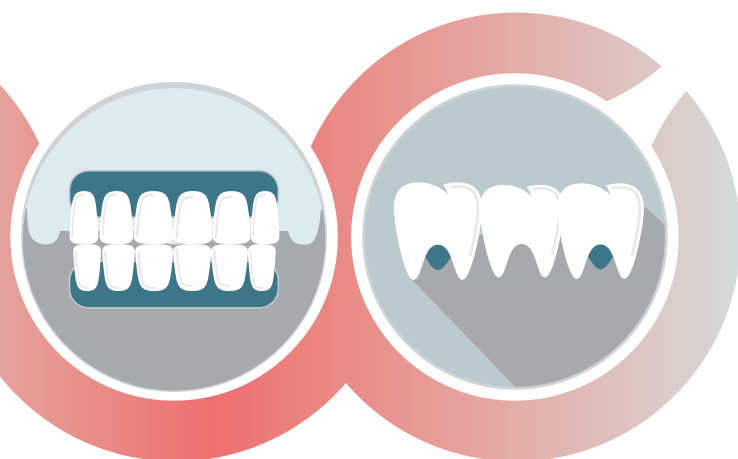

Ekstraoralni
modul

Protetski
modul

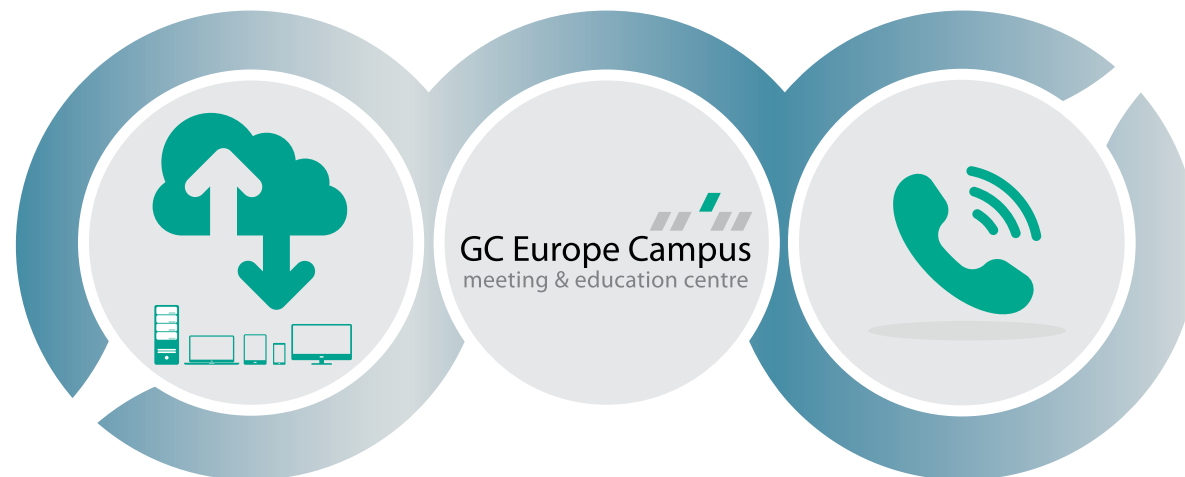

Aadva Xchange

Obuka

Podrška



Odaberite usluge

GC nudi širok izbor usluga

sljedećim stranicama →

Raznovrsni intraoralni skeneri temeljeni na AI tehnologiji

IOS 100 Portable



Prijenosni

IOS 100 P je kompaktni sustav - ima samo čitač, držač i laptop

Zagrijavanje protiv magljenja

Sustav protiv magljenja u kućištu te tehnologija bez korištenja praha i spreja omogućuju lako održive skenove

Lagani čitač

IOS 100P ima vrlo mali i lagani čitač



19" zaslon na dodir

Laki prijenos podataka

USB, SD kartica, lokalna mreža i Aadv Xchange

Fleksibilno postavljanje monitora

Fleksibilni držač, zaobljena i glatka površina, može se lako premještati

IOS 200 intraoralni skener sljedeće generacije



Nije potrebna kalibracija

Svako skeniranje bez problema i s pouzdanim rezultatima

Magnetski držač

Omogućuje jednostavno korištenje i rukovanje uređajem

Vizualna i haptička informacija

Potpuno kontroliran postupak skeniranja

Skeniranje punog spektra boja

AI tehnologija podržava ravnomjerno skeniranje eliminacijom mekog tkiva. Podaci o stvarnoj boji pomažu utvrditi rubne linije

Sustav protiv magljenja

Ugrađena funkcija grijanja pomaže otkloniti magljenje bez predzagrijavanja

Otvoreni sustav

Otvorene STL datoteke skeniranja omogućuju potpunu kompatibilnost s hardverom i softverom trećih strana

Nastavci za sterilizaciju u autoklavu

Mogu se čistiti do 250 puta. To pomaže spriječiti međusobno onečišćenje i poboljšava sigurnost pacijenata.

Modularna i intuitivna rješenja upravljanja slučajevima


Opća svojstva skeniranja

- AI tehnologija prepoznaje meka i pomična tkiva i time jamči ravnomjerno skeniranje
- Skeniranje, pauza, provjera i ponovno skeniranje po želji
- Sustav upravljanja otiskom
- Automatsko poravnavanje zagriz
- Opcije raznovrsnih prijenosa podataka
USB, Aadv Xchange, lokalna mreža
- Otvorene STL i/ili PLY datoteke
- Automatiziran uvoz datoteka u Exocad
- Jednostavno i intuitivno korisničko sučelje



Ortodontski modul

- Prilagođeni tijek rada za praćenje ortodontskih slučajeva
- Mogućnost izrade PDF datoteka
- Mogućnost snimanja zagriža u centričnoj relaciji (CR) i centričnoj okluziji (CO)
- Integrirana izrada ortodontskih modela za jednostavan 3D ispis
- Integrirane mogućnosti komunikacije s trećim stranama (VDDS)

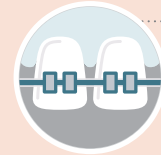

Implantatski modul

Prilagođeni tijek rada za radove na implantatima

Višekratno skeniranje implantata

Jednostavno i intuitivno praćenje cjelokupnog slučaja



Protetski modul

- Prilagođeni tijek rada za krunice i mostove
- Automatska rubna linija za preparacije
- Skeniranje jednog implantata
- Jednostavan obrazac radnog naloga




Ekstraoralni modul

Prilagođeni tijek rada odgovara radu u laboratoriju

Jednostavno i precizno skeniranje otiska

Snimanje većeg broja skenova zagriža

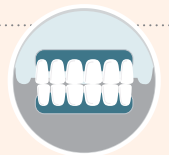



Aadva Xchange

Sve-u-jednom pristup za digitalno upravljanje slučajevima. Platforma u cloudu podržava komunikaciju s GC produkcijskim i servisnim timovima, kao i s ovlaštenim vanjskim dentalnim laboratorijima.



Obuka

Educiramo i opskrbljujemo doktore dentalne medicine i dentalne tehničare inovativnim rješenjima u digitalnoj dentalnoj medicini.



Podrška

GC Europe korisnička podrška za digitalnu dentalnu tehnologiju je vodeća u industriji.



LinkedIn



YouTube



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com