

O soluție unică pentru cimentare și reparații



G-Multi PRIMER este utilizat pentru pre-tratamentul restaurărilor înainte de cimentarea cu G-CEM LinkForce sau G-CEM Veneer și poate fi utilizat de asemenea pentru reparații intraorale. Conține trei agenți chimici diferiți ce asigură o adeziune perfectă la toate tipurile de restaurări.



008552	CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP
009295	METAL PRIMER Z, 5 ml
901138	GC Acrylic Primer, 6 ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

Realizarea fundației pentru estetica dumneavoastră

Primeri dedicați
de la **GC**

pentru utilizare în laboratorul
dentar

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z și OPTIGLAZE color sunt mărci înregistrate a GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 București
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

z L LF RO 8 85 03/20

GC

Adeziune durabilă la ceramică și compozite



CERAMIC PRIMER II este un primer specializat pentru toate restaurările indirecte estetice.

Pentru aplicații adiționale sau reparații cu **GRADIA PLUS** sau atunci când se individualizează **GRADIA PLUS** cu **GRADIA PLUS Lustre Paint** utilizați **CERAMIC PRIMER II** pentru a obține o adeziune bună.



Aplicați **CERAMIC PRIMER II** înainte de a caracteriza restaurările dumneavoastră **CERASMART270** cu **OPTIGLAZE color**. Pentru efecte în profunzime se poate utiliza tehnica cut-back în combinație cu **GRADIA PLUS**.





CERAMIC PRIMER II este partenerul perfect pentru garanția unei interfețe rezistente. Lucrările total ceramice pot fi caracterizate cu **GRADIA PLUS**, inclusiv structurile din zirconia.

Eroul tuturor structurilor dumneavoastră metalice



METAL PRIMER Z este un agent de adeziune între materialele rășinice și structurile metalice, într-o singură etapă. Pentru o conexiune puternică între structurile metalice și oricare tip de material rășinic cum ar fi compozitele acrilice și metacrilate. Un agent de adeziune ușor de utilizat, dovedit clinic!

Înainte de acoperirea structurilor metalice cu **GRADIA PLUS Opaque** se utilizează **METAL PRIMER Z** pentru a crea o conexiune chimică.

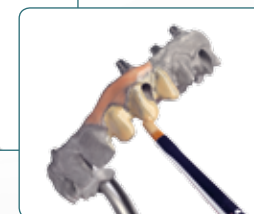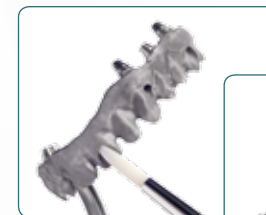

În afara indicațiilor sale specifice de primer pentru structuri metalice, **METAL PRIMER Z** poate fi utilizat alternativ și pentru adeziunea la structurile din zirconia.

Bază pentru modificarea protezelor



GC Acrylic Primer mărește adeziunea între compozitele fotopolimerizabile și rășinile acrilice convenționale utilizate în procedurile din laboratorul dentar cum ar fi modificarea dinților protezelor sau a protezelor rășinice.

