

# Изкуството да презентираш естетика



## Fujirock® EP Classic & Premium

### Fujirock® EP - Classic

- 890222 Golden Brown опаковка 5 kg
- 890226 Golden Brown опаковка 12 kg
- 890225 Topaz Beige опаковка 5 kg



### Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastel Yellow опаковка 4 kg
- 890365 Pastel Yellow опаковка 11 kg
- 890366 Polar White опаковка 4 kg
- 890367 Inca Brown опаковка 4 kg
- 890368 Titanium Grey опаковка 4 kg



GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown / Topaz Beige	
П/Т Съотношение	100 g/20 ml
Ръчно смесване	15 сек.
Вакуумно смесване	45 сек.
Време за втвърдяване	10-13 мин.
Време за изваждане	30-40 мин.
Експанзия при втвърдяване (след 2 ч)	≤ 0.09 %
Якост на компресия	≈ 53 MPa

GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey	
П/Т Съотношение	100 g/20 ml
Ръчно смесване	15 сек.
Вакуумно смесване	45 сек.
Време за втвърдяване	9-12 мин.
Време за изваждане	25-35 мин.
Експанзия при втвърдяване (след 2 ч)	≤ 0.09 %
Якост на компресия	≈ 60 MPa

## Base Stone

### Base Stone

- 890228 Terracotta Red опаковка 12 kg
- 890229 Royal Blue опаковка 12 kg



Base Stone		
Terracotta Red / Royal Blue		
	Течен	Тиксотропен
П/Т Съотношение	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ръчно смесване	15 сек.	15 сек.
Вакуумно смесване	45 сек.	45 сек.
Време за втвърдяване	9 мин.	7,5 мин.
Време за изваждане	30-40 мин.	30-40 мин.
Експанзия при втвърдяване (след 2 ч)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Якост на компресия	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Всички опаковки са с лесен за отваряне и затваряне пластмасов капак. Херметичното затваряне защитава от влага.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Bulgaria  
BG - София 1202  
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3  
Тел. +359.2.983.30.30  
Факс. +359.2.858.31.37  
bulgaria@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com



Z L L F BG 5 28 08/16



GC Fujirock® EP Classic  
GC Fujirock® EP Premium  
GC Base Stone

Семейството  
ГИПСОВЕ  
на GC

Вашата  
естетика  
започва от тук


Перфектното качество е това, което прави семейството от твърди гипсове на GC най-популярното в Европа. С опит в производството на всички видове дентални конструкции, GC гипсовете са специално разработени да осигуряват постоянно точни модели и пънчета, напълно отговарящи на изискванията на модерната зъботехническа лаборатория.

Верни на систематичния принцип на GC - "Едно доказало се портфолио от гипсове за всички индикации и приложения" - ние представяме три вида гипс, които перфектно могат да бъдат съчетавани, за да създадете основата на Вашата естетика:

GC Fujirock® EP **Classic**, един гипс, приложим за всичко  
 GC Fujirock® EP **Premium**, подобрен гипс за високи технологии  
 GC Base Stone, изключително свободно разливащ се гипс за цокъл с минимална експанзия

Всеки гипс се произвежда в гама от цветове, които ви позволяват да създавате комбинации, представящи най-доброто от Вашата работа .. и Вашата лаборатория.

### GC портфолио от гипсове ... **ОСНОВА** за успех.

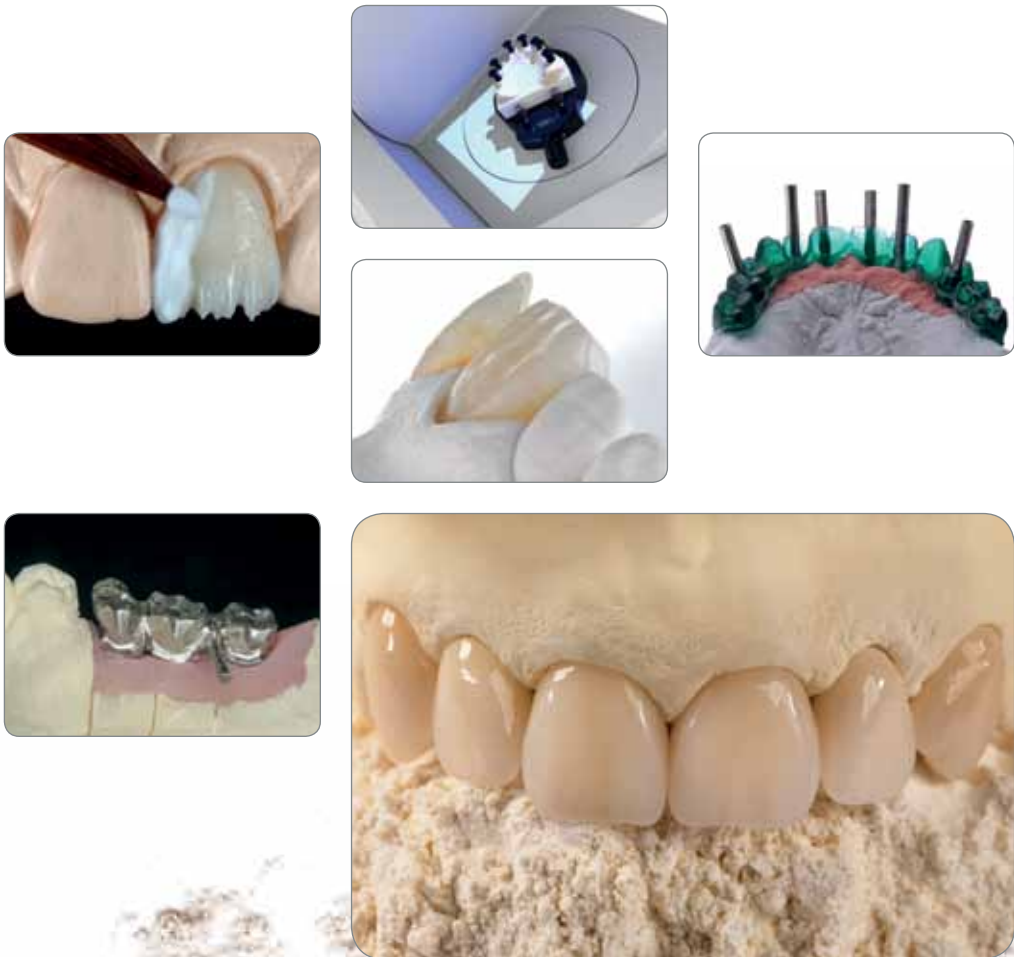

Случаи и снимки, любезно предоставени от: MDT M. Brüsch / MDT Ph. Llobell / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bläden



# Три вида гипс, **НЕОГРАНИЧЕНИ** възможности



## GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic е известно име. Най-популярният в света гипс Тип 4 за пънчета, това е "класиката". Идеален е за всички видове конструкции, съчетаващ великолепна прецизност, изключителна твърдост на границите и отлична стабилност при натиск. GC Fujirock® EP Classic е много течлив, но въпреки това тиксотропен с отлични манипулативни качества и лесно отливане без шупли.

Изберете цвета, който най-добре пасва на ежедневната Ви работа

- Golden Brown (Златисто Кафяв)
- Topaz Beige (Бежов)



## GC Base Stone

GC Base Stone е идеален за основа на зъбните дъги, за контра модели и диагностични модели. Когато се използва с GC Fujirock® EP Classic или Premium, единния стандарт за "качество на GC" при гипсовете ги превръща в оптимална комбинация за лесно и бързо създаване на превъзходни мастер модели.

Изберете свой допълващ цвят:

- Terracotta Red (Теракота Червено)
- Royal Blue (Кралско Синьо)



## GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium е специално разработен за отлични резултати при чувствителни техники като случаи с импланти и сложни индикации за изцяло керамични конструкции. Подобреният състав на праха GC Fujirock® EP Premium и изисканите му цветове превръщат този специален гипс в перфектен избор за редица приложения.

Изберете цвета, който пасва на Вашата фина работа:

- Pastel Yellow (Пастелно Жълт)
- Polar White (Полярно Бял)
- Inca Brown (Инка Кафяв)
- Titanium Grey (Титаниево Сив)

