

Umjetnost prikaza estetike



Slike slučajeva uz odobrenje: MDT M. Brüşch / MDT S. Maffei / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen / MDT G. Quini

Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP - Classic

- 890222 Golden Brown (zlatno-smeđa)
5 kg pakovanje
- 890226 Golden Brown (zlatno-smeđa)
12 kg pakovanje
- 890225 Topaz Beige (topaz bež)
5 kg pakovanje



Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastel Yellow (pastelno žuta)
4 kg pakovanje
- 890365 Pastel Yellow (pastelno žuta)
11 kg pakovanje
- 890366 Polar White (polarno bela)
4 kg pakovanje
- 890367 Inca Brown (Inka smeđa)
4 kg pakovanje
- 890368 Titanium Grey (titan siva)
4 kg pakovanje



GC Fujirock® EP Classic	
Zlatno-smeđa / Topaz bež	
Omjer praška i tečnosti	100 g/20 ml
Ručno miješanje	15 sek.
Vakuusko miješanje	45 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja	10-13 min.
Vrijeme odstranjivanja	30-40 min.
Ekspanzija pri stvrdnjavanju (nakon 2 h)	≤ 0.09 %
Tlačna čvrstoća	≈ 53 MPa

GC Fujirock® EP Premium	
Pastelno žuta / Polarno bela / Inka smeđa / Titan siva	
Omjer praška i tečnosti	100 g/20 ml
Ručno miješanje	15 sek.
Vakuusko miješanje	45 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja	9-12 min.
Vrijeme odstranjivanja	25-35 min.
Ekspanzija pri stvrdnjavanju (nakon 2 h)	≤ 0.09 %
Tlačna čvrstoća	≈ 60 MPa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terracotta Red (terakota crvena)
12 kg pakovanje
- 890229 Royal Blue (kraljevski plava)
12 kg pakovanje



Base Stone		
Terakota crvena / Kraljevski plava		
	Tečna	Tiksotropna
Omjer praška i tečnosti	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ručno miješanje	15 sek.	15 sek.
Vakuusko miješanje	45 sek.	45 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja	9 min.	7,5 min.
Vrijeme odstranjivanja	30-40 min.	30-40 min.
Ekspanzija pri stvrdnjavanju (nakon 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Tlačna čvrstoća	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Sva pakovanja imaju plastični poklopac za lako otvaranje i zatvaranje. Hermetičko pečaćenje štiti od vlage.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BIH - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.47.07.36
Fax. +387.51.47.07.36
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Z L LF BA 5 28 08/16



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

Porodica GC
sadrži

Vaša
estetika
počinje ovdje


Izvrstan kvalitet je ono što čini GC porodicu tvrdih sadri jednom od najpopularnijih u Evropi. Budući da se koriste u izradi svih vrsta dentalnih protetskih radova, GC sadre specifično su namijenjene izradi uvijek tačnih modela i odliva, potpuno zadovoljavajući zahtjeve modernog dentalnog laboratorija.

U skladu sistemskom GC pristupu - „jedna porodica sadri potvrđena za sve zahtjeve i primjene“ - predstavljamo tri sadre koje se savršeno mogu kombinovati i činiti temelj vaše estetike:

GC Fujirock® EP **Classic**, istinski univerzalna sadra
GC Fujirock® EP **Premium**, poboljšana sadra za napredne tehnike
GC Base Stone, sadra izuzetno lake tečnosti za izradu postolja s minimalnom ekspanzijom

Svaka sadra raspoloživa je u nizu boja, koje omogućavaju kombinacije boja koje ističu najbolje u vašim radovima... i u vašem laboratoriju.

Porodica GC sadri ... temelji za uspjeh.

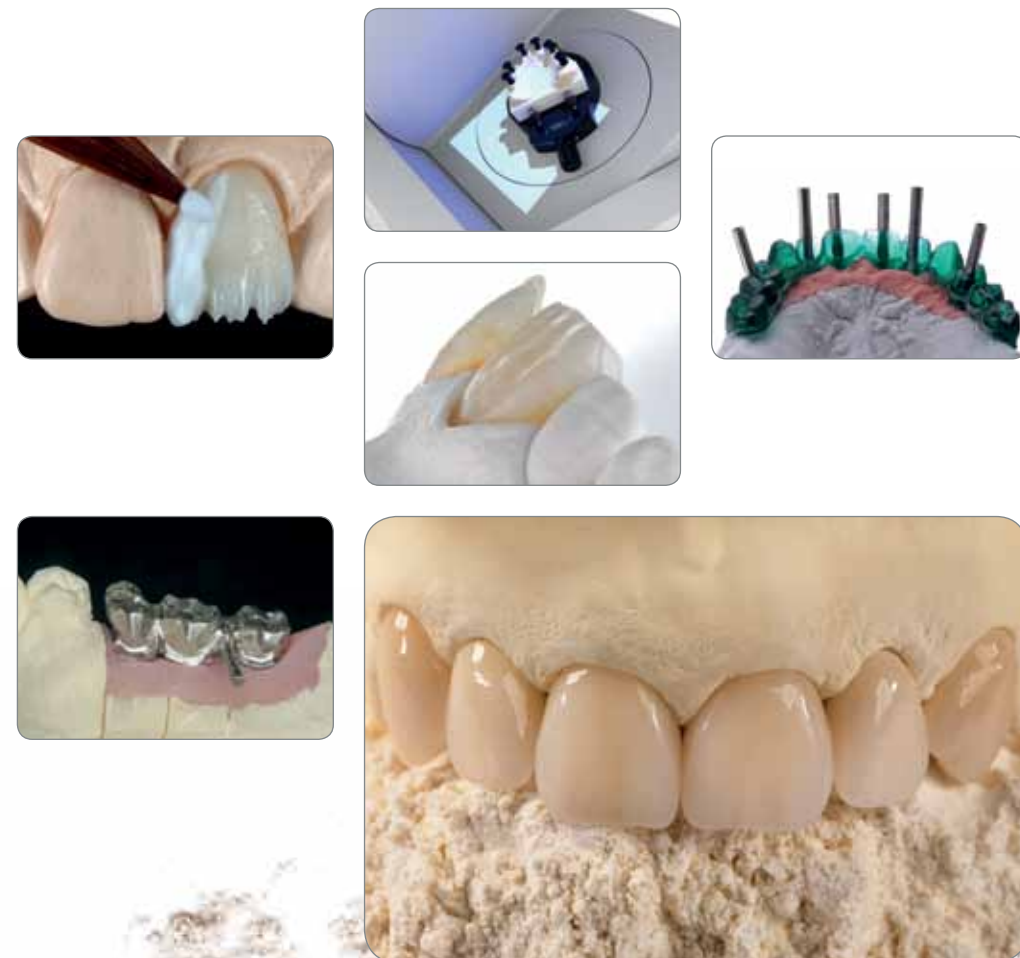

Slike slučajeva uz odobrenje: MDT M. Brüschi / MDT Ph. Lobell / MDT D. Ibrahim / MDT M. Bladen



GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic odgovara imenu koje ima, „klasična“ je. Idealna je za sve vrste protetskih radova, kombinujući visoku tačnost, izvrsnu rubnu tvrdoću i postojanost pod visokim pritiskom. GC Fujirock® EP Classic je vrlo tekuća, no istovremeno tiksotropna za izvrsno rukovanje i lako lijevanje bez mjehurića zraka.

Odaberite boju koja najbolje odgovara vašem svakodnevnom radu:

- Golden Brown (zlatno-smeđa)
- Topaz Beige (topaz bež)



GC Base Stone

GC Base Stone idealna je za izradu postolja modela zubnih lukova, modela suprotne vilice i studijskih modela. Ako se koristi s GC Fujirock® EP Classic ili Premium sadrom, jedinstveni standard „GC kvalitete“ na kojem se sadre baziraju čini ih optimalnom kombinacijom za brzu i jednostavnu izradu izvrsnih radnih modela.

Odaberite vlastite komplementarne boje:

- Terracotta Red (terakota crvena)
- Royal Blue (kraljevski plava)



Tri sadre, neograničene mogućnosti



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium posebno je razvijena za odlične rezultate i osjetljive tehnike, kao što su složeni slučajevi implantata i složene indikacije za potpunu keramiku. Poboljšani sastav praha GC Fujirock® EP Premium i profinjene boje čine ovu posebnu sadru savršenim izborom za različitu primjenu.

Odaberite boju koja najbolje odgovara vašim profinjenim radovima:

- Pastel Yellow (pastelno žuta)
- Polar White (polarno bijela)
- Inca Brown (Inka smeđa)
- Titanium Grey (titan siva)

