

Umění vytvářet estetiku



Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP - Classic

- 890222 Zlatohnědá 5 kg balení
- 890226 Zlatohnědá 12 kg balení
- 890225 Topasově béžová
5 kg balení



GC Fujirock® EP Classic	
Zlatohnědá / Topasově béžová	
Poměr tekutina/prášek	100 g/20 ml
Ruční míchání	15 sek
Vakuové míchání	45 sek
Doba tuhnutí	10-13 min.
Doba vyjmutí	30-40 min.
Expanze při tuhnutí (po 2 hod.)	≤ 0.09 %
Pevnost v tlaku	≈ 53 MPa

Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastelově žlutá 4 kg balení
- 890365 Pastelově žlutá 11 kg balení
- 890366 Polární bílá 4 kg balení
- 890367 Inca hnědá 4 kg balení
- 890368 Titanově šedá
4 kg balení



GC Fujirock® EP Premium	
Pastelově žlutá / Polární bílá / Inca hnědá / Titanově šedá	
Poměr tekutina/prášek	100 g/20 ml
Ruční míchání	15 sek
Vakuové míchání	45 sek
Doba tuhnutí	9-12 min.
Doba vyjmutí	25-35 min.
Expanze při tuhnutí (po 2 hod.)	≤ 0.09 %
Pevnost v tlaku	≈ 60 MPa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terakotová červeň 12 kg balení
- 890229 Královská modř 12 kg balení



Base Stone		
Terakotová červeň / Královská modř		
	Zatékavá	Thixotropní
Poměr tekutina/prášek	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ruční míchání	15 sek	15 sek
Vakuové míchání	45 sek	45 sek
Doba tuhnutí	9 min.	7,5 min.
Doba vyjmutí	30-40 min.	30-40 min.
Expanze při tuhnutí (po 2 hod.)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Pevnost v tlaku	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Všechna balení mají otevíratelné a uzavíratelné plastové víko. Hermetický uzávěr chrání před vlhkostí.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
czech@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Z L LF CZ 5 28 08/16



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

Dentální
sádry od GC

Tady začíná
estetika




Vynikající kvalita je to, co dělá GC rodinu kamenných modelových sáder tou nejoblíbenější v Evropě. GC sádry jsou používány k výrobě všech typů dentální protetiky a jsou speciálně navrženy k vytváření stálých a přesných modelů a odlitků, které plně odpovídají požadavkům moderních dentálních laboratoří.

Přesně v duchu systémového přístupu GC - "Jedna osvědčená skupina sáder pro všechny požadavky a aplikace" - představujeme tři sádry, které je možné dokonale kombinovat k vytvoření základu estetiky:

GC Fujirock® EP **Classic**, skutečně všestranná sádra
GC Fujirock® EP **Premium**, vylepšená sádra pro speciální technologie
GC Base Stone, skutečně lehce tekoucí sádra pro báze s minimální expanzí

Každou ze sáder nabízíme v celé škále odstínů, takže si můžete vybrat takové barevné kombinace, které budou co nejlépe reprezentovat vaši práci ... a vaši laboratoř.

Dentální sádry od GC ... základ úspěchu.

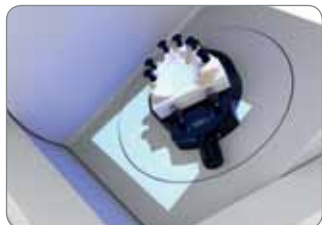

GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic plně dostojí svému jménu. Jedna z nejoblíbenějších dentálních sáder typu 4 na světě, to je "classic" ("klasika"). Je ideální pro všechny typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti, výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči vysokému tlaku. GC Fujirock® EP Classic je vysoce zatékavá, a přesto thixotropní, což zaručuje vynikající manipulační vlastnosti a snadné odlévání bez bublin.

Vyberte odstín, který se nejlépe hodí pro denní použití:

- Zlatohnědá
- Topasově béžová



Tři sádry, neomezené možnosti



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné a citlivé technologie, jako rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce. Vylepšené složení prášku u GC Fujirock® EP Premium a rafinovaná škála barevných odstínů dělá z této speciální sádry ideální volbou pro řadu aplikací.

Vyberte si odstín, který nejlépe vyhovuje speciálním požadavkům:

- Pastelově žlutá
- Polární bílá
- Inca hnědá
- Titanově šedá



GC Base Stone

GC Base Stone je ideální pro báze dentálních oblouků, antagonistické modely a studijní modely. Při použití s GC Fujirock® EP Classic nebo Premium dosáhnete díky příslovečné "GC kvalitě" optimální kombinaci pro rychlé a snadné vytvoření skvělých profesionálních modelů.

Vyberte si vlastní doplňkový odstín:

- Terakotová červen
- Královská modř

