

Umjetnost prikaza estetike



Slike slučajeva uz odobrenje: MDT M. Brüşch / MDT S. Maffei / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen / MDT G. Quini

Fujirock® EP Classic & Premium

Fujirock® EP - Classic

- 890222 Golden Brown (zlatno-smeđa)
5 kg pakiranje
- 890226 Golden Brown (zlatno-smeđa)
12 kg pakiranje
- 890225 Topaz Beige (topaz bež)
5 kg pakiranje



Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastel Yellow (pastelno žuta)
4 kg pakiranje
- 890365 Pastel Yellow (pastelno žuta)
11 kg pakiranje
- 890366 Polar White (polarno bijela)
4 kg pakiranje
- 890367 Inca Brown (Inka smeđa)
4 kg pakiranje
- 890368 Titanium Grey (titan siva)
4 kg pakiranje



GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown (zlatno-smeđa) / Topaz Beige (topaz bež)	
Omjer praška i tekućine	100 g/20 ml
Ručno miješanje	15 sek.
Vakuusko miješanje	45 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja	10-13 min.
Vrijeme odstranjivanja	30-40 min.
Ekspanzija pri stvrdnjavanju (nakon 2 h)	≤ 0.09 %
Tlačna čvrstoća	≈ 53 MPa

GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow (pastelno žuta) / Polar White (polarno bijela) / Inca Brown (Inka smeđa) / Titanium Grey (titan siva)	
Omjer praška i tekućine	100 g/20 ml
Ručno miješanje	15 sek.
Vakuusko miješanje	45 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja	9-12 min.
Vrijeme odstranjivanja	25-35 min.
Ekspanzija pri stvrdnjavanju (nakon 2 h)	≤ 0.09 %
Tlačna čvrstoća	≈ 60 MPa

Base Stone

Base Stone

- 890228 Terracotta Red (terakota crvena)
12 kg pakiranje
- 890229 Royal Blue (kraljevski plava)
12 kg pakiranje



Base Stone		
Terracotta Red (terakota crvena) / Royal Blue (kraljevski plava)		
	Tekuća	Tiksotropna
Omjer praška i tekućine	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Ručno miješanje	15 sek.	15 sek.
Vakuusko miješanje	45 sek.	45 sek.
Vrijeme stvrdnjavanja	9 min.	7,5 min.
Vrijeme odstranjivanja	30-40 min.	30-40 min.
Ekspanzija pri stvrdnjavanju (nakon 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Tlačna čvrstoća	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Sva pakiranja imaju plastični poklopac za lako otvaranje i zatvaranje. Hermetičko pečaćenje štiti od vlage.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Z L LF HR 5 28 08/16



GC Fujirock® EP Classic
GC Fujirock® EP Premium
GC Base Stone

GC obitelj
sadra

Vaša
estetika
počinje ovdje

Izvršna kvaliteta je ono što čini GC obitelj tvrdih sadra jednu od najpopularnijih u Europi. Budući da se koriste u izradi svih vrsta dentalnih protetskih radova, GC sadre specifično su namijenjene izradi uvijek točnih modela i odljeva, potpuno zadovoljavajući zahtjeve modernog dentalnog laboratorija.

Sukladno sustavnom GC pristupu - „jedna obitelj sadra potvrđena za sve zahtjeve i primjene“ - predstavljamo tri sadre koje se savršeno mogu kombinirati i činiti temelj vaše estetike:


GC Fujirock® EP **Classic**, istinski univerzalna sadra

GC Fujirock® EP **Premium**, poboljšana sadra za napredne tehnike

GC Base Stone, sadra izuzetno lake tečnosti za izradu postolja s minimalnom ekspanzijom

Svaka sadra raspoloživa je u nizu boja, koje omogućuju kombinacije boja koje ističu najbolje u vašim radovima... i u vašem laboratoriju.

GC obitelj sadra ... temelji za uspjeh.

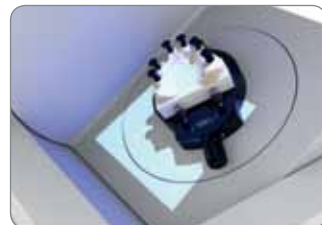

Slike slučajeva uz odobrenje: MDT M. Brüsch / MDT Ph. Llobet / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen



GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic odgovara imenu koje ima, „klasična“ je. Idealna je za sve vrste protetskih radova, kombinirajući visoku točnost, izvrsnu rubnu tvrdoću i postojanost pod visokim pritiskom. GC Fujirock® EP Classic je vrlo tekuća, no istodobno tiksotropna za izvrsno rukovanje i lako lijevanje bez mjehurića zraka.

Odaberite boju koja najbolje odgovara vašem svakodnevnom radu:

- Golden Brown (zlatno-smeđa)
- Topaz Beige (topaz bež)



Tri sadre, neograničene mogućnosti



GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium posebno je razvijena za odlične rezultate i osjetljive tehnike, kao što su složeni slučajevi implantata i složene indikacije za potpunu keramiku. Poboljšani sastav praha GC Fujirock® EP Premium i profinjene boje čine ovu posebnu sadru savršenim izborom za različitu primjenu.

Odaberite boju koja najbolje odgovara vašim profinjenim radovima:

- Pastel Yellow (pastelno žuta)
- Polar White (polarno bijela)
- Inca Brown (Inka smeđa)
- Titanium Grey (titan siva)



GC Base Stone

GC Base Stone idealna je za izradu postolja modela zubnih lukova, modela nasuprotne čeljusti i studijskih modela. Ako se koristi s GC Fujirock® EP Classic ili Premium sadrom, jedinstveni standard „GC kvalitete“ na kojem se sadre temelje čini ih optimalno kombinacijom za brzu i jednostavnu izradu izvrsnih radnih modela.

Odaberite vlastite komplementarne boje:

- Terracotta Red (terakota crvena)
- Royal Blue (kraljevski plava)

