

# Arta prezentării esteticii



Cazuri & imagini prin amabilitatea: MDT M. Brüşch / MDT S. Maffei / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen / MDT G. Quini

## Fujirock® EP Classic & Premium

### Fujirock® EP - Classic

- 890222 Golden Brown cutie 5 kg
- 890226 Golden Brown cutie 12 kg
- 890225 Topaz Beige cutie 5 kg



GC Fujirock® EP Classic	
Golden Brown / Topaz Beige	
Raport P/L	100 g/20 ml
Mixare manuală	15 sec.
Mixare vacuum	45 sec.
Timp de priză	10-13 min.
Timp de demulare	30-40 min.
Expansiune (după 2 h)	≤ 0.09 %
Rezistență la compresie	≈ 53 MPa

### Fujirock® EP - Premium

- 890364 Pastel Yellow cutie 4 kg
- 890365 Pastel Yellow cutie 11 kg
- 890366 Polar White cutie 4 kg
- 890367 Inca Brown cutie 4 kg
- 890368 Titanium Grey cutie 4 kg



GC Fujirock® EP Premium	
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey	
Raport P/L	100 g/20 ml
Mixare manuală	15 sec.
Mixare vacuum	45 sec.
Timp de priză	9-12 min.
Timp de demulare	25-35 min.
Expansiune (după 2 h)	≤ 0.09 %
Rezistență la compresie	≈ 60 MPa

## Base Stone

### Base Stone

- 890228 Terracotta Red cutie 12 kg
- 890229 Royal Blue cutie 12 kg



Base Stone		
Terracotta Red / Royal Blue		
	Flow	Thixo
Raport P/L	100 g/26 ml	100 g/21 ml
Mixare manuală	15 sec.	15 sec.
Mixare vacuum	45 sec.	45 sec.
Timp de priză	9 min.	7,5 min.
Timp de demulare	30-40 min.	30-40 min.
Expansiune (după 2 h)	≤ 0.08 %	≤ 0.08 %
Rezistență la compresie	≈ 45 MPa	≈ 50 MPa

Toate cutiile sunt prevăzute cu capac de plastic pentru o deschidere/inchidere simplă. Sigiliul ermetic protejează împotriva umidității.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Romania  
Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,  
sc.1, et.1, ap.13, sect.1  
RO - 010782 București  
Tel. +40.21.313.41.53  
Fax. +40.21.313.41.53  
romania@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com

**'GC.'**

Z L L F RO 5 28 08/16

**'GC.'**



GC Fujirock® EP Classic  
GC Fujirock® EP Premium  
GC Base Stone

Familia de  
gipsuri GC

Estetica  
dumneavoastră  
începe aici




Calitatea superioară a familiei de gipsuri dure de la GC o recomandă ca fiind una dintre cele mai populare din Europa. Utilizate la producția tuturor tipurilor de lucrări protetice, gipsurile GC sunt concepute special pentru a oferi o precizie ridicată a modelelor și bonturilor, îndeplinind în totalitate cerințele unui laborator de tehnică dentară modern.

Urmând abordarea GC sistematică - "O singură familie de gipsuri pentru toate necesitățile și aplicațiile" - vă prezentăm trei gipsuri care pot fi combinate perfect pentru a crea fundația esteticii dumneavoastră:

GC Fujirock® EP **Classic**, un gips cu adevărat multifuncțional  
GC Fujirock® EP **Premium**, un gips îmbunătățit pentru tehnici cu performanțe ridicate  
GC Base Stone, un gips fluid excepțional pentru baze, cu expansiune minimă

Fiecare gips este disponibil într-o gamă de culori ce vă permite să creați combinații de nuanțe pentru a evidenția tot ce este mai bun în lucrările dumneavoastră ... și în laborator.

Familia de gipsuri GC ... fundația pentru succes.

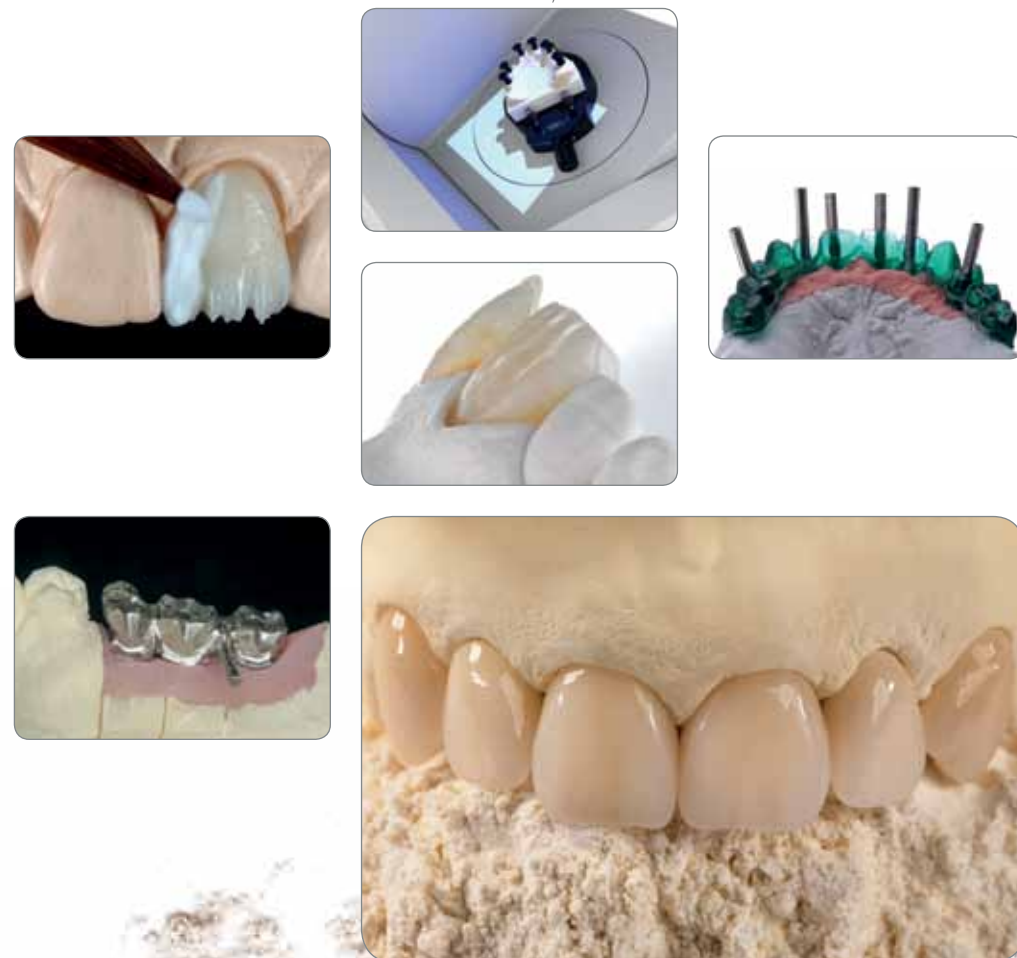

## GC Fujirock® EP Classic

GC Fujirock® EP Classic nu își dezmente reputația. Unul dintre cele mai populare gipsuri dentare de Tip 4 din lume, este gipsul "clasic". Ideal pentru toate tipurile de lucrări protetice, combină precizia ridicată, duritatea excepțională a muchilor și stabilitatea la presiune ridicată. GC Fujirock® EP Classic este foarte fluid și totuși tixotrop pentru a vă oferi proprietăți excelente de manipulare și o turnare ușoară, fără bule de aer.

Alegeți culoarea adecvată pentru lucrările dumneavoastră zilnice:

- Golden Brown
- Topaz Beige



# Trei gipsuri, posibilități nelimitate



## GC Fujirock® EP Premium

GC Fujirock® EP Premium a fost special conceput pentru tehnologii performante, ce necesită precizie ridicată, cum ar fi cazurile de lucrări pe implantate extinse și indicațiile complexe total ceramice. Compoziția îmbunătățită a pulberii de GC Fujirock® EP Premium și ajustarea precisă a culorii fac ca acest gips special să reprezinte alegerea perfectă pentru o varietate de aplicații.

Alegeți culoarea adecvată pentru lucrările dumneavoastră delicate:

- Pastel Yellow
- Polar White
- Inca Brown
- Titanium Grey



## GC Base Stone

GC Base Stone este ideal pentru realizarea bazelor arcașelor dentate, modelelor antagoniste și a celor de studiu. Atunci când este utilizat în combinație cu GC Fujirock® EP Classic sau Premium, standardul unic de "calitate GC" ce stă la baza gipsurilor le transformă în combinația optimă pentru crearea unor modele master superbe, rapid și simplu.

Alegeți propria culoare complementară:

- Terracotta Red
- Royal Blue

