




ISTI izgled, **ISTI** pristup.
Gdje je onda **razlika?**



Kada treba povezati **čvrstoću** i **fleksibilnost**.

CERASMART ima najvišu savojnu čvrstoću u svojoj kategoriji te je nadvisio klasične glinične keramičke blokove. Najvažnije, takođe nudi **visoku elastičnost (energija lomljenja)** za amortizaciju **žvačnog pritiska** i podršku u najizazovnijim kliničkim situacijama.

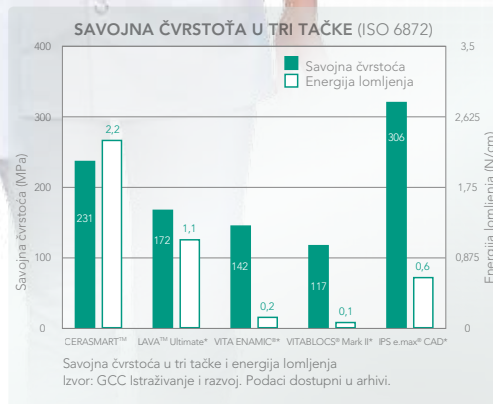

Dobrodošli u
PAMETNO doba

Otkrijte **CERASMART™** i proizvode koji ga ističu
www.gceurope.com



Ceramic Primer II je najnoviji primer iz kompanije GC, koji se može koristiti za sve vrste keramika (uključujući staklokeramiku, cirkonij-oksidnu i aluminij-oksidnu keramiku), kompozite i hibridnu keramiku.

Specijalizovani primer koji omogućava čvrstu i trajnu adheziju...

Vaš savršeni partner za vaše **CERASMART™** radove!



Otkrijte Optiglaze Color, novi svjetlosno polimerizujući materijal za karakterizaciju iz kompanije GC!

Bojenje, povećana otpornost na trošenje i visoki površinski sjaj uz jedan potez kista...

Jer sve izgleda bolje u boji!



DiaPolisher je GC pasta za poliranje s ultrafinim dijamantnim česticama - samo slijedite uobičajeni postupak poliranja i koristite DiaPolisher pastu za postizanje višeg sjaja.

Poboljšajte estetiku jednim jednostavnim korakom!

CERASMART™ - najbolja klasa hibridne keramike iz kompanije GC



BOJE:

High Translucency (visoka translucencija) (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

- uglavnom za nadomještanje cakline
- za inleje, onleje, estetske ljuske, djelomične i potpune krunice

Low Translucency (niska translucencija) (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT

- za nadomještanje dentina i cakline
- za prekrivanje diskoloracija, posebno za krunice

Bleach Shade (BL) (za izbjeljivanje)

VELIČINE:

raspoloživo u veličinama 12, 14, i 14L

PAKOVANJA:

CERASMART za Cerec, nadopuna od 5 blokova CERASMART univerzalni, nadopuna od 5 blokova CERASMART Advanced Kit (prošireni komplet) CERASMART Starter Kit (početni komplet)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BA - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.470.736
Fax. +387.51.470.736
info.bosniaherzegovina@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



O L F BA 21 01 01/19



GC CERASMART™

Nova hibridna keramika za CAD/CAM sistem

Jeste li sigurni da to nije keramika?



Pametni materijal za pametne primjene.



Predstavljanjem novog hibridno keramičkog bloka, GC otvara vrata "pametnog" doba, gdje se za svaki slučaj zasebno odabire tačno odgovarajuća vrsta CAD/CAM bloka.

Keramika - zlatni standard kod CAD/CAM tehnologije - i CERASMART na neki su način slični. Ali CERASMART nudi nenadmašne mogućnosti za određene kliničke situacije.

- Zbog sposobnosti amortizacije, CERASMART je savršeno pogodan za izazovne okluzijske situacije
- Precizno prilagođavanje i otpornost na krzanje osiguravaju dugotrajnu rubnu nepropusnost
- Uravnotežena tvrdoća površine posebno je pogodna za smanjenje trošenja suprotnih zuba, takođe osiguravajući dugotrajni sjaj rada

Pored toga CERASMART takođe nudi

- Efikasan proces glodanja s kratkim vremenom glodanja i poboljšanom trajnošću glodalica
- Izvrsna mogućnost poliranja postiže izraziti sjaj nakon kratkog vremena poliranja
- Jednostavna karakterizacija premazom Optiglaze Color, samo za nekoliko minuta

Kada treba povezati preciznost i trajnost

CERASMART dokazuje da ne treba birati između preciznosti i brzine: kroz kratko vrijeme glodanja postižu se vrlo oštri rubovi. Bez vidljivog krzanja, čak i pod velikim mikroskopskim povećanjem.

Preciznost glodanja


Izvor: GCC Istraživanje i razvoj.



Jedinstvena tehnologija

Slike pod skenirajućim elektronskim mikroskopom; Izvor: GCC Istraživanje i razvoj

CERASMART se bazira na najnovijoj GC tehnologiji punila, s ultrafinim homogeno raspršenim punilima koja omogućavaju dugotrajni sjaj te manje trošenje suprotnih zuba. Njegova visoka radioopaknost takođe olakšava kontrolu radova.

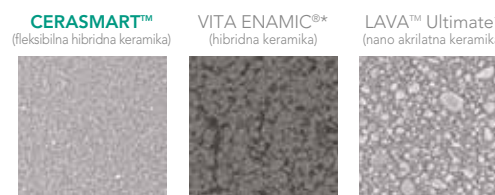

Kada treba spojiti estetiku i CAD/CAM


Cerasmart pacijentima nudi estetske radove, nevidljive u svim slučajevima zahvaljujući svojoj optimalnoj ravnoteži fluorescencije i opalescencije te prirodnoj integraciji boje.

CERASMART™ A2 HT LAVA™ Ultimate A2 HT* VITA ENAMIC™ 1M2 H* IPS e.max® CAD A2 HT*



PROPUSHTENO SVJETLO

CERASMART™ A3LT LAVA™ Ultimate A3LT* VITA ENAMIC™ 2M2 T* IPS e.max® CAD A3LT*

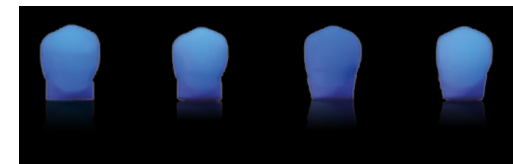

CRNO SVJETLO

*Nije zaštitni znak GC Europe

Povećajte svoje CAD/CAM restorativne mogućnosti s CERASMART™!



Gore lijevo: Inlej, uz dozvolu dr. Gumpei Koike, Japan

Gore desno: Endo-krunica, uz dozvolu dr. Gilles Aldié, (e-Dentisterie), Francuska

Dolje lijevo: Onlej, uz dozvolu dr. Rich Rosenblatt, SAD

Dolje desno: Krunica, uz dozvolu prof. Marleen Peumans, Belgija

Pametniji sistem za pametniji tok rada

Bez glaziranja, bez pečenja

Završni koraci za estetski rad su olakšani izborom dvije opcije: jednostavno ručno poliranje ili brza karakterizacija jednim potezom kista... korištenjem premaza otpornog na trošenje, Optiglaze Color.

