


ENAK izgled, **ENAK** pristop.
Kje je **razlika?**



Ko se **moč** in **fleksibilnost** zlijeta skupaj.

CERASMART izkazuje najvišjo stopnjo upogibne trdnosti v svoji kategoriji, in je superioren od klasičnih feldspatskih keramičnih blokov. Najbolj pomembno je, da ima **visoko fleksibilnost (energijo zloma)** in lahko blaži **žvečne pritiske** ter vzdrži najbolj zahtevne klinične situacije.

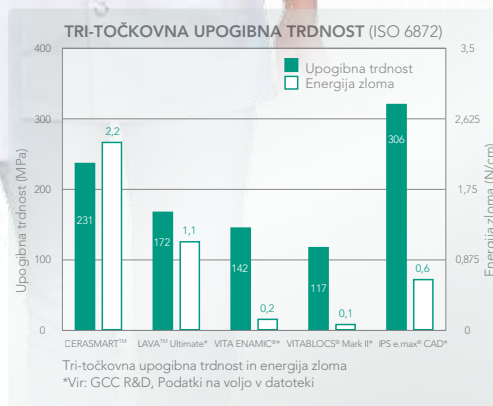

Dobrodošli v
NOVI dobi

Odkrijte **CERASMART™** in izdelke, ki izstopajo
www.gceurope.com



Ceramic Primer II je najnovejši primer iz GC, ki se lahko uporablja za vse vrste keramik (tudi steklasto, zirkonijsko in alumina), kompozite in hibridne keramike.

Specializiran primer, ki ponuja močno in vzdržljivo adhezijo...

Odličen partner za vaše **CERASMART™** restavracije!



Odkrijte **GC Optiglaze Color**, nov svetlobno-polimerizirajoč material za karakterizacijo!

Barvanje, povečana odpornost na obrabo in visok lesk površine samo s potegom čopiča...

Zato ker vse izgleda boljše v barvah!



GC DiaPolisher je polirna pasta, ki vsebuje ultra-fine diamantne delce - samo sledite vašim ustaljenim postopkom poliranja in uporabite DiaPolisher pasto za doseganje visokega sijaja.

Izboljšajte vase estetske rezultate v samo enem koraku!

CERASMART™ - najboljši razred hibridne keramike iz GC



BARVE:

- Visoka translucenca (HT):
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Najpogosteje za nadomestitev sklenine
 - Uporabite pri inlejih, onlejih, venerjih, delnih in polnih prevlekah
- Nizka translucenca (LT):
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
- Za nadomestitev dentina in sklenine
 - Uporaba za zakrivanje zabarvanih preparacij, še posebej pri prevlekah
- Beljene barve (BL)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

'GC.'

O LF SI 21 01 01/19



GC CERASMART™

Nova hibridna keramična CAD/CAM rešitev

Ali ste
prepričani
da ni
keramika?

'GC.'

Pameten material za pametne aplikacije.



Predstavljamo vam nov hibridni keramični blok, GC predstavlja novo dobo, Smart Age, kjer vi izberete pravi tip CAD/CAM bloka za vsak specifičen primer.

Keramika - zlati standard v CAD/CAM - in CERASMART sta videti podobno na določen način. Toda CERASMART ponuja povsem nove možnosti za nekatere klinične situacije.

- Sposoben prenašati in absorbirati sile, CERASMART je odlično prilagojen in povsem primeren za zahtevne okluzijske situacije
- Njegova natančna adaptacija in odpornost proti lomljenju («chipping») zagotavlja dolgotrajno obrobno zaporo
- Njegova uravnotežena trdota površine bo še posebej koristna pri zmanjšanju obrabe nasprotnega zobovja, medtem ko se ohranja dolgotrajen lesk restavracije

Poleg vsega, vam CERASMART ponuja

- Učinkoviti proces rezkanja s krajšim časom rezkanja in izboljšano življenjsko dobo rezkalnih orodij
- Odlično možnost poliranja, ki se kaže v impresivnem lesku po kratkem času poliranja
- Enostavna karakterizacija z uporabo Optiglaze Color, samo v nekaj minutah

Ko se združita natančnost in vzdržljivost

CERASMART dokazuje, da se ni potrebno odločati med natančnostjo in hitrostjo: kratek čas rezkanja združen z ekstremno ostrimi robovi, brez vidnih sledov lomljenja, tudi pod povečavo.

	CERASMART™	VITABLOCS® Mark II*	IPS e.max® CAD*	VITA ENAMIC®*	LAVA™ Ultimate*
Natančnost rezkanja					
Vir: GCC R&D.					
Edinstvena tehnologija	CERASMART je osnovan na najnovejši tehnologiji polnil, ki temelji na ultra-finih homogeno razpršenih delcih polnil, kar ponuja tako dolgotrajen lesk kot tudi zmanjšano obrabo antagonistov. Ima visoko radioopačnost , kar olajša kontrolne preglede restavracij.				
SEM fotografija; Vir: GCC R&D					
	CERASMART™ (fleksibilna hibridna keramika)	VITA ENAMIC®* (hibridna keramika)	LAVA™ Ultimate* (smolnata nano keramika)		

Estetika in CAD/CAM se združita


Cerasmart ponuja vašim pacientom estetske restavracije, nevidne ob vseh okoliščinah zaradi optimalnega ravnotežja fluorescence in opalescence ter naravnega vključevanja barvnega odtenka.

CERASMART™ A2 HT LAVA™ Ultimate A2 HT* VITA ENAMIC® 1M2 H* IPS e.max® CAD A2 HT*



POSREDNA SVETLOBA

CERASMART™ A3LT LAVA™ Ultimate A3 LT* VITA ENAMIC® 2M2 T* IPS e.max® CAD A3 LT*

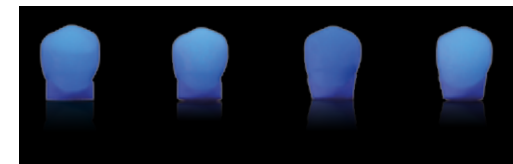

FLOURESCENTNA SVETLOBA

*Ni blagovna znamka GC Europe

Povečajte vaše možnosti za CAD/CAM restavracije s CERASMART™!

PRED	POTEM	Zgoraj levo: Inlaj, Dr. Gumpei Koike, Japonska	PRED	POTEM	
		Zgoraj desno: Endo-prevleka, Dr Gilles Aldié, (e-Dentisterie), Francija			
PRED	POTEM	Spodaj levo: Onlaj, Dr. Rich Rosenblatt, ZDA	PRED	POTEM	
		Spodaj desno: Prevleka, Prof. Marleen Peumans, Belgija			

Pameten sistem za pameten delovni proces

Brez glaziranja, brez pečenja

Končni koraki estetske restavracije se naredijo enostavno tako, da izberete med dvema možnostima: enostavno ročno poliranje ali hitra karakterizacija s čopičem... z uporabo Optiglaze Color, ki je odporen proti obrabi.

Karakterizacija			
	> Ceramic Primer II	> Optiglaze Color	> Rezultat
Poliranje			
	> CERASMART™	> Finiranje & Poliranje	> DiaPolisher Paste
			> Rezultat