


Прецизност, която остава.
Естетика, която не изчезва.

Увеличете вертикалния размер

Със своята флексурална якост CERASMART270 е перфектен материал при решаване на предизвикателни случаи на изтриване. Балансираната му повърхностна твърдост ще бъде от особена полза за намаляване на износването на срещулежащите зъби, осигурявайки междувременно дълготраен блясък на възстановяванията.

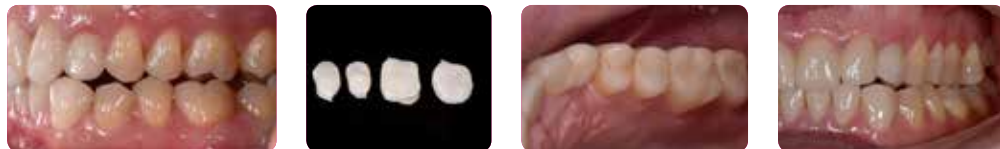


Предоставено от Dr. C. Moussally, Франция

Възстановяване в едно посещение

С CERASMART270 може да създадете надеждни възстановявания с оптимално пасване в едно посещение. Възстановяването ще бъде фрезовано за няколко минути и също така ще бъде много щадящо за Вашите фрезоващи борери.

Заместване на голямо композитно възстановяване с парапуларни щифтове

Правилният избор при обширни възстановявания, подложени на голямо дъвкателно натоварване.

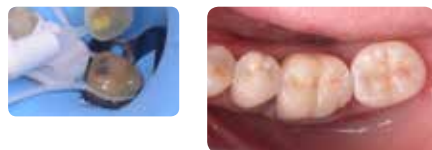

Предоставено от Dr. D. Gerdolle, Швейцария

Възстановяване на втори молар

Естественото му сливане с околните зъбни тъкани, използвайки само един цвят, го превръща в обичаен материал за възстановяване на молари.



Предоставено от Dr. Y. Roos, Испания

Корона върху имплант

Еластичността на CERASMART270 е особено удобна при корони върху импланти.



Предоставено от Dr. J. Tapia Guadix, Испания

Възстановяване на квадрант


Перфектен за изработване на няколко възстановявания в едно посещение.



Предоставено от Dr. G. Witkowski, Полша

CERASMART270 от GC

Естествено пасване и гъвкавост

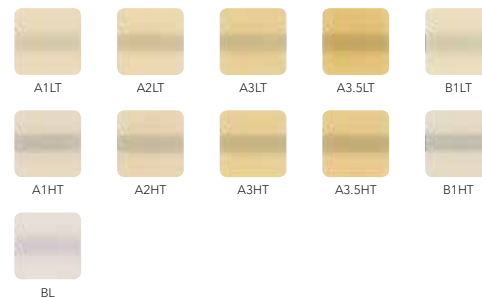

CEREC						
Цвят	Размер	Артикул номер	Размер	Артикул номер	Размер	Артикул номер
A1 HT	12	12540	14	12576	14L	12612
A2 HT	12	12541	14	12577	14L	12613
A3 HT	12	12542	14	12578	14L	12614
A3.5 HT	12	12543	14	12579	14L	12615
B1 HT	12	12544	14	12580	14L	12616
A1 LT	12	12545	14	12581	14L	12617
A2 LT	12	12546	14	12582	14L	12618
A3 LT	12	12547	14	12583	14L	12619
A3.5 LT	12	12548	14	12584	14L	12620
B1 LT	12	12550	14	12586	14L	12622
BL	12	12551	14	12587	14L	12623

Universal						
Цвят	Размер	Артикул номер	Размер	Артикул номер	Размер	Артикул номер
A1 HT	12	12552	14	12588	14L	12624
A2 HT	12	12553	14	12589	14L	12625
A3 HT	12	12554	14	12590	14L	12626
A3.5 HT	12	12555	14	12591	14L	12627
B1 HT	12	12556	14	12592	14L	12628
A1 LT	12	12557	14	12593	14L	12629
A2 LT	12	12558	14	12594	14L	12630
A3 LT	12	12559	14	12595	14L	12631
A3.5 LT	12	12560	14	12596	14L	12632
B1 LT	12	12562	14	12598	14L	12634
BL	12	12563	14	12599	14L	12635

Свързани продукти



CERASMART270, DIAPOLISHER Paste, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER и OPTIGLAZE color са търговски наименования на GC.

Brilliant Crios, Grandio blocs, Tetric CAD, VITA Enamic multiColor и CEREC не са търговски марки на GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gceurope.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

z O LFBG 2105 04/19

Естествено
пасване и
гъвкавост

CERASMART™270
от GC

Абсорбиращо натоварването,
хибридно, керамично
CAD/CAM блокче

GC

GC


CERASMART270 от GC

Интелигентен материал за хитри приложения!

CERASMART270 е естетично хибридно блокче, създадено, за да осигури бързо и дълготрайно клинично решение. Благодарение на наскоро разработената технология **"Full Coverage Silane Coating"** (FSC) с подобрен **нано-филър**, CERASMART270 предлага високи физични и естетични качества. Фрезоването е бързо и ефикасно, позволявайки да се създаде качествено възстановяване с фини граници и оптимално пасване за много кратко време. Допълнително, то може да бъде полирано или индивидуализирано за по-витална естетика. CERASMART270 е правилното блокче за употреба, при необходимост от бърз инлей или предизвикателен случай на износване.

Превъзходна здравина, издържаща на дъвкателните сили


- **Високо ниво на напълненост** благодарение на FSC технологията
- **Подобрена флексурална якост** за дълготрайни възстановявания
- Висока **устойчивост на фрактуриране**

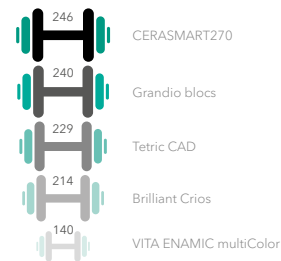

Три-точкова флексурална якост (MPa)*

Гъвкавост при абсорбиране на шок ефети


- **По-малко напрежения** по време на дъвчене
- **Намален риск от умора на материала**
- Изключително подходящ за възстановявания върху **импланти**

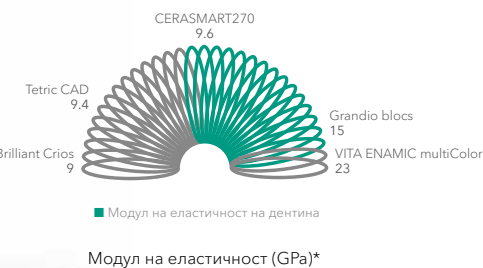

Модул на еластичност (GPa)*

Износоустойчивост за дълготрайни възстановявания

- **Много малко износване**
- Идеален за **пациенти с бруксизъм**
- Дълго задържане на блясък

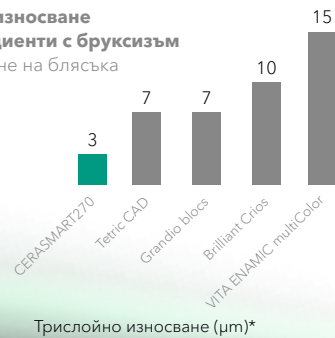


Трислойно износване (µm)*

*Източник : GC R&D, Япония, 2018. Налични данни


Гъвкав и прецизен

Остри граници, гарантиращи плавни преходи

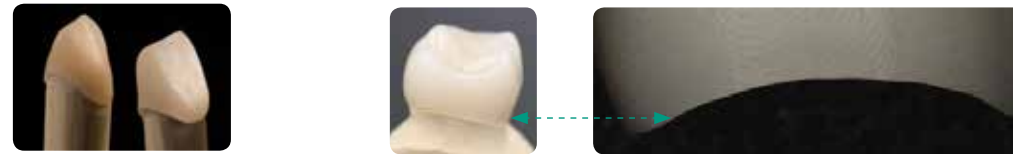


Много прецизни и гладки граници, без отчупване, след бързо и лесно фрезоване, за да гарантира естествено пасване.

Превъзходна полируемост и задържане на блясъка

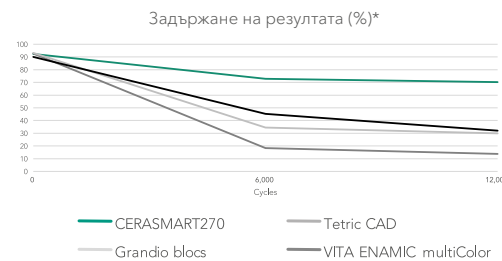

Задържане на резултата (%)*

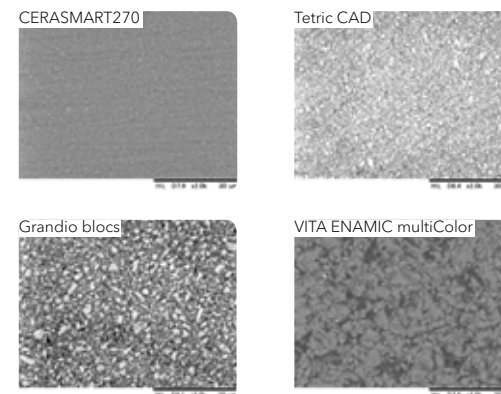

SEM снимки на CERASMART270 в сравнение с конкурентни материали*

Благодарение на своето съдържание от ултра фин пълнител, CERASMART270 се полира лесно и запазва нивото си на блясък много по-дълго от своите конкуренти за същия период от време.

Естествено сливащи се цветове



За **естествена усмивка**, използвайте само един цвят.



Предоставено от MDT C. Hancker, Германия

Оптимална флуоресценция и опалесценция



Естествен зъб CERASMART270

Естествен зъб CERASMART270



Красиви цветове за естествен изглед. Топли, витални цветове с **оптимално балансирана флуоресценция и опалесценция.**

Прецизно и красиво

Изберете как да завършите

Индивидуализиране

Защото всичко изглежда по-добре в цветовете

Придайте индивидуалност на своето възстановяване, нанасяйки с четка OPTIGLAZE color, готово за употреба и износоустойчиво, придаващо блясък покритие.



Може да избирате от широка гама цветове или да използвате Clear glaze, за да придадете само блясък.

Полиране

Бързо и лесно полиране

Впечатляващо ниво на блясък може да се постигне само в няколко лесни стъпки за полиране.



Полирането може да се извърши със стандартни четки и борери.

Лесни и бързи стъпки за предварителна обработка и залепване

Ецване и Пясъкоструене



Силан или MDP



Предварителна обработка на зъба



Циментиране



CERASMART270 е единствената хибридна керамика която може да бъде **ецвана** с флуороводородна киселина или да бъде **пясъкоструена**.

И в двата случая, употребата на **G-Multi PRIMER** ще бъде винаги добър избор, тъй като съдържа и двата компонента силан и MDP.

Изберете метод на ецване в зависимост от наличното на емайл и дентин по Вашата подготовка. Нанесете свързващ агент като **G-Premio BOND**.

Използвайте **адхезивен цимент** като G-CEM LinkForce или G-CEM Veneer.

Предоставено от Д-р. П. Димитров, България

Възможности за дълготрайно циментиране на възстановяванията



G-CEM LinkForce
Универсален двонополимеризиращ композитен цимент с доказано представяне.



G-CEM Veneer
Фотополимеризиращ композитен цимент при високо естетични изисквания.



Когато и да се колебаете, GC Luting App ще ви бъде от полза за правилен протокол.

Красиво и лесно