

CERASMART™270

Košanas spēkus absorbējošs hibrīdkeramikas CAD/CAM bloks

Precizitāte
un elastīgums




CERASMART270_{no GC}

Vieds materiāls viedam lietojumam!

CERASMART270 ir estētiskās restaurācijas hibrīdbloks, kas paredzēts ātri veicamām klīniskām procedūrām ar ilgnoturīgu rezultātu. Pateicoties nesēn izstrādātajai „Full Coverage Silane Coating” (FSC) tehnoloģijai ar uzlabotām pildvielām, CERASMART270 ir ļoti labas fizikālās un estētiskās īpašības. Ātrs un efektīvs frēzēšanas process ļauj izveidot kvalitatīvu restaurāciju ar precīzām malām. Turklāt procesa beigās restaurāciju var nopolēt vai arī individualizēt, iegūstot dinamiskāku estētisko rezultātu. CERASMART270 bloks būs ideāli piemērots gan ātrai onlejas izveidei, gan arī atjaunojot komplicētus zobu nodilšanas klīniskos gadījumus.

Pietiekami spēcīgs, lai izturētu košanas spēkus

- FSC tehnoloģija nodrošina augstu pildvielu daudzumu
- Uzlabota lieces izturība restaurācijām, kas iztur laika pārbaudi
- Augsta izturība pret lūzumiem

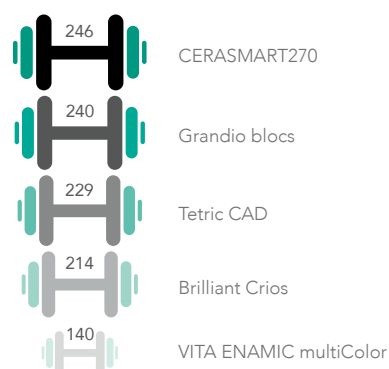


Trīs punktu lieces izturība (MPa)*



Elastīgums triecienu efektu absorbēšanai


- Mazākas slodzes virsotnes košanas laikā
- Samazināts materiāla noguruma risks
- Ļoti labi piemērots implantu restaurācijām

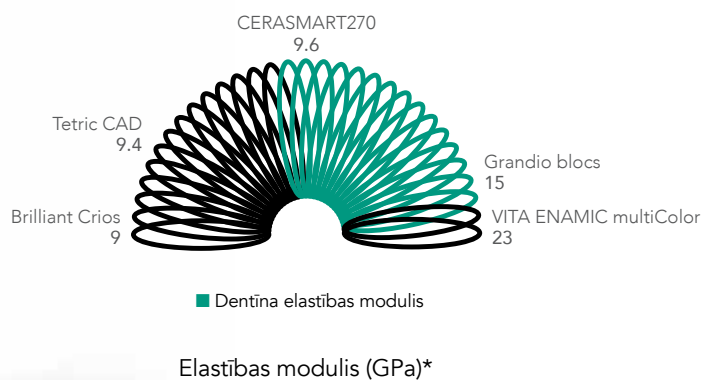

Elastības modulis (GPa)*

Nodilumizturīgas un ilglaicīgas restaurācijas

- Ļoti zems materiāla nodilums
- Ideāli piemērots pacientiem ar bruksismu
- Ilgnoturīgs virsmas spīdums

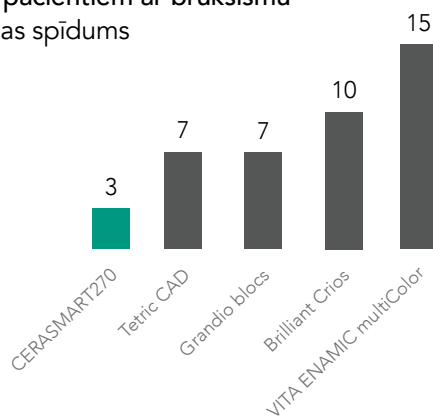

Trīs ķermeņu nodilums (µm)*






Elastība un precizitāte

Precīzas malas



Ātra un vienkārša frēzēšanas procesa rezultātā iegūst ļoti precīzas un gludas malas bez negludumiem, kas savukārt nodrošina precīzu restaurāciju.

Izcils pulēšanas rezultāts un ilgnoturīgs spīdums

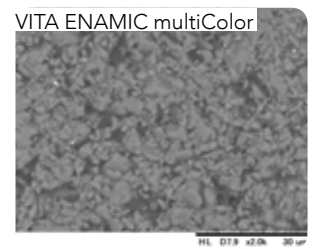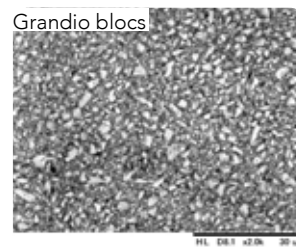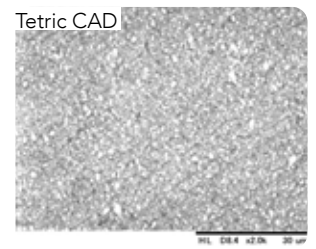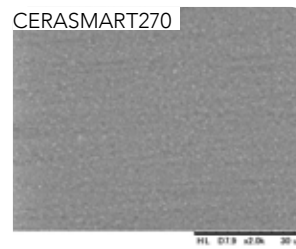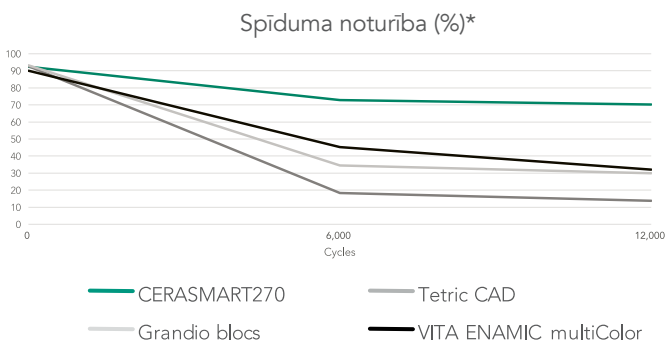

Ar skenējošo elektronu mikroskopu iegūtie CERASMART270 attēli salīdzinājumā ar konkurentiem*

CERASMART270 ir ļoti viegli pulējams materiāls, kas vienā un tajā pašā laika periodā spēj saglabāt spīdumu daudz ilgāk nekā konkurenti.

Krāsas, kas dabiski saplūst ar zobu




Skaistam smaidam tikai viens tonis.



Ar MDT C. Hannker atļauju, Vācija

Optimāla fluorescences un caurspīdīgums

Dabīgais zobs CERASMART270

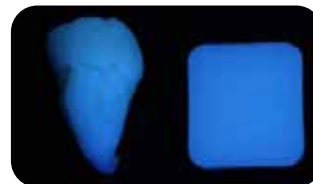

Skaistas krāsas dabiskam izskatam. Silti un dzīvīgi toni ar optimālu fluorescences un opalescences līdzsvaru.

Dabīgais zobs CERASMART270



Precīzs un skaists iznākums

Izvēlieties, kā veiksiet restaurācijas apstrādi

Individualizēta restaurācija

Jo krāsa uzlabo izskatu

izmantojot lietošanai gatavo un nodilumizturīgo OPTIGLAZE krāsu ar spīdīgu pārklājumu, individualizējot restaurāciju ar otas pieskārienu.



Izvēlieties toni no plaša krāsu klāsta, vai arī uzklājiet caurspīdīgu glazūru, ja vēlaties piešķirt tikai spīdumu.

Pulēšana

Ātra un vienkārša pulēšanas procedūra

Tikai ar dažiem vienkāršiem pulēšanas soljiem iespējams iegūt iespaidīgu spīdumu.



Pulēšanu var veikt ar standarta pulieriem.

Vienkārša un ātra pirmsapstrāde un cementēšanas iespējas

Kodināšana vai apstrāde ar smilšstrūklu



CERASMART270 ir vienīgais hibridkeramikas materiāls, ko var kodināt ar hidrofluorskābi vai apstrādāt ar smilšstrūklu.

Silāns vai MDP



Abos gadījumos universālā G-Multi PRIMER praimera izmantošana būs laba izvēle, jo tas satur gan silānu, gan MDP.

Zoba pirmsapstrāde



Izvēlieties kodināšanas tehniku atkarībā no emaljas un dentīna apjoma preparācijā. Uzklājiet adhezīvu, piemēram, G-Premio BOND.

Cementēšana



Izmantojiet adhezīvo kompozīta cementu, piemēram, G-CEM LinkForce vai G-CEM Veneer.

Ar Dr. Dimitrova atļauju, Bulgārija

Cementēšanas iespējas ilgnoturīgam restaurācijas rezultātam



G-CEM LinkForce
Universāls, duāli cietējošs sveķu cements ar uzticamu veiktspēju.



G-CEM Veneer
Ar gaismu cietināmais sveķu cements augstām estētiskām prasībām.




Šaubu gadījumā izmantojiet GC Luting App lietotni, kas Jums palīdzēs izvēlēties pareizo protokolu.

Skaisti un vienkārši

Precizitāte ar ilgnoturīgu rezultātu. Paliekošs estētiskais rezultāts.

Vertikālā augstuma palielināšana

CERASMART270 ir perfekti piemērots sarežģītām okluzālām restaurācijām, jo tam piemīt lieces izturība un spēks. Materiāla sabalansētā virsmas cietība būs īpaši liels ieguvums — tiks samazināts antagonistu zobu nodilums, vienlaikus nodrošinot ilgstošu restaurācijas virsmas spīdumu.

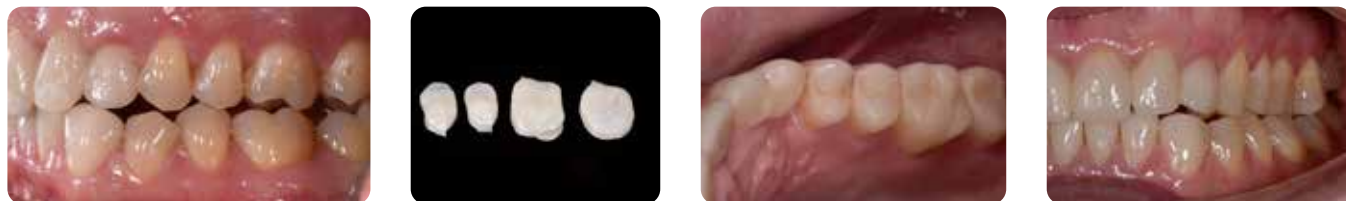

Ar Dr. C. Moussally atļauju, Francija

Restaurācijas tikai viena apmeklējuma laikā

Ar CERASMART270 var izgatavot izturīgas un precīzas estētiskās restaurācijas viena apmeklējuma laikā. Restaurācija tiek izfrēzēta dažu minūšu laikā, turklāt Jūsu frēzēšanas iekārtas frēzēm draudzīgā veidā.

Liela izmēra kompozītmateriāla restaurācijas ar parapulpārajām tapām nomaiņa

Pareiza izvēle lielām, slodzi nesošām restaurācijām.



Ar Dr. D. Gerdolle atļauju, Šveice

Kronis uz implanta

CERASMART270 elastība īpaši noder gadījumos, kad uz implantāta ir jāizgatavo kronis.



Ar Dr. J. Tapia Guadix atļauju, Spānija

Otrā molāra restaurācija

Pateicoties dabiskam krāsas pieskaņošanās efektam materiāls ir lieliski piemērots molāru standarta restaurācijām.



Ar Dr. Y. Roos atļauju, Spānija

Kvadranta restaurācija


Ideāli piemērots vairāku restaurāciju veikšanai viena apmeklējuma laikā.



Ar Dr. G. Witkowski atļauju, Polija

CERASMART270_{no} GC

Precizitāte un elastīgums

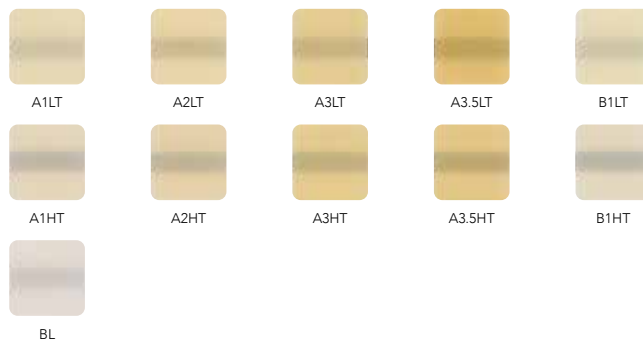

CEREC						
Tonis	Izmērs	Ref.	Izmērs	Ref.	Izmērs	Ref.
A1 HT	12	10001391	14	10001413	14L	10001435
A2 HT	12	10001392	14	10001414	14L	10001436
A3 HT	12	10001393	14	10001415	14L	10001437
A3.5 HT	12	10001394	14	10001416	14L	10001438
B1 HT	12	10001395	14	10001417	14L	10001439
A1 LT	12	10001396	14	10001418	14L	10001440
A2 LT	12	10001397	14	10001419	14L	10001441
A3 LT	12	10001398	14	10001420	14L	10001442
A3.5 LT	12	10001399	14	10001421	14L	10001443
B1 LT	12	10001400	14	10001422	14L	10001444
BL	12	10001401	14	10001423	14L	10001445

UNIVERSĀLAIS						
Tonis	Izmērs	Ref.	Izmērs	Ref.	Izmērs	Ref.
A1 HT	12	10001402	14	10001424	14L	10001446
A2 HT	12	10001403	14	10001425	14L	10001447
A3 HT	12	10001404	14	10001426	14L	10001448
A3.5 HT	12	10001405	14	10001427	14L	10001449
B1 HT	12	10001406	14	10001428	14L	10001450
A1 LT	12	10001407	14	10001429	14L	10001451
A2 LT	12	10001408	14	10001430	14L	10001452
A3 LT	12	10001409	14	10001431	14L	10001453
A3.5 LT	12	10001410	14	10001432	14L	10001454
B1 LT	12	10001411	14	10001433	14L	10001455
BL	12	10001412	14	10001434	14L	10001456

Saistītie produkti



G-CEM LinkForce



G-CEM Veneer



OPTIGLAZE color



DIAPOLISHER Paste

Multi PRIMER un OPTIGLAZE color ir GC preču zīmes.
Brilliant Crios, Grandio blocs, Tetric CAD, VITA Enamic multiColor un CEREC nav GC preču zīmes.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC Nordic AB

Latvijas birojs
Kurbada iela 3-3, Rīga
Mob.tālr. +371.29.40.51.19
ieva.jelisejeva@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/lv-LV>