


Natančnost, ki traja.
Estetika, ki ne zbledi.

Povečajte vertikalno dimenzijo

Z njegovo upogibno trdnostjo in energijo potrebno za zlom je CERASMART270 odlično prilagojen za reševanje zahtevnih okluzalnih situacij. Njegova uravnotežena površinska trdota bo še posebej koristna pri zmanjševanju obrabe nasprotnega zobnega loka medtem ko zagotovi dolgotrajen sijaj restavracije.

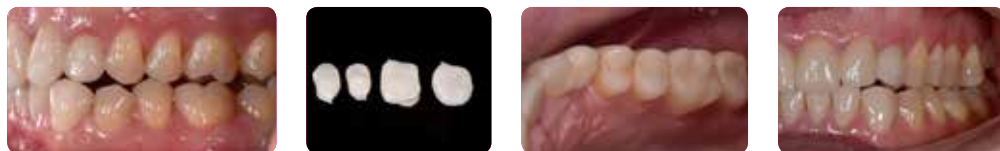


Z dovoljenjem of Dr. C. Moussally, Francija

Restavracija v enem obisku

Z CERASMART270 lahko ustvarite dolgotrajno estetsko restavracijo z optimalnim prileganjem v enem obisku. Režkanje restavracije traja nekaj minut in bo hkrati zelo »prijazna« do vaših svedrov v rezkalniku.

Nadomeščanje velikih kompozitnih restavracij s parapulpalnimi zatički

Prava izbira za velike, obremenjene restavracije.

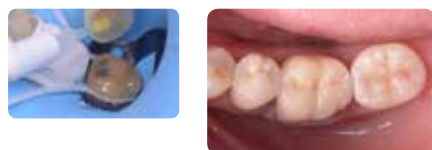

Z dovoljenjem Dr. D. Gerdolle, Švica

Restavracije na drugem molarju

Naravno zlivanje barv z uporabo samo ene barve ga naredi idealnega za standardni material za restavracije na molarjih.



Z dovoljenjem Dr. Y. Roos, Španija

Prevleke podprte z zobnimi vsadki


Elastičnost CERASMART270 je še posebej uporabna ko vstavljate prevleko podprto z zobnimi vsadki.



Z dovoljenjem Dr. J. Tapia Guadix, Španija

Restavracije v kvadrantu

Odlične za ustvarjanje večjih restavracij v enem obisku.

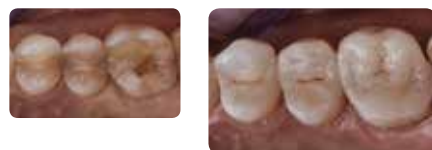

Z dovoljenjem Dr. G. Witkowski, Poljska

GC CERASMART270

Naravno prileganje in fleksibilnost



CEREC						
Barva	Velikost	Referenca	Velikost	Referenca	Velikost	Referenca
A1 HT	12	12540	14	12576	14L	12612
A2 HT	12	12541	14	12577	14L	12613
A3 HT	12	12542	14	12578	14L	12614
A3.5 HT	12	12543	14	12579	14L	12615
B1 HT	12	12544	14	12580	14L	12616
A1 LT	12	12545	14	12581	14L	12617
A2 LT	12	12546	14	12582	14L	12618
A3 LT	12	12547	14	12583	14L	12619
A3.5 LT	12	12548	14	12584	14L	12620
B1 LT	12	12550	14	12586	14L	12622
BL	12	12551	14	12587	14L	12623

Universal						
Barva	Velikost	Referenca	Velikost	Referenca	Velikost	Referenca
A1 HT	12	12552	14	12588	14L	12624
A2 HT	12	12553	14	12589	14L	12625
A3 HT	12	12554	14	12590	14L	12626
A3.5 HT	12	12555	14	12591	14L	12627
B1 HT	12	12556	14	12592	14L	12628
A1 LT	12	12557	14	12593	14L	12629
A2 LT	12	12558	14	12594	14L	12630
A3 LT	12	12559	14	12595	14L	12631
A3.5 LT	12	12560	14	12596	14L	12632
B1 LT	12	12562	14	12598	14L	12634
BL	12	12563	14	12599	14L	12635

Sorodni izdelki



CERASMART270, DIAPOLISHER Paste, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER in OPTIGLAZE barve so blagovne znamke podjetja GC.

Brilliant Crios, Grandio blocs, Tetric CAD, VITA Enamic multiColor in CEREC niso blagovne znamke podjetja GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Zalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Naravno
prileganje in
fleksibilnost



GC
CERASMART™270

CAD/CAM absorpcijski blok
hibridne keramike




GC CERASMART270

Pameten material za pametne aplikacije!

CERASMART270 je estetski hibridni blok narejen, da zagotovi hiter in dolgotrajen kliničen uspeh. Zahvaljujoč novo odkriti tehnologiji »Popolno prekritje s premazom silana« (FSC) z **izboljšano tehnologijo nano polnil**, CERASMART™270 ponuja zelo dobre fizikalne in estetske lastnosti. Rezanje je hitro in učinkovito, zaradi česar je mogoče ustvariti kvalitetne restavracije s čistimi robovi in optimalnim prilaganjem v zelo kratkem času. Poleg tega se lahko polira ali karakterizira za bolj živo estetiko. CERASMART™270 je rigiden blok za uporabo, ne glede ali za onlej ali za zahteven kliničen primer prekomerne obrabe.

Močnejša trdnost da vzdrži žvečne sile


- Visoka vsebnost polnil zaradi FSC tehnologije
- **Izboljšana upogibna trdnost** za dolgotrajne restavracije
- Velika **odpornost na zlome**

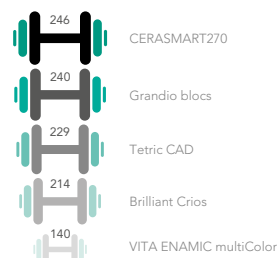

Tri-točkovna upogibna trdnost (MPa)*

Fleksibilnost za absorpcijo učinka šoka


- Manj stresnih obremenitvenih vrhov med žvečenjem
- Zmanjšano tveganje za **dotrajanost materiala**
- Izjemno dobro prilagojen za **restavracije podprte z zobnimi vsadki**

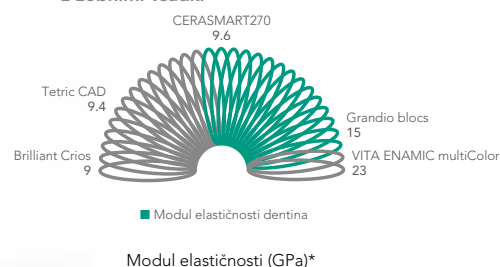

Modul elastičnosti (GPa)*

Odpornost na obrabo za dolgotrajnost restavracij


- Zelo nizka obraba
- Idealno za **bruksiste**
- Visoka obstojnost sijaja

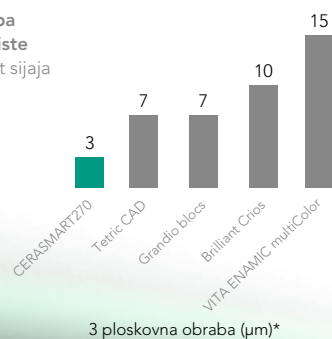

3 ploskovna obraba (µm)*


*Vir: GC R&D, Japonska, 2018. Podatki v datoteki

Ostri robovi zagotavljajo gladke prehode

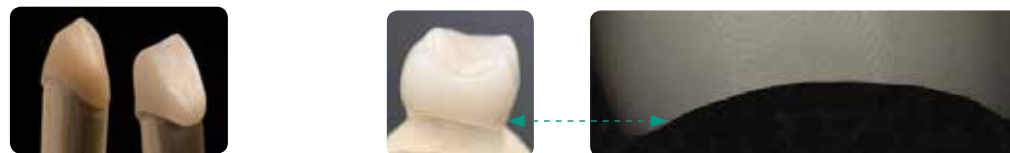

Zelo natančni in gladki robovi brez lomljenja po hitrem in enostavnem rezkanju garantirajo naravno prilaganje.

Izvrstna sposobnost poliranja in obstojnost sijaja

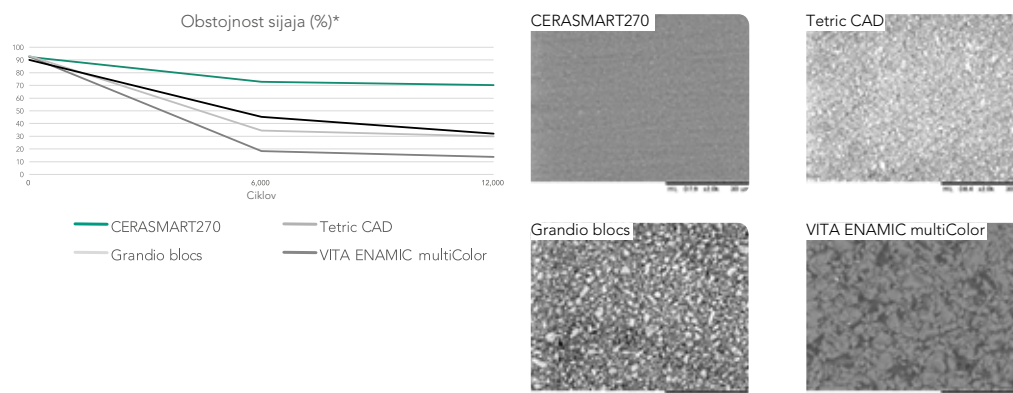

SEM fotografija CERASMART270 v primerjavi s konkurenti*

Zaradi njegove vsebnosti finih polnil je CERASMART270 zelo enostavno polirati in obdrži zelo dolgo izvrsten sijaj v primerjavi s konkurenti v istem časovnem obdobju.

Barve, ki se zlivajo naravno




Za **naraven nasmeh** z uporabo samo ene barve.



Z dovoljenjem MDT C. Hannker, Nemčija

Optimalna fluorescenca in translucenca

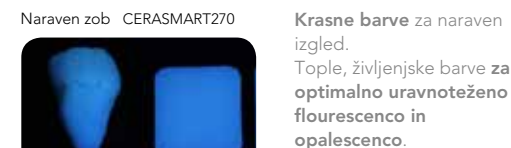

Naraven zob CERASMART270

Krasne barve za naraven izgled. Tople, življenjske barve za **optimalno uravnateženo fluorescenco in opalescenco**.

Naraven zob CERASMART270



Izberite vašo klinično pot

Karakterizacija

Vedno je v barvah videti boljše

Dodajte karakter vašim restavracijam s potegom čopiča in uporabo OPTIGLAZE barv, ki so pripravljene za uporabo in vsebujejo premaz za sijaj z odpornostjo na obrabo.



Izberite lahko med širokim spektrom barv ali lahko uporabite samo Clear glaze premaz in s tem dodate samo sijaj.

Poliranje

Hitro in enostavno poliranje

Impresivno stopnjo sijaja lahko dosežete s samo nekaj preprostimi koraki poliranja.



Poliranje se lahko izvaja z vašimi standardnimi polirnimi svedri in gumicami.

Enostavna in hitra predpriprava in možnosti cementiranja

Jedkanje ali peskanje



CERASMART270 je edini hibridni keramični material, ki se lahko **jedka** s hidrofloourovo kislino ali se enostavno uporabi **peskanje**.

Z dovoljenjem Dr. P. Dimitrov, Bolgarija

Silan ali MDP



V obeh primerih, uporaba univerzalnega **G-Multi PRIMER** bo vedno dobra izbira saj vsebuje tako silan kot MDP.

Preoperativna priprava zoba



Izberite način jedkanja v odvisnosti od prisotnosti sklenine in dentina na vaši preparaciji. Nanesite vezavno sredstvo kot je **G-Premio BOND**.

Adhezivno cementiranje



Uporabite **kompozitni cement** za adhezivno cementiranje kot je G-CEM LinkForce ali G-CEM Veneer.

Možnosti cemeniranja za dolgo obstojne restavracije



G-CEM LinkForce
Univerzalen dvojno strjujoč kompozitni cement z zaupanja vredno kvaliteto



G-CEM Veneer
Svetlobno strjujoč kompozitni cement za klinično zahtevne estetske primere



Kadarkoli ste v dvomih, vam lahko pomaga aplikacija **GC Luting App**, ki vam ponazarja korake protokola.

Fleksibilen in natančen

Natančen in lep

Krasno in enostavno