


Preciznost koja traje.
Estetika koja ne bleedi.

Povećanje vertikalne dimenzije

Uz visoku savojnu čvrstoću i otpornost na pucanje, CERASMART270 savršeno je pogodan za rešavanje zahtevnih okluzalnih situacija. Njegova usklađena površinska čvrstina naročito je pogodna za smanjenje trošenja zuba antagonista pa istovremeno osigurava dugotrajni sjaj nadoknada.

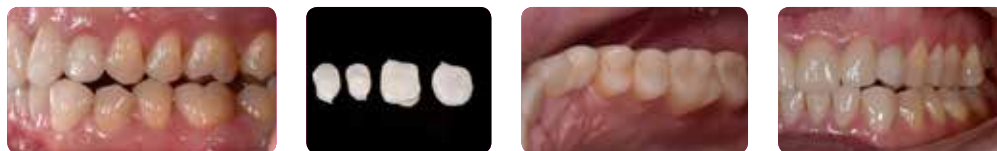


Ustupio Dr. C. Moussally, Francuska

Izrada nadoknada u jednoj posetii

Pomoću CERASMARTA270 mogu da se izrade trajne estetske nadoknade sa optimalnim prijanjanjem u samo jednoj poseti. Glodanje nadoknada provodi se nekoliko minuta pa će biti vrlo pogodan za dalju obradu svrdlima za glodanje.

Zamena velike kompozitne nadoknade sa parapulpnim kočicama

Dobar izbor za velike nadoknade pod opterećenjem.

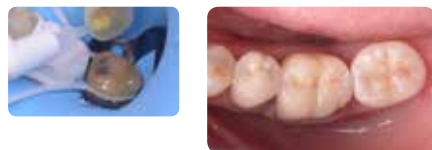

Ustupio Dr. D. Gerdolle, Švicarska

Restauracija drugog kutnjaka

Prirodno stapanje sa samo jednom bojom čini ga izvrsnim materijalom za standardne ispune kutnjaka.



Ustupio Dr. Y. Roos, Španija

Krunica poduprta implantatom

Elastičnost CERASMARTA270 je posebno korisna pri postavljanju krunice poduprte implantatom.



Ustupio Dr. J. Tapia Guadix, Španija

Restauracija kvadranta

Savršen za izradu nekoliko nadoknada u jednoj poseti.



Ustupio Dr. G. Witkowski, Poljska

GC CERASMART270

Prirodno prijanjanje i fleksibilnost



CEREC						
Boja	Veličina	Referenca	Veličina	Referenca	Veličina	Referenca
A1 HT	12	12540	14	12576	14L	12612
A2 HT	12	12541	14	12577	14L	12613
A3 HT	12	12542	14	12578	14L	12614
A3.5 HT	12	12543	14	12579	14L	12615
B1 HT	12	12544	14	12580	14L	12616
A1 LT	12	12545	14	12581	14L	12617
A2 LT	12	12546	14	12582	14L	12618
A3 LT	12	12547	14	12583	14L	12619
A3.5 LT	12	12548	14	12584	14L	12620
B1 LT	12	12550	14	12586	14L	12622
BL	12	12551	14	12587	14L	12623

Universal						
Boja	Veličina	Referenca	Veličina	Referenca	Veličina	Referenca
A1 HT	12	12552	14	12588	14L	12624
A2 HT	12	12553	14	12589	14L	12625
A3 HT	12	12554	14	12590	14L	12626
A3.5 HT	12	12555	14	12591	14L	12627
B1 HT	12	12556	14	12592	14L	12628
A1 LT	12	12557	14	12593	14L	12629
A2 LT	12	12558	14	12594	14L	12630
A3 LT	12	12559	14	12595	14L	12631
A3.5 LT	12	12560	14	12596	14L	12632
B1 LT	12	12562	14	12598	14L	12634
BL	12	12563	14	12599	14L	12635

Srodni proizvodi



G-CEM LinkForce



G-CEM Veneer



OPTIGLAZE color



DIAPOLISHER Paste

CERASMART270, DIAPOLISHER Paste, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER i OPTIGLAZE COLOR su GC zaštitni znaci. Brilliant Crios, Grandio blocs, Tetric CAD, VITA Enamic multiColor i CEREC nisu zaštitni znaci GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Dimitrija Tucovića 119,
6th floor, ap.35
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.24.05.419
Fax. +381.11.24.05.419
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

Prirodno
prijanjanje i
fleksibilnost



GC
CERASMART™270

Fleksibilni hibridni keramički
CAD/CAM blok

GC


GC CERASMART270

Pametni materijal za pametnu primenu!

CERASMART270 je estetski hibridni blok izrađen za brz i dugotrajan klinički uspeh. Zahvaljujući novo razvijenoj "Full Coverage Silane Coating" (FSC) (potpuno prekrivajući silanski premaz) **sa poboljšanom tehnologijom nanopunilaca**, CERASMART270 nudi izvrsna fizička i estetska svojstva. Glodanje je brzo i uspešno, što omogućava izradu kvalitetnih nadoknada sa finim ivicama i optimalnim prijanjanjem vrlo kratko vreme. Osim toga, može da se polira ili karakterizuje za izrazitiju estetiku. CERASMART270 je blok izbora za korišćenje, bilo za brzi onlej ili u zahtevnom slučaju istrošenosti zuba.

Izvrсна čvrstoća za podnošenje okluzalnih sila


- Visoki udeo punilaca zahvaljujući FSC tehnologiji
- Poboljšana savojna čvrstina za dugotrajne nadoknade
- Visoka otpornost na lom

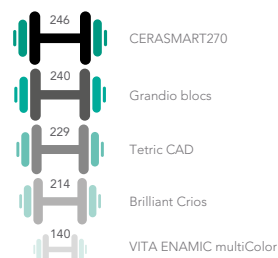

Savojna čvrstina u tri tačke (MPa)*

Fleksibilnost za apsorpciju efekta šoka


- Manje površinskog naprezanja tokom žvakanja
- Smanjen rizik zamora materijala
- Izuzetno pogodan za nadoknade na implantatima

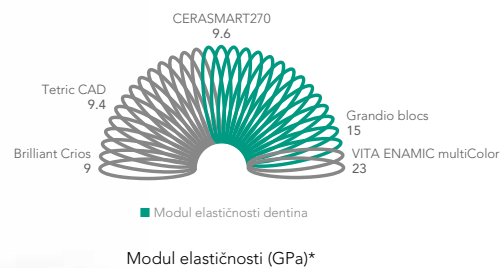

Modul elastičnosti (GPa)*

Otpornost na trošenje za dugotrajne nadoknade


- Vrlo nisko trošenje
- Idealan za pacijente s bruksizmom
- Zadržavanje visokog sjaja

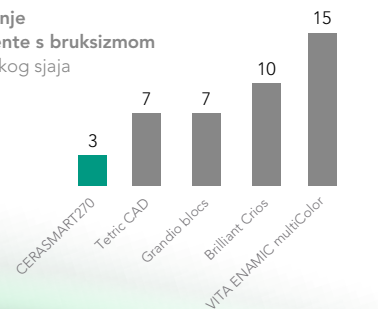

Trošenje implantata pod uticajem trećeg t ela (µm)*



*zvor: GC istraživanje i razvoj, Japan, 2018. Podaci u arhivi

Oštre ivice koje osiguravaju glatki prelaz

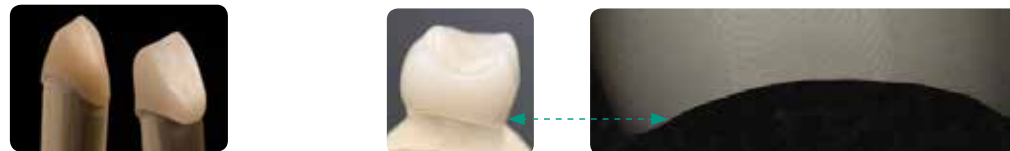

Vrlo precizne i glatke ivice, bez pucanja, nakon brzog i jednostavnog glodanja garantuju prirodno prijanjanje.


Izvrсна sposobnost poliranja i zadržavanje sjaja

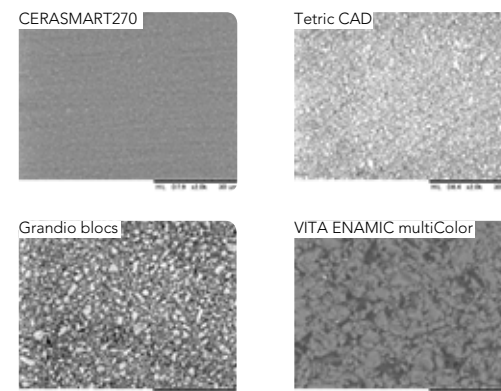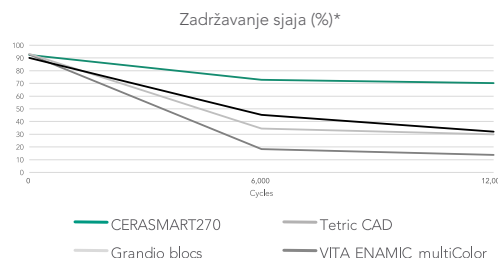

Slike skenirajućim elektronskim mikroskopom CERASMART270 u poređenju sa konkurentskim materijalima*

Zahvaljujući udelu finih punilaca, CERASMART270 se vrlo lako polira i zadržava mnogo veći sjaj od konkurentskih materijala kroz isto vreme.

Boje koje se prirodno stapaju

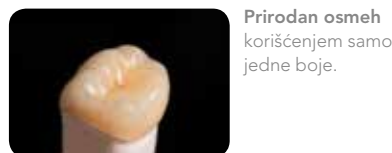

Prirodan osmeh korišćenjem samo jedne boje.



Ustupio MDT C. Hannker, Njemačka

Optimalna fluorescencija i translucencija




Prirodni zub CERASMART270

Lepe boje za prirodni izgled. Tople, prirodne boje sa optimalno usklađenom fluorescencijom i opalescencijom.


Prirodni zub CERASMART270



Izbor mogućnosti završne obrade

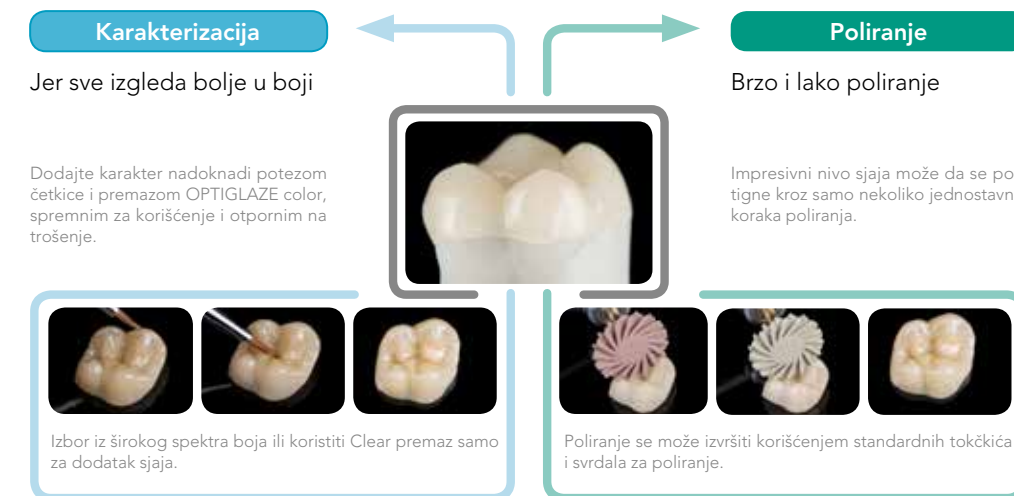

Jednostavne i brze mogućnosti pripreme i cementiranja

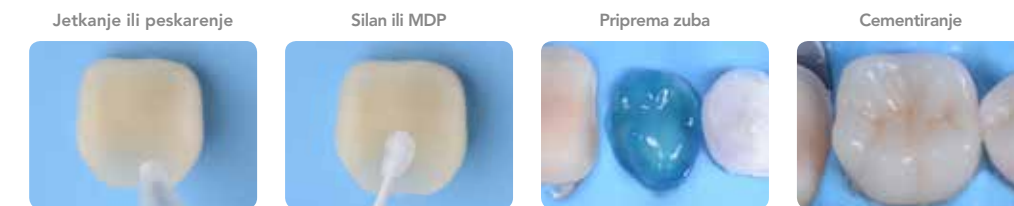

CERASMART270 je jedini hibridni keramički materijal koji može da se **jetka** fluorovodoničnom kiselinom ili može da se **peskari**.

Ustupio Dr. P. Dimitrov, Bugarska

U oba slučaja, korišćenje univerzalnog **G-Multi PRIMER** uvek je dobar izbor, budući da sadrži silan i MDP.

Odaberi način jetkanja zavisno od prisutnosti gleđi i dentina na preparaciji. Naneti sredstvo za spajanje kao što je **G-Premio BOND**.

Koristite **adhezivan cement** kao što su G-CEM LinkForce ili G-CEM Veneer.

Mogućnosti cementiranja za dugotrajne nadoknade



G-CEM LinkForce
Univerzalni kompozitni cement sa dvostrukim stvrdnjavanjem i pouzdanim rezultatima.

G-CEM Veneer
Svetlosnopolimerizujući kompozitni cement za potrebe visoke estetike.



U slučaju bilo kakvih pitanja, pomoću GC Luting App možete pronaći tačan protokol.

Fleksibilnost i preciznost

Preciznost i lepota

Lepota i lakoća