



EQQUIA

Нова ДИМЕНЗИЈА  
во реставративната  
стоматологија

./'CC./

**EQUIA** е единствен реставративен систем за естетски и економични постериорни реставрации со впечатливи зајакнувања на сите нивоа. **EQUIA** системот ги соединува **EQUIA Fil** - нова генерација на стаклени честички - и **EQUIA Coat** - високо-полнет композитен материјал за лакирање.

## силно и сигурно

### Нова издржливост во стаклено-јономерната технологија

**EQUIA** системот ги соединува **EQUIA Fil**, нова генерација на стаклен јономер, и **EQUIA Coat**, високо-полнет композитен материјал за лакирање што ја доведува стаклено-јономерната технологија на повисоко ниво и Ви нуди:

- Зголемена отпорност на фрактури, јачина на истегнување и зголемена отпорност на оптоварување.
- Заштита против присуство на влага и киселинска ерозија.
- Зголемување на цврстината на стаклениот јономер со текот на времето, поради единствениот ефект на созревање, кој се должи на плунката.



Пополнување на празнините




Длабочина на пенетрација 30-50 µm

## брзо и лесно

### Нова брзина во реставративната стоматологија

**EQUIA** дава значителна временска предност во споредба со многу други реставративни опции.

- Времето на целокупна постапка е помалку од 3,5 минути.
- Системот не бара работење во слоеви, не е леплив и лесно се аплицира и совршено се приспособува на сидовите од кавитетот.
- Употребата на кофердам е опциска и поради хемиската адхезија се избегнуваат комплицираните процедури на бондирање.
- Речиси без стрес при контракција, **EQUIA** вистински може да се нарече материјал за исполнување на големи и длабоки кавитети само со една апликација.
- Нема потреба за сложено финарирање и полирање, потребна е само една апликација на **EQUIA Coat**.

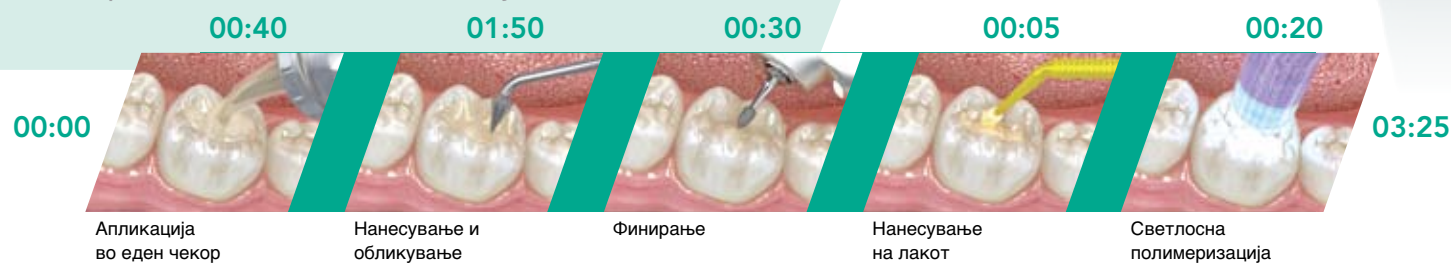

Апликација во еден чекор

Нанесување и обликување

Финарирање

Нанесување на лакот

Светлосна полимеризација

## естетски и транспарентно

### Погледнете ја стаклено-јономерната технологија кристално јасно

Неспоредливата естетика на **EQUIA** ги проширува вашите реставративни можности во постериорната регија и овозможува да ги исполните очекувањата на вашите пациенти.

- Постигнува ненадминливо сјајни и мазни површини со долготраен природен сјај, многу полесно од претходно.
- Реставрацијата е заштитена од дисколорации и има долготрајна стабилност на бојата.
- Деветте нијанси Ви овозможуваат секогаш да ја одредите бојата која совршено ќе се совпаѓа.



Постериорна реставрација со EQUIA - Пред



Постериорна реставрација со EQUIA - Потоа

Dr. M. Kurba-Selkowitz, Polska

## безбедно и докажано

### Потполно ново ниво во стаклено-јономерната технологија

Перформансите на овој систем клинички се веќе докажани во текот на неколку години. Заедно со бројни клинички студии низ светот кои сеуште траат, доведен е до реставративен пристап базиран на докази, што обезбедува одлична алтернатива за вашата секојдневна работа.

- Заштита од појава на секундарен кариес, како и заштита на соседните заби.
- Лакот ги заштитува рабовите на реставрацијата од микро-пропустливост.
- Пошироко поле на индикации во споредба со другите стаклено-јономерни материјали што е докажано со многубројни клинички студии.

Резултати од клинички испитувања

- **EQUIA** покажува одлично почетно совпаѓање на бојата\*.
- **EQUIA** е ефикасен исто како композитните системи со микро полнежи\*.
- **EQUIA** може да се користи како материјал за трајна реставрација за секоја големина на кавитет од Класа I и за помали кавитети од Класа II\*.
- **EQUIA** системот е сигурен избор за долготрајни реставрации, дури и кај забните површини кои се под силно оклузално оптоварување\*.

\*Податоците се достапни во фајлот.

# Достигнете НОВА ДИМЕНЗИЈА со EQUIA од GC

Дали сакате да знаете повеќе за EQUIA?

Ве молиме, посетете ја нашата страна: [www.gcequia.com](http://www.gcequia.com)



Intro Pack  
(кутија со 50 капсули  
**EQUIA Fil**,  
4 ml **EQUIA Coat**  
и додатоци)

900582 Асортиман  
900583 A1  
900584 A2  
900585 A3  
900586 A3.5  
900587 B1  
900588 B2  
900589 B3  
900590 C4

Promo Pack  
(2 кутии со 50 капсули  
**EQUIA Fil**,  
4 ml **EQUIA Coat**  
и додатоци)

900591 Асортиман и A3  
900592 A1 & A3  
900593 A2 & A2  
900594 A2 & A3  
900595 A3 & A3  
900596 A3.5 & A3  
900597 B1 & A3  
900598 B2 & A3  
900599 B3 & A3  
900600 C4 & A3

Refill  
(кутија со  
50 капсули)

004370 Асортиман  
004371 A1  
004372 A2  
004373 A3  
004374 A3.5  
004375 B1  
004376 B2  
004377 B3  
004378 C4  
004738 SW

**EQUIA** системот е достапен во мноштво од поединечни и комбинирани пакувања, кои се состојат од капсули **EQUIA Fil** и шишенце од **EQUIA Coat**. **EQUIA Fil** ги има следниве бои по Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 и SW (Standard White).

Vita® е заштитена марка на Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Германија.



## Refill **EQUIA Coat**

004379 Шишенце од 4 ml, 20 Пластични садови за мешање, 50 Микро-Тип Апликатори, 1 Држач за апликатор

**GC Europe N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
<http://www.gceurope.com>

**GC Europe N.V.**  
GC EEO  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax. +385.1.46.78.473  
info@eoo.gceurope.com  
<http://www.eoo.gceurope.com>

Овластен дистрибутер  
за Македонија:  
ДЕНТОМЕД-М  
Ул. "Бојмија" бр. 2/2  
Пошт. факс. 182  
1000 Скопје  
Тел./Факс: 02/24.62.739  
Тел. 02/24.64.781  
dentomed@t-home.mk

# 'GC.'