



EQUIA

Новое ИЗМЕРЕНИЕ  
в реставрационной  
стоматологии

,'GC.'

**EQUIA** - это уникальная реставрационная система для изготовления эстетичных и экономически выгодных реставраций жевательной группы зубов, которые обладают высочайшей прочностью на всех уровнях. Система **EQUIA** включает в себя **EQUIA Fil** - стеклоиономерный материал нового поколения - и **EQUIA Coat**, высоконаполненное полимерное защитное покрытие.

## прочность и надежность

### Новый уровень долговечности в области стеклоиономерных технологий

Система **EQUIA** включает в себя **EQUIA Fil**, стеклоиономерный материал нового поколения, и **EQUIA Coat**, высоконаполненное полимерное защитное покрытие, которое выводит технологию работы со стеклоиономерами на качественно новый уровень и гарантирует Вам:

- Повышение устойчивости материала к растрескиванию, а также прочности на изгиб и сопротивления усталости при изгибе.
- Защиту реставрации от попадания влаги и от кислотной эрозии.
- Увеличение прочности стеклоиомера с течением времени благодаря уникальному процессу созревания материала под воздействием слюны.



Заполнение мелких пор




Глубина проникновения 30-50 µm

## быстро и просто

### Новый уровень производительности в реставрационной стоматологии

Система **EQUIA** дает значительное преимущество в рабочем времени по сравнению со многими другими реставрационными материалами.

- Общее время выполнения реставрации менее 3,5 минут.
- Система не требует работы по методу послойного нанесения; материал не липнет к инструментам, обладает пакуемой вязкостью, и отлично адаптируется к стенкам полости.
- Использование раббер-дама не обязательно; химическая адгезия материала исключает необходимость проведения сложных процедур бондинга.
- Система **EQUIA** является великолепной альтернативой для выполнения реставраций одной порцией даже при работе с глубокими полостями большого объема, поскольку материал обладает практически нулевым усадочным напряжением.
- Не нужны сложные этапы финишной обработки и полировки, достаточно нанесения всего одного слоя **EQUIA Coat**.

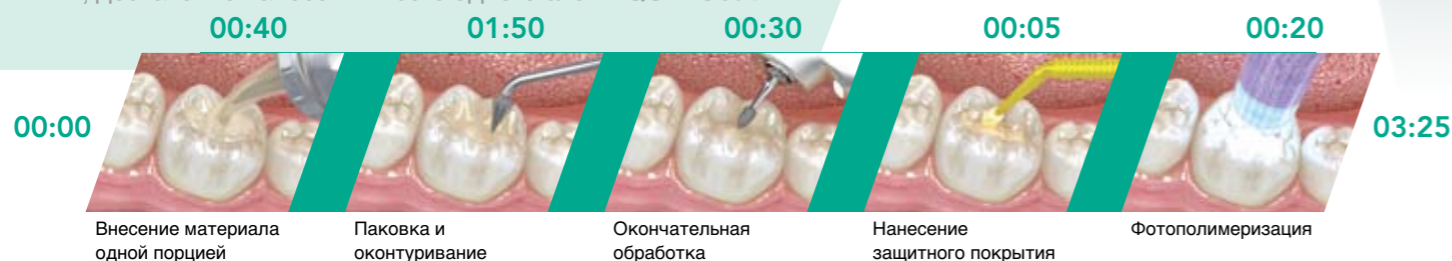

Внесение материала одной порцией

Пакровка и оконтуривание

Окончательная обработка

Нанесение защитного покрытия

Фотополимеризация

## эстетичность и светопрозрачность

### Новый взгляд на стеклоиономерные технологии

Непревзойденная эстетичность реставраций, выполненных с помощью системы **EQUIA**, расширяет Ваши возможности в работе с жевательной группой зубов и позволяет выполнить пожелания любого пациента.

- Идеально гладкая поверхность реставрации, ее долговременный и естественный блеск - с системой **EQUIA** этого добиться проще, чем когда-либо ранее.
- Реставрация защищена от изменения цвета, что гарантирует продолжительное сохранение ее цветовой стабильности.
- Девять имеющихся оттенков материала позволяют Вам добиться идеального цветового соответствия во всех клинических случаях.



Реставрация зуба жевательной группы с применением системы EQUIA - До



Реставрация зуба жевательной группы с применением системы EQUIA - После

Dr. M. Kukuras-Selkowitz, Польша

## безопасно и проверено

### Совершенно новый уровень развития стеклоиономерных технологий

Эффективность новой реставрационной системы подтверждена годами клинического опыта. На основании многочисленных клинических исследований, в настоящий момент проводящихся по всему миру, Вам предлагается научно обоснованный подход к реставрационной терапии и великолепный материал, незаменимый в повседневной стоматологической практике.

- Защита от вторичного кариеса, а также дополнительная защита структур смежных зубов.
- Покрытие защищает область краевого прилегания реставрации от микропротекания.
- Система имеет расширенный спектр показаний к применению по сравнению с прочими СИЦ, что также подтверждается многочисленными клиническими исследованиями.

#### Результаты клинических исследований

- Система **EQUIA** демонстрирует идеальное начальное соответствие оттенка прилежащим тканям\*.
- Система **EQUIA** была признана не менее эффективной, чем микронаполненная композитная система\*.
- Система **EQUIA** подходит в качестве материала для постоянной реставрации полостей любого объема по I классу и полостей небольшого объема по II классу\*.
- Система **EQUIA** великолепно подходит для изготовления долговечных стоматологических реставраций, даже в случаях реставрации поверхностей, несущих большие нагрузки\*.

\*Данные доступны по запросу в виде файла.

# EQUIA



# Окунитесь в НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ с EQUIA от GC

Вы хотели бы узнать больше о системе EQUIA?

Посетите наш микро-сайт: [www.gcequia.com](http://www.gcequia.com)



Упаковка Intro  
(коробка 50 капсул  
**EQUIA Fil**, флакон  
4 мл **EQUIA Coat**  
и аксессуары)

900582 Ассорти  
900583 А1  
900584 А2  
900585 А3  
900586 А3.5  
900587 В1  
900588 В2  
900589 В3  
900590 С4

Упаковка Promo  
(2 коробки по 50 капсул  
**EQUIA Fil**, флакон  
4 мл **EQUIA Coat**  
и аксессуары)

900591 Ассорти и А3  
900592 А1 и А3  
900593 А2 и А2  
900594 А2 и А3  
900595 А3 и А3  
900596 А3.5 и А3  
900597 В1 и А3  
900598 В2 и А3  
900599 В3 и А3  
900600 С4 и А3

Отдельно  
(коробка  
50 капсул)

004370 Ассорти  
004371 А1  
004372 А2  
004373 А3  
004374 А3.5  
004375 В1  
004376 В2  
004377 В3  
004378 С4  
004738 SW

Система **EQUIA** выпускается в различных наборах, состоящих из капсул **EQUIA Fil** и флакона **EQUIA Coat**. **EQUIA Fil** выпускается в следующих оттенках по шкале Vita®: А1, А2, А3, А3.5, В1, В2, В3, С4 и SW (Стандартный Белый).

Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.



## Отдельно **EQUIA Coat**

004379 Флакон 4 мл, 20 одноразовых блоков для замешивания, 50 микроаппликаторов, 1 держатель для аппликаторов

**GC Europe N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
<http://www.gceurope.com>

**GC Europe N.V.**  
GC EEO  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax. +385.1.46.78.473  
info@eoo.gceurope.com  
<http://www.eoo.gceurope.com>

Официальный дистрибьютор  
компании GC в Украине:  
Группа компаний "КРИСТАР"  
04071, г. Киев,  
ул. Межигорская, 50, оф.1  
Тел./Факс: (044) 463.63.37  
(044) 463.62.66  
info@kristar.ua  
<http://www.kristar.ua>