

EQUIA Forte™ HT

Глас-хибридна възстановителна система

Рентабилен, дълготраен
алтернативен възстановителен
материал



Рентабилен, дълготраен алтернативен възстановителен материал

Надграждайки върху успеха на EQUIA Forte, **EQUIA Forte HT** е рентабилна, дълготрайна алтернатива на възстановителен материал с подобрени механични качества, оптимална обмяна на йони и стабилно маргинално запечатване. Благодарение на Глас-хибридна технология, състояща се от по-малки и високо реактивни стъклени частици, както и по-дълги вериги на полиакрилна киселина, **EQUIA Forte HT** показва подобрени механични качества, по-добра течливост и липса на лепене на материала по време на работа. За да завърши напълно възстановителната система, EQUIA Forte Coat, защитава възстановяването от киселини и спомага за поддържане на отлична износостойчивост във времето. Това прави **EQUIA Forte HT** гъвкав и издръжлив материал-алтернатива за разнообразие от индикации при всички пациенти.


- Дълготрайност и рентабилност
- Отлична биосъвместимост
- Вашата алтернатива при голям процент от случаите




EQUIA Forte Coat

Действайки във взаимодействие с EQUIA Forte HT Fill, нано-напълнената, самоадхезивна смола **EQUIA Forte COAT** е представител на технологията на GC за единична дисперсия на наночастици и подсилена смола, осигурявайки висока износостойчивост и гладко и бляскаво възстановяване само за няколко секунди.

- Здравина и твърдост
- Износостойчивост
- Гладка и бляскава повърхност

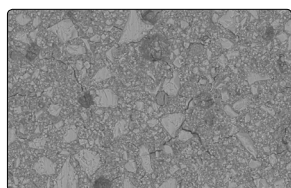

EQUIA Forte HT Fill
без покритие*

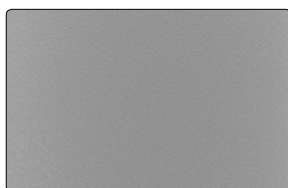

EQUIA Forte HT Fill
с покритие*




* SEM Снимки на възстановяване с EQUIA Forte HT Fill

Увеличение: X1000 Източник: GCC R&D Data. Налични данни, GC Corporation, Токио, 2020

Силен и издръжлив


Глас-хибридните системи предлагат здравината на последното поколение иновативни стъкла, комбинирани с износоустойчивостта на покритието с нано-частици. Уникалното взаимодействие между покритието и възстановителния материал повишава издръжливостта и износоустойчивостта на възстановяванията¹.

С капацитета за обмяна на йони, глас хибридните системи предотвратяват деминерализацията и осигуряват реминерализация на зъбната структура.

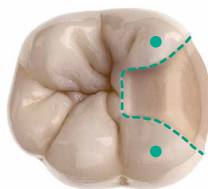


1.0-1.5 мм от върховете на туберкулите

EQUIA Forte HT е индикиран за клас 2 кавитети, подложени на стрес.

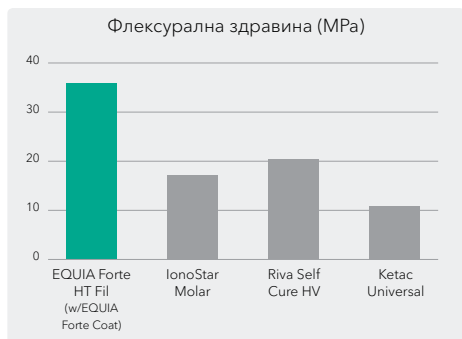

Източник: Prof. Marco Ferrari, Италия

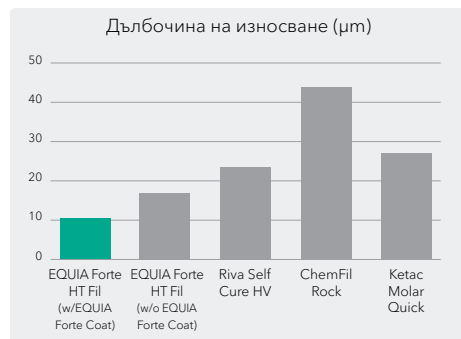

Източник: GC R&D, Япония, 2018, Налични данни

Дълготрайност и рентабилност

EQUIA Forte HT надеждна система, базирана на 5 години клиничен опит с EQUIA Forte. Резултатите от множество клинични тестове на случаен принцип показват, **EQUIA Forte се държи толкова добре колкото композит след 5 години, с процент на оцеляване 94.5%**².

По-кратка клинична работа, по-малко нужда от намеса през годините и сравнимо с композит представяне, тези качества правят Глас Хибридите рентабилна алтернатива според няколко независими клинични проучвания.



Процент на оцеляване след 5 години

Научете повече



¹ Basso M et al. 7 години многоцентрова клинична оценка на 154 постоянни възстановявания, направени с възстановителна система на базата на глас йономер. J Dent Res Vol 95 (Spec Iss B):0446.

² Милетич I, et al. Петгодишно представяне на глас-хибридни и нано-хибридни възстановителни средства: многоцентрово клинично изпитване. J Dent Res Vol 102 (Spec Iss C): 0363

Екологичен

С 25% по-малко количество пластмаса от конкурентите, капсулите GC допринасят за намаляне нивото на емисиите CO2 и дават възможност на стоматолозите да допринесат към „екологичната“ стоматология. Dental Advisor докладва, че „Опаковката на капсулите Equia Forte HT Fil има по-малка обща маса спрямо другите продукти (...)правейки я най-ефикасният дизайн на опаковка.“ *DA



Научете повече



Бързо и лесно поставяне в един слой

EQUIA Forte HT може да се използва при техниката на частичната екскавация на кариеса, за да се използват минимално инвазивни препарации. Тъй като не се използва ецваща киселина и системата разчита изцяло на химична адхезия, има по-малък риск от постоперативна чувствителност, което прави материала безопасно решение.



Поставяне

Истинска техника на поставяне в един слой
Удобна опаковка-капсула

Контуриране

Удължено време на работа
Лесно за контуриране
Не залепва

Довършване


Втвърдяване след 2'30"

Поставяне на покритие
Лъскава повърхност без полиране с увеличена износостойчивост и невероятно маргинално запечатване

Светлинна полимеризация

Готово след само 3'25"

EQUIA Forte HT, Вашият най-добър партньор при възстановяванията на задните зъби .

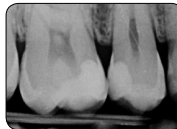

Случай на Dr. Zeynep Bilge Kütük, Турция

Главни индикации за EQUIA Forte HT


Отлична биосъвместимост

EQUIA Forte HT показва силна химична връзка към зъба, осигурявайки невероятно маргинално запечатване. Не е необходима изолация, тъй като силата на връзката не се компрометира дори и при наличие на влага. Тъй като не се използва ец, не се наблюдава постоперативна чувствителност. Заради хидрофилния си характер и коефициент на термично разширение подобно на дентина, това е отличен биосъвместим материал.

Вашата алтернатива за широк спектър от индикации!


Заместител на амалгама

Случай на Dr. Victor Cedillo Felix, САЩ

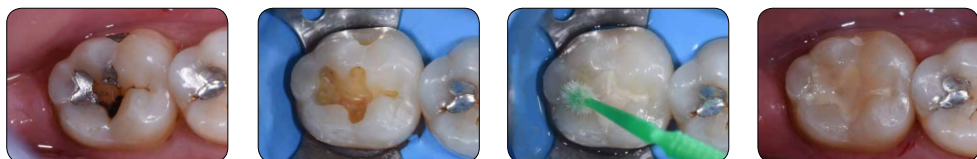


Пациенти с висок риск от кариес

Случай на Dr. Zeynep Bilge Kütük, Турция

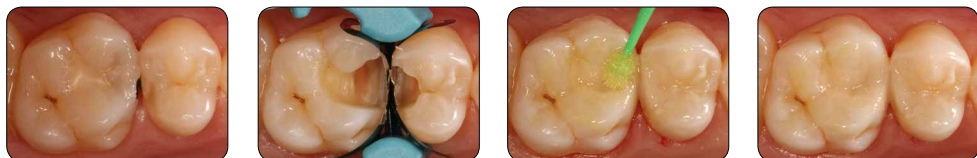

Възстановяване на зъби, афектирани от МИХ

Случай на Dr. Patrick Rouas, Франция

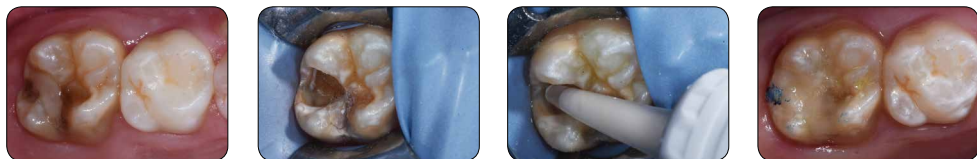

“Според съществуващи вече доказателства, Глас Хибридите могат да се използват като заместител на амалгамата.”

Prof. Dr. Falk Schwendicke, Германия

“С Equia Forte Coat се създава бързо гладка повърхност, намалявайки времето за полиране и позволявайки на пациентите да отхапват и да се хранят веднага след поставянето на obturацията.”

Prof. Dr. Matteo Basso, Италия

EQUIA Forte HT

Информация за поръчка



EQUIA Forte HT Intro Pack

Съдържа 20 капсули + 20 единични дози лак EQUIA Forte Coat (0.1 ml)

10004933 A2 10004808 A3 10004865 B2

EQUIA Forte HT Fil Refill

Съдържа 50 капсули

10004781 A1 10004859 A2 10004861 A3 10004959 A3.5
10004880 B1 10004923 B2 10004843 B3 10004803 C4

EQUIA Forte HT Promo Pack

Съдържа 100 капсули+ 1 бутилка лак EQUIA Forte Coat (4 ml)

10004851 A2 10004882 A2-A3 10004845 A3 10004884 A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack

Съдържа 200 капсули+ 1 бутилка лак EQUIA Forte Coat (4 ml)

10004903 A2 10004862 A3 10004890 B2

10004883 EQUIA Forte HT Assorted pack

Съдържа: 50 капсули: по 10 капсули от всеки цвят
A2, A3, A3.5, B1, B3

10004849 EQUIA Forte Coat Bottle Refill

Съдържа една бутилка EQUIA Forte Coat bottle (4 ml)

10003514 EQUIA Forte Coat Unit Dose Refill

Съдържа 50 единични дози лак EQUIA Forte Coat (0.1 ml)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCCEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/bg-BG>